




НАСАДКИ ДЛЯ ИРИГАТОРА ТН-917 ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСЬКІ

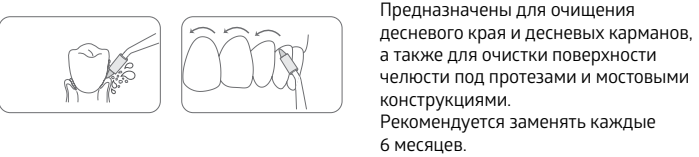


НАСАДКИ ДЛЯ ИРИГАТОРА ТН-917 ДЛЯ ИМПЛАНТОВ, МОСТОВ, КОРОНОК, ВІНИРІВ

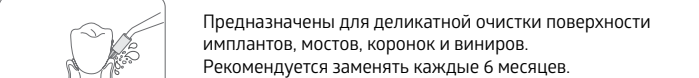

НАСАДКИ ДЛЯ ИРИГАТОРА ТН-917 НАЗАЛЬНІЙ

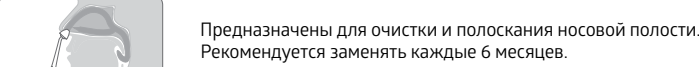

4. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

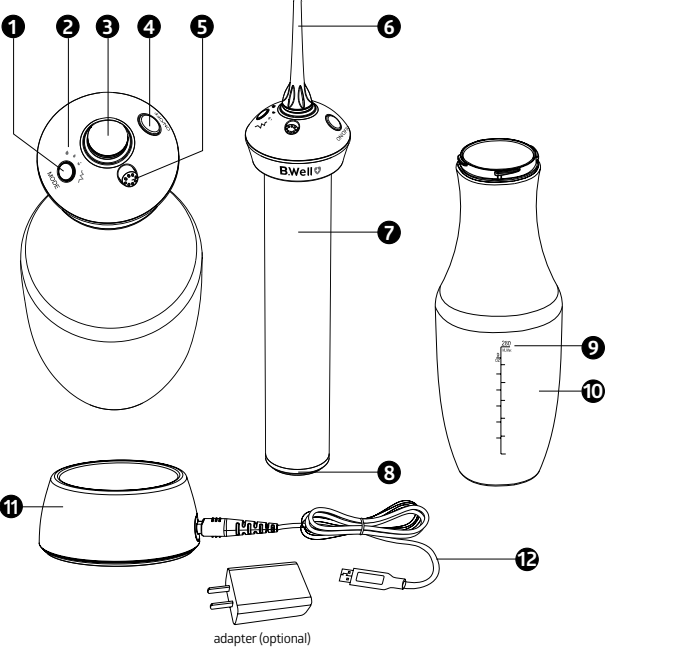

1. Переключатель режимов «MODE»
2. Индикатор режима
3. Защитный колпачок-заглушка
4. Кнопка включения/выключения
5. Кнопка извлечения насадки
6. Насадка
7. Корпус
8. Индикатор зарядного устройства
9. Отметка объема воды
10. Резервуар для воды
11. База зарядного устройства
12. USB-кабель

Примечание:
1. При покупке иригатора Вы можете обнаружить в емкости для воды или всасывающей трубке незначительной жидкости. Это остатки дистиллированной воды, которая была использована для тестирования работы иригатора и не представляет никакой угрозы для здоровья человека.
2. Прибор работает от встроенного аккумулятора. Перед первым использованием прибор необходимо зарядить.

Зарядка прибора

1. Для зарядки прибора используйте USB кабель, подключенный к базе зарядного устройства.
2. Зарядить прибор можно с помощью адаптера (который можно приобрести отдельно), подключив его к сети. Также возможно использование других зарядных устройств (пауэр-банков, ноутбуков). Используйте только сертифицированные зарядные устройства с выходным напряжением 5 В, 1000 мА DC.
3. Поставьте сам прибор на базу зарядного устройства (рис. 1). Индикатор зарядного устройства будет мигать синим цветом во время зарядки устройства.
4. Когда прибор полностью зарядится, индикатор погаснет.

Подготовка емкости для воды

1. Снимите емкость для воды с основного корпуса, поворачивая ее по часовой стрелке.
2. Наполните емкость теплой водой до отметки «MAX» (рис. 2). Не наполняйте емкость более чем 280 мл (больше отметки «MAX»), во избежание поломки прибора.
3. Поместите емкость обратно на основной корпус прибора, поворачивая ее против часовой стрелки до щелчка.

Установка и снятие насадок

Вставьте насадку в соответствующее углубление основного блока иригатора. Цветное кольцо на насадке должно встать вплотную к корпусу прибора. Для извлечения насадки, нажмите на кнопку извлечения насадки, и снимите насадку.

Описание режимов

Когда происходит переключение режима, на панели рядом с кнопкой переключения загорается индикатор выбранного режима. Разные режимы имеют разные настройки и напор воды.

1. **Стандартный режим** – предназначен для эффективного очищения полости рта, удаления частиц пищи.
2. **Мягкий/бережный режим** – предназначен для мягкого и деликатного очищения чувствительных зубов и десен.
3. **Персональный режим** – предназначен для индивидуального очищения иригатора исходя из предпочтений и чувствительности полости рта. Также в данный режим встроена программа первоначального использования для комфортного привыкания к иригатору.
4. **Массаж (пульсированный режим)** – предназначен для очищения и массажа десен, который улучшает кровообращение, тем самым способствует их оздоровлению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ПРИМЕЧАНИЕ. Не включайте иригатор, пока не поместите насадку в рот. При первом использовании рекомендуется выбрать более низкое давление, постепенно увеличивая давление воды с течением времени до нужной вам настройки.

ВНИМАНИЕ! Не используйте заполненный водой иригатор без насадки. Это может привести к его поломке.

1. Поместите насадку в полость рта. Свободной рукой включите прибор, нажав на кнопку «Включение». Нагнитесь над раковиной и держите устройство в строго вертикальном положении, направив насадку на зубы. Для предотвращения разбрызгивания слегка прикройте рот во время иригации.
2. Выберите режим. При включении иригатор начнет работать в персональном режиме на минимальной мощности, для того чтобы перейти в другие режимы нажмите на кнопку переключения режима.
3. Направление струи можно менять, правый регулятор угла поворота насадки в верхней части ручки в любую сторону. Угол вращения насадки 360° (рис. 4).
4. Чтобы выключить иригатор, нажмите на кнопку «Выключение/Высвобождение».

Персональный режим, программа первоначального использования:

В первые 2 недели использования (30 включений) персональный режим будет работать по программе первоначального использования и постепенно увеличивать мощность для комфортного привыкания к иригации. Вы можете отменить программу первоначального использования, активировав настройку персонального режима.

Настройка персонального режима:

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для комфорта настройки персонального режима можно осуществлять направляя струю на руку, предварительно отпустив руку в раковину, или непосредственно во время иригации полости рта. При настройке режима на руке возможно разбрызгивание воды.
2. Выберите на иригаторе персональный режим с помощью кнопки «Переключения режимов».
3. Включите иригатор нажав на кнопку «Включение».
4. Удерживайте кнопку «Переключения режимов» 3 секунды, индикатор режима начнет мигать. Вы вошли в настройку персонального режима.
5. Удерживайте кнопку «Переключения режимов» еще 3 секунды, индикатор персонального режима перестанет мигать. Режим будет сохранен. При следующем использовании иригатор будет помнить настройки вашей персональной программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда сливайте оставшуюся воду. Это поможет предотвратить загрязнение и рост бактерий в воде, оставшейся в устройстве. Если не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, не забудьте протереть и просушить прибор перед хранением.

Рекомендуемая техника

1. Направьте струю под углом 90 градусов к линии десны. Смойте губы, чтобы избежать разбрызгивания. Не закрывайте при этом рот, позволяйте воде свободно вытекать из рта. Смотрите Рисунков 5.
2. Для достижения наилучших результатов начинайте с боковых и дальних зубов, перемещаясь в направлении передних зубов. Смотрите Рисунков 6.
3. Перемещайте насадку вдоль линии десны от зуба к зубу, задерживаясь между зубами. Смотрите Рисунков 7. Продолжайте чистку до тех пор, пока зоны вокруг и между зубами не станут чистыми.
4. Вы можете остановить подачу воды в любое время, нажав на кнопку «Выключение».
5. Прибор автоматически отключится, если время процедуры превысит 2 минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Использование в иригаторе нефilterованной водопроводной воды может со временем привести к образованию известкового налета и отложений во внутренних частях прибора, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на его работе.
2. Из-за гигиенических соображений перед первым использованием, а также в случае, если устройство не использовалось в течение длительного времени, иригатор необходимо промывать. Для этого полностью заполните резервуар водой и включите устройство, направляя при этом насадку иригатора вниз в раковину.
3. Не используйте горячую воду выше 40 °C.


6. ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА. УТИЛИЗАЦИЯ

Данное устройство должно всегда храниться в недоступном для детей месте. Приборы следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

7. ПРАВИЛА УХОДА И ЧИСТКИ

Не используйте грубые ткани, щетки и абразивные средства для чистки прибора. Протрите прибор сухой мягкой тканью.

После каждого использования промывайте насадку под струей воды. Дезинфекцию насадок рекомендуется проводить 5-10 минут в одном из перечисленных растворов: спиртовой раствор, 3% раствор перекиси водорода, 1% раствор хлоргексидина. После дезинфекции в растворе рекомендуется промывать насадку теплой водой. Так же можно использовать бесконтактные способы очистки и дезинфекции насадок: в ультразвуковом или ультрафиолетовом очистителе.

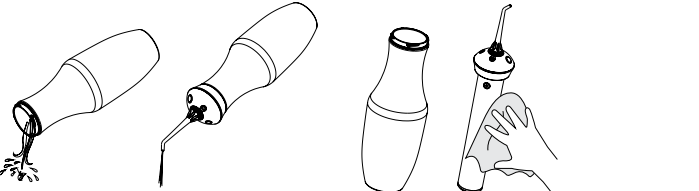

Если при использовании иригатора Вы применяете какие-либо растворы, обязательно промывайте устройство после каждого такого использования. Для этого полностью наполните емкость для воды чистой теплой водой и включите прибор, направляя при этом насадку иригатора вниз в раковину, вытрите прибор насухо.

ИНДИКАТОРНЫЕ СИМВОЛЫ

1. Регулярно проверяйте вилку и кабель зарядного устройства, протирайте вилку адаптера мягкой тканью.
2. Если вода попала на базу зарядного устройства, очистите и высушите зарядное устройство мягкой тканью.

8. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема	Причина	Устранение
Иригатор не работает	Вы только что приобрели устройство или оно не использовалось в течение более 3 месяцев	Зарядите аккумулятор в течение 24 часов перед первым использованием, далее – 12 часов
Иригатор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу	Обратиться в сервисный центр
Налив воды очень слабый	Недостаточно заряжен аккумулятор иригатора	Зарядите аккумулятор в течение 24 часов перед первым использованием, далее – 12 часов
Вода из насадки не поступает	Засорилась насадка	Замените насадку
Между насадкой и прибором протекает вода	Насадка деформирована	Замените насадку
При использовании прибора происходит протечка воды	Неверная эксплуатация прибора	Используйте прибор в строгом соответствии с данным руководством по эксплуатации

To check the technical condition of the device and whenever an issue is detected that cannot be eliminated using the table above please contact B Well service and consulting office.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время зарядки аккумулятора:	24 часов перед первым использованием, далее – 12 часов
Питание (адаптер приобретается отдельно):	5.0V 1000 mA DC
Тип аккумулятора:	Li-ion (литий-ионный)
Время работы аккумулятора на одной подзарядке:	~ 46 минут
Габариты (ш x в x г):	77 x 77 x 312 мм
Вес:	383 гр
Емкость резервуара для воды:	280 мл
Время использования полного объема емкости для воды:	в зависимости от режима: 40–80 с
Частота пульсации воды:	1400–1800 импульсов в минуту
Минимальное/максимальное давление струи:	98–817 кПа
Автоматическое:	через 2 минуты работы
Условия хранения:	от -16° до 60° C при относительной влажности не более 85%
Условия применения:	от 16° до 40° C при относительной влажности не более 85%

Предхраните устройство от падений и сильных ударов. Держите устройство подальше от области высоких температур и избегайте прямых солнечных лучей.

10. РАШИИРОВКА СИМВОЛОВ В УПАКОВКИ И ЭТИКЕТКИ

ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО БЫТОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ	КЛАСС ЗАЩИТЫ ВМЕСТЕ С ПОКАЗАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ТОКА (в КЛАССЕ)	СЕРТИФИКАЦИЯ CE	СТУПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМАЯ ОБЪЕКТАМИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	МОДЕЛЬ	ТЕМПЕРАТУРА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПРИМЕНЕНИЯ -16° C - 40° C	ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -16° C - 60° C	НОМЕР ПАРТИИ (ДЛЯ НАСАДОК)

Дата производства прибора зашифрована на этикетке прибора в серийном номере «SN»: первые две цифры – неделя производства, вторые две цифры – год производства.
Дата производства насадок, купленных отдельно от прибора, указана на стикере в номере партии LOT: первые две цифры – неделя производства, вторые две цифры – год производства.

11. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Представленный образец указанного оборудования прошел испытания на соответствие маркировке CE европейской директиве и следующим стандартам:

- Директива по электромагнитной совместимости 2014/35/EU.
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на прибор составляет 1 год со дня покупки.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации. При обнаружении производственного дефекта в течение гарантийного срока неисправный прибор будет отремонтирован или, если ремонт невозможен, заменен на другой.
Гарантия не распространяется на компоненты и расходные материалы, подверженные износу, а также на батареи, сумки и упаковку изделия.
Дата последней редакции 2023-W48

UK Инструкция з експлуатації

Діагноза для придбання іригатора для ротової порожнини ТН-917 компанії «Бі Велл» (B Well).

Цей прилад забезпечує ефективне очищення простору між зубами та видалення зубного нальоту. Його застосування допомагає запобігти утворенню зубного каменю і є чудовою профілактикою розвитку карієсу та захворювань пародонту. Іригатор для ротової порожнини ТН-917 (далі за текстом прилад, пристрій, іригатор) – це необхідний прилад для догляду за ротовою порожниною за наявності мостів, імплантів, коронок і бреккетів. Також його допоміжну функцію здійснюють масаж ясен, що покращує кровообіг та сприяє їхньому оздоровленню. Чотири режими роботи забезпечують максимальну ефективність цього приладу.

О ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ЦІМ ПРИЛАДОМ, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ПІСІЄНИК І ЗБЕРЕЖІТЬ ЙОГО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО КОРИСТУВАННЯ.

1. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

О УВАГА!

Для іригації ротової порожнини категорично заборонено застосовувати:

- Речовини та розчини, що містять жваві частинки (відаври, суспензії, настої тощо). Наявність таких частинок може призвести до заміщення всмоктувальної трубки та насади.
- Олійні розчини. Олія є органічним речовиною і її використання може чинити роз'ядний ефект у всмоктувальній трубці та елементах приладу.
- Розчини, що містять агресивні хімічні речовини (наприклад, марганцівка, йод та інші).
- Зубна паста.

Для іригації порожнини рота можна застосовувати:
• Чисту, теплу воду (до 40 °C). Якщо вище, використовуйте тільки у вашому регіоні незадовільна, рекомендується використовувати фільтровану воду.
• Спеціальні рідини, бальзамы, розчини, ополіскувачі та концентрати для іригатора (в інструкції до засобу має бути зазначено, що він рекомендований для використання в іригаторі для ротової порожнини). При підготовці засобу для іригатора дотримуйтеся інструкцій.- Розчини антисептиків (такі як хлоргексидин, мірамистин або інші за рекомендацією лікаря).

О УВАГА!

У разі використання спеціальних розчинів для іригатора, після їх використання необхідно обов'язково промити насадку чистою теплою водою: повністю використати ємність для води та провести додатковий цикл іригації, осушивши прилад через насадку.

Уважно слідкуйте за терміном придатності до використання, що вже минув.

О УВАГА!

- Цей прилад оснащений вмонтованими акумуляторними батареями. Не видайте його у вогонь, не нагрівайте його. Також не заряджайте, не використовуйте та не залишайте прилад у місцях із високою температурою повітря.
- Не використовуйте зарядний пристрій, якщо пошкоджено шнур або штепсельну роз'єдну.
- Не використовуйте прилад разом із зарядним пристроєм у ванній кімнаті або у душі.
- Не залишайте та не зберігайте зарядний пристрій там, де він може впасти або потрапити до ванни, раковини або унітазу. Це може спричинити ураження електричним струмом або займання.
- Якщо іригатор впаде у воду, перш ніж його дістати, витягніть вилку з розетки.
- Не занурюйте іригатор у воду.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено зарядний пристрій або якщо шнур живлення нещільно під'єднаний до штепсельної вилки. Це може спричинити ураження електричним струмом, коротке замикання або займання.
- Не ламайте, не згинайте, не тягніть та не перекручуйте шнур живлення з надзвичайними зусиллями. Крім того, не кладіть зверху на шнур живлення ваги предметів та не пошкодьте шнур живлення нігнями. Це може спричинити ураження електричним струмом або займання.
- Не вставляйте та не вимикайте безконтактний зарядний пристрій зі штепсельної розетки мокримися руками. Недотримання цього правила може призвести до займання через порушення ізоляції, що обумовлене вологістю та накопиченням пилу.

О ОБЕРЕЖНО:

- Діти до 8 років та особи, які не можуть самостійно керувати приладом, а також особи з особливими чутливостями до ротової порожнини не повинні користуватися цим приладом. Недотримання цього правила може призвести до травмивання, використання приладу виключно для очищення ротової порожнини. Напір води, спрямований в очі, ніс, вушні канали, може завдати серйозної травми. Зрощення порожнини носа може викликати тиск на наявність насадки для носа, яку можна придбати окремо.
- У разі луввання порожнини рота, а також при важких формах пародонтозу перед застосуванням приладу зверніться до стоматолога.
- Люди, які відчувають біль у зубах або яснах, не завжди можуть використовувати іригатор. У таких випадках рекомендовано консультація стоматолога.
- Під час використання не притискайте насадку іригатора до зубів або ясен значно занадто сильно, оскільки вона може їх пошкодити.
- Не налівайте в резервуар воду, температура якої перевищує 40°C.
- Вимикаючи зарядний пристрій з розетки, завжди беріться за штепсельну вилку, а не за шнур. Недотримання цього правила може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або займання.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ

Іригатор для ротової порожнини моделі ТН-917 з акумулятором застосовується для профілактики стоматологічних захворювань, для гігієни та комплексного догляду за порожниною рота в домашніх умовах. Іригатор забезпечує доступ струменя води або розчину лікарського засобу до будь-якої ділянки ротової порожнини. Перешкодою росту патогенної мікрофлори та розвитку запальних процесів. При використанні іригатора дотримуйтеся рекомендацій лікаря.

Протипоказання:

Перед застосуванням іригатора рекомендується проконсультуватися зі стоматологом у випадку, якщо раніше була операція в ротовій порожнині, а також при загостренні хронічних захворювань ротової порожнини.
Під час перших кількох випадків застосування іригатора можлива незначна кровоточивість ясен.
Якщо ясна у вас здорові, будь-яка кровоточивість ясен має припинитися протягом 1-2 тижнів.
Якщо кровоточивість триватиме 8 після 2 тижнів застосування, припиніть використання іригатора та проконсультуйтеся зі стоматологом.

Не використовуйте при відкритих ранах на язні або у ротовій порожнині. Проконсультуйтеся з лікарем, якщо приймаєте антибіотики.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Іригатор ТН-917 включає:


1. Іригатор для ротової порожнини
2. Стандартні насадки
3. Ємність для води
4. Зарядна база
5. USB кабель
6. Засисний колпачок-заглушка

ПРИМІТКА: Під час придбання іригатора Ви можете виявити трохи рідини в ємності для води або у всмоктувальній трубці. Це залишки дистильованої води, яку використовували для перевірки роботи іригатора. Вона не становить жодної загрози для здоров'я людини.


До іригатора B Well ТН-917 можна додатково придбати комплекти насадок:

О ВАЖЛИВО: Згідно особливості гігієни кожен член сім'ї має використовувати індивідуальну насадку. Для цього насадки помічені різними кольорами. Після кожного застосування промивайте насадки під струменем води. Дезинфекцію насадок рекомендовано проводити раз на тиждень. Детальніше про дезинфекцію наведено в розділі 7. ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ОЧИЩЕННЯ


СТАНДАРТИ НАСАДКИ ДЛЯ ИРИГАТОРА ТН-917

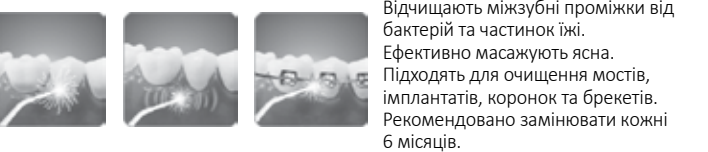


НАСАДКИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ЯЗІКА ДЛЯ ИРИГАТОРА ТН-917

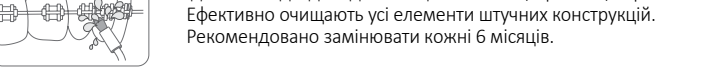


ПАРОДОНТОЛОГІЧНІ НАСАДКИ ДЛЯ ИРИГАТОРА ТН-917

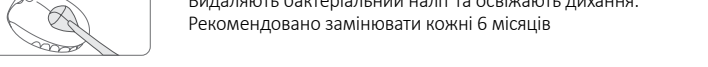


НАСАДКИ ДЛЯ ИРИГАТОРА ТН-917 ДЛЯ ИМПЛАНТІВ, МОСТІВ, КОРОНОК, ВІНИРІВ

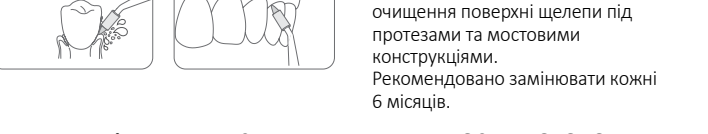

НАЗАЛЬНІ НАСАДКИ ДЛЯ ИРИГАТОРА ТН-917

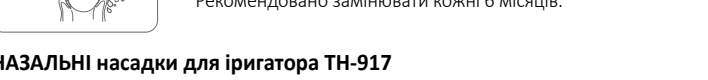

4. ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ

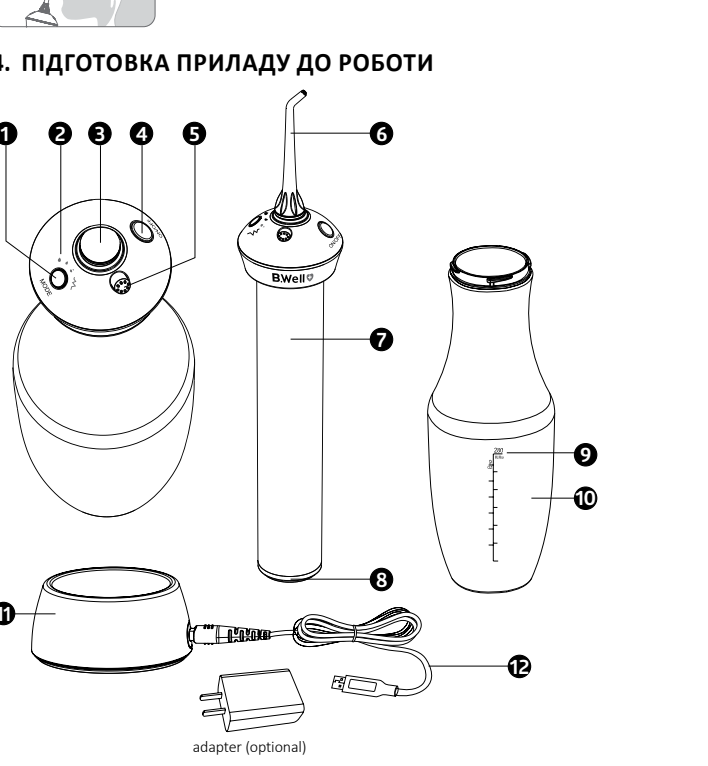

1. Переключатель режимов «MODE»
2. Индикатор режиму
3. Защитный колпачок-заглушка
4. Кнопка включения/выключения
5. Кнопка извлечения насадки
6. Насадка
7. Корпус
8. Индикатор зарядного устройства
9. Отметка объема воды
10. Резервуар для воды
11. База зарядного устройства
12. USB-кабель

Примітка:
1. Під час придбання іригатора Ви можете виявити трохи рідини у ємності для води або у всмоктувальній трубці. Це залишки дистильованої води, яку застосовували для перевірки роботи іригатора. Вона не становить жодної загрози для здоров'я людини.
2. Прилад працює від вмонтованого аккумулятора. Перед тим, як застосовувати вперше, прилад необхідно зарядити.

Заряджання приладу

1. Для заряджання приладу використовуйте USB кабель, під'єднаний його до зарядної бази.
2. Зарядити прилад можна за допомогою адаптера (який можна придбати окремо), під'єднаний його до мережі. Також можна скористатися іншими зарядними пристроями (пауэр-банкми, ноутбуками). Використовуйте лише сертифіковані зарядні пристрої з вихідною напругою 5 В, 1000 мА постійного струму.
3. Помістіть сам прилад на базу зарядного пристрою (мал. 1). Під час заряджання приладу індикатор зарядного пристрою бігатииме синім кольором.
4. Коли прилад повністю зарядиться, індикатор загасне.

Підготовка ємності для води

1. Зніміть ємність для води з основного корпусу, повертаючи її за годинниковою стрілкою.
2. Наповніть ємність теплою водою до позначки «MAX» (мал. 2). Не наповнюйте ємність більше ніж 280 (більше позначки «MAX»), щоб уникнути виходу приладу з ладу.
3. Помістіть ємність назад до основного корпусу приладу, повертаючи її проти годинникової стрілки до клацання.

Встановлення та зняття насадок

Встановіть насадку у відповідне заглиблення основного блоку іригатора. Кольорове кільце на насадці має стати впритул до корпусу пристрою. Щоб зняти насадку, натисніть кнопку для зняття насадки та зніміть насадку.

Опис режимів

Коли відбувається перемикання режиму, на панелі порч з кнопкою перемикання загоряється індикатор обраного режиму. Різні режими мають різні налаштування та тиск води.

1. **Стандартний режим** – призначений для ефективного очищення ротової порожнини, видалення частинки їжі.
2. **М'який/дбайливий режим** – призначений для м'якого та делікатного очищення чутливих зубів та ясен.
3. **Персональний режим** – призначений для індивідуального налаштування потужності іригатора, виходячи з уподобань та чутливості ротової порожнини. Також у цей режим вбудована програма початкового використання для комфортного звикання до іригації.
4. **Масаж (пульсуючий режим)** – призначений для очищення та масажу ясен, що покращує їх кровообіг, сприяючи їх оздоровленню.

5. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЛАДУ

ПРИМІТКА: Не вимикайте іригатор, поки не помістите насадку до рота. Під час першого використання рекомендується вибрати нижчий тиск, поступово збільшуючи тиск води з плином часу до потрібного вам налаштування.

О УВАГА! Не використовуйте заповнений водою іригатор без насадки. Через це він може вилити з ладу.

1. Помістіть насадку до ротової порожнини. Вільною рукою уямініть прилад, натиснувши на кнопку «Вимкнення». Нахиліться над раковиною і тримайте прилад вертикально, направивши насадку на зуби. Щоб запобігти розбризканню, трохи прикрийте рт під час іригації.
2. Оберніть режим. Після вимкнення іригатор почне працювати в персональному режимі на мінімальній потужності, для того щоб перейти в інші режими натисніть на кнопку перемикання режимів.
3. Напрямок струменя можна змінювати, обертаючи регулятор кута повороту насадки у верхній частині ручки в будь-який бік. Кут обертання насадки 360° (мал. 4).
4. Щоб вимкнути іригатор, натисніть на кнопку «Вимкнення/Вимкнення».

Персональний режим, програма початкового використання:

У перші 2 тижні використання (30 включень) персональний режим буде працювати за програмою початкового використання та поступово збільшувати потужність для комфортного звикання до іригації. Ви можете скасувати програму початкового використання, активізувавши налаштування персонального режиму.

Налаштування персонального режиму:

ПРИМІТКА: Для зручності налаштування персонального режиму можна спрямувати струмінь на руку, попередньо опустивши її до раковини, або робити це безпосередньо під час іригації порожнини рота. У разі налаштування режиму на руці можливе розбризкання води.

1. Оберніть на іригаторі персональний режим за допомогою кнопки «Перемикання режимів».
2. Увійніть іригатор, натиснувши на кнопку «Вимкнення».
3. Утримуйте кнопку «Перемикання режимів» 3 секунди, індикатор режиму почне бігати. Ви увійшли в налаштування персонального режиму.
4. Утримуйте кнопку «Перемикання режимів» для підбору індивідуальної потужності приладу. Потужність буде плавню змінюватися від низької до сильної. У персональному режимі передбачено 10 рівнів потужності.
5. Після вибору необхідної потужності відпустіть кнопку «Перемикання режимів».
6. Через 3 секунди індикатор налаштування персонального режиму перестане бігати. Режим буде збережено. Під час наступ