

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie do liposukcji, drenaż 3w1 RF UK-17



**Gratulujemy zakupu. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni
usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt
telefoniczny – postaramy się pomóc.**

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

1. Opis urządzenia

Urządzenie do odchudzania z ultradźwiękową kavitacją 2.0, która wspomaga metabolizm, dzięki czemu skutecznie roztopia tłuszcz i sprawia że skóra staje się bardziej napięta. Spala komórki tłuszczowe, jednocześnie eliminując cellulit. Wykorzystuje technologię RF, która zwiększa produkcję kolagenu i napięcie skóry. Wibrację o wysokiej częstotliwości zapewniają wyjątkowy masaż, wspomaga spalanie komórek tłuszczowych, aktywność komórkową i poprawiają elastyczność skóry.



**Głowica 40k
do spalania tłuszczu**



Głowica 3-biegunowa RF



Głowica 4-biegunowa RF

2. Obsługa urządzenia

1. Podłącz uchwyt do odpowiedniego gniazda, a następnie podłącz przewód zasilający.
2. Naciśnij przełącznik zasilania, a dioda wskazująca i panel LCD powinny się zaświecić.
3. Dotknij przycisku "ENTER" na ekranie LCD. aby przejść do trybu operacyjnego, a następnie wybierz funkcję, której potrzebujesz, np. kawitacja 40K. Musisz dostosować tryb, czas pracy, intensywność pracy, a następnie nacisnąć przycisk "START". Głowica 40K do rozbijania tłuszczu zacznie działać. W ten sam sposób można wybrać inne funkcje RF. Po zakończeniu używania naciśnij przycisk "EXIT", aby wrócić do interfejsu głównego, a następnie wyłącz zasilanie.

3. Funkcje i działanie urządzenia

1. Głowica 40KHZ do rozbijania tłuszczu

Wykorzystując zebrane silne fale dźwiękowe, głowica 40K emituje fale dźwiękowe o częstotliwości 4000 Hz, które wnikają w ciało człowieka. Dzięki temu wywołują silny wstrząs w komórkach tłuszczowych, co efektywnie spala kalorie, wilgoć oraz komórki tłuszczowe, zmniejszając ich liczbę i osiągając efekt usuwania tłuszczu.

Główne efekty:

- Dieta ogólnoustrojowa lub miejscowa.
- Zwiększenie tempa metabolizmu ciała, wzmocnienie procesów usuwania odpadów i wilgoci z organizmu.
- Poprawa rozstępów.
- Relaksacja mięśni, łagodzenie skurczów mięśniowych, redukcja bólu mięśni.
- Ujędrnianie skóry na dłoniach, nogach, udach, pośladkach, plecach, brzuchu w celu modelowania sylwetki
- Skuteczne poprawienie skóry pośladków i ud, przypominającej skórę pomarańczową, a także rozwiązanie problemu luźnej skóry po porodzie.

2. Głowica 4-biegunowa RF do ciała

Tłuszcz jest rozpuszczany, poprawia się drenaż limfatyczny, skóra staje się jędrniejsza, a elastyczność skóry wzrasta. Może bezpośrednio działać na warstwę tłuszczu, emitując kierunkowe fale RF, które przyspieszają ruch ciepła przez gruczoły potowe, krążenie enterohepatyczne i limfatyczne, umożliwiając usuwanie nadmiaru tłuszczu i toksyn z organizmu, co prowadzi do rozpuszczania tłuszczu.

3. Głowica 3-biegunowa RF do twarzy

Głowica 3-biegunowa RF działa na skórę, ogrzewając włókna kolagenowe skóry do temperatury 45–65 stopni Celsjusza. Włókna kolagenowe natychmiast się kurczą, co powoduje wygładzenie luźnej skóry i rozciąganie zmarszczek. Stymuluje również proliferację kolagenu w skórze, zwiększając jej grubość i gęstość, co skutkuje usuwaniem zmarszczek, spłycając blizny, przywracaniem elastyczności skóry i jej blasku oraz poprawą jej jędrności.

4. Zakres zastosowania:

- m. in. ramiona, nogi, uda, plecy, brzuch oraz inne obszary ciała;
- redukcja tkanki tłuszczowej oraz poprawa różnych schorzeń, na które zabieg wykazuje korzystny wpływ terapeutyczny,
- wspomaganie mechanicznego ćwiczenia aerobowego tkanek skórnych, szybkie łagodzenie stresu oraz redukcja zmęczenia;
- unoszenie i napinanie skóry oraz przywracanie jej elastyczności,
- aktywacja cyklu komórkowego oraz wspomaganie metabolizmu w celu zwiększenia produkcji kolagenu i włókien kolagenowych,
- poprawa kondycji skóry twarzy i ciała.


5. Sposób działania:

Przed zabiegiem należy oczyścić skórę, równomiernie pokrywając jej powierzchnię olejkami lub żelami odchudzającymi, a następnie wykonać masaż.

Przykładowe metody działania:


- **Uda**

1. Wykonaj drenaż limfatyczny od dołu do góry, w kierunku pachwin.
2. Obracaj ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wspomóc rozkładanie tłuszczu.
3. Wykonuj naprzemienne ruchy do przodu i do tyłu, rozkładając tłuszcz.
4. Przesuwaj się od dołu w kierunku kolana, aż do pachwiny, aby poprawić kształt nóg.

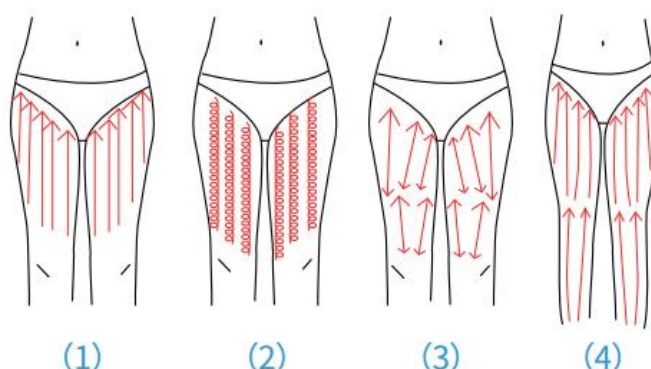


• Pośladki

1. Masuj wzdłuż kierunku limfatycznego w okolicach pasa.
2. Obracaj ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od dołu do góry i z powrotem.
3. Zgodnie z naturalnym układem mięśniowym skóry pośladków, masaż sprawi, że pośladki stają się bardzo jędrne i wymodelowane.

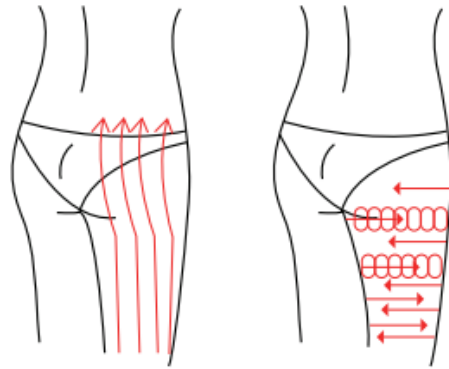


• Plecy

1. Wykonaj ruch do przodu i do tyłu 2-3 razy.
2. Obracaj ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby stymulować węzły limfatyczne.
3. Obracając ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, poruszaj w górę i w dół pleców, aby pomóc w rozkładaniu tłuszczu.
4. Stosowanie technik drenażu limfatycznego usuwa toksyny z węzłów limfatycznych, co pomaga poprawić krzywiznę pleców.

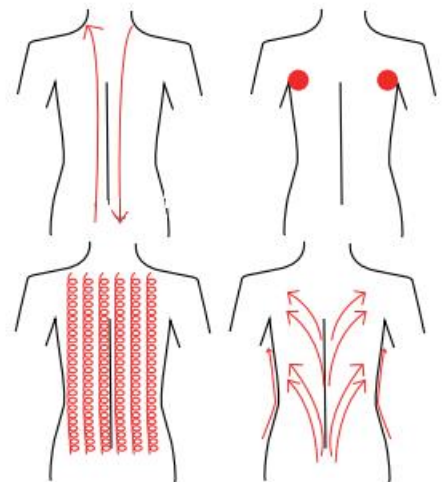


• Ramiona

1. Wykonaj drenaż limfatyczny od łokcia do pachy.
2. Wykonaj ruchy okrężne, aby stymulować węzły limfatyczne.
3. Ruchy okrężne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara lub popychanie na przemian do przodu i do tyłu, aby rozkładać nadmiar tłuszczu.
4. Ujędrnia skórę od łokcia do pachy.

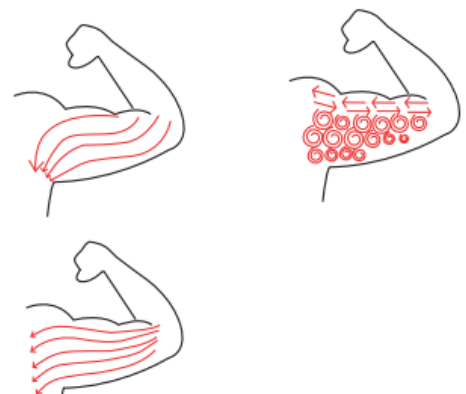


• Brzuch

1. Wykonuj okrężne ruchy wokół pępka, zaczynając od małego koła i stopniowo przechodząc do większego, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, co wspomaga pracę jelit.
2. Następnie wykonuj okrężne ruchy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, przechodząc od małego koła do większego, kierując ruchy w dół.

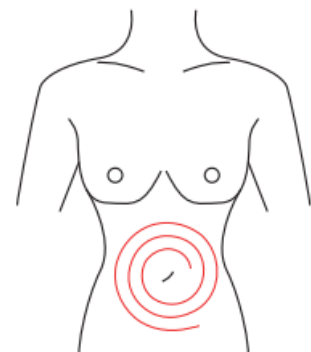

- **Twarz**

1. Równomiernie nałóż produkt na twarz, a następnie użyj głowicy trójbiegunowej RF, wykonując ruchy od dołu do góry, aby unieść skórę i utrzymać ją w napiętej formie. Zalecany czas użycia to 5 minut.
2. Równomiernie nałóż produkt na twarz, a następnie użyj głowicy trójbiegunowej RF, postępując zgodnie z kierunkiem wskazanym na strzałce. Zalecany czas użycia to 5 - 8 minut.

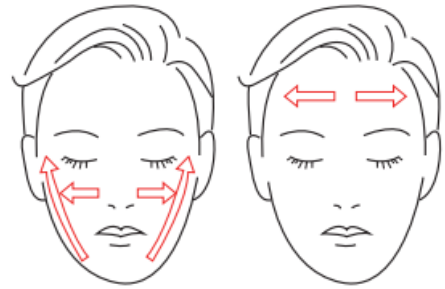

6. Przeciwwskazania do użytkowania

UWAGA! TEN PRODUKT NIE JEST WYROBEM MEDYCZNYM I NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ

Produkt nie może być stosowany przez:

1. kobiety w ciąży i w czasie miesiączki,
2. pacjentów cierpiących na epilepsję,
3. pacjentów z chorobą nowotworową,
4. pacjentów z niezagojonymi ranami pooperacyjnymi,
5. pacjentów z ostrym stanem zapalnym i z chorobami zakaźnymi,
6. pacjentów z chorobami serca i osoby posiadające rozrusznik serca,
7. pacjentów z chorobami nerek,
8. pacjentów mających problemy nietrzymaniem moczu,
9. pacjentów posiadający w ciele metalowe implanty lub żel krzemionkowy,
10. osoby z genetyczną nadwrażliwością,
11. pacjentów po operacji brzucha.

7. Ważne uwagi dotyczące użytkowania

1. Należy zawsze używać żeli do skóry, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
2. Należy upewnić się, że urządzenie jest używane pod kątem 90 stopni do skóry, aby uniknąć dyskomfortu. Zabieg należy rozpocząć od kontaktu sondy prostopadle do skóry, włączyć urządzenie, a następnie ustawić minimalną energię w trybie operacyjnym, dostosowując intensywność do tolerancji skóry.
3. Głowica robocza nie powinna pozostawać w jednym miejscu zbyt długo, aby uniknąć kontaktu z kośćmi.
4. Nie należy stosować środków dezynfekujących do dezynfekcji urządzenia, zaleca się użycie wilgotnej ściereczki lub wacika.

5. Osoby poddawane zabiegowi, jak i wykonujące zabieg powinny zdjąć metalowe ozdoby i akcesoria.
6. Urządzenie może pracować nieprzerwanie przez 1 godzinę, po czym należy zrobić 10-minutową przerwę przed dalszym użyciem.
7. Podczas stosowania głowicy do rozbijania tłuszczu niektórzy goście mogą doświadczyć szumów usznych. Jest to zjawisko normalne, ponieważ emitowane fale dźwiękowe mogą przekraczać zakres akustyczny ludzkiego ucha.
8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Korzystanie z niej powinno zawsze się odbywać pod nadzorem dorosłych.
9. Konserwuj urządzenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ono wyłączone. Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą oraz innymi cieczami.
10. Nie korzystaj z urządzenia jeśli widzisz, że jest ono uszkodzone.
11. Trzymaj urządzenie z dala od rozgrzanej powierzchni.
12. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
13. Chronić przed działaniem wysokich i niskich temperatur.
14. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
15. Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.