

Elektroniczny dozownik leków

Model: CR-210


PL

Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przeznaczenie:

Dozownik regularnego przyjmowania leków z możliwością ustawienia do 5 alarmów (dźwięk + wibracja), zegara i timera

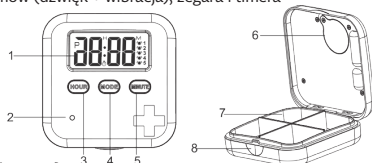

Wykaz elementów:

1. Ekran
 2. Głośnik
 3. Przycisk nastawiania godziny
 4. Przycisk MODE do wyboru trybu
 5. Przycisk nastawiania minuty i Start/Stop (timer)
 6. Pokrywa komory baterii
 7. Przegródki na leki
 8. Zatrask pokryw
- Opis produktu**
1. 5 dniowe alarmy
 2. alarm dźwiękowy z wibracją
 3. 4 przegródki na tabletki
 4. proste ustawienie alarmu
 5. Zegarek z możliwością wyboru formatu wyświetlania 12/24 godzin.
 6. Minutnik; maks. 23 godziny i 59 minut.
 7. Mały kompaktowy rozmiar w kieszeni lub torebce

ZACZYNAJMY

- Wyśnij pasek izolujący (jeśli został użyty), aby aktywować urządzenie.
- Naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj przez 2 sekundy, aż uruchomi się ekran LCD.

TRYB ZEGARA / ALARMU / TIMER

Naciskając przycisk MODE przechodzimy pomiędzy trybami:



a) tryb zegara

- 1) W trybie zegara naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj do momentu, aż zacznie migać napis 12 Hr/24 Hr.
 - 2) naciskając przycisk HOUR lub MINUTE wybierz format wyświetlania 12 lub 24 godzinny.
 - 3) Naciśnij przycisk MODE a następnie HOUR/MINUTE tyle razy, ile jest wymagane, żeby ustawić aktualną godzinę. Można ewentualnie nacisnąć i przytrzymać przycisk HOUR/MINUTE, żeby przyspieszyć nastawianie. Po osiągnięciu odpowiedniej wartości zwolnij przycisk.
 - 4) Potwierdź ustawienia naciskając przycisk MODE lub poczekaj minutę na automatyczne zatwierdzenie.
- Litera „P” ma ekranie sygnalizuje wybór 12-godzinne formatu czasu.

b) tryb alarmu

- Alarm 1
- 1) Naciskaj przycisk MODE do momentu pojawienia się na ekranie ikony Alarm 1 „symbolu dzwonka 1”.
 - 1) Naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj tak długo, aż cyfry na ekranie zaczynają migać a następnie nastaw „Alarm 1”.
 - 1) Naciskając przyciski HOUR/MINUTE ustawiamy godzinę „Alarmu 1”.
 - 1) Potwierdź ustawienia naciskając przycisk MODE.
- Godzina alarmu 1 przestanie migać. Na ekranie pojawi się ikona alarmu 1, a także widoczny będzie symbol dzwonka 1.
- Podobnie należy postępować ustawiając kolejne alarmy: Alarm 2 (symbol dzwonka 2), Alarm 3 (symbol dzwonka 3), Alarm 4 (symbol dzwonka 4) a Alarm 5 (dzwonka 5).

Anulowanie alarmu

- Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać zegar alarmu od 1 do 5, który chcesz wyłączyć.
- Naciśnij przycisk MINUTE i przytrzymaj tak długo, aż na ekranie pojawią się 4 kreski (zob. poniższy rys.). Alarm został anulowany.



Dźwięk alarmu/wibracje

- W przypadku alarmu sekwencja dźwięków/wibracji będzie następująca:
 - Pierwsze 10 sekund: Piknięcie z wibracją
 - Drugie 30 sekund: Przyspieszone pikanie
 - Ostatnie 20 sekund: Przyspieszone pikanie i wibracje.
- Naciśnięcie dowolnego przycisku wyłączy dźwięk i wibrację.

c) Timer odliczający czas

- Naciskaj przycisk MODE do momentu pojawienia się na ekranie ikony trybu timera:




- Naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj tak długo, aż cyfry zaczynają migać.
- Naciśnij przyciski HOUR/MINUTE ustaw wymagany do odliczenia czas.
- Potwierdź ustawienia naciskając przycisk MODE.
- Naciskając przycisk MINUTE uruchamiamy/zatrzymujemy odliczanie.
- W trakcie odliczania czasu ikona budzika będzie migać.
- Gdy timer osiągnie ostatnią minutę, ekran zmieni się i będzie pokazywał odliczanie ostatnich 59 sekund.



- Timer powiadamia o zakończeniu odliczania w taki sam sposób, jak alarm.
- Naciskając dowolny przycisk wyłączmy dźwięk.
- Po wyłączeniu dźwięku alarmu na ekranie pojawi się upływający czas do końca odliczania.
- Jeśli chcesz ustawić nowy czas odliczania, naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj, aby przejść do trybu ustawień.
- Wskazówka: Nowy czas odliczania można ustawić tylko wtedy, gdy odliczanie zostało zatrzymane. Aby zatrzymać odliczanie, należy nacisnąć przycisk MINUTE. Jeśli widoczna jest ikona timera w trybie zegara, oznacza to, że timer został uruchomiony i działa.

WYMIANA BATERII

- Dozownik leków jest zasilany 1 szt. baterią guzikowej CR-2032.
- Otwórz dozownik i odwróć pokrywę komory baterii do siebie.
 - Wykręć śrubą z pokrywki baterii i zdejmij ją.
 - Wyjmij wyczerpaną baterię guzikową i załóż nową (zwróć uwagę na prawidłową biegunowość).
 - Załóż pokrywę komory baterii i zabezpiecz ją wkręcając śrubę.
 - Ustaw aktualną godzinę.

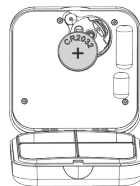

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagać od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapalenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.