

Instrukcja użytkowania



Kraftwerk

**Masażer
Szyi i karku**

zasilany przez axion

KRAFTWERK®

masażer szyi i karku

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.

Uwaga


- Nie należy ciągnąć za kabel zasilający, wyciągając go z gniazdka, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub pogorszenia kontaktu. Wyciągając kabel zasilający z gniazdka, należy mocno złapać za wtyczkę, po czym wyciągnąć ją z gniazdka. Jeśli zauważysz, że urządzenie nie działa, natychmiast je wyłącz i odłącz od zasilania.
- **NIE NALEŻY ZEZWALAĆ** niemowlętom i dzieciom na używanie lub zabawę tym urządzeniem.
- Przerwij stosowanie, jeżeli się źle poczujesz.
- Kobiety w ciąży, lub miesiączkujące oraz osoby, które mają wysoką temperaturę, nowotwory złośliwe, choroby serca, niedokończone operacje, choroby ostre lub inne choroby, powinny stosować to urządzenie tylko po konsultacji z lekarzem.
- **NIE STOSOWAĆ** w następujących miejscach: łazienka, kuchnia lub inne miejsca z wysoką temperaturą lub wysokim ciśnieniem, wilgotnością lub w pobliżu źródeł wody lub ognia.
- Urządzenie należy trzymać z daleka od ostrych narzędzi. Produktu nie należy stosować w wypadku uszkodzenia obudowy zewnętrznej.
- W celu naprawy, należy skontaktować się z działem klienta.
- Nie używać urządzenia, gdy skórzana warstwa wierzchnia jest uszkodzona. Stosowanie w wypadku uszkodzenia pokrowca, może doprowadzić do ciężkich zranień poprzez wkręcenie się w niego włosów.
- Po użyciu lub przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie lub wtyczkę wyciągnąć z gniazdka.
- W wypadku uszkodzenia kabla zasilającego, w celu jego naprawy, należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Do ładowania urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia, należy stosować dołączoną ładowarkę.

- Z powodu podgrzewania powierzchni urządzenia, osoby nadwrażliwe na ciepło, powinny stosować urządzenie z ostrożnością.
- Po użyciu urządzenie należy prawidłowo je przechowywać. Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w suchym miejscu w niskiej temperaturze.
- Jeżeli w czasie stosowania, urządzenie działa nieprawidłowo, należy od razu przestać z niego korzystać, odłączyć dopływ prądu i zwrócić się do działu obsługi klienta.
- Po zastosowaniu urządzenia lub przed jego czyszczeniem, kabel zasilający należy odłączyć z gniazdka.

Zasilanie na baterie i lampka kontrolna

- Urządzenie jest zasilane przez dwie baterie litowe 18650-7.4V, które mogą być ładowane przez USB 5V2A Type-c.
- W wypadku niskiego naładowania baterii, lampka kontrolna miga 6 razy, po czym urządzenie wyłącza się automatycznie.
- W czasie ładowania baterii, lampka kontrolna miga na czerwono i nie jest możliwe włączenie urządzenia. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik świeci na białą.

Użytkowanie i wybór modułu

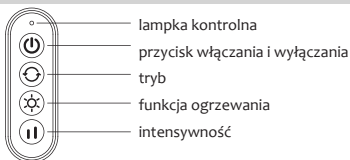

Włączanie/ wyłączenie, wybór trybu

Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk włączania i wyłączania  i przytrzymaj przez 2 sekundy, aż włączy się czerwone światło. Po włączeniu urządzenia domyślnym trybem masażu szyi jest tryb 1, w którym urządzenie masuje poprzez równomierne ruchy. Aby zmienić między trybem 1 i 2 należy wcisnąć przez chwilę przycisk tryb . W trybie 2 ruch masażu jest lekko zwolniony.

Funkcja ogrzewania

Po włączeniu urządzenia funkcja ogrzewania jest automatycznie włączona. Pokazuje to również lampka kontrolna, która świeci się na czerwono. Aby zakończyć funkcję ogrzewania, należy przez chwilę wcisnąć przycisk funkcja ogrzewania . Lampka kontrolna zacznie świecić się na biało.

Intensywność

Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawiony jest pierwszy stopień intensywności. Aby zmienić intensywność należy przez chwilę wcisnąć przycisk intensywność .

Wyłączanie urządzenia

Wyłączanie automatyczne: Po 10 minutach działania, urządzenie wyłącza się samo.

Wyłączanie ręczne: Aby wyłączyć urządzenie należy przycisnąć przycisk włączania i wyłączania  przez 2 sekundy.

Nagłe przypadki

1. Jeżeli kabel, przewody lub wtyczka tego produktu są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
2. Jeżeli w wypadku niewłaściwego stosowania doszło do uszkodzenia urządzenia, nie należy go samodzielnie demontować. W takim przypadku należy odłączyć wtyczkę od kontaktu i w celu naprawy urządzenia zwrócić się do działu klienta.
3. Jeżeli w trakcie stosowania urządzenia, pojawi się ogień lub dym, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i skontaktować się z działem obsługi klienta.
4. Jeśli powierzchnia skórzana lub materiałowa jest uszkodzona, a części urządzenia są odsłonięte, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta w celu jego naprawy.

Konserwacja

- Do codziennej konserwacji należy stosować neutralny środek czyszczący oraz miękką szmatkę. Do czyszczenia nie należy stosować oleju motorowego, organicznych rozpuszczalników lub

innych chemicznych środków. Nie spłukiwać wodą.

- Podczas pracy przełącznik należy naciskać delikatnie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych nadmierną siłą.
- Należy unikać silnego nacisku i nie dopuścić do zarysowania powierzchni ostrymi przedmiotami.
- Po zastosowaniu urządzenia należy przechowywać je w oryginalnym opakowaniu w ciemnym i suchym miejscu.
- Jeżeli w trakcie stosowania pojawią się nieodwracalne błędy, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i zakończyć jego stosowanie. W takim wypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Nie należy próbować naprawić urządzenia samemu.
- Po zakończeniu procesu ładowania, należy od razu wyciągnąć kabel z gniazda.

Ogólne postępowanie z błędami

Awaria	Możliwe przyczyny	Możliwość rozwiązania
Nie można włączyć urządzenia	Bateria się rozładowała	Urządzenie należy włączyć po całkowitym naładowaniu baterii.
Urządzenie przestaje pracować w czasie stosowania	Nadmierne obciążenie produktu	Należy zmniejszyć obciążenie i kontynuować stosowanie.
	Skończył się przeznaczony czas	Wyłączyć i włączyć ponownie
Hałas w czasie stosowania	Może być emitowany z mechanicznej struktury produktu	Stan normalny
Hałas w czasie stosowania	Przegrzanie wewnętrzne Urządzenie należy uruchomić ponownie	Stan normalny

Dane techniczne

Nazwa produktu	Masażer szyi i karku	Moc znamionowa	25 W
Automatycznie wyłączanie	po 10 minutach	Napięcie nominalne	5V ⎓

Sprzęt elektryczny i elektroniczny



Informacje dla gospodarstw domowych zgodnie z § 18 (2)

ElektroG Ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) zawiera wiele wymogów dotyczących obchodzenia się ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Poniżej podsumowano najważniejsze z nich.

1. Oddzielna zbiórka zużytych urządzeń

Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stały się odpadami, nazywane są starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściciele starych urządzeń muszą pozbywać się ich oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. W szczególności stare urządzenia nie mogą być umieszczane w odpadach domowych, ale w specjalnych systemach zbiórki i zwrotu.

2. Opcje dotyczące zwrotu starych urządzeń

Właściciele starych urządzeń z prywatnych gospodarstw domowych mogą je oddać w punktach zbiórki publicznych urzędów utylizacji odpadów lub w centrach odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów zgodnie z ElektroG. Listę punktów zbiórki i odbioru można znaleźć tutaj: <https://elektrosmieciwsieci.pl/mapa/>

CE Deklaracja zgodności EU

axion GmbH niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z CE i RoHS oraz z obowiązującymi normami UE. Kopię deklaracji zgodności można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres service@axion.shop.

axion GmbH
Mollenbachstr. 13
71229 Leonberg
GERMANY

service@axion.shop
www.axion.shop

