



DRENAŻ LIMFATYCZNY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

POLSKI

Na wstępie dziękujemy za wybór naszego produktu! Mamy nadzieję, że sprawdzi się on idealnie dla każdego salonu i gabinetu kosmetycznego oraz zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o produkcie.

UWAGA

Pomocnik należy trzymać z dala od dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych, a także osób bez doświadczenia i wiedzy na temat korzystania ze sprzętu, chyba, że korzystanie z produktu następuje pod nadzorem lub wyżej wymienione osoby zostać przeszkolone. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy upewnić się, iż osoba korzystająca jest świadoma zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu oraz związanych z użytkowaniem zagrożeń.

W żadnym wypadku, dzieci nie powinny zajmować się konserwacją jak i również czyszczeniem produktu.

DANE TECHNICZNE

Wymiary koca: długość: 179 cm, szerokość: 80, 5cm

Częstotliwość: 50 Hz-60 Hz

Temperatura regulowana od 25 do 75 stopni Celsjusza

KORZYŚCI

Od celebrytów po światowe gwiazdy sportu, sauny na podczerwień są chwalone za ich właściwości dla ciała i umysłu. Koc na podczerwień zapewnia wszystkie te korzyści bezpośrednio w Twoim domu. Lekarze i naukowcy przeprowadzili setki niezależnych badań, które wykazały korzyści płynące z terapii ciepłem. W szczególności jedno badanie, które dotyczyło korzyści płynących z regularnego korzystania z sauny (badanie KIHD), trwa od ponad 35 lat, obejmuje 2682 uczestników i zaowocowało ponad 500 recenzowanymi międzynarodowymi artykułami i 20 pracami doktorskimi.

Nasze koce do sauny na podczerwień są idealne do podróży lub użytku domowego, odtruwają organizm, dostarczają świeże składniki odżywcze do mięśni i przyspieszają metabolizm - dzięki czemu spalasz kalorie tak, jakbyś ćwiczył, bez wysiłku.

SKUTECZNE KORZYŚCI

- Sauny poprawiają ogólny stan zdrowia, samopoczucie i wydajność.
- Szybciej detoksykuje - Ciepło infrared odtruwa i oczyszcza organizm z nagromadzonych toksyn i tkanki tłuszczowej.
- Spalanie kalorii - Przyspiesza metabolizm i spala do 600 kalorii na godzinę - bez ćwiczeń! 30-minutowy jogging spala około 300 kalorii. 30-minutowa sesja w kocu na podczerwień pozwala spalić do 600 kalorii. Aha, i możesz spalić te kalorie bez wychodzenia z własnego łóżka.
- Uspokój swoje ciało i umysł - Uwolnij stres i niepokój - naturalnie zwiększa serotoninę (hormon szczęścia) i zmniejsz kortyzol (hormon stresu).
- Zachowaj młody wygląd - Anti-aging - wzmocnij kolagen i nadaj swojej skórze naturalny blask
- Zmniejsza stany zapalne i choroby skóry, łagodzi bóle reumatyczne - Sauna koc pomaga zmniejszyć stany zapalne i choroby skóry (egzema, łuszczyca, trądzik)
- Łagodzi bóle mięśni i stawów, jednocześnie zwiększając przepływ krwi i krążenie
- Powitaj dobry sen - zwiększa naturalną zdolność organizmu do wyciszenia się i odpoczynku
- Pomaga zmniejszyć objawy menopauzy, ponieważ poprawia się przepływ krwi i wzmacnia się układ odpornościowy
- Pomaga zmniejszyć skurcze menstruacyjne, uwalniając endorfiny, które poprawiają samopoczucie, a także działają jako naturalny środek przeciwbólowy

DZIAŁANIE

Koce do sauny wytwarzają ciepło dzięki funkcji terapii dalekiej podczerwieni. Gdy temperatura osiągnie 70 stopni, energia przeniknie do 4 cm do 7 cm tkanki mięśniowej skóry i redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej dla utrzymania szczupłego ciała i jednocześnie upiększenia skóry. Terapia promieniowaniem podczerwonym zapewnia dwa czynniki niezbędne dla dobrego zdrowia: detoksykację komórkową i poprawę krążenie. Zdrowie organizmu zależy od przepływu krwi i energii w całym ciele. Detoksykacja i dobre krążenie skutkują odpowiednią wymianą składników odżywczych do komórek, zmniejszeniem stanu zapalnego i utratą nadwagi.

Energia Infrared, znana również jako ciepło promieniowania; jest naturalną częścią widma światła słonecznego, pomniejszoną o szkodliwe dla skóry promienie ultrafioletowe. Promienie podczerwone sprzyjają bioprocessom, takim jak zwiększony metabolizm i krążenie krwi.


UWAGA! W PRZYPADKU USZKODZENIA KOCA, NALEŻY NIEZWŁOCZENIE ZAPRZESTAĆ DALSZEGO KORZYSTANIA!

PROCES POCENIA

To, ile będziesz się pocić jest zależne od Twojego ciała, a pot wytwarzany przez podczerwień jest zwykle bardziej oleisty i mniej wodnisty niż podczas innych doświadczenia związanych z poceniem się. Wynika to z wysokiego stężenia toksyn w wydalanym pocie. Pamiętaj, że podczas pierwszych kilku sesji możesz się nie pocić i że ważne jest, aby pozostać nawodnionym. Pij wodę przed i po sesji.

PANEL STEROWANIA

- A) Wskaźnik temperatury 1
- B) Licznik czasu pracy
- C) Wyświetlacz temperatury 1
- D) Wyświetlacz temperatury 2
- E) Wskaźnik temperatury 2
- F) Start/Stop
- G) Regulacja czasu i temperatury (zwiększanie)
- H) Regulacja czasu i temperatury (zmniejszanie)
- I) Przejście do ustawień czasu i temperatury
- J) Przycisk zasilania
- K) Wejście na przewody
- L) Gniazdo zasilania

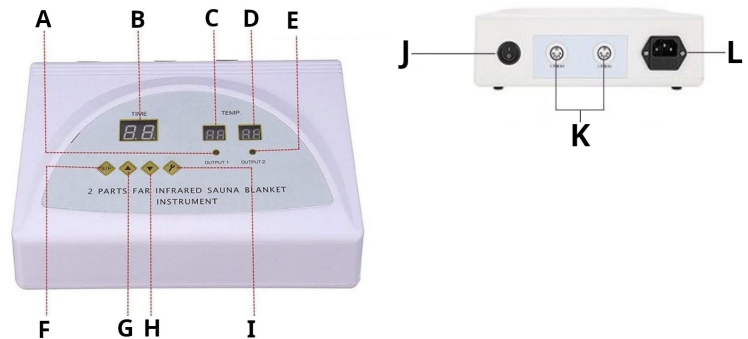

W części głównej sterownika znajdują się 2 wyświetlacze, 2 diody oraz przyciski do regulacji ustawień temperatury i czasu działania. Wyświetlacz 1 i 2 są kolejno połączone z portami - wejściami na przewody podczerwieni - pokazując temperaturę odpowiadającą portowi 1 i 2. Diody wskazują nam stan pracy portu 1 i 2. Zapalona lampka oznacza jego nagrzewanie, a lampka zgaszona wskazuje stałą temperaturę.

- Guzik Start/Stop - uruchamia dany program lub wstrzymuje go.
- Strzałki góra/dół - odpowiedzialne są za regulację temperatury 25-75 st. C oraz czasu działania na danym programie, który wynosi do 30 minut.
- Ostatni przycisk z grafiką klucza odpowiada za ustawienia dotyczące Czasu i temperatury działania.

INFORMACJE

- Przed użyciem rozłożyć koc, podłączyć sterownik oraz urządzenie do gniazda zasilania.
- Następnie po ustawieniu interesujących nas parametrów nacisnąć.
- Start
- Czas nagrzewania koca wynosi od 3 do 6 minut.
- Ważne, aby po skończonej sesji pozostawić koc rozłożony do momentu aż wystygnie.

PRZECIWWSKAZANIA

- Niedoczynność nadnercza,
- Liszaj rumieniowaty,
- Stwardnienie rozsiane,
- Ostre stany zapalne skóry,
- Hemofilia lub skłonność do krwotoków,
- Ciąża,
- Ostry uraz stawu (do 48 godzin od urazu bądź od ustąpienia zaczerwienienia, gorąca lub opuchlizny),
- Otwarte rany,
- Choroby oczu,
- Silne oparzenia słoneczne,
- Implanty chirurgiczne, silikonowe,
- Przyjmowanie preparatów farmakologicznych (różnego rodzaju maści, żeli czy kremów leczniczych).

WYKONANIE

W naszym kocu do sauny na podczerwień podzespoły najlepsze na rynku. Sauny te mają najwyższą skuteczność spośród wszystkich saun, zawierają niskie pole elektromagnetyczne, wykonane są z bezpiecznych i nietoksycznych materiałów i produkowane ze 100% kontrolą jakości pod okiem specjalistów.

Rozmiar koca: 178 cm (długość) X 84 cm (szerokość)

Częstotliwość: 50 Hz-60 Hz

Temperatura jest regulowana w zakresie (25-75 stopni Celsjusza), a sesje można zaprogramować na maksymalnie jedną godzinę. Możesz oddzielnie dopasować górną część tułowia i korpusu do swoich upodobań.

CZYSZCZENIE

Po prostu użyj chusteczki antybakteryjne lub stwórz własny roztwór z octem, wodą i ulubionym olejkiem eterycznym.

UWAGI

1. Proszę nie rozmontowywać sprzętu ani nie próbować wykonywać innych czynności, które nie zostały wskazane w naszej instrukcji, wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez serwis.
2. Nie należy montować ani obsługiwać tego sprzętu pobliżu wody lub gdy masz mokre ręce. Należy trzymać w suchym miejscu.
3. W przypadku wystąpienia zdarzeń z poniższych punktów prosimy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i zgłosić awarię do serwisu
 - a) Sprzęt zalany cieczą
 - b) Urządzenie ma nietypowy zapach, dymiący lub głośny i silny hałas
 - c) Kabel jest zniszczony.
 - d) Sprzęt spadł i jest uszkodzony
4. Prosimy o przechowywanie i użytkowanie sprzętu z dala od dzieci.
5. Po użyciu wyciągnij przewód zasilający dla własnego bezpieczeństwa.
6. Nie wkładaj niczego do gniazda urządzenia, w przeciwnym razie może to spowodować pożar lub uszczerbek na zdrowiu. Jeśli coś dostanie się do urządzenia, nie wyjmuj tego samodzielnie, skontaktuj się z naszą niezwłocznie z naszą firmą.
7. Proszę nie stawiać sprzętu na niczym, co nie stoi stabilnie, tak aby uniknąć przewrócenia się lub uszkodzenia sprzętu.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Nie zaleca się naprawy sprzętu na własną rękę. Każdorazowo należy skontaktować się z producentem i poddać towar ocenie i ewentualnej naprawie wykwalifikowanej osobie.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

KONTAKT

Enzo Polska

ul. Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice

Telefon: +48 32 555 04 75

E-mail: sklep@enzopolska.pl

Godziny pracy:

• Pon – czw: 7-15

• Piątek: 7-14

Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do zwykłych odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów elektronicznych. Dla informacji o lokalizacjach i przepisach, zalecamy kontakt z lokalnymi instytucjami. Nasz produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych (CE 0124), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość.

