


URZĄDZENIE DO MASAŻU SZYI

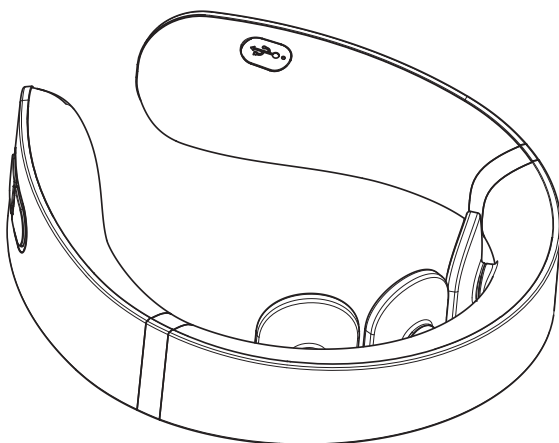

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**UWAGA:**

Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z załączoną instrukcją


Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Jesteśmy przekonani, że nasz produkt zapewni Ci wiele satysfakcji. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał i zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem

Serwis posprzedażowy:
biuro@mardil.pl

ZAWARTOŚĆ

Sprawdź czy wszystkie elementy zestawu znajdują się w opakowaniu


- A** Urządzenie do masażu

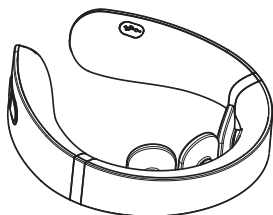


- C** Pilot



- B** Kabel do ładowania

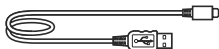



- D** Instrukcja obsługi

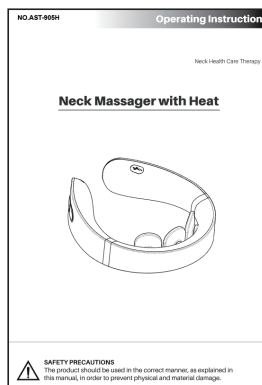

OPIS PRODUKTU

2.3 Elementy urządzenia



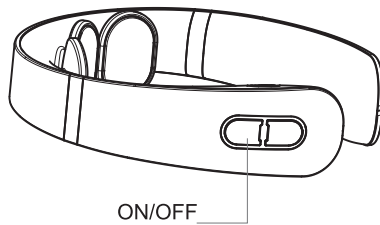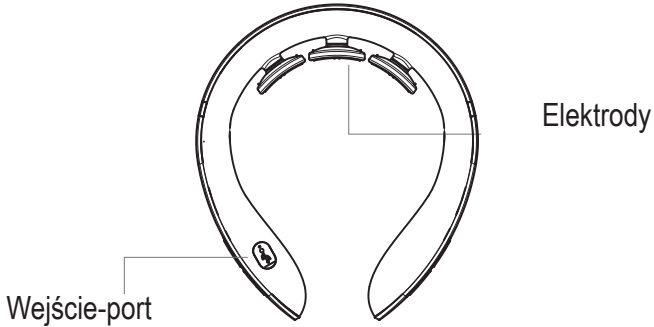


2.3.1 Jednostka główna




2.4 Panel i klawiatura



OPIS FUKCJI PILOTA

Przycisk	Opis funkcji	Logo
Przycisk przełączania	Najpierw włącz urządzenie do terapii karku, naciskając przycisk zasilania. Następnie naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie, aby rozpocząć obsługę. (Pilot nie może włączyć urządzenia głównego,	
Prawy/Lewy przycisk	Naciśnij przycisk „>” lub „<”, aby wybrać tryb impulsu, poziom nagrzewania, czas trwania lub intensywność impulsu.	 
Przycisk zmniejszenia/zwiększenia	Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby zwiększyć lub zmniejszyć tryby impulsów oraz poziomy ich intensywności. Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziomy nagrzewania. Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas. Domyślny czas to 10 minut, a możliwy zakres regulacji wynosi 5–30 minut.	 

- Po włączeniu masażera poprzez przytrzymanie przycisku zasilania przez 2–3 sekundy, możesz obsługiwać go za pomocą pilota. Ponieważ pilot wykorzystuje technologię podczerwieni, upewnij się, że jest skierowany bezpośrednio na masażer karku, aby działał prawidłowo.
- Po włączeniu zasilania domyślnie uruchamiany jest tryb automatyczny, który podczas używania powoduje mrowienie skóry.
- Podczas zmiany trybów intensywność resetuje się do zera. Dostosuj ją ponownie do własnego poziomu komfortu.
- Ze względów bezpieczeństwa początkowa intensywność impulsu elektrycznego jest ustawiona nisko. Jednak zwiększenie jej do poziomu 15 powinno zapewnić wyraźnie odczuwalny impuls.

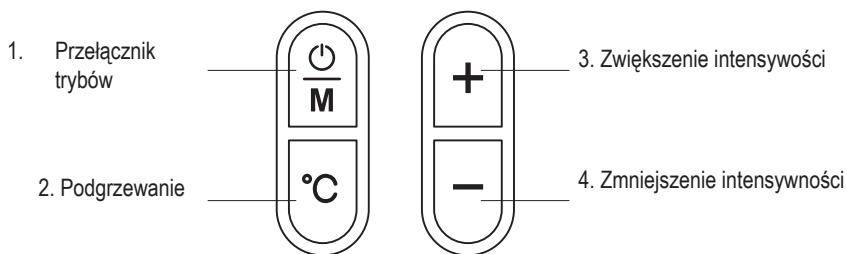

1. Długie naciśnięcie przelącznika trybu „1” włącza/wyłącza urządzenie, krótkie naciśnięcie zmienia tryby; dostępnych jest 10 trybów. Pierwszy tryb „01” to tryb automatyczny. (Gdy niebieska dioda miga, produkt znajduje się w trybie czuwania. Po aktywowaniu trybu impulsów lub funkcji grzania, niebieska dioda świeci się stale.)



2. Naciśnij przycisk trybu „2 podgrzewanie”, aby zwiększyć poziom nagrzewania. Dostępne są 3 poziomy grzania. Każde naciśnięcie zwiększa poziom o 1, a czwarte naciśnięcie wyłącza funkcję grzania. (Gdy tryb grzania jest włączony, dioda kontrolna świeci na żółto.)

3. Naciśnij „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom intensywności. Dostępnych jest 50 poziomów intensywności. (Zmiana trybu powoduje reset intensywności do 0.)

Wskazówki: Gdy na jednostce głównej świeci się czerwona dioda ładowania, oznacza to, że trwa ładowanie. Gdy dioda świeci na niebiesko, ładowanie zostało zakończone. (Czerwona dioda pełni wyłącznie funkcję wskaźnika ładowania i nie służy jako sygnał ostrzegawczy.)

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Jak poprawnie założyć urządzenie

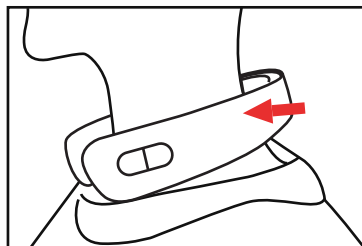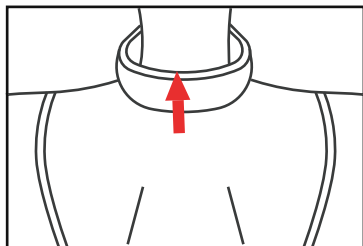

2. Przed użyciem najpierw zwilż skórę w okolicy kręgosłupa szyjnego wilgotnym ręcznikiem, a następnie załóż urządzenie na szyję tak, aby elektroda przylegała do skóry w okolicy kręgosłupa szyjnego. Następnie dostosuj pozycję urządzenia, włącz zasilanie i ustaw odpowiednią intensywność oraz tryb masażu.

3. Przytrzymaj





przez 2–3 sekundy, aby włączyć urządzenie (usłyszysz głos „Di”).

Uwaga: Po włączeniu masażera karku włącz najpierw pilota. Nie włączaj pilota w pierwszym kroku.

Po włączeniu urządzenia domyślnym ustawieniem jest tryb „Impuls”.

Wciśnij "  " "  " "Przycisk do zwiększania/zmniejszania poziomów intensywności


Wciśnij "  " "  " "Przycisk do wyboru trybu impulsu, poziomu nagrzewania oraz czasu trwania.

5. Domyślny czas wynosi 10 minut, można go zwiększać lub zmniejszać. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

6. Naładuj urządzenie, podłączając kabel USB do adaptera spełniającego normy dla sprzętu gospodarstwa domowego (wyjście: 5V, 1–2A) lub do portu USB w komputerze.

7. Pełne naładowanie urządzenia trwa 3–4 godziny. Urządzenie można używać przez 60–70 minut z włączoną funkcją grzania. Bez funkcji grzania można go używać przez tydzień.

8. Instrukcja użytkowania

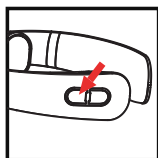


Włącz masażer
terapii karku




Przed założeniem
zwilż szyję




Nałóż masażer

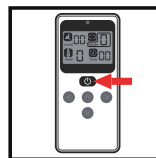


Włącz urządzenie
używając pilota

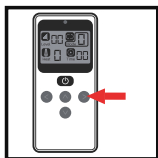

Wybierz tryb impulsu,
czas, poziom
nagrzewania i
intensywność.

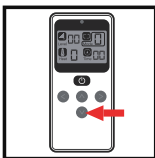

Regulacja oraz
wyłączenie trybu
impulsu, czasu,
nagrzewania i
intensywności.

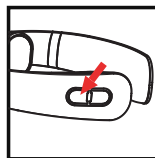

Wyłącz urządzenie

UWAGA:

- Zwilż skórę w okolicy kręgosłupa szyjnego wilgotnym ręcznikiem.
- Należy używać baterii posiadających znak CE.
- Gdy diody wskaźnika świecą słabo lub odczuwasz słabą stymulację, może to oznaczać niski poziom baterii.
- Pilot wykorzystuje sygnały podczerwieni, należy skierować go bezpośrednio na urządzenie, aby działał prawidłowo.

OPIS TRYBÓW MASAŻU

	Tryb	Działanie
1	Ugniatanie	Tkanki głębokie, naczynia krwionośne i nerwy otrzymują skuteczną stymulację, która może rozluźnić głębokie mięśnie i ścięgna. Zapobiega zeszczywnieniu stawów i więzadeł, aktywuje meridiany oraz wzmacnia metabolizm tkanek głębokich, co pomaga w eliminowaniu bólu, drętwienia i zastoju. Stosowane głównie przy przeciążeniach mięśni, reumatyzmie, przewlekłych urazach i zastojach krwi.
2	Szybkie ugniatanie	Tkanki głębokie, naczynia krwionośne i nerwy otrzymują skuteczną stymulację, która może rozluźnić głębokie mięśnie i ścięgna. Zapobiega zeszczywnieniu stawów i więzadeł, aktywuje meridiany oraz wzmacnia metabolizm tkanek głębokich, co pomaga w eliminowaniu bólu, drętwienia i zastoju. Stosowane głównie przy przeciążeniach mięśni, reumatyzmie, przewlekłych urazach oraz zastojach krwi.
3	Oklepywanie	Poprawia krążenie krwi, usuwa uczucie ciężkości, eliminuje nagromadzenia i zastoje, łagodzi zeszczywnienia, rozluźnia mięśnie i łagodzi ból. Redukuje zmęczenie mięśni.
4	Naciskanie	Eliminuje nagromadzenie gazów, rozluźnia mięśnie i pobudza krążenie krwi, łagodzi obrzęki i ból. Stosowane w celu eliminacji bólu mięśniowego i zastoju krwi.
5	Ciągłe oklepywanie	Poprawia krążenie krwi, usuwa uczucie ciężkości, eliminuje nagromadzenia i zastoje, łagodzi zeszczywnienia, rozluźnia mięśnie i łagodzi ból. Redukuje zmęczenie mięśni.
6	Oklepywanie młoteczkowe	Wibracja mięśni, stosowana w celu stymulacji włókien mięśniowych i nerwów oraz usunięcia zastoju krwi spowodowanego urazem. Poprawia krążenie krwi, łagodzi zmęczenie, ból mięśni oraz drętwienie nerwów.
7	Oklepywanie uderzeniowe	Wibracja mięśni, stosowana w celu stymulacji włókien mięśniowych i nerwów oraz usunięcia zastoju krwi spowodowanego urazem. Poprawia krążenie krwi, łagodzi zmęczenie, ból mięśni oraz drętwienie nerwów.
8	Shiatsu	Udrożnia kanały energetyczne, harmonizuje pracę żołądka, eliminuje zastój krwi i nagromadzenia, pobudza mózg i ożywia umysł.
9	Ugniatanie wałkujące	Tkanki głębokie, naczynia krwionośne i nerwy otrzymują skuteczną stymulację, która może rozluźnić głębokie mięśnie i ścięgna. Zapobiega zeszczywnieniu stawów i więzadeł, aktywuje meridiany oraz wzmacnia metabolizm tkanek głębokich, co pomaga w eliminowaniu bólu, drętwienia i zastoju. Stosowane głównie przy przeciążeniach mięśni, reumatyzmie, przewlekłych urazach oraz zastojach krwi.

Wskazówki:

Używaj jednocześnie z funkcją impulsów i ogrzewania, aby uzyskać lepszy efekt.

Przed użyciem naciśnij przycisk włączania/wyłączania na urządzeniu, a następnie włącz pilota, aby rozpocząć obsługę.

Czyszczenie i konserwacja

1. Jednostka główna

Przed użyciem oczyść poduszkę na szyję oraz skórę użytkownika wilgotną, czystą szmatką. Po zakończeniu używania wyłącz urządzenie i przetrzyj jednostkę główną suchą, miękką szmatką lub ręcznikiem. Do czyszczenia silikonowej części masażera najlepiej używać wilgotnej chusteczki. W przypadku mocnego zabrudzenia można delikatnie przetrzeć ją niewielką ilością alkoholu medycznego (ok. 75%).

Uwaga:

Do codziennego czyszczenia stosuj neutralne środki i miękką szmatkę. Nie używaj środków żrących, nie mocz urządzenia w wodzie ani go nie płucz.

Jeśli po naciśnięciu przycisku jasność diody LED pilota znacznie spada lub działa tylko przy skierowaniu na czerwone okienko odbiorcze w urządzeniu, oznacza to, że bateria jest słaba i należy ją wymienić na nową.

2. Bateria pilota

Wymień na tę samą baterię (producent zaleca 2 x AAA (1,5 V) baterie alkaliczne).

Uwaga: Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych. Utylizuj baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z materiałami specjalnymi (np. w punktach zbiórki).

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego czuję mrowienie lub „porażenie prądem” w szyi podczas używania funkcji impulsów?

- Jest to spowodowane suchą skórą w okolicy szyi. Aby masażer dobrze przylegał do skóry i działał prawidłowo, zalecamy przed użyciem zwilżyć skórę szyi wilgotnym ręcznikiem. Intensywność impulsów elektrycznych można regulować od słabej do silnej – wybierz poziom odpowiedni dla siebie. Jeśli odczuwasz dyskomfort, spróbuj innego trybu masażu.

2. Dlaczego pojawia się wysypka na skórze szyi?

- Wysypka może wystąpić przy używaniu funkcji impulsów, jeśli skóra jest sucha lub masażer nie przylega dokładnie do szyi. Zalecamy zwilżyć skórę szyi wilgotnym ręcznikiem, aby urządzenie dobrze przylegało. Wysypka zwykle znika po 1–2 dniach.

3. Czy masażer straci elastyczność po długim użytkowaniu?

- Główna część masażera wykonana jest z modyfikowanego tworzywa PC/ABS oraz wysokiej wytrzymałości elastycznego plastiku. Urządzenie wytrzymuje rozciąganie nawet ponad 2000 razy bez utraty elastyczności, więc nie traci właściwości po wielokrotnym użyciu.

4. Czy pilot można wymienić?

- Tak, oferujemy usługę wymiany pilota. Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: mardil@mardil.pl

5. Mam dużą szyję – czy masażer będzie pasować? Jaka jest długość wewnętrzna urządzenia?

- Nasz masażer do szyi został zaprojektowany ergonomicznie, aby pasował do różnych rozmiarów szyi. Elementy masażera wykonano z wysokiej jakości gumowanego materiału, który skutecznie chroni szyję i zapewnia komfort podczas użytkowania.

6. Ile razy dziennie można używać masażera i jak długo każdorazowo?

- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją – maksymalnie 50 minut dziennie, najlepiej w sesjach po 25 minut. Pomoże to skutecznie rozluźnić mięśnie szyi i złagodzić ból.

7. Nie używam masażera przez długi czas – dlaczego bateria się rozładowała?

- Urządzenie zużywa energię również w trybie czuwania, dlatego zalecamy utrzymywanie go w pełni naładowanym.

W przypadku innych problemów prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta chętnie udzielimy pomocy

Przewodnik bezpieczeństwa

Przed użyciem masażera do terapii szyi, Model: AST-905H, przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Pomoże Ci to lepiej zrozumieć działanie urządzenia. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój stan zdrowia pozwala na korzystanie z masażera, skonsultuj się z fizjoterapeutą, osteopatą lub lekarzem.

Nie używaj urządzenia podczas obfitych dni miesiączki. Masażer AST-905H przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na zdrowych mięśniach szyi.

1.1 Przeznaczenie / Wskazania do użycia

Masażer służy do tymczasowego łagodzenia bólu i zmęczenia mięśni szyi spowodowanego ćwiczeniami lub codziennymi czynnościami domowymi i zawodowymi.

1.2 Specjalne grupy osób

- Masażer AST-905H przeznaczony jest dla dorosłych, nie dla dzieci.
- Kobiety w ciąży, kobiety w trakcie miesiączki, osoby z wrażliwą skórą, chorobami serca, nieprawidłowym ciśnieniem krwi, nowotworami, schorzeniami układu krążenia lub ostrymi chorobami. Osoby z takimi dolegliwościami/schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

1.3 Przeciwwskazania

Niektóre osoby mogą korzystać z masażera AST-905H tylko po konsultacji lekarskiej, w przeciwnym razie istnieje ryzyko urazu lub dyskomfortu fizycznego:

- Pacjenci z rozrusznikiem serca, wszczepionym defibrylatorem lub innymi wszczepionymi metalowymi bądź elektronicznymi urządzeniami. Użycie masażera w tym przypadku może spowodować porażenie prądem, oparzenia, zakłócenia elektryczne lub nawet zagrożenie życia.
- Pacjenci z niezdiagnozowanymi zespołami bólowymi.
- Pacjenci z wrażliwą skórą, chorobami serca, nieprawidłowym ciśnieniem krwi, nowotworami, schorzeniami naczyń mózgowych, chorobami ostrymi

lub osoby, które powinny skonsultować się z lekarzem.

- Kobiety w ciąży lub w trakcie miesiączki.
- Niemowlęta oraz dzieci, które nie potrafią samodzielnie wyrazić swoich odczuć.

1.4 Ostrzeżenia

NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli należysz do grupy osób wrażliwych. Urządzenie może spowodować zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca u niektórych osób.
- Jeśli posiadasz wszczepione urządzenia medyczne, takie jak rozrusznik serca, defibrylator lub inne metalowe bądź elektroniczne implanty. Użycie urządzenia w takim przypadku może spowodować porażenie prądem, oparzenia, zakłócenia elektryczne lub zagrożenie życia.
- Nie stosuj jednocześnie z urządzeniami medycznymi podtrzymującymi życie, takimi jak sztuczne serce i płuca, ani w połączeniu z innym sprzętem medycznym, np. elektrokardiografem.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu elektronicznego monitorującego (np. monitory serca, alarmy EKG), ponieważ może on nie działać prawidłowo podczas pracy masażera elektrycznego.
- Nie stosuj na otwarte rany, wysypki, obrzęki, zaczerwienione, zakażone lub zapalne obszary skóry (np. zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki), ani w pobliżu zmian nowotworowych.
- Nie używaj urządzenia na obszarach skóry pozbawionych normalnego czucia. Nie stosuj na przeciwległych stronach głowy, ponieważ wpływ stymulacji na mózg w tym przypadku jest nieznany.
- Jeśli ból nie ustępuje, nasila się lub utrzymuje się dłużej niż pięć dni, przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
-
- Stymulacji nie należy stosować przez głowę ani w poprzek głowy, bezpośrednio na oczy, na usta, na przednią część szyi (szczególnie w okolicy zatoki szyjnej), ani przy elektrodach umieszczonych na klatce piersiowej i górnej części pleców, które krzyżują się z sercem. Stosowanie elektrod w pobliżu klatki piersiowej może zwiększać ryzyko migotania komór.

- Istnieje możliwość zakłóceń elektromagnetycznych lub innych. Jeśli urządzenie jest używane w bliskiej odległości (np. 1 m) od sprzętu do terapii krótkofalowej lub mikrofalowej, może dojść do niestabilności działania stymulatora.

2. NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

- Kobiety w ciąży – bezpieczeństwo stosowania stymulacji elektrycznej w ciąży nie zostało ustalone.
- Dzieci i niemowlęta – urządzenie nie było testowane pod kątem użycia u dzieci.
- Osoby, które nie są w stanie wyrazić swoich myśli lub zamiarów.
- Pacjenci z rozrusznikiem serca, wszczepionym defibrylatorem lub innymi wszczepionymi metalowymi czy elektronicznymi urządzeniami. Użycie w takich przypadkach może spowodować porażenie prądem, oparzenia, zakłócenia elektryczne lub zagrożenie życia.
- Pacjenci z wrażliwą skórą, chorobami serca, nieprawidłowym ciśnieniem krwi, nowotworami, chorobami naczyń mózgowych, chorobami ostrymi lub osoby wymagające konsultacji lekarskiej.
- Pacjenci z ciężką niedokrwistością kończyn.

3. NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

Podczas kąpieli lub prysznicu.

Podczas snu.

Podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn lub wykonywania innych czynności, w których stymulacja elektryczna może stwarzać ryzyko urazu.

4. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ELEKTROD / PODUSZEK STYMULUJĄCYCH

- Jeśli po użyciu urządzenia wystąpi podrażnienie skóry lub zaczerwienienie, przerwij stosowanie w tym obszarze, aż skóra wróci do normalnego stanu.

SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, JEŚLI:

- Masz jakiegokolwiek poważne schorzenia lub urazy niewymienione w tej instrukcji.
- Przyjmujesz insulinę z powodu cukrzycy.
- Używasz urządzenia jako elementu programu rehabilitacji.
- Masz skłonność do wewnętrznych krwawień po urazach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczujesz dyskomfort lub pojawią się nietypowe objawy — natychmiast przerwij terapię i skonsultuj się z lekarzem przed wznowieniem użytkowania.
- Kurz może wpływać na działanie urządzenia — czyść je w razie potrzeby suchą, miękką ściereczką.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowe użytkowanie może zmniejszyć skuteczność działania.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem niemowląt, dzieci i zwierząt — połknięcie lub zadławienie się małymi elementami może być niebezpieczne lub śmiertelne.
- Stosuj wyłącznie akcesoria zatwierdzone lub rekomendowane przez producenta. Użycie nieautoryzowanych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- Jeśli masz alergię na materiały plastikowe, nie używaj tego urządzenia.
- Uważaj na długie przewody — istnieje ryzyko owinięcia przewodu wokół szyi i uduszenia.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka lub pod prysznicem — może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności
- Podczas zabiegu upewnij się, że wszystkie metalowe przedmioty przewodzące prąd, takie jak naszyjniki, paski, pierścionki itp., znajdują się z dala od elektrod.
- Jeśli używasz akumulatorowych baterii 1,5 V, korzystaj wyłącznie z ładowarki posiadającej certyfikat CE. Nigdy nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do ładowarki ani do innych urządzeń zasilających.
- Jednoczesne podłączenie użytkownika do urządzeń chirurgicznych o wysokiej częstotliwości może spowodować oparzenia w miejscu działania elektrod oraz uszkodzenie urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w obecności łatwopalnych mieszanek gazów anestetycznych, sprężonego tlenu lub podtlenku azotu.
- Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub odczuwasz dyskomfort podczas użycia:
- Natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.
- Nie używaj urządzenia do żadnych innych celów niż określone w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia w trakcie noszenia innych urządzeń elektronicznych — może to spowodować ich uszkodzenie lub zakłócenia pracy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu telefonu komórkowego — może to powodować nieprawidłowe działanie.
- Nie zaginaj ani nie ciągnij za końcówkę przewodu.

Dodatkowe wskazówki:

- Wymień przewód, jeśli jest uszkodzony lub przerwany.
- Nie wrzucaj baterii do ognia — mogą eksplodować.
- Zaprześć używania urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek zmiany w jego działaniu.
- Utylizuj urządzenie, baterie i podzespoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewłaściwa utylizacja może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska.

Reakcje niepożądane














- Pod elektrodami stymulującymi mogą wystąpić podrażnienia skóry lub oparzenia.
- Podczas lub po użyciu stymulacji elektrycznej w okolicy oczu, głowy lub twarzy mogą pojawić się bóle głowy lub inne bolesne odczucia.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpią jakiegokolwiek reakcje niepożądane, należy natychmiast przerwać terapię i skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy stosować urządzenia na tym samym obszarze przez dłuższy czas (ponad 60 minut w jednej sesji), ponieważ może to powodować zmęczenie i ból mięśni w tej okolicy.

SPECYFIKACJA

<p>Źródło zasilania</p>	<p>Jednostka główna Power Adaptor: Input: 100~240Vac, 50/60Hz, 0.2A; Output: 5Vdc, 1A Battery: 3.7Vdc, 900mAh</p>	<p>Pilot: Battery: 3Vdc, AAA x 2 Unit Input: 5Vdc, 1A</p>
<p>Metoda izolacji prądu sieciowego</p>	<p>Type BF Applied Part</p>	
<p>Prąd upływu do pacjenta</p>	<p>Comply with IEC 60601-1 and IEC 60601-2-10</p>	
<p>warunki normalne</p>	<p>DC: 0.5µA</p>	
<p>warunki pojedynczej awarii</p>	<p>DC: 0.6µA</p>	
<p>Sredni prąd stały przepływający przez elektrody, gdy urządzenie jest włączone, ale impulsy nie są podawane</p>	<p>< 0.01µA</p>	
<p>Liczba trybów</p>	<p>10</p>	
<p>Liczba kanałów</p>	<p>1</p>	
<p>Poziom intensywności wyjściowej</p>	<p>50</p>	
<p>Czas zabiegu</p>	<p>5-30min</p>	
<p>Waga</p>	<p>Main Unit: AST-905H: 260g</p>	
<p>Wymiary</p>	<p>Main Unit: AST-905H: 166x155.9x55.6 mm</p>	
<p>Specyfikacja wyjściowa</p>		
<p>Kształt fali</p>	<p>Pulsed, symmetric, biphasic</p>	
<p>Fala</p>	<p>Rectangular, with interphase interval</p>	
<p>Maksymalne napięcie wyjściowe (+/- 10%)</p>	<p>44V±10% @ 500Ω 80V±10% @ 2KΩ 112V±10% @ 10KΩ</p>	
<p>Maksymalny prąd wyjściowy (+/- 10%)</p>	<p>88mA±10% @ 500Ω 40mA±10% @ 2KΩ 11.2mA±10% @ 10KΩ</p>	
<p>Ładunek netto na impuls</p>	<p>0µC @ 500Ω</p>	
<p>Maksymalny ładunek fazowy</p>	<p>12.78µ @500Ω</p>	
<p>Maksymalny prąd średni</p>	<p>0.968 mA @500Ω</p>	
<p>Maksymalna gęstość prądu</p>	<p>0.235 mA/cm² @500Ω</p>	
<p>Maksymalna gęstość mocy</p>	<p>1.38 mW/cm² @500Ω</p>	
<p>Cykl impulsu</p>	<p>12.94ms</p>	
<p>Częstotliwość</p>	<p>77.3Hz</p>	
<p>Czas skurczu i relaksacji</p>	<p>Adjustable, due to different modes. Contraction time: 200ms ~ 56s Relaxation time: 0~0.5s</p>	
<p>Dodatkowe funkcje</p>		
<p>Warunki pracy urządzenia</p>	<p>Temperature: 5~40°C, Humidity: 15% - 90%RH, Atmospheric Pressure: 700 hPa to 1 060 hPa</p>	
<p>Warunki przechowywania</p>	<p>Temperature: -25- +70°C, Humidity: <90%RH, Atmospheric Pressure: 700 hPa to 1 060 hPa</p>	

LABEL SYMBOLS

Label symbols are shown in the following table:

1.		Symbol for "SERIAL NUMBER". This symbol shall be accompanied by the manufacturer's serial number.
2.		CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE.
3.		DATE OF MANUFACTURE. This symbol shall be accompanied by a date to indicate the date of manufacture
4.		Shenzhen OSTO Medical Technology Company Limited ADD: No.43, Longfeng road, Xinsheng Community, Longgang street, Longgang district, 518116 Shenzhen city, Guangdong province, China.
5.		The symbol is a compact (not allowed to do). The specific compact is accommodated in or near the text or picture. The drawing means "no disassembly".
6.		The symbol is a sign that is mandatory (something that must be observed). Specific mandatory content in the goods in the near text or picture. The left figure shows "general mandatory"
7.		Collect separately from other household waste
8.		Type BF Applied Part
9.	IP22	Protected from touch by fingers and objects greater than 12 millimeters and protected from water spray less than 15 degrees from vertical.
10.		Symbol for "ATTENTION" Caution! Follow operating instructions! Failure to do so could place the patient or operator at risk.
11.		The meaning of the symbol is for indoor use only
12.		The meaning of the symbol is that the inside of the DC power supply cathode, the outside of the DC power supply negative
13.		Fragile, handle with care
14.		Keep away from rain
15.	LOT	BATCH CODE. This symbol should be accompanied by batch code.
16.	MD	Indicates the item is a medical device

Model number : AST-905H

This equipment belongs to Type BF of Class II according to Clause 5.



Shenzhen OSTO Medical Technology Company Limited
ADD:2104,Unit4,Building2,Zhongxin Longsheng Square, Baolong Street,
Longgang District,518116 Shenzhen City, Guangdong Province.China.

EC REP

Phoenix Medtech GmbH
Koenigsberger Strasse 11, 64839, Muenster Hessen, Germany
Contact: Kevin Han
Tel: +49 6071 4977513
Email: contact@phoenix-medtech.de



Mona
Leszczynowa 8, 62-070 Dabrowka; Poland
Phone: + (48) 607106591
www.fit4med.com