



Rotor rehabilitacyjny to kompaktowy rower do ćwiczeń, który można z łatwością przechowywać, gdy zajdzie taka potrzeba. Rotor stosuje się głównie przy rehabilitacji osób z niedowładem kończyn spowodowanym m.in. wypadkiem bądź udarem. Używany regularnie pobudza krążenie krwi i zwiększa siłę mięśniową. To świetny sposób na umiarkowane ćwiczenia układu sercowo-naczyniowego. Postaw go na stole, aby ćwiczyć ręce lub na podłodze, aby pojeździć na rowerze, nie ruszając się z fotela.

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg.

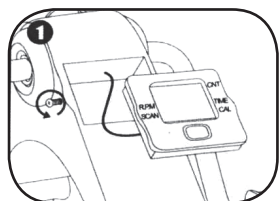


Funkcje monitora


1) Odkręć i wyjmij śruby po obu stronach ekranu, a następnie ostrożnie wyjmij ekran z obudowy.

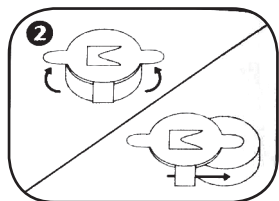

2) Unieś zatrzask baterii znajdujący się z tyłu ekranu i wysuń baterię.


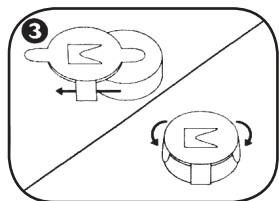


3) Włóż nową baterię 1,5 V AG13 biegunem dodatnim skierowanym w dół i zamknij zatrzask.

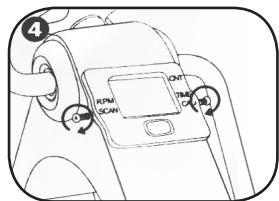

4) Umieść ekran z powrotem w obudowie i przykręć śruby.


Łatwe ustawianie w 2 krokach!

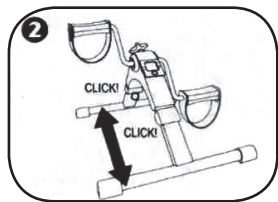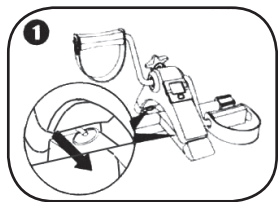


Pociągnij zdecydowanie za pierścieni znajdujący się na połączeniu nóg stelaża.

Funkcje wyświetlacza


Aby włączyć wyświetlacz, naciśnij raz na czerwony przycisk lub zacznij pedałować. Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 4 minutach bezczynności. Wszystkie funkcje wyświetlacza włączają się, gdy zaczniesz pedałować i wyłączają się po zatrzymaniu. Aby je przełączyć, naciśnij czerwony przycisk, aż strzałka wskaże żądaną funkcję.

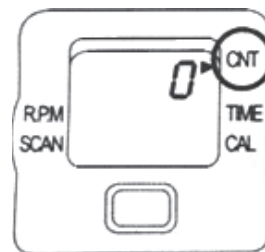


CNT: Liczba wykonanych obrotów

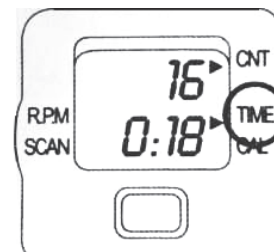


TIME: Czas trwania treningu

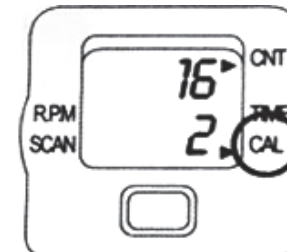

CAL: Szacunkowa liczba spalonych kalorii

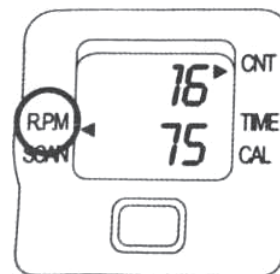

R.P.M. Liczba obrotów na minutę

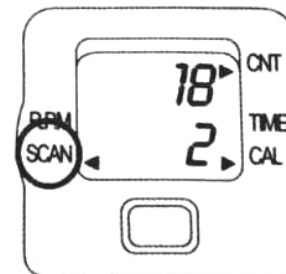

SCAN: Przełączenie (TIME>CNT>RPM>CAL)



Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

