

360° ALL-ROUND CLEANING
ULTRASONIC CLEANER
instrukcje

W200




Środki ostrożności

- Z powodu szkody
Przetwornik ultradźwiękowy
lub pasta do zębów
3. Do not allow metal items to come into direct contact with the stainless steel
alby unikaj czyszczenia
4. Avoid direct eye exposure to UV light—always close the lid during operation.
5. Use only the included or an approved charging cable. Do not operate the
urządzenie podczas ładowania
stymulator serca

Informacja o zasilaczu


Informacja o zasilaczu
Kiedy?
Input Voltage: 5V = 0.5-1A (Type-C)
Using an incompatible charger may cause overheating or reduce product lifespan.

Broguć Czapka Top

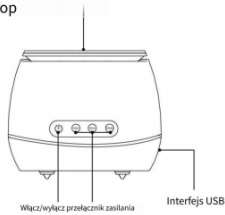

Function Button Instructions

Urządzenie jest...
Tryb delikatny 3 minuty
Mocny
10 minut

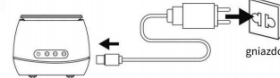

Rozpoczynanie

Usuwanie urządzenia
Przed pierwszym
operacje cordlessly once charged.

Napelnianie zbiornika

Open the lid, place the device on a flat, dry surface, and fill the tank with clean water
proszę o protezę zębów
Tabletka do czyszczenia, jeśli jest potrzebna

3. Umieszczenie retainera
protazy zębowej,
gardły itp.

Instrukcje obsługi

PowerOn/Off

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka
sekund, aby włączyć urządzenie lub wyłączyć je.
Urządzenie włącza się w trybie Gentle Mode
Tryb delikatny jako domyślny tryb, a
także automatycznie włącza się lampka UV.

Przełączanie trybów

Naciśnij przycisk, aby
przełączyć między
trybami: Delikatny-Standardowy-Strong

3 Rozpocznij czyszczenie

Odkryć pokrywke i naciśnij
przycisk zasilania, aby rozpocząć.
Podczas czyszczenia model Pan usłyszeć dźwięk
przebiegi do trybami - jest to
normalne i wynika z wiracji ultradźwiękowych

4. Po czyszczeniu

Urządzenie automatycznie się wyłączy
Wyjąć po zakończeniu czyszczenia
Lampka UV wyłączy się
automatycznie. Proszę aplikować czyszczone
przedmioty pod bieżącą wodą

Technologia i korzyści

This UV Ultrasonic Retainer Cleaner utilizes high-frequency 45 kHz ultrasonic
skutecznie remove debris and buildup from a wide range of items—such as dentures,
aligners, retainers, whitening trays, night guards, toothbrush heads, makeup
bezpieczniejsze alternatywy
manual cleaning without causing damage.