

ZAPPER S5-AUTOMATIC

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI



ZAPPER S5-AUTOMATIC

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. PRZEZNACZENIE I DZIAŁANIE

Generator biofal **Zapper S5-AUTOMATIC** (dalej nazywany: Zapper*) to cyfrowe urządzenie elektroniczne, które zabija chorobotwórcze pasożyty, bakterie i wirusy za pomocą fal elektromagnetycznych działających na zasadzie bio-rezonansu, bez konieczności stosowania medykamentów.

Metoda została odkryta przez d-ra Roya Raymonda Rife'a jeszcze w latach 30-tych XX wieku. Z tego czy innego powodu jego odkrycie pozostaje zapomniane, dopóki dr Hulda Clark nie opublikuje wyników swoich badań w książce „Leczenie wszystkich chorób”, opartej na teoriach dr Rife'a. Zapper umożliwia skuteczne leczenie zarówno ostrych, jak i przewlekłych chorób, w etiologii i patogenezie, których istotną rolę odgrywają infekcje pasożytnicze, bakteryjne i wirusowe.

Z urządzenia można korzystać niezależnie w warunkach domowych, a także w gabinetach fizjoterapii placówek medycznych.

Podczas sesji terapeutycznych pacjenta łączy się z Zapperem za pomocą pary elektrod, które mogą stykać się z obiema rękami lub obiema nogami, a także ukośnie między ramieniem a nogą.

* Nazwa Zapper pochodzi od angielskiego czasownika zap - uderzać, powalać, zabijać, pojęcie zapping jest rozumiane jako proces selektywnego niszczenia organizmów chorobotwórczych przez fale elektromagnetyczne.

2.CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE.

Nr	Parametr	Wartość
1.	Zasilanie	bateria typu 6F22 (6LF22), 9 V
2.	Zużycie	nie większe niż $5,5 \cdot 10^{-3}$ A
3.	Moc wejściowa	nie większa niż 0,05 W
4.	Liczba seansów dla jednej baterii	nie mniej niż 20
5.	Częstotliwość i amplituda sygnału	30 kHz $\pm 1\%$; 9V
6.	Siła prądu	nie większa niż $1 \cdot 10^{-3}$ A
7.	Tryb pracy	Cykliczny, ciągły
8.	Liczba cykli działania	3
9.	Całkowita długość trwania seansu	61 min $\pm 5\%$
10.	Klasa ochrony	II
11.	Warunki klimatyczne użytkowania: - temperatura otoczenia; - relatywna wilgotność powietrza;	18 – 24 °C 65 – 80 % przy 20°C
12.	Masa wyrobu	240 g

3. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

Przed użyciem należy rozpakować urządzenie. Jeśli jest wniesione z otoczenia o niskiej temperaturze, musi pozostać w temperaturze pokojowej przez co najmniej godzinę przed włączeniem, aby zapobiec uszkodzeniu lub usterce.

Gniazdo baterii znajduje się z tyłu urządzenia (rysunek 1). Nacisnąć (1) i wyciągnąć (2) osłonę gniazda. Wyjmij zacisk baterii (Rysunek 2) i podłącz nową baterię 9V 6F22 lub 6LF22. Należy być ostrożnym przy umieszczaniu baterii. Ma szeroką elektrodę ujemną i węższą elektrodę dodatnią (rys. 3). Klips do baterii ma taki sam kształt i rozmiar styków. Skieruj baterię na zacisk, jak pokazano na rysunku 4 i naciśnij, aby zablokować (rys.5).

Włóż baterię do gniazda baterii (Rysunek 6) i dociśnij. Nałóż pokrywę (rys. 7) i naciśnij ją w kolejności pokazanej na rys. 8.



rys.1



rys.2



rys.3



rys.4



rys.5



rys.6



rys.7



rys.8

Jakość baterii określa liczbę procedur leczniczych, które mogą zostać przeprowadzone do pełnego wyczerpania jej objętości. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu i późniejszym uszkodzeniom.

Na rys. 9, zostały pokazane funkcje sterowania i wskaźniki.



Rys. 9 Panel przedni urządzenia

1 – wskaźnik kontaktu z elektrodami; 2 – wskaźnik cyklu;
3 – wskaźnik pauzy; 4 – włącznik/wyłącznik; 5 – wskaźnik poziomu baterii.

Urządzenie włącza się poprzez naciśnięcie przycisku 4 (I/O). Jeżeli bateria została umieszczona prawidłowo, zapali się wskaźnik znajdujący się na przycisku, pokazujący, że urządzenie jest włączone i będzie słyszalny krótki przerywany sygnał dźwiękowy. Wskaźnik kontaktu z elektrodami 1(**ELECTRODES**) będzie świecić nieprzerwanie.

Chwyć elektrody dwiema rękami lub chwyć jedną elektrodę jedną ręką i umieść gołą stopę przeciwnej nogi na drugiej elektrodzie. Jeśli kontakt elektryczny z elektrodami jest dobry, wskaźnik 1 „**ELECTRODES**” zgaśnie, a wskaźnik cyklu 1 zacznie migać, wskazując, że urządzenie pracuje w pierwszym cyklu. Jeśli w kontakcie z elektrodami urządzenie nie przejdzie automatycznie w tryb pierwszego cyklu, oznacza to, że skóra jest sucha i nie przewodzi wystarczająco prądu. Aby poprawić kontakt, należy delikatnie nawilżyć skórę dłoni.

Siła przepływu prądu jest ograniczona do bezpiecznej wartości. Podczas sesji nie wystąpi podrażnienie skóry ani skurcze mięśni. Jest to możliwe tylko u osób o zwiększonej wrażliwości.

Trzymaj elektrody do końca cyklu pracy. Po zakończeniu cyklu usłyszysz krótki przerywany sygnał dźwiękowy. Wskaźnik cyklu 1 zgaśnie, a wskaźnik 3 „**PAUSE**” zacznie migać. Podczas przerwy możesz pozostawić elektrody. Po upływie pauzy rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący na rozpoczęcie drugiego cyklu i tak dalej.

ELEKTRODY NIE MOGĄ SIĘ STYKAĆ! PROWADZI TO DO SZYBKIEGO WYCZERPANIA BATERII

Wskaźnik stanu baterii 5 (**Batt Low**) świeci, gdy jest poniżej poziomu krytycznego i należy ją wymienić na nową. Podświetlenie wskaźnika podczas sesji nie oznacza, że sesja powinna zostać zakończona. Pozostałe naładowanie baterii wystarczy, aby kontynuować pracę do końca sesji. Na następną sesję konieczna jest wymiana baterii na nową.

Urządzenie ma trzy cykle robocze trwające siedem minut, oddzielone dwiema dwudziestominutowymi przerwami:

Cykl 1 7 min	Pauza 1 20 min	Cykl 2 7 min	Pauza 2 20 min	Cykl 3 7 min
-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Zabieg – 61 min

Po zakończeniu pierwszego cyklu urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, wskaźnik pierwszego cyklu zgaśnie, a wskaźnik 3 („Pause”) zaświeci. W ciągu kolejnych dwudziestu minut możesz zostawić elektrody na boku i poczekać. Gdy elektrody nie stykają się z ciałem, wskaźnik 1 („Electrodes”) nie włączy się.

Po dwudziestu minutach rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący na rozpoczęcie drugiego cyklu. Wskaźnik 3 („Pause”) gaśnie, a wskaźnik drugiego cyklu miga. Trzymaj elektrody. Jeśli wskaźnik 1 („**Electrodes**”) miga, nawilż skórę rąk, aby poprawić kontakt.

Pod koniec drugiego cyklu nastąpi druga przerwa i tak dalej. Po zakończeniu trzeciego cyklu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a następnie urządzenie wyłączy się automatycznie.

Jeśli musisz na chwilę przerwać sesję, nie musisz wyłączać urządzenia. Po prostu puść elektrody. Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gotowości. Możesz przerwać działanie urządzenia podczas każdego cyklu bez przerywania naliczonego czasu. Aby kontynuować pracę, wystarczy ponownie podłączyć elektrody.

Możesz wyłączyć urządzenie podczas pracy, naciskając przycisk 4 (I / O). Wyłączenie urządzenia zresetuje dotychczas zarejestrowane cykle. Następnym razem, gdy sesja zostanie uruchomiona, rozpocznie się od pierwszego cyklu.

Aby uzyskać efektywne przeprowadzenie sesji, wybierz odpowiednie, spokojne miejsce - łóżko, sofę lub fotel, z dala od hałasu i źródeł promieniowania elektromagnetycznego (telewizja, mikrofalówka, telefony komórkowe), które mogłyby spowodować awarię urządzenia. Nie noś odzieży z syntetycznych materiałów. Tworzą one statyczne ładunki elektryczne, które zmniejszają efekt procedur.


4. PRZEBIEG

Czas trwania ekspozycji zależy od ciężkości i czasu trwania choroby i może wynosić od 7 do 28 dni przy codziennych se-

sjach. W razie potrzeby kursy powtarza się po przerwie trwającej dwa do trzech tygodni. Do zaniknięcia objawów!

W celach profilaktycznych przeprowadza się jedną sesję dziennie przez siedem dni. Przy ostrych dolegliwościach sesję można powtarzać 2 -3 razy dziennie przez okres 20-28 dni.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PRZEPROWADZANIA PROCEDUR

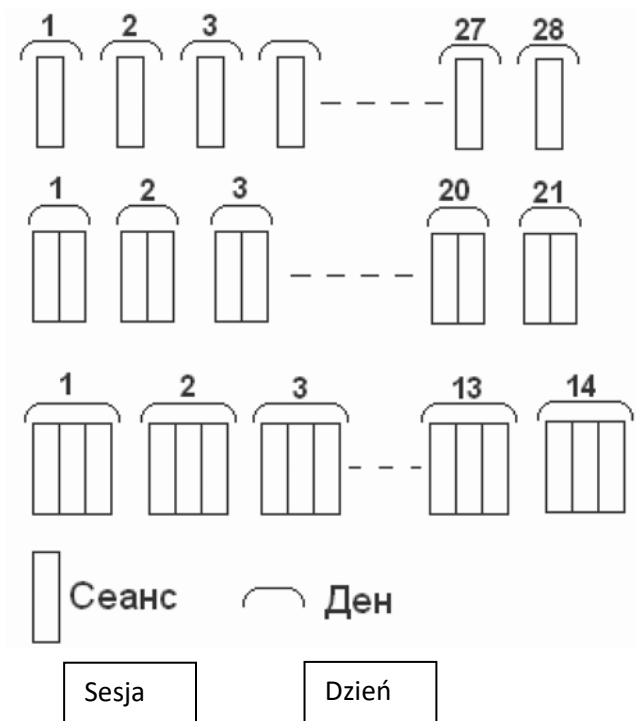

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie zaleca się stosowania Zappera przez kobiety w ciąży i karmiące, dzieci poniżej 5 roku życia i osoby z rozrusznikami serca.

Prawdziwe oczyszczenie organizmu

Działanie **Zapper S5-AUTOMATIC** umożliwia osiągnięcie doskonałych rezultatów w krótkim czasie. Warunkiem maksymalnej wydajności i wsparcia ciała podczas użytkowania urządzenia jest spełnienie kilku warunków:

1. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia.

2. Maksymalny efekt oczyszczenia organizmu i wspierania procesów metabolicznych osiąga się poprzez połączenie i zastosowanie urządzenia do srebrnej wody i mieszanki siedmiu ziół (piołun, orzech i goździk, ostropest plamisty, mniszek lekarski, oregano, stwórzyszek pospolity). Między przyjęciem srebrnej wody i mieszanki siedmiu ziół powinna nastąpić przerwa 30-40 minut. Jest to gwarancja usuwania martwych pasożytów z organizmu i wspierania wewnętrznej równowagi w działaniu dobroczynnej mikroflory.

3. Podczas leczenia ogranicz żywność zawierającą gluten, drożdże, cukier biały i białko zwierzęce. Produkty mleczne i mięsne, jeśli nie można ich ograniczyć, muszą zostać poddane obróbce cieplnej (gotowanie, pieczenie).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ile procedur wykonuje się codziennie i przez jaki okres?

Wykonuje się od 1 do 3 procedur, sesji codziennie przez 15-30 dni. Następnie następuje przerwa, a jeśli to konieczne, powtarza się procedury, aż objawy znikną.

W przypadku profilaktycznego korzystania z urządzenia wystarczy 1-2 sesje na tydzień.

Pożądane jest, aby urządzenie było używane przez całą rodzinę (nawet dzieci).

Dlaczego jest potrzebny dłuższy okres leczenia?

Urządzenie biorezonans Zapper –S5 AUTOMATIC niszczy wszystkie rodzaje pasożytów za pomocą tylko jednej procedury. Ale grzyb „candida” (nieproszony, ale obecny gość w każdym organizmie !!!), największy wróg człowieka na równi z pasożytami, żyje wewnątrz naszych komórek (w wielu warstwach) i jest niszczone przez długi czas!

Dlatego potrzebny jest 15-30 dniowy okres leczenia, aby całkowicie go zniszczyć / usunąć!

Udowodniono, że oprócz wszelkiego rodzaju problemów zdrowotnych ... Grzyb Candida albicans, nie mniej niż pasożyty, jest główną przyczyną torbieli, guzów i raka!

Czy to prawda, że Zapper S5-AUTOMATIC leczy opisane choroby?

Istnieją tysiące chorób i diagnoz! A przyczyną są pasożyty, wirusy i bakterie. Współczesna i „nowoczesna medycyna” diagnozuje i „leczy objawy”! Prawdziwe lekarstwo polega na wyeliminowaniu przyczyny! Zapper S5- AUTOMATIC usuwa przyczyny chorób, pasożytów, wirusów i bakterii!

A ciało leczy się samo. Po leczeniu usuwa przyczynę. Objawy i choroba również znikają. Bez powodu, bez konsekwencji! Logiczne i proste !!! Wielkie rzeczy są proste !!! Wielkość jest w prostocie!!!

Czy są jakieś skutki uboczne?

NIE, ale możliwe są kryzysy lecznicze!!!

Co oznacza kryzys leczniczy?

Kryzysy lecznicze pokazują, że ciało posiada procesy oczyszczania i gojenia, które są wynikiem masowego niszczenia i wydalania pasożytów i toksyn z organizmu!!! Objawy kry-

zysów leczniczych mogą obejmować nudności, odbijanie, wymioty, biegunkę, wysypki skórne, gorączkę, zmęczenie i inne.

....

Te możliwe kryzysy leczenia należy przyjąć z zadowoleniem, pozytywnie. Cały brud zgromadzony w ciele musi jakoś wyjść. W przeciwnym razie żyjemy z całym tym „bogactwem” w nas. To jest prawdziwe lekarstwo. Zabiegi, które leczą objawy, a NIE pierwotne przyczyny! Są łagodną iluzją i parodią uzdrawiania!!!

Dlaczego, wraz z Zaperr S5-AUTOMATIC, pożądane jest przyjmowanie srebrnej wody i mieszanki siedmiu ziół (piołun, orzech, goździk, ostropest plamisty, mniszek lekarski, oregano, stworzyszek zwyczajny)?

Srebrna woda przygotowana za pomocą urządzenia Dr.Silver pomaga oczyścić organizm z bakterii, toksyn i zanieczyszczeń. Oba urządzenia mają podobne, ale różne właściwości działania. Uzupełniają się, a połączenie dwóch urządzeń (synergia) jest wyjątkowe. Krótko mówiąc, idealna para (yin i yang).

Każde zioło, szczególnie w połączeniu z innymi ziołami, takimi jak siedmioziarniste (piołun, orzech, goździk, ostropest plamisty, mniszek lekarski, oregano, stworzyszek zwyczajny), ma jeszcze silniejszy i wspierający wpływ na cały organizm.

Dlaczego istnieją Zappery, które działają z różnymi częstotliwościami i adapterami? I te, które działają z uniwersalną częstotliwością 30 kHz i baterią 9 V. ?

Na początku swoich badań dr Clark pracowała na różnych częstotliwościach.

Ale oto, co mówi później !!!

Kolejne badania wykazały, że NIE różne częstotliwości zniszczyły wszystkich intruzów. Wydajność była spowodowana dodatnim ustawieniem częstotliwości i faktem, że urządzenie pracowało z BATERIĄ!!!

Przypuszczam, że dodatnia elektryczność zastosowana w dowolnym miejscu na ciele przyciąga ujemnie naładowane obiekty, takie jak pasożyty, wirusy i bakterie. Być może napięcie akumulatora wywiera na nie wpływ i usuwa je z ich umiejscowienia.

Możliwość zniszczenia wszystkich intruzów za pomocą Zapowania / Zappera (tylko w 7 minut) może być naprawdę panaceum! Nie ma potrzeby ustawiania częstotliwości i przechodzenia przez wszystkie częstotliwości kiloherc po kilohercu.

Przy wystarczającym napięciu (5-10 woltów), (czas trwania 7 minut) i częstotliwości (która wynosi między 10 a 30 kHz), każda dodatnia częstotliwość zabija jednocześnie wszystkie pasożyty, bakterie i wirusy.

Wszystkie pasożyty, wirusy i bakterie (giną w ciągu 7 minut przy napięciu 5 woltów) Generowanie dodatnich częstotliwości jest najlepszym i najszybszym sposobem na zabicie patogenów. Fragment książki dr Huldy Clark

Dlaczego Zapper S5-AUTOMATIC działa od ponad 20 lat w ramach schematu dr Clark?

Z jedną uniwersalną częstotliwością 30 kHz i baterią 9 V. ?

Oprócz przestrzegania badań, dowodów i logiki dr Huldy Clark, mamy również osobiste doświadczenie!!!

Bez względu na problem zdrowotny. Nie jesteś w stanie dokładnie wiedzieć, jaki rodzaj pasożyta masz w swoim ciele, aby zniszczyć go z określoną częstotliwością. Z tego prostego powodu, że do dziś we współczesnej medycynie „nie istnieją”, jakiegokolwiek badania przeprowadzone w celu wykrycia obecności określonego pasożyta, wirusa lub bakterii.

Dlaczego nie ma takich badań ?

Na to pytanie może odpowiedzieć każda przeciętna inteligentna osoba!

Nawet jeśli w wyniku niektórych badań (prawie niemożliwe) zostanie wykryty konkretny pasożyt, istnieje wielkie prawdopodobieństwo pominięcia innego. Korzystając z różnych programów i częstotliwości, ryzykujesz brakiem wykrytego pasożyta, wirusa lub bakterii. Pracując z różnymi częstotliwościami lub różnymi programami dla konkretnego pasożyta, niszczysz tylko tego konkretnego pasożyta, ale co dzieje się z innymi pasożytami, wirusami i bakteriami, które nie zostały wykryte i zdiagnozowane?

Być może nieświadomie dr Hulda Clark wykonała kolejną OGROMNĄ pracę dla społeczeństwa. Stworzyła Zappera, który, jak zostało udowodnione przez nią, niszczy wszelkiego rodzaju pasożyty, wirusy i bakterie. Może być używany przez każdego, nawet bez wiedzy w tej dziedzinie. I bez konieczności szukania odpowiedniego pasożyta i częstotliwości, z jaką go niszczyć!!!

Jeszcze raz powtórzmy to, co powiedziała dr Clark!

Kolejne badania wykazały, że NIE różne częstotliwości zniszczyły wszystkich intruzów. Wydajność była spowodowana dodatkim ustawieniem częstotliwości i faktem, że Zapper pracował z BATERIĄ!!!

Przy wystarczającym napięciu (5-10 woltów), (czas trwania 7 minut) i częstotliwości (która wynosi między 10 a 30 kHz), każda dodatnia częstotliwość zabija jednocześnie wszystkie pasożyty, bakterie i wirusy.

Wszystkie pasożyty, wirusy i bakterie (giną w ciągu 7 minut przy napięciu 5 woltów) Generowanie dodatnich częstotliwości jest najlepszym i najszybszym sposobem na zabicie patogenów.

Dlaczego wybrać Zaperr S5- AUTOMATIC – ?

Ponad 20 lat doświadczenia w produkcji innowacyjnych produktów od sprawdzonych inżynierów, bez uszczerbku dla jakości !!! Całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzkiego, ale śmiertelny dla pasożytów, wirusów i bakterii!

Kompaktowy i łatwy w użyciu (AUTOMATYCZNY). Nie jest wymagana znajomość urządzenia!

Łatwo przenośny (240 g). Możesz go zabrać ze sobą wszędzie!

Tysiące zadowolonych klientów!!!

Bezpłatne konsultacje online i dodatkowe wsparcie przez nieograniczony czas przez kompetentnego przedstawiciela! Przystępna cena !!!

Popieramy prośbę dr Huldy Clark, aby technologia była dostępna dla wszystkich bez zbędnych kosztów i spekulacji.

Zaperr S5-AUTOMATIC oprócz pracy nad schematem dr Clarka, który wpływa na zniszczenie wszystkich gatunków, pasożytów, wirusów, bakterii i ma też działanie wspomagające na całe ciało, działając stymulująco na jego układ odpornościowy. Dzięki temu jest bardziej odporny na przyszłe ataki pasożytów. Widocznie zwiększa witalność, poprawia pamięć i aktywność mózgu. Kolejnym pozytywnym działaniem urządzenia jest przyspieszenie metabolizmu na poziomie komórkowym (przemiana materii), co zmniejsza otyłość i nadwagę.

Nasza misja lub dlaczego to robimy?

Pomaganie większej liczbie osób w uzyskiwaniu przydatnych i cennych informacji w celu wzbogacenia ich kultury zdrowotnej. Kultura zdrowia = życie bez chorób!!!

Nie ma nieuleczalnej choroby, jest nieleczony chory!!!

Zdrowie jest w twoich rękach!!!

1. WAŻNE: Zapper S5-AUTOMATIC nie jest certyfikowanym produktem medycznym! W tym sensie urządzenie można sklasyfikować jako urządzenie do indywidualnej stymulacji elektrycznej i użytku domowego. W celu oczyszczenia i zniszczenia pasożytów, wirusów i bakterii. W tym miejscu chcielibyśmy zauważyć, że diagnostyka biorezonansowa nie jest certyfikowanym badaniem lekarskim, PARADOKS! Jednocześnie jest to najdokładniejsza i najbardziej niezawodna diagnoza na świecie z dokładnością do 95% dla stanu wszystkich narządów i układów! Wreszcie, wykrywa obecność dużej liczby, pasożytów, wirusów i bakterii obecnych w ciele! Żadne inne, choć „certyfikowane badanie”, nie zapewnia tak kompleksowej, kompletnej i dokładnej diagnozy!

2. PODSUMOWANIE: Ważne jest, aby zrozumieć i uświadomić sobie następujące; Twoje ciało to jedyny w swoim rodzaju system leczenia. W stanie wyleczyć wszelkie dolegliwości. Ale trzeba mu dać szansę, pomoc i wsparcie. Począwszy od wyeliminowania pierwotnej przyczyny choroby, pasożytów i toksyn! W tym duchu chcielibyśmy powiedzieć jeszcze raz;

Zapper S5-AUTOMATIC – Pomimo wielu zalet i sprawdzonych efektów. NIE LECZY CHOROÓB, ale usuwa przyczyny chorób, a organizm leczy się sam!!!

„Usuń przyczynę, a wtedy choroba minie ”.
Hipokrates

PRZECIWWSKAZANIA! NIE powinien być stosowany przez osoby z rozrusznikami serca, dzieci poniżej 5 roku życia, kobiety w ciąży i karmiące piersią !

Uwagi!!!

Producent / handlowiec stara się publikować na stronie internetowej <http://www.zaper.info/> oraz w tej obszernej broszurze jak najbardziej kompletne, zweryfikowane i wykorzystane osobiście, dokładne informacje. Pomimo dowodów, logiki i faktów Producent / Sprzedawca nie gwarantuje, że informacje

podane na stronie internetowej i tutaj są całkowicie prawdziwe, dokładne, kompletne lub wolne od błędów.

Producent / handlowiec oraz informacje tutaj i na stronie internetowej <http://www.zaper.info/>, a także oferowane przez nią produkty nie mają na celu przepisywania leczenia. Informacje tutaj i na stronie zostały opublikowane w charakterze ogólnym i mają na celu poinformowanie!

Możesz komuś pomóc, pokazując mu właściwą drogę. Ale nie możesz mu pomóc, dopóki sam tego nie podejmie! Przed kontynuowaniem leczenia skonsultuj się z lekarzem!

6. KOMPLET DO DOSTAWY

6.1 Generator bio fal „Zapper” S5-AUTOMATIC – 1 szt.

6.2 Bateria – 1 szt.

6.3 Charakterystyka techniczna i instrukcja użytkowania – 1 szt.

6.4 Opakowanie – 1 szt.

7 WARUNKI GWARANCYJNE

Zgodność z zasadami tej instrukcji leży w interesie użytkownika i jest warunkiem spełnienia warunków gwarancji.

Generator bio fal „Zapper” S5-AUTOMATIC jest wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną TC-GM-12-2010 i jest zgodny z dokumentacją techniczną. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w układzie urządzenia, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich technicznych i funkcjonalnych właściwości urządzenia. Producent, za pośrednictwem dystrybutora, sprzedawcy, zapewnia serwis gwarancyjny przez 24 /dwadzieścia cztery/ miesiące, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków prawidłowego korzystania.

Przy zgłaszaniu roszczenia do urządzenia należy przedstawić kartę gwarancyjną.

W sytuacji, że warunki korzystania nie są spełnione, reklamacja nie jest uwzględniana, a naprawa urządzenia pokrywana

jest przez klienta. Firma nie zaspokaja roszczeń, w przypadku:

- próby usunięcia wad przez osoby nieupoważnione;
- warunki pracy określone w niniejszym „Opisie technicznym i instrukcji obsługi” nie zostały spełnione”;
- uszkodzenia podczas niewłaściwego transportu;
- kupujący nie dostarczył karty gwarancyjnej;
- uszkodzenie jest spowodowane zewnętrznymi czynnikami chemicznymi lub fizycznymi w okresie eksploatacji;
- odchylenia w działaniu urządzenia są wynikiem rozładowania baterii.

Przy zakupie urządzenia upewnij się, że karta gwarancyjna jest poprawnie wypełniona, podając datę zakupu produktu, numer producenta, podpis sprzedawcy i pieczęć firmy. Zachowaj kartę gwarancyjną, która uprawnia cię do bezpłatnej naprawy w okresie gwarancyjnym.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu:
Generator bio fal Zapper” S5-AUTOMATIC
Producent: Idelbulgar Ltd www.poland.zapper.org/

Konsultant:.....

.....

.....

Telefon:.....

.....

.....

Klient:.....

.....

.....

.....

.....

Data:.....

Numer fabryczny:

Adres serwisu: Sofia 1000, ul. Knyaz Boris I nr 162

.....

.....

.....

tel.

.....

.....

Okres gwarancji - 24 miesiące od daty sprzedaży, pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji urządzenia. Gwarancja traci ważność w przypadku wad mechanicznych stwierdzonych podczas niewłaściwego przechowywania i użytkowania, a także prób nieautoryzowanych napraw..

Możliwe są błędy w druku!
Dodatkowe charakterystyki

Intensywność indukcji magnetycznej prądu przemiennego emitowanego przez antenę, μT ;

nr	Miejsce pomiaru	Intensywność indukcji magnetycznej, μT	Dopuszczalny czas przebywania w polu
1.	1 cm od panelu tylnego	0,063	nieograniczony
2.	5,0 cm od panelu	0,052	nieograniczony
3.	10 cm od panelu tylnego	0,026	nieograniczony
4.	20 cm od panelu tylnego	0,016	nieograniczony
5.	30 cm od panelu tylnego	0,010	nieograniczony
6.	50 cm od panelu tylnego	0,009	nieograniczony

WAŻNE!!!!

Aby uzyskać jak najbardziej wyraźny efekt działania pola elektromagnetycznego, aparat należy umieścić bezpośrednio na dotkniętym narzędzie lub miejscu, lub w innym obszarze, w bezpośrednim kontakcie z ciałem, jednocześnie trzymając elektrody! Pole elektromagnetyczne nie działa bez kontaktu z elektrodami!!!!



