

IRYGATOR WATER GENIUS


model: Nr PM-1136

PL


Điękujemy za wybór naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi dla zapewnienia jego bezpiecznej i efektywnej obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Wykaz elementów:

- A) Zbiorniczek
- B) Wskaźnik maksymalnego poziomu wody
- C) Rurka ssąca
- D) Przycisk
- E) Pompka
- F) Wężyk z dyszą

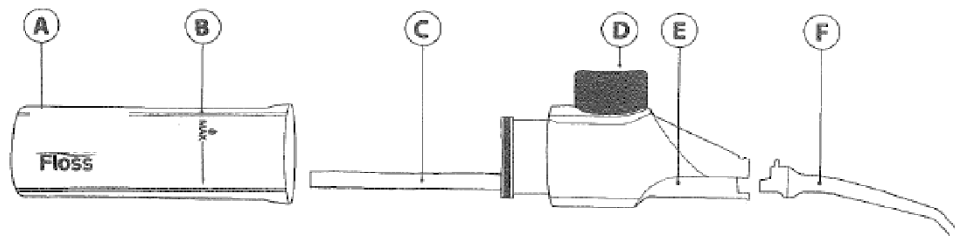

W trakcie używania należy irygator trzymać pionowo. W innym przypadku woda może wyciekać przez szpary na łączeniu zbiorniczka.

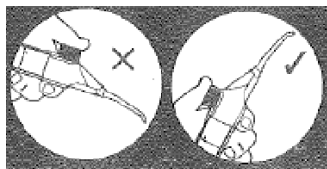

Czynności wstępne:

Przed rozpoczęciem użytkowania oddziel zbiorniczek od urządzenia z pompką i zanurz je w wodzie tak, aby zatopił rurkę ssącą oraz wężyk z dyszą. Naciśnij kilkakrotnie przycisk. Następnie unieś wężyk z dyszą nad poziom wody i ponownie naciśnij przycisk, aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo i wydobywa się z niego strumień wody ze stałą mocą.

Napełnianie zbiorniczka:

1. Ustaw irygator pionowo, dyszą do góry, przekręć delikatnie zbiorniczkiem w lewo, a następnie zdejmij go z pompki.
2. Napełnij zbiorniczek wodą do poziomu maksymalnego (ewentualnie płynem do płukania ust).

Uwaga: Używaj wyłącznie takiego płynu, który ma podobną konsystencję (gęstość) jak zwykła woda.

3. Załóż zbiorniczek, wkładając do niego pompkę i przekręcając w prawo. Wtedy zbiorniczek będzie dobrze się trzymał na swoim miejscu.

Sposób użycia:

1. Połóż palec na przycisku (zob. rysunek powyżej).
2. Podczas higieny ust trzymaj irygator poziomo, ewentualnie skierowany dyszą w górę.
3. Naciśnij przycisk kilkakrotnie tak, aż płyn zacznie wydobywać się z dyszy. Szybkość i intensywność przepływu można regulować zmieniając siłę nacisku na przycisk. Dla uzyskania jak najlepszych efektów w trakcie używania należy naciskać przycisk z różną siłą oraz zmieniać kąt ustawienia dyszy.
4. Aby wyczyścić przestrzeń między zębami, skieruj dyszę w szczelinę między zębami, zacisnij usta wokół wężyka i naciśnij przycisk. Aby osiągnąć optymalny efekt spryskaj przednią i tylną część zęba a następnie przejdź do kolejnego.
5. Czystując mostki, aparaty dentystyczne, implanty lub inne elementy należy rurkę z dyszą umieścić pod nimi i nacisnąć przycisk. Dla uzyskania lepszego efektu spryskuj obie strony zęba kilkakrotnie ustawiając dyszę za każdym razem pod innym kątem. Ustawiaj dyszę pod każdym możliwym kątem.

Czyszczenie:

1. Każdorazowo po użyciu opróżnij zbiorniczek i kilkakrotnie naciśnij przycisk, aby usunąć pozostałości płynu z urządzenia. Przetrzyj irygator wilgotną szmatką zanurzoną w letniej wodzie, a następnie dobrze go wysusz.
2. Ze względów higienicznych nie wolno z nikim dzielić irygatora.
3. Urządzenie należy przechowywać w higienicznie czystym miejscu tak, aby nie uszkodzić wężyka z dyszą.
4. Podczas podróży, irygator powinien być tak przechowywany, aby nie doszło do jego uszkodzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.