

RENPHO

Instrukcja obsługi

Masażer nóg

Modele: RP-ALM075



ZAWARTOŚĆ

1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa	01
2. O masażerze nóg RENPHO.	01
Co jest w pudełku	
Wprowadzenie produktu	
3. Używanie masażera nóg	02
Ważne wskazówki przed użyciem	
Instrukcje obsługi	
4. Bezpieczeństwo i konserwacja	05
5. Rozwiązywanie problemów	06
6. Specyfikacje	07
7. Polityka gwarancyjna-	08
8. Obsługa Klienta	08

Dziękujemy za zakup masażera nóg RENPHO. Ten masażer jest przeznaczony do masażu stóp, łydek i ud. Pomaga złagodzić ból mięśni i zmęczenie. Używaj tego produktu z najwyższą ostrożnością i bezpieczeństwem. Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć przypadkowych uszkodzeń lub obrażeń, przeczytaj uważnie tę instrukcję i używaj zgodnie ze wskazówkami. Nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia, śmierć i/lub poważne uszkodzenie mienia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


1. Jeśli należysz do któregoś z poniższych typów użytkowników, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem:
 - W ciąży
 - Dzieci
 - Osoby starsze
 - Osoba cierpiąca na infekcje skóry, wrażliwość, zaczerwienienie i/lub oparzenia skóry
 - Osoby korzystające z rozrusznika serca lub innego wszczepialnego urządzenia medycznego
 - Pacjenci z chorobami serca lub nowotworami złośliwymi lub innymi poważnymi schorzeniami
 - Osoby, które otrzymują leczenie medyczne lub odczuwają dyskomfort
 - Osoby cierpiące na osteoporozę
 - Osoby z wysokim lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi
2. Tego produktu nie należy używać do celów medycznych. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i nieprofesjonalnego.

O akumulatorowym masażerze nóg RENPHO

1. Co znajduje się w pudełku

- 1 para owijek na łydki
- 1 x kontroler ręczny
- 1 x zasilacz
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x torba do przechowywania


2. Wprowadzenie produktu

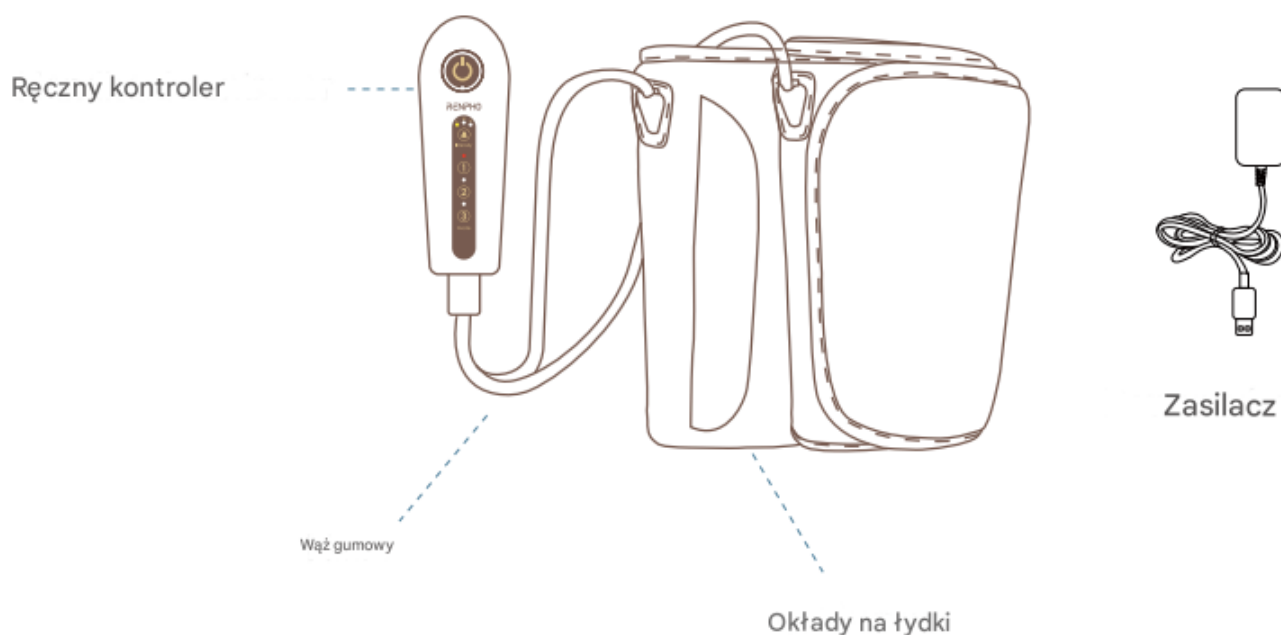

Korzystanie z masażu nóg

1. Ważne wskazówki przed użyciem

1.1 Podczas noszenia owijek należy upewnić się, że owijki są odpowiednie dla lewej i prawej nogi.

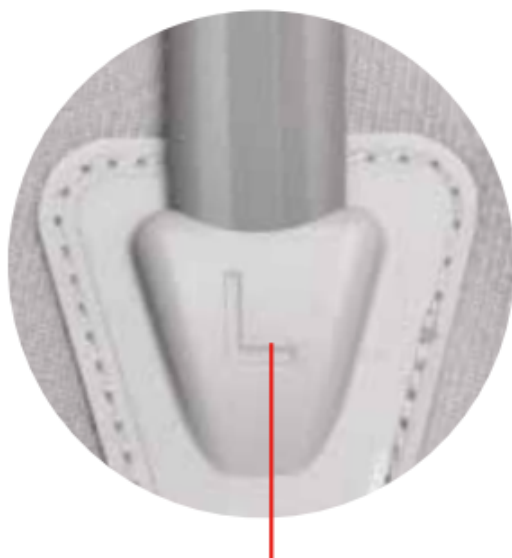

„L” jak owijka na lewą łydkę



„R” jak owijka na prawą łydkę

1.2 Upewnij się, że wąż przyłączeniowy został solidnie podłączony do kontrolera ręcznego.

Uwaga: Wsuń złącze węża tak, aby szczelina zaciskowa znalazła się całkowicie w kontrolerze.




1.3 Jeśli czujesz się silny lub niekomfortowo, poniżej znajdziesz kilka rozwiązań, które ułatwią Ci zadanie.

- Wybierz najniższą intensywność
- Otwórz rzep odpowiedniej części
- Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć
- Odłącz wąż przyłączeniowy od sterownika, poduszka powietrzna szybko się opróżni
- Zaleca się pozostawienie wystarczającej ilości miejsca na 4 palce między masażerem a łydką. Proszę zapoznać się z poniższym obrazkiem.



2. Instrukcja obsługi

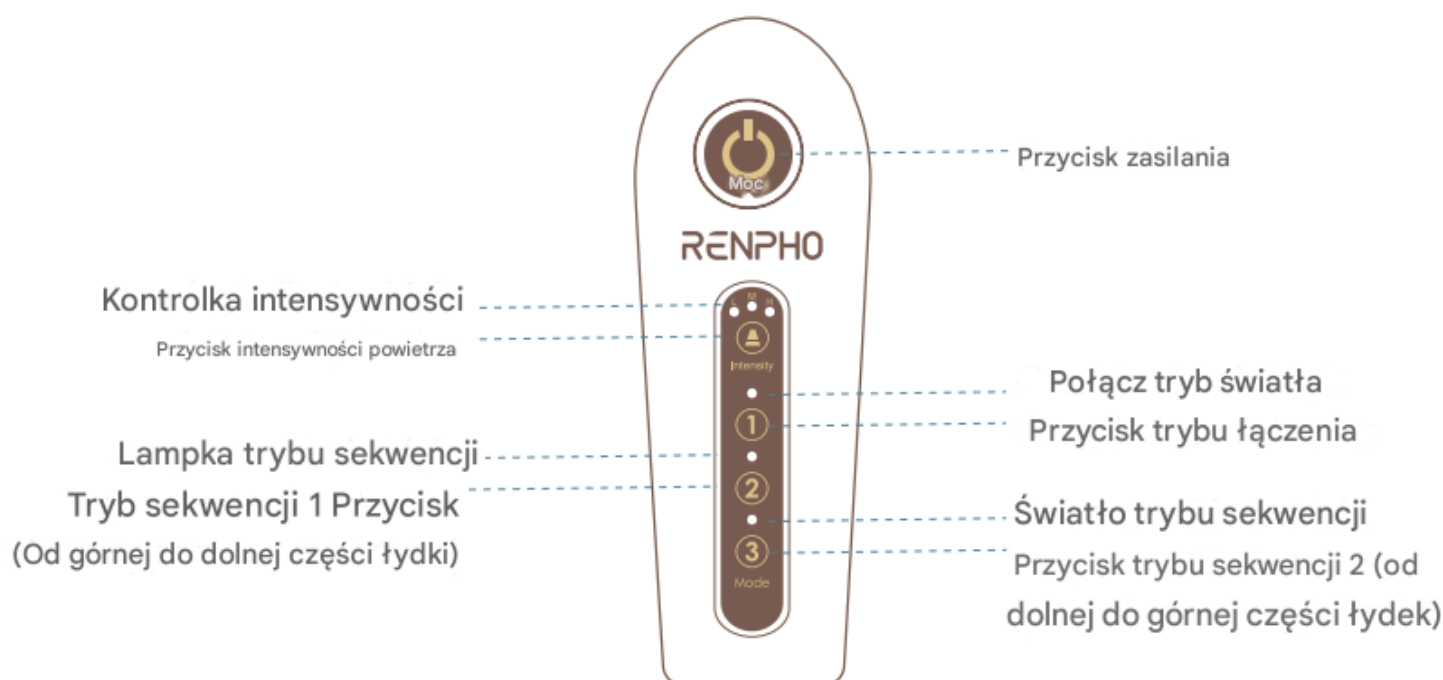

1. Przycisk włączania/wyłączania zasilania "I". Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć masażer. Domyślnym trybem jest tryb 1 z niską intensywnością. (Po włączeniu przycisk POWER miga powoli na czerwono, a urządzenie przechodzi w tryb czuwania.)
2. Tryb 1 Łączony „1”: masaż całych łydek.
3. Tryb sekwencji „2” 1: Masaż od górnej do dolnej części łydek.
4. „3” Sequence Mode 2: Masaż od dolnych do górnych łydek. Dostępne są 3 tryby, domyślnym trybem jest „1”.
5. Przycisk „Air Intensity”. Naciśnij, aby zmniejszyć lub zwiększyć intensywność. Istnieją 3 poziomy intensywności dla każdego trybu, domyślna intensywność to Low. Zaleca się pozostawienie wystarczająco szerokiej przerwy, aby włożyć 4 palce lub wybranie najniższej intensywności, jeśli czujesz się silny.

Notatka:

- 1) Masażer wyłączy się automatycznie co 20 minut. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby kontynuować korzystanie z masażera.
- 2) Masażer jest zaprogramowany tak, aby zapamiętywał ustawienia, gdy nie ma przerwy w dostawie prądu. Po włączeniu automatycznie uruchomi się ostatni tryb pracy i ostatnie ustawienie intensywności.
- 3) Możesz również zdecydować się na masaż tylko jednej nogi na raz, zakładając tylko lewy lub prawy but.

1. Nie należy używać części zamiennych niezatwierdzonych przez producenta.

- Osoby niebędące profesjonalistami zajmującymi się naprawami nie powinny demontować ani wymieniać części masażera nóg bez zgody producenta.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany personel, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie należy używać i przechowywać produktu w miejscu o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze.
- Po użyciu odłącz przewód zasilający.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu.
- Należy natychmiast zaprzestać używania produktu i odłączyć go od zasilania, jeśli produkt stanie się bardzo gorący lub zacznie wydzielać nieprzyjemny zapach.
- Nie należy przenosić produktu, ciągnąc za przewód zasilający lub kontroler ręczny.

2. Produktu nie powinny używać osoby z upośledzeniem fizycznym, sensorycznym lub umysłowym (w tym także dzieci).

3. Metoda czyszczenia



Nie prać, prać w pralce, zaleca się przecieranie masażera miękką, wilgotną lub suchą szmatką.

4. Sposób pakowania

Prosimy unikać składania węża przyłączeniowego podczas pakowania, gdyż może to spowodować nieudane napompowanie.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Produkt nie działa	1. Zasilanie nie jest podłączone lub wtyczka jest luźna (kontrolka zasilania nie działa) 2. Użyj innego adaptera	1. Podłącz prawidłowo przewód zasilający 2. Używaj wyłącznie adaptera dołączonego do opakowania.
	Wyłącznik zasilania nie jest włączony lub wyłącznik czasowy wyłącza urządzenie	Włącz wyłącznik zasilania
Poczuj się mocny, niewygodny lub napięty	Za mocno owiń nogi	1. Wybierz najniższą intensywność 2. Otwórz rzep odpowiedniej części
	Może użyj najwyższej intensywności	3. Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć 4. Odłącz wąż powietrza od kontrolera, poduszka powietrzna szybko się opróżni
Kontroler ręczny nagrzewa się	Produkt był używany nieprzerwanie przez długi czas	Zaleca się stosowanie przez 20–30 minut, aby uniknąć NADMIERNEGO UŻYTKOWANIA. Po wyłączeniu masażera należy odczekać, aż ostygnie, zanim ponownie go użyjemy.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Poczuj różnicę intensywności masażu dwóch nóg jednocześnie	Podczas noszenia butów odstęp, który pozostawisz, może być inny	Proszę zostawić taką samą przerwę podczas noszenia
Jeśli te rozwiązania nie rozwiążą Twoich problemów lub napotkasz inne problemy. Skontaktuj się z nami: support-eu@renpho.com		

Dane techniczne

Nazwa produktu: Masażer do nóg

Wejście: 12V 2A

Moc znamionowa: 24 W

Timer: 20 minut