


XFÜ

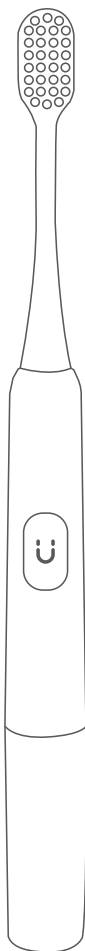

ELETRYCZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBOW

XF6

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz przechowywać ją w bezpiecznym miejscu celem późniejszego użycia.

Zawartość opakowania:

1. Rączka szczoteczki do zębów,
2. Główka szczoteczki z włosiem Dupont

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

1. Osoby, które poraz pierwszy używają elektrycznej szczoteczki do zębów, mogą odczuwać dyskomfort (np. lekkie drętwienie lub inne odczucia) w czasie pierwszych kilku użyć.
2. Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować produktu.
3. Nie należy łamać ani doprowadzać do upadku produktu. Jeżeli produkt jest uszkodzony, należy zaprzetać jego używania.
4. Osoby, które w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy miały zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej oraz dziąseł, powinny przed użyciem produktu skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
5. Jeżeli po wielokrotnym używaniu występuje krawienie bądź krawawienie trwa dłużej niż siedem dni, należy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
6. Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł oraz języka.
7. Produkt nie może być udostępniany dzieciom w celu zabawy. Dzieci powinny używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej aby zapewnić jego prawidłowe użytkowanie.
8. Produkt nie powinien być przechowywany w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze oraz w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

UWAGA!

Celem uniknięcia niebezpieczeństw w tym porażen prądem, pożarów lub innych poważnych obrażeń ciała, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Ostrzeżenia, przestrogi oraz instrukcje omówione w poniższej instrukcji obsługi mogą nie obejmować wystąpienia wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas użytkowania produktu.

Tryby pracy szczoteczki:

Przy pierwszym użyciu aparatu XF6, naciśnij raz, aby włączyć tryb delikatny, dwa razy dla trybu standardowego i trzy razy aby wyłączyć szczoteczkę.



Tryb delikatny- 18 000 uderzeń na minutę.

Tryb standardowy- 24 000 uderzeń na minutę.

Przy drugim użyciu szczoteczka XF6 będzie pamiętała, który tryb, który był ostatnio używany i automatycznie rozpocznie pracę w tym trybie.

Sposób użytkowania szczoteczki:

1. Zmocz włosię i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.
2. Umieść szczoteczkę do zębów w ustach przed włączeniem.
3. Włącz szczoteczkę i przesuwaj ją powoli wzdłuż zębów. Każdy z czterech obszarów powinien być szczotkowany około 30 sekund. Szczoteczka wyłączy się automatycznie po dwóch minutach szczotkowania (zalecany czas szczotkowania).
4. Opłucz szczoteczkę i pozostaw ją do wyschnięcia.
5. Czynność (szczotkowanie) powtarzaj dwa razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa.

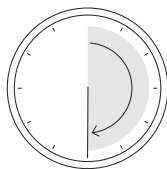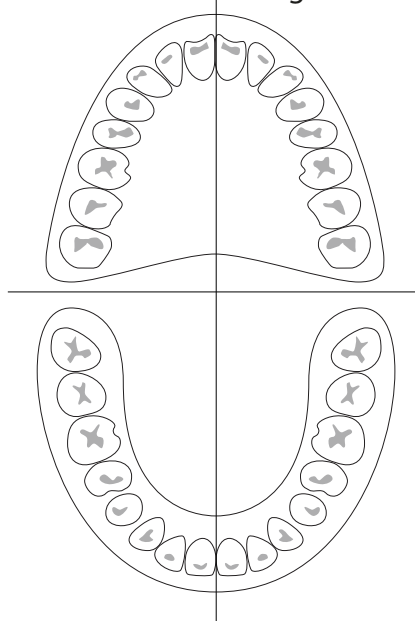


((0:30))


Wbudowany inteligentny timer pulsuje co 30 sekund aby przypomnieć o zmianie obszru szczotkowania w celu uzyskania najlepszych rezultatów

Wymiana baterii:


1. Zdejmij pokrywę baterii obracając ją w sposób przedstawiony na rysunku (wyrównaj strzałkę).

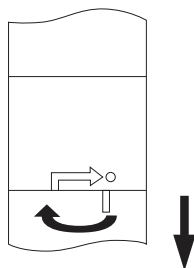

2. Włóż jedną baterię AAA do komory baterii. Upewnij się, że bateria jest umieszczona w sposób zgodny z pokazanym na etykiecie.

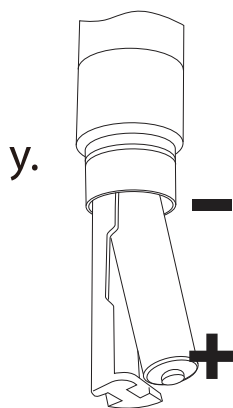


3. Zamocuj pokrywę baterii, obracając ją w sposób pokazany na rysunku (wyrównaj do końca strzałki, a następnie przekręć aby wyrównać do kropki).

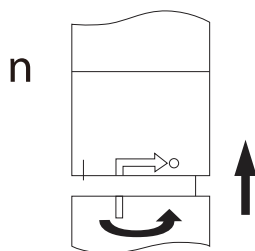

Wymiana główki szczoteczki:

Aby wymienić główkę szczotki, delikatnie pociągnij ją od uchwytu. W celu umieszczenia nowej główki szczoteczki należy nacisnąć ją w dół.

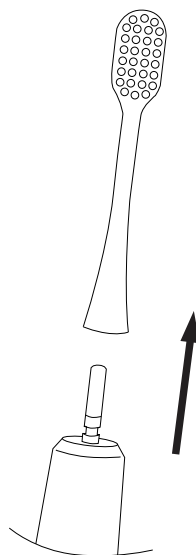

Informacje o produkcie:

Model: XF6

Materiał produktu: ABS/TPE/PP/Nylon

Rozmiar produktu: 18.3x18.3x203.6mm

Standard produktu: GB4706.59-2008

Napięcie wejściowe: 1,5V ==

Moc wejściowa: 0.26W

Ochrona środowiska:

Jeżeli produkt przestanie działać należy zutylizować go w sposób przyjazny dla środowiska.

Oświadczenie FCC:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym również takie, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA!

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność urządzenia, mogą spowodować unieważnienie uprawnień do obsługi urządzenia.

WAŻNE!

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie wytwarza i może wypromieniować energię o częstotliwości radiowej. Jeżeli nie zostanie należycie używane może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym (można to stwierdzić poprzez wyłączenie oraz włączanie urządzenia) należy podjąć się próby skorygowania zakłóceń za pomocą następujących środków:

1. Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
2. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
3. Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

NINGBO SEAGO ELECTRIC CO.,LTD

**Adres: NO.239 Jianghu Road, Jiangbei District,
Ningbo, Zhejiang, Chiny**

Tel : 86-0574-88228700

E-mail : info@seago.cn

Strona internetowa: www.seago.cn

WYPRODUKOWANO W CHINACH

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.