

SKALER DENTYSTYCZNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI


NV660



Made in China
CE FC RoHS

1. OPIS PRODUKTU

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie. Produkt ten jest nowym rodzajem wizualnego skalera ultradźwiękowego. Charakteryzuje się możliwością połączenia z telefonami komórkowymi lub tabletami oraz innymi urządzeniami w celu obejrzenia stanu faktycznego zębów w aplikacji. Wykorzystuje technikę ultradźwiękowego rezonansu wysokiej częstotliwości, aby usunąć przebarwienia na zębach i uzyskać efekt wybielenia i ochrony zębów.

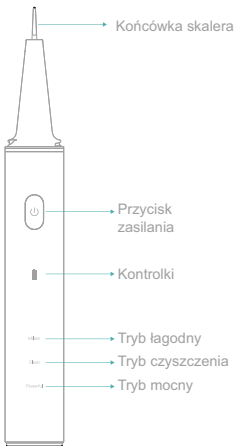

2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby uniknąć ryzyka nieprawidłowego działania, porażenia prądem, obrażeń, pożaru i uszkodzenia sprzętu lub mienia, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:


1. Ten produkt ma wbudowaną baterię. Nie wrzucaj tego produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie słońca, w przeciwnym razie może to spowodować eksplozję baterii.
2. Nie używaj tego produktu podczas ładowania.
3. Nie używaj tego produktu jeśli port ładowania nie jest odpowiednio zakryty.
4. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj tego produktu samodzielnie.
5. Nie umieszczaj ładowarki w wilgotnym środowisku lub w wodzie.
6. Nie umieszczaj tego produktu w miejscu dostępnym dla dzieci.
7. Nie upuszczaj, nie uderzaj, nie wstrząsaj produktem.
8. Nie używaj tego produktu podczas kąpieli.
9. Przed użyciem należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli cierpisz na ciężkie zapalenie przyzębia lub masz inne objawy.
10. Do czyszczenia tego produktu nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.
11. Podczas pierwszego użycia produktu może wystąpić lekkie krwawienie. W przypadku ciężkiego krwawienia należy od razu zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z lekarzem.

3. ANDROID


Krok 1: Zeskanuj kod QR telefonem i pobierz aplikację.



Krok 2: Otwórz aplikację, kliknij w prawym górnym rogu „+”, czyli dodaj urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na skalerze, aby włączyć, a następnie sprawdź powyższe kroki, aby zakończyć. Kliknij, aby rozpocząć łączenie.

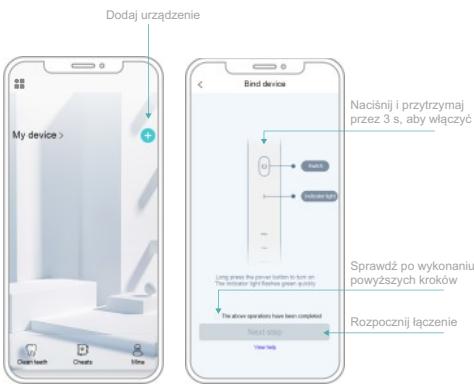


Krok 3: Kliknij, aby rozpocząć połączenie i przejdź do ustawień telefonu komórkowego - bezprzewodowej sieci. Połącz się z WI-FI: SUNUO-T11-XXXX Hasło: 12345678

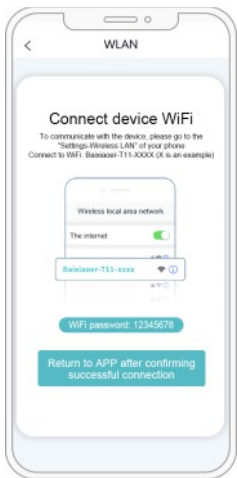

4. WPROWADZENIE

Ten produkt należy do zasady działania ultradźwiękowej. Po włączeniu nie będzie wytwarzał wibracji o nadmiernej częstotliwości, gdy dotknie dziąseł lub miękkich przedmiotów i będzie miał oczywistą wydolność roboczą, gdy dotknie zębów lub twardych przedmiotów, powodując rezonans nadczęstotliwościowy.

W zależności od potrzeb wybierz odpowiedni tryb pracy.
Tryb łagodny: Delikatna moc dla wrażliwych zębów, małych plam nazębnych.
Tryb czyszczenia: Normalna moc do usuwania zalegającego kamienia nazębnego, takiego jak plamy po dymie, plamy po kawie, plamy po herbacie itp.
Tryb mocny: Duża moc do głębokiego czyszczenia, takich jak kamień nazębny i twarde plamy nazębne.

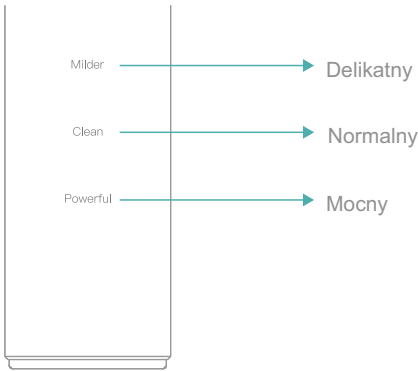

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Czy krwawienie dziąseł podczas stosowania jest normalne?
Odp: Jeśli używają go osoby cierpiące na zapalenie przyzębia lub dziąseł lub jeśli łatwo jest spowodować krwawienie dziąseł, na przykład podczas szczotkowania zębów lub gryzienia twardego jedzenia, również będzie krwawić. Jeśli dziąsła krwawią podczas stosowania tego produktu, przestań go używać i spłucz zimną wodą.

2. Czy to normalne, że końcówka zęba czyszczącego nagrzewa się podczas użytkowania?
Odp: Podczas używania energia elektryczna jest przekształcana w energię kinetyczną i normalne jest, że temperatura skalera nieznacznie wzrasta.

3. Czy to normalne, że produkt czasem wydaje dźwięki?
Odp: Dźwięk podczas pracy jest spowodowany rezonansem końcówki roboczej i zębów, co jest zjawiskiem normalnym.

4. Czy to normalne, że produkt nagle przestaje działać podczas pracy ultradźwiękowej?
Odp: Produkt wyposażony jest w funkcję automatycznego wyłączania, która zatrzyma pracę po 10 minutach pracy i koniecznie będzie ponowne przełączenie trybu, aby rozpocząć stan pracy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

1. Brak reakcji podczas uruchamiania, a kamera nie świeci.
Odp: Przed użyciem należy całkowicie naładować.

2. Aplikacja uległa awarii.
Odp: Wyczyść pamięć telefonu komórkowego i uruchom ponownie aplikację.

3. Czerwone światło skalera miga.
Odp: Informuje, że bateria produktu jest słaba. Naładuj urządzenie i dopiero je użyj.

4. Produkt nie wyświetla obrazów w czasie rzeczywistym.
Odp: Rozłącz połączenie WI-FI między telefonem a skalerem. Uruchom ponownie urządzenie lub wyczyść pamięć swojego telefonu. Otwórz ponownie aplikację i ponownie połącz się z siecią WI-FI.

5. Połączenie WI-FI jest niestabilne lub nie pojawia się żaden obraz.
Odp: Uruchom ponownie urządzenie i ponownie podłącz się z aplikacją.

Jeżeli problem nadal nie został rozwiązany zgodnie z powyższymi operacjami, skontaktuj się z obsługą klienta, a my zapewnimy Ci dalsze praktyczne rozwiązania problemu.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Standard sieciowy: IEEE 802.11b/g/n

Szybkość przesyłania obrazu: 30 kl./s

Żywotność baterii: ok. 90 minut

Parametry wejściowe: 5V/0,5A

Moc robocza: 1,68W

Najlepsza ostrość: 0-2 cm

Piksele: 5 MP

Napięcie robocze: 5V

Czas ładowania: ok. 1,5h-2h

Bateria: 1200 mAh

Przetwornik obrazu: CMOS

Częstotliwość robocza: 2.4 GHz