


100*160MM

Depilacja IPL

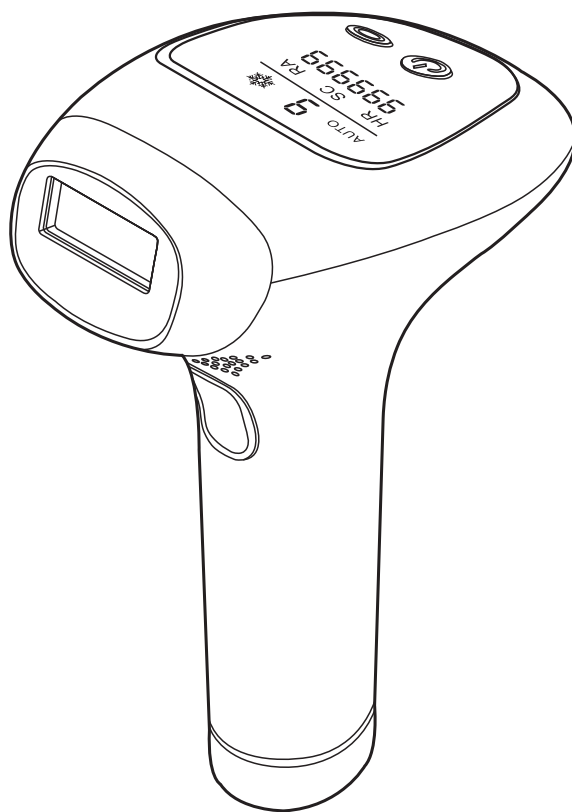

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. W celu ułatwienia użytkowania prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji oraz zachowanie jej na przyszłość. Ilustracje zawarte w tej instrukcji mają charakter poglądowy.

1. Środki ostrożności

Proszę używać produktu zgodnie z instrukcją obsługi.


Osobom poniżej 16. roku życia zabrania się korzystania z tego urządzenia, a dla bezpieczeństwa należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

W ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji naszych produktów, w tym funkcji, interfejsu oraz wyglądu.


Ze względu na możliwość aktualizacji produktu, w przypadku rozbieżności pomiędzy opisem a rzeczywistym produktem, obowiązują dane rzeczywistego urządzenia.

Podczas korzystania z tego produktu należy nosić okulary ochronne, a podczas procesu błysku nie kierować okna błyskowego w stronę oczu.


2. Budowa urządzenia i akcesoria

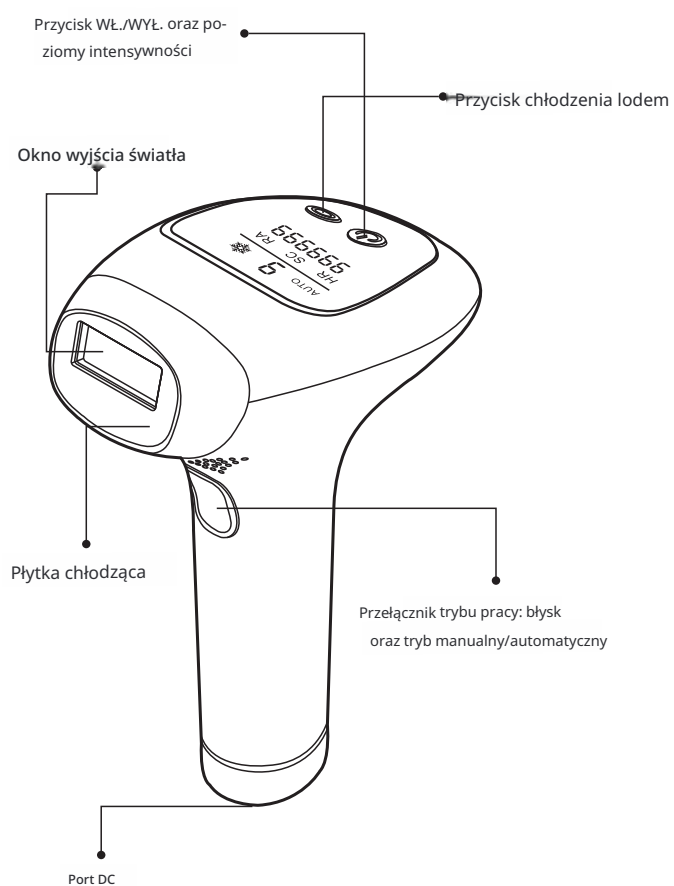

2

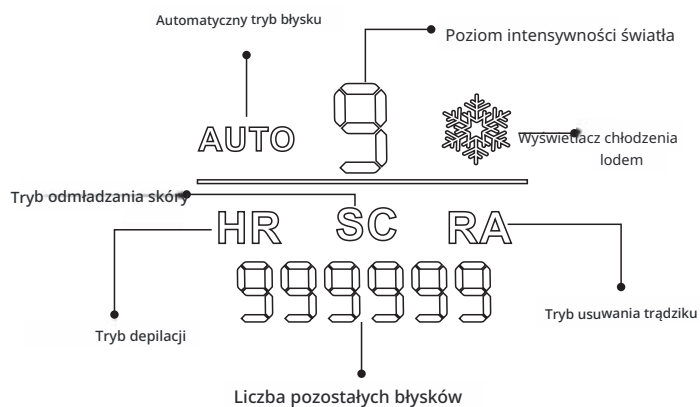

Zawartość zestawu:

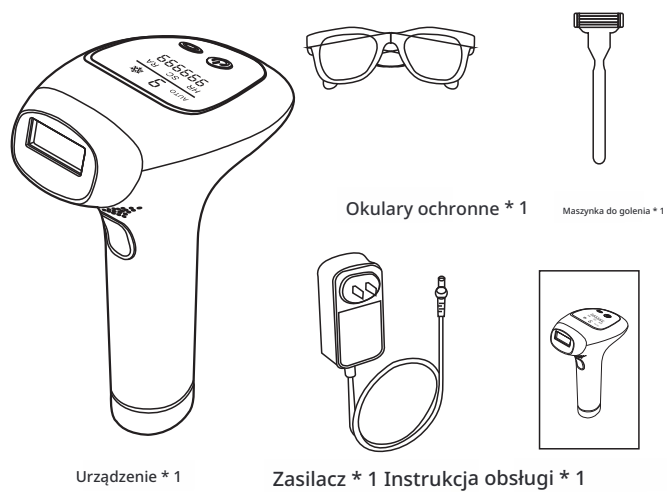

3

3. Wprowadzenie do funkcji produktu.

Włączanie

Po podłączeniu do zasilacza zaświeci się wskaźnik zasilania; krótko lub długo naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. W stanie włączenia, krótko naciśnij przycisk poziomów intensywności, aby ustawić poziom od 1 do 9; ekran wyświetli odpowiedni poziom.

Poziom 1-2: wyświetlany tryb SC, przeznaczony do odmładzania skóry i depilacji.

Poziom 3-9: wyświetlany tryb HR, przeznaczony wyłącznie do depilacji.

Wyłączanie

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Po włączeniu zasilania urządzenie automatycznie wyłączy się ze względów bezpieczeństwa, jeśli przez 15 minut nie będzie żadnej obsługi

Tryb ręcznego błysku

Tryb ręcznego błysku zostaje aktywowany automatycznie po włączeniu zasilania.

Przyłóż urządzenie pionowo do skóry i krótko naciśnij przycisk błysku, aby rozpocząć zabieg IPL.

(Uwaga: Błysk nie zostanie wyemitowany, jeśli skóra nie przylega całkowicie.)

Tryb automatycznego błysku

Po naciśnięciu przycisku błysku przez 3 sekundy na ekranie pojawi się ikona "AUTO", co oznacza, że urządzenie pracuje w trybie automatycznego błysku i będzie emitować błysk automatycznie, gdy skóra będzie w pełnym kontakcie.

Aby powrócić do trybu ręcznego, naciśnij przycisk błysku przez 3 sekundy.

Tryb chłodzenia lodowego

Krótko naciśnij  przycisk chłodzenia lodowego, aby przejść do trybu i pojawi się  lodowego, co zostanie wyświetlone na ekranie.

Tryb chłodzenia lodowego:

Tryb chłodzenia lodowego może być używany oddzielnie w celu ukojenia skóry; proszę nie naciskać przycisku błysku podczas korzystania wyłącznie z funkcji chłodzenia lodowego. (Uwaga: Proszę nie traktować jednego obszaru skóry przez dłuższy czas, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu skóry.)

W trybie chłodzenia lodowego można jednocześnie korzystać z trybu ręcznego błysku lub trybu automatycznego błysku. (Uwaga: Błysk nie zostanie wyemitowany, jeśli skóra nie przylega całkowicie, jednak funkcja chłodzenia lodowego pozostanie aktywna.)

Tryb chłodzenia lodowego + tryb ręcznego błysku:

Urządzenie należy ustawić pionowo względem skóry; błysk zostanie wyemitowany przy każdym naciśnięciu, gdy wylot światła będzie całkowicie przylegał do skóry, a efekt chłodzenia lodowego zostanie uruchomiony jednocześnie w celu złagodzenia dyskomfortu skóry.

Tryb chłodzenia lodowego + tryb automatycznego błysku:

Ikona „AUTO” pojawi się po naciśnięciu przycisku błysku przez 3 sekundy i urządzenie przejdzie w tryb automatycznego błysku. Błysk zostanie wyemitowany automatycznie, gdy wylot światła będzie całkowicie przylegał do skóry, a efekt chłodzenia lodowego zostanie uruchomiony jednocześnie w celu złagodzenia ewentualnego dyskomfortu skóry.

Pojawienie się kropli wody na obszarze chłodzenia lampy w trybie lodowym jest zjawiskiem normalnym. Po wyłączeniu zasilania należy użyć miękkiej ściereczki do wytarcia kropli wody, aby uniknąć fałszywego błysku.

4. Parametry techniczne produktu

Rurka lampy: rurka ksenonowo-kwarcowa
Poziom energii: 9 poziomów regulacji
Zasilacz: AC100-240V 50/60Hz 36W-48W
Energia świetlna: 2,2-5,2 J/cm²
Zakres długości fali: 470 nm – 1200 nm
Wejście: DC12V 3A – 4A
Waga netto: 296 g
Wymiary produktu: 174 × 125 × 82 mm
Szybkość błysku: 1,4-2,3 s
Zasilacz: adapter AC-DC
Źródło światła: intensywne światło pulsacyjne
Powierzchnia okna błysku: 3,6 cm²
Liczba błysków: 999 999
Temperatura pracy: 0 °C < T < 40 °C
Okres gwarancji: 1 rok

5. Przeciwwskazania oraz

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego użytkowania

Ograniczenia użytkowania

Użycie produktu może powodować dyskomfort lub niepożądane skutki u osób z alergiami, chorobami skóry, alergicznym zapaleniem skóry, osób o wrażliwej skórze itp.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych skutków podczas użytkowania należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu.

-  Nie używaj tego produktu na obszarach o naruszonej integralności skóry (np. oparzenia, pęcherze, skaleczenia, rany, aktywne choroby skóry lub infekcje).
-  Jeśli przyjmujesz leki fotouczulające w ramach istotnego leczenia, przed użyciem produktu wymagana jest konsultacja lekarska, w przeciwnym razie użycie produktu może uszkodzić skórę.

-  Nieodpowiedni dla kobiet w ciąży, karmiących piersią, podczas menstruacji, osób z bliznami na ciele, cukrzycą, delikatną skórą oraz skórą wrażliwą na światło.
-  Ciężka choroba serca, umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie, złośliwe nowotwory, zapalenie mieszków włosowych, zakaźne choroby skóry, oparzona skóra oraz zaburzenia krzepnięcia są przeciwwskazaniem.
-  Nie używaj, jeśli masz nieprawidłowy metabolizm kolagenu, w tym historię blizn oraz słabego gojenia się ran.
-  Pacjenci z chorobami naczyń, takimi jak żylaki i rozszerzenie naczyń w miejscu naświetlania.
-  Nie używaj, jeśli Twoja skóra jest wrażliwa na światło i podatna na wysypki lub alergie.
-  Nie używaj, jeśli obszar naświetlania jest zakażony, Stosowanie u pacjentów z opryszczką pospolitą, zmianami skórnymi oraz krwinkami jest zabronione.
-  Stosowanie u osób z chorobami powodującymi supresję odpowiadzi immunologicznej (w tym zakażeniem HIV, toczniem rumieniowatym, porfirią itp.) jest zabronione.
-  Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia jest zabronione, podobnie jak u osób stosujących izotretynoinę, kwasy owocowe (AHA), kwas salicylowy (BHA) lub kwas azelainowy.
-  Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego produktu u osób, które w ciągu ostatnich 30 dni korzystały z depilacji chemicznej, stosowały produkty wybielające skórę w krótkim czasie lub używały składników zawierających witaminę A.

- ✗ Nie używać jednocześnie z produktami zawierającymi olejki eteryczne. Należy upewnić się, że skóra w obszarze naświetlania jest czysta i sucha oraz że nie zostały użyte żadne balsamy, lubrykanty ani inne kosmetyki.
- ✗ Jeśli powierzchnia skóry nie jest czysta i sucha, może to wpłynąć na komfort użytkowania produktu, a nawet doprowadzić do jego uszkodzenia.
- ✗ Stosowanie produktu jest zabronione u osób, które niedawno poddały się iniekcjom wypełniaczy lub toksyn.
- ✗ Nie wolno używać urządzenia na skórze opalonej lub poparzonej do czasu jej całkowitego wyzdrowienia, ponieważ zwiększa to ryzyko poparzenia. Osoby cierpiące na epilepsję, światłoczułe napady padaczkowe lub migrenę nie mogą używać urządzenia, ponieważ jasne światło może nasilić objawy choroby.
- ✗ Nie używaj urządzenia, jeśli obszar skóry przeznaczony do zabiegu posiada tatuaże, ciemnobrązowe lub czarne plamy (takie jak ciemne piegi, znamiona, pieprzyki lub brodawki). Tatuaże lub ciemne plamy mogą pochłaniać dużą ilość energii świetlnej i zwiększać ryzyko poparzenia skóry.
- ✗ Nie używaj urządzenia w okolicach głowy, uszu, brodawek sutkowych, narządów płciowych ani odbytu, ponieważ stosowanie urządzenia w tych miejscach zwiększa ryzyko poparzenia skóry.
- ✗ Zabrania się używania urządzenia w przypadku problemów skórnych, takich jak łuszczyca, egzema, opryszczka, rany lub wysypka itp. W takich przypadkach skóra jest bardziej wrażliwa i może dojść do obrzęku, powstania pęcherzy lub infekcji. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, aby upewnić się, że skóra jest całkowicie wyleczona.

- ✗ Blizny, nadwrażliwość na światło lub przyjmowanie leków zwiększających wrażliwość skóry na światło, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych (takich jak aspiryna, ibuprofen, acetaminofen), tetracykliny, fenotiazyny, diuretyków, sulfonamidów, triazyny imidazoliowej, fluorodiazyny, winblastyny, gryzeofulwiny, kwasu karotenowego, kwasu all-trans witaminy A, izotretynoiny, miejscowego kwasu retinowego oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, są przeciwwskazaniem do stosowania urządzenia.

> Jeśli masz historię chorób związanych z nadwrażliwością na światło, takich jak porfiria, polimorficzna osutka świetlna lub pokrzywka słoneczna, używanie urządzenia w tych przypadkach jest zabronione. co sprawi, że skóra stanie się bardziej wrażliwa.

6. Obsługa i konserwacja

- ① Podczas obsługi urządzenia należy nosić okulary ochronne.
- ? Podczas obsługi urządzenia należy oczyścić partie ciała przeznaczone do depilacji. Nie należy stosować żadnych kosmetyków ani produktów do pielęgnacji skóry przed użyciem, aby nie uszkodzić urządzenia i nie wpłynąć negatywnie na efekty użytkowania.
- ① Przy pierwszym użyciu urządzenia należy rozpocząć od najniższego poziomu mocy i wybrać odpowiedni poziom, który nie uszkodzi skóry. Jeśli przy wysokim poziomie energii po użyciu urządzenia skóra stanie się czerwona lub opuchnięta, należy natychmiast przyłożyć lód w celu schłodzenia skóry.
- ① Po zakończeniu obsługi należy zadbać o odpowiednie nawilżenie skóry oraz zapewnić skuteczną ochronę przeciwsłoneczną, aby odizolować skórę od silnego światła i promieniowania UV.
- ① Zaleca się stosowanie czystych, roślinnych produktów nawilżających i regenerujących.

① Czyść powierzchnię urządzenia suchą, miękką ściereczką lub wilgotną ściereczką bez alkoholu.

① NIE należy umieszczać urządzenia ani akcesoriów w kontakcie z cieczami ani w wilgotnym środowisku.

① Przechowuj urządzenie w wentylowanym, suchym miejscu z dala od dzieci.

① Nie wkładaj metali do otworu chłodzącego, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

① Jeśli obudowa produktu jest uszkodzona lub przypadkowo dostała się do niej woda, odeślij urządzenie do producenta w celu naprawy i upewnij się, że może zostać naprawione lub ponownie użyte. Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się woda podczas pracy, natychmiast odłącz zasilacz, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

⚠ Nie próbuj samodzielnie rozkładać ani naprawiać urządzenia bez upoważnienia.

⚠ Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, odeślij je wraz ze wszystkimi akcesoriami do producenta w celu konserwacji przez wykwalifikowany personel.

⚠ Ostrzeżenie

* Nie używaj urządzenia bezpośrednio w okolicach oczu, ponieważ silne źródło światła emitowane przez produkt może spowodować uszkodzenie wzroku.

* Podczas normalnej pracy nie należy bezpośrednio dotykać wylotu odprowadzającego ciepło, ponieważ temperatura wylotu może spowodować oparzenia skóry.

* Podczas normalnej pracy nie należy wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ciała.

* Nie należy stosować antyperspirantu bezpośrednio po naświetlaniu pach.

* Aby uniknąć poparzeń i awarii podczas użytkowania, należy regularnie sprawdzać i czyścić zabrudzenia z portu naświetlania.

* Nie należy umieszczać portu naświetlania w pobliżu przedmiotów podatnych na rozmagnesowanie, ponieważ może to spowodować awarię i uszkodzenie.

* Nie używać urządzenia, gdy otwór wentylacyjny jest zablokowany, ponieważ może to spowodować zadymienie i pożar.

* Dla prawidłowej obsługi produktu nie należy kierować portu naświetlania w stronę czarnych przedmiotów.

* Aby uniknąć zaczernienia, odbarwienia i uszkodzenia, nie należy naświetlać ubrań, włosów ani innych przedmiotów.

* Nie używać urządzenia na zwierzętach, ponieważ może to spowodować obrażenia.

* Może to spowodować uszkodzenie oczu (w tym potencjalną ślepotę) lub skóry, jeśli nie będą przestrzegane instrukcje. Proszę przeczytać i stosować się do instrukcji.

* Nie należy wydłużać ani ponownie używać na tej samej powierzchni, należy unikać nadmiernego stosowania, w tym zbyt dużej liczby impulsów i/lub zbyt wysokiej częstotliwości, co może prowadzić do uszkodzenia skóry.

* Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie oczu. Należy chronić oczy przed ekspozycją, nie używać produktu powyżej powiek ani w pobliżu oczu.

* Przed użyciem należy wykonać test skórny i po 2 godzinach sprawdzić stan skóry. Można użyć produktu, jeśli na naświetlanym obszarze nie występują nieprawidłowości (zaczerwienienie lub pęcherze).

* Podczas użytkowania należy założyć okulary ochronne i przyłożyć okno lampy blisko skóry w celu przeprowadzenia depilacji.

* Po użyciu należy wytrzeć włosy oraz produkty do pielęgnacji skóry znajdujące się na urządzeniu, aby uniknąć awarii i uszkodzenia skóry.

* Należy postępować zgodnie z instrukcją, prawidłowo zakładać okulary ochronne podczas korzystania z produktu, aby uniknąć silnej stymulacji świetlnej.

* Intensywność naświetlania należy ustawić odpowiednio do stanu skóry i za pierwszym razem koniecznie rozpocząć od poziomu 1.

* To normalne, jeśli skóra jest lekko rozgrzana i zaczerwieniona po użyciu.

* Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru po włączeniu; należy je wyłączyć niezwłocznie po zakończeniu użytkowania.

* Oczyszczyć skórę, aby upewnić się, że nie ma na niej resztek włosów, jest całkowicie sucha oraz wolna od substancji oleistych i zabrudzeń.

* Jeśli różnica temperatur w otoczeniu pracy urządzenia przekracza 20 stopni (przejście ze środowiska o niskiej temperaturze do wysokiej lub odwrotnie), wyłącz urządzenie i odczekaj około 2 godziny przed ponownym użyciem.

* Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych (w tym rozpylaczy, stacji benzynowych itp.), ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.

* Temperatura otoczenia urządzenia powinna wynosić 0-45 °C. Przed użyciem sprawdź temperaturę pomieszczenia.

* Unikaj bezpośredniego promieniowania ultrafioletowego na naświetlaną część skóry przez 24 godziny po zabiegu.

✱ Jeśli po włączeniu zasilania wbudowany wentylator nie działa (nie słychać charakterystycznego dźwięku), nie używaj urządzenia, aby uniknąć awarii, takich jak zadymienie czy pożar.

* Nie używaj urządzenia w wannie, pod prysznicem ani w innych miejscach w pobliżu wody. Zasilacz tego produktu należy utrzymywać w suchym stanie.

* Podczas korzystania z produktu nie zaleca się długotrwałego użytkowania. Po godzinie użytkowania należy wyłączyć urządzenie na 10 minut.

* W przypadku uszkodzenia obudowy, soczewki lub zasilacza należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Nie naprawiaj produktu bez upoważnienia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel działu konserwacji producenta lub podobnego działu.

◆ Nie używać na następujących partiach ciała ani w poniższych przypadkach.

1. Produkt nie powinien być stosowany do leczenia chorób.

2. Nie zaleca się usuwania białych ani siwych włosów.

3. W przypadku naturalnie ciemnej skóry nie należy używać produktu.

4. Nie wystawiać skóry na działanie promieni słonecznych przed depilacją.

5. Upewnij się, że okno lampy przylega do skóry podczas zabiegu, a następnie wykonaj operację usuwania.

6. Nie używaj urządzenia w ciemnym otoczeniu.

7. Aby uniknąć awarii urządzenia, nie używaj go w bezpośrednim świetle słonecznym.

8. Nie uderzaj ani nie potrząsaj tym produktem gwałtownie.

9. Nie odłączaj wtyczki bez wcześniejszego wyłączenia urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie produktu.

7. Test wrażliwości skóry

Przed pierwszym zabiegiem na każdej nowej partii ciała zalecamy przetestowanie skóry na małym obszarze pod kątem ewentualnych reakcji. Odczekaj 24 godziny po teście, aby upewnić się, że Twoja skóra nadaje się do zabiegu IPL.

8. Wybór poziomu energii

Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu intensywności światła i wybierz jeden z dziewięciu poziomów intensywności zgodnie ze swoim komfortem. Zmniejsz intensywność światła, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort. Osoby o ciemniejszej karnacji są bardziej narażone na podrażnienia skóry z powodu zwiększonego pochłaniania światła przez skórę. Dlatego osobom o ciemniejszej karnacji zaleca się stosowanie niższych poziomów intensywności. Osoby o bardzo ciemnobrązowej do czarnobrązowej lub ciemniejszej karnacji NIE powinny stosować zabiegów IPL.

- Proszę zapoznać się z poniższą tabelą referencyjną dla użytkownika:

Kolor skóry \ Kolor włosów	Biały	Jasny kremowy biały biały		brązowy	Beżowy	Ciemny brązowy czarny
Czarny	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Ciemny brązowy	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brązowy	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Złoty	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Czerwony	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Biały	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Szary	✓	✓	✓	✓	✓	✗

✓ Dotyczy

> Nie dotyczy

Przygotowanie przed użyciem

- ★ Dokładnie oczyść skórę, aby była pozbawiona włosów, całkowicie sucha i wolna od tłustych pozostałości (perfum, balsamów, dezodorantów, kremów z filtrem itp.).
- ★ Sprawdź, czy na oknie lampy błyskowej nie ma brudu, włosów ani innych zanieczyszczeń oraz czy nie występują uszkodzenia lub nieprawidłowości. Jeśli występują zabrudzenia, należy je usunąć, aby uniknąć awarii produktu, pogorszenia jego stanu oraz problemów skórnych.
- ★ Po upływie 24 godzin od testu skórniego należy potwierdzić stan skóry. Jeśli na obszarze poddanym zabiegowi nie występują nieprawidłowości (zaczerwienienie, pęcherze), można bezpiecznie używać tego produktu. Nie zalecamy depilacji do czasu zakończenia testu wrażliwości skóry.

Sposób użycia

• Kroki użycia



Krok 1
Użyj maszynki do golenia, aby usunąć włosy z obszarów wymagających zabiegu.
Nie dotykaj bezpośrednio skóry maszynką, używaj jej z pianką lub goł się podczas kąpieli. Maszynka jest ostra, należy używać jej ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.



Krok 2
Wyczyść wylot światła i podłącz zasilacz.



Krok 3

Naciśnij i przytrzymaj lub krótko naciśnij, aby wyłączyć zasilanie. W trybie włączenia zasilania krótko naciśnij przycisk ice, aby uruchomić tryb chłodzenia.



Krok 4

Przed depilacją załóż okulary ochronne, aby chronić oczy. Obsługa.



Krok 5

Z pozycji początkowej umieść urządzenie pionowo na skórze, naciśnij przycisk jeden raz, następnie przesuw lampę na kolejny obszar bez nakładania się i obsługuj urządzenie na kolejnych partiach skóry zgodnie z kolejnością.



Krok 6

Pojawienie się kropelek wody na obszarze chłodzenia lampy w trybie chłodzenia lodowego jest zjawiskiem normalnym. Po wyłączeniu zasilania należy użyć miękkiej ściereczki do starcia kropelek wody.

【 Wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia do depilacji 】


1. Ciągłe błyskanie urządzenia do depilacji powoduje stopniowe nagrzewanie; aby zachować skuteczność chłodzenia lodem, zaleca się użycie głowicy z lampą chłodzącą do schłodzenia obszaru zabiegowego przez około 30 s po depilacji, a następnie przejście do depilacji kolejnego obszaru. To ponownie ukoi skórę lodem i poprawi efekt chłodzenia.

2. Dociśnij głowicę lampy mocno do skóry, aby zapewnić pełny kontakt głowicy z korzeniem mieszka włosowego, dzięki czemu mieszek włosowy wchłonie większą ilość energii, co pozwoli uzyskać lepszy efekt depilacji. Dzięki technologii pielęgnacji z chłodzeniem lodowym urządzenie skutecznie chłodzi skórę, redukuje jej nagrzewanie i lepiej chroni skórę.

• Harmonogram zabiegów

Stosuj 3 razy w tygodniu przez

1-3 tygodnie – wzrost włosów zaczyna zwalniać, a ilość włosów zmniejsza się o ponad 75%. Stosuj 2 razy w tygodniu przez 4-6 tygodni – włosy stają się cieńsze

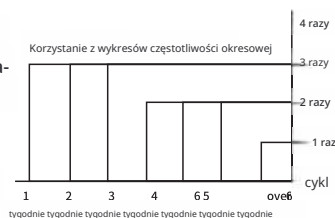

i mniej, a skóra staje się gładsza. Po 6 tygodniach używaj 1 lub 2 razy w miesiącu, stosuj selektywnie, aby osiągnąć trwałe usunięcie owłosienia.

Uwaga: Proszę używać urządzenia kilkakrotnie, zgodnie ze wzrostem włosów. Jeśli włosy są zbyt grube i twarde, można odpowiednio zwiększyć poziom i częstotliwość. Konkretna sytuacja może się różnić w zależności od osoby.

Pielęgnacja po użyciu

• Środki ostrożności po depilacji

* Zaleca się unikać kontaktu z wodą przez 6 godzin po zabiegu depilacji, a następnie zastosować wodę nawilżającą w celu nawilżenia obszaru poddanego zabiegowi.

- * Po depilacji nie należy używać perfum, masek ani kosmetyków zawierających drobinki peelingujące.
- * Unikać ekspozycji na promieniowanie UV przez 24 godziny po zabiegu; w razie potrzeby zastosować krem z filtrem przeciwsłonecznym.
- * Sztuczne opalanie jest niedozwolone podczas zabiegów depilacji.
- * Jeśli po depilacji (dotyczy wyłącznie obszaru poddanego zabiegowi) planowana jest operacja plastyczna, należy skonsultować się z lekarzem.
- * W przypadku wystąpienia dyskomfortu należy przerwać korzystanie z produktu i skonsultować się z lekarzem

• Czyszczenie i konserwacja

- * W celu zapewnienia najlepszych efektów oraz najdłuższej żywotności urządzenia należy czyścić je przed i po każdym zabiegu depilacji, aby zapobiec długotrwałemu gromadzeniu się włosów i kurzu. Jeśli nie będą Państwo regularnie czyścić urządzenia, nie uzyskają Państwo właściwego efektu.
- * Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie musi być wyłączone i odłączone od zasilania, aby mogło całkowicie ostygnąć. * Użyj miękkiej, czystej i suchej ściereczki do przetrucia i wyczyszczenia powierzchni lustrzanej wylotu światła. * Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu środowisku , w temperaturze od -10 do 60°C.
- * Nie myj tego produktu ani akcesoriów pod bieżącą wodą ani w zmywarce. * Nie używaj stalowych kulek, środków czyszczących o właściwościach ściernych (np. pasty do zębów) ani płynów żrących (benzyna, olej silnikowy, aceton itp.) do czyszczenia produktu.
- * UWAGA: Jeśli woda nie czyści wystarczająco, możesz użyć kilku kropel alkoholu o wysokim stężeniu (nie więcej niż 95%), aby wyczyścić powyższe elementy.

• Ochrona środowiska

Podczas utylizacji produktu nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi, lecz przekaż do wyznaczonego punktu zbiórki, co jest korzystne dla środowiska.

FAQ		
Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć	Zasilanie nie jest podłączone.	Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony
Brak możliwości emisji błysku	Czy temperatura lampy lub urządzenia jest zbyt wysoka? Czy głowica lampy urządzenia jest całkowicie przyłożona do skóry?	Poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed użyciem. Przyłóż urządzenie blisko skóry i poczekaj, aż na ekranie pojawi się ikona RA
Wyświetlacz nie pokazuje	Uszkodzone urządzenie.	Sprawdź, czy zasilacz działa prawidłowo. Napraw lub wymień produkt natychmiast.
Nieprzyjemny zapach podczas błysku	Filtr jest brudny, na powierzchni urządzenia znajdują się resztki włosów.	Przetrzyj filtr, ogol włosy i zmniejsz poziom energii
Nie do zniesienia ból podczas usuwania owłosienia	Nieogolenie obszaru przeznaczonego do depilacji.	Przed użyciem tego produktu ogolony na obszarze przeznaczonym do nacierania. Jeśli golenie powoduje alergię skóry, skróć włosy tak bardzo, jak to możliwe i używaj na komfortowym ustawieniu
	Obszar przeznaczony do depilacji nie nadaje się do użycia tego produktu.	Nie używaj tego produktu na wewnętrznych wargach, wargach, podniebieniu, brodawkach sutkowych i odciskach sutkowych, a mężczyźni nie powinni używać tego produktu na twarzy ani mochnie.
	Zbyt wysokie natężenie światła.	Zmniejsz intensywność światła do komfortowego poziomu
Po depilacji obszar, z którego usunięto włosy, staje się czerwony	Uszkodzone okno transmisyjne światła.	Napraw lub wymień produkt natychmiast.
Niezadawalający efekt usuwania owłosienia	Niewielkie zaczerwienienie jest normalne, nieszkodliwe i szybko ustępuje.	Ukojenie skóry żelam z aloesu, lub użyj zimnego okładu, aby ukoić
	Używasz ustawienia natężenia światła, które jest dla Ciebie zbyt niskie.	Proszę wybrać wyższy poziom następnym razem
	Nie wykonujesz błysków na obszarach blisko wcześniej traktowanych miejsc.	Błyski powinny być wykonywane blisko siebie, a obszary błysków powinny się częściowo pokrywać.
	To urządzenie nie ma wpływu na kolor Twoich włosów.	Jeśli Twoje włosy są blond, siwe, rude lub białe, zabieg nie będzie skuteczny.
	Niewystarczające użycie tego urządzenia	Aby skutecznie usunąć wszystkie włosy , zalecamy stosowanie się do zalecanego okresu zabiegów.
Urządzenie nagrzewa się i staje się wilgotne podczas użytkowania.	Reagujesz powoli na działanie światła	Urządzenie należy stosować nieprzerwanie przez co najmniej 5 miesięcy, ponieważ w tym czasie odrastanie włosów może być nadal zahamowane.
Urządzenie nagrzewa się i staje się wilgotne podczas użytkowania.	Ze względu na przedłużoną obsługę urządzenia	Wyłącz urządzenie i pozwól mu odpocząć. Użyj urządzenia po wystarczającym rozproszeniu ciepła.

Gwarancja

1. Okres gwarancji:

★ Gwarancja na urządzenie: 1 rok ograniczonej gwarancji od daty zakupu.

2. Podział odpowiedzialności gwarancyjnej:

★ Wszelkie problemy jakościowe w okresie gwarancji będą naprawiane bezpłatnie, jeśli są spowodowane czynnikami niezależnymi od użytkownika; inne usterki powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub działania siły wyższej nie są objęte gwarancją.

3. Warunki gwarancji:

★ W przypadku ubiegania się przez użytkownika o bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji należy przedstawić ważny dowód zakupu (np. kartę gwarancyjną).

• Jeśli odeślesz urządzenie z powodu niewłaściwego zapakowania przez siebie i produkt zostanie uszkodzony podczas transportu. Bezpłatna konserwacja ani wymiana nie będą akceptowane.

★ Jeśli dotyczy to poniższych punktów, nasza firma nie ponosi za to odpowiedzialności i nie obejmuje tego gwarancja.

a. W przypadku pożaru, trzęsienia ziemi, działania osób trzecich, celowego, niedbałego lub niewłaściwego użytkowania przez klienta, użytkowania w innych nietypowych warunkach, nieprzewidywalnych zdarzeń itp.

b. Szkody uboczne dotyczące funkcji lub użytkowania towaru (utrata korzyści biznesowych, przerwy w działalności, w tym utrata możliwości korzystania z urządzenia, koszty wymiany jakiegokolwiek sprzętu, urządzenia lub usługi, lub roszczenia klientów).

c. Uszkodzenia spowodowane stosowaniem metod innych niż opisane w niniejszej instrukcji.

d. Okoliczności niezależne od naszej firmy:

gdy problem dotyczy akcesoriów lub zamienników, które nie są sprzedawane przez naszą firmę, oraz usług i części niezbędnych do rozwiązania problemu; oraz problemy wynikające z akceptacji nieautoryzowanych modyfikacji lub serwisów. Niewłaściwe użytkowanie, nadużycie, obsługa, konserwacja lub nielegalne reklamacje dotyczące urządzenia niezgodnie z instrukcjami firmy.

e. Awaria lub uszkodzenie spowodowane użytkowaniem w środowisku pracy nieokreślonym przez producenta, w tym przeciążenie.

f. Awaria spowodowana niewłaściwym przechowywaniem przez użytkownika (takim jak uszkodzenia przez gryzonie, przedostanie się cieczy itp.)

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu.