


SEAGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

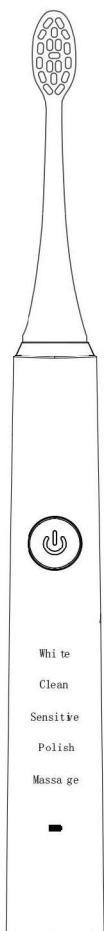

SZCZOTECZKA SONICZNA

Model: S5

Ważne zagadnienia


- Często zdarza się że osoby które korzystają ze szczoteczki sonicznej po raz pierwszy czują dyskomfort, laskotania etc. Nie przejmuj się, to normalne. Dziaśła muszą się przyzwyczaić do drgań jakie odczuwa podczas szczotkowania. Po kilku użyciach uczucie minie.
- Nie otwieraj szczoteczki we własnym zakresie oraz nie próbuj jej sam naprawiać.
- Jeśli produkt posiada jakieś defekty, przestań z niego korzystać.
- Szczoteczkę należy ładować zasilaczem o maksymalnym natężeniu 5V 1A. Użycie szybkich ładowarek bądź ładowarek innych niż zalecane powyżej może skutkować uszkodzeniem szczoteczki.
- Jeśli twoje dziąsła podczas szczotkowania krwawią, skonsultuj korzystanie ze szczoteczki sonicznej ze swoim dentystą
- Przechowuj urządzenie zdala od wysokich temperatur oraz bezpośredniego słońca

Korzystanie ze szczoteczki

1. Podłącz kabel do zasilania aby naładować spręż przed pierwszym użyciem.
2. Podłącz główkę szczoteczki i upewnij się że jest poprawnie zamontowana i zablokowana. Zwiłż końcówkę oraz nałóż pastę do zębów.
3. Delikatnie umieść główkę szczoteczki na zębach.
4. Wykonuj delikatne ruchy po zębach, nie musisz mocno dociskać szczoteczki do zębów.
5. Możesz wybrać jeden z pięciu trybów pracy szczoteczki. Możesz dowolnie korzystać z trybu który pasuje Ci najbardziej. Szczoteczka co 30 sekund zasygnalizuje Ci aby przejść do mycia kolejnej partii zębów. Po 2 minutach szczoteczka wyłączy się automatycznie.

Ładowanie szczoteczki

1. Jeśli lampka LED mruga na czerwono zaraz po użyciu szczoteczki bądź urządzenia nie da się poprawnie wyłączyć oznacza to że sprzęt jest rozładowany i należy go naładować.
2. W trakcie ładowania lampka LED powinna świecić się na czerwono. Jeśli bateria zostanie naładowana do pełna lampka wyłączy się automatycznie a proces ładowania się zakończy.
3. Przed pierwszym użyciem bądź po długiej przerwie od korzystania ze sprzętu lampka LED może potrzebować około 5-10 minut aby wyjść z trybu uśpienia, dopiero wtedy zacznie świecić.

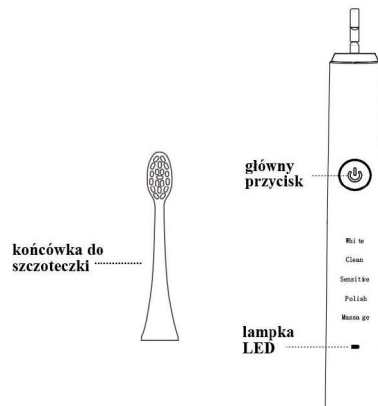

Krok 1



Krok 2

Parametry techniczne :

Model: S5

Input voltage: 5V ==

Input power: 1.5W

Product material: ABS/TPE/Nylon

Toothbrush size: 27×26×247mm

Charging time: ≤ 4 hours

Working temperature: 0-50°C

Operative standard: GB4706.59-2008

Origin: China