




KIDS SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH SG-977

Instruction Manual




Thanks for choosing SEAGO.
Before use, please read the instructions
carefully and keep it at a safe place
for future reference.


A

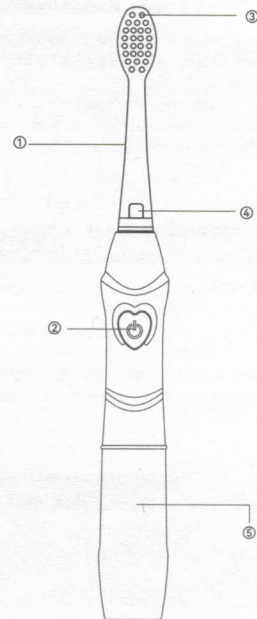


B

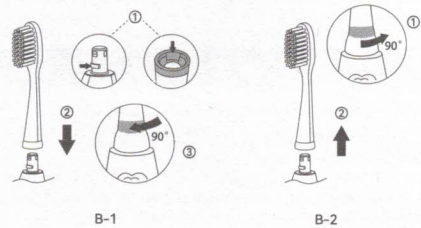

C

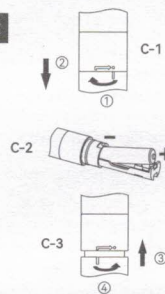

D

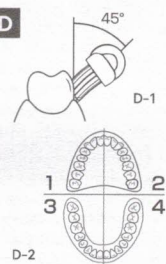

Instrukcja obsługi (PL)

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

1. To urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały przekazane lub poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Bateria na wynos, jeśli nie ma zamiaru używać produktu przez dłuższy czas.
4. Nie czyść główek szczoteczek i uchwytu szczoteczek do zębów w zmywarce.
5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, gum i języka. Nie używaj go w żadnym innym celu. Przestań używać urządzenia i skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania wsparcia, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort.
6. Przestań używać główek szczoteczek ze zmiężdżonym lub wygiętym włosiem. Wymień główkę szczoteczek co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawiają się oznaki zużycia.
7. Jeśli używana pasta do zębów zawiera wodorowęglan sodu, nadtlenek lub inny wodorowęglan (powszechne składniki wybielającej pasty do zębów), pamiętaj, aby dokładnie umyć główkę szczoteczek mydłem po każdym użyciu, co może zapobiec pękaniu plastiku.
8. Jeśli miałeś operację jamy ustnej lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, skonsultuj się ze swoim dentystą przed użyciem tego urządzenia.
9. Zaleca się używanie baterii AAA, niewłaściwa bateria może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
10. Ten produkt zawiera małe części i nie należy go połykać.
11. Nie moczyc produktu w wodzie przez długi czas.

Parametry Produktu

Rozmiar Produktu	19×19×187mm
Napięcie Wejściowe	1.5V ---
Moc Wejściowa	0.35W
Materiał Produktu	ABS / TPE / Nylon
Poziom Wodoodporności	IPX7
Temperatura Pracy	5-40°C



Nazwa Komponentu

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| A-① Przezroczysta Główka Szczoteczek | A-④ Kolorowa Dioda LED |
| A-② Przycisk Zasilania | A-⑤ Pokrywa Baterii |
| A-③ Kolorowe Włosie Nylonowe | |

Wymiana Główek Szczoteczek

Zainstaluj: Włóż nową główkę szczoteczek, jak pokazano na (B-1).
Odlącz: Obróć główkę szczoteczek i pociągnij ją do góry, jak pokazano na (B-2)
Ostrzeżenie: Wycięcie po wewnętrznej stronie główek szczoteczek powinno być wyrównane z wewnętrznymi nacięciami na korpusie szczoteczek, aby główka szczoteczek zatrzasnęła się na swoim miejscu.

Wymiana Baterii

Obróć pokrywę baterii jako kierunek1, aby linia wskaźnika wyrównała się na strzałce, i wyciągnij jako 2.(C-1)
Włóż nową baterię AAA zgodnie z prawidłowym kierunkiem anody i katody.(C-2)
Naciśnij pokrywę baterii as3, aby linia wskaźnika wyrównała się na strzałce i obróć ją mocno jak4, a następnie linia wskaźnika wyrówna się na kropce.(C-3)

Funkcje

1. Wibracje dźwiękowe, do 24000 razy na minutę.
2. 1 AAA Bateria może wytrzymać 150 dni (dwa razy 2 minuty dziennie)
3. Tęczowe światło sprawia, że szczotkowanie jest zabawne.
4. Obserwująca dioda LED pomaga rodzicom sprawdzić stan jamy ustnej
5. Inteligentny timer, 2-minutowy autostop i 30-sekundowe przypomnienie o timerze do poruszania się, które może pomóc ci rozwinąć dobre nawyki szczotkowania.
6. Wodoodporny IPX 7. Może być używany pod prysznicem.

Jak Używać

1. Zwilż włosie i przetrzyj niewielką ilość pasty do zębów.
2. Umieść włosie przy trójkątniku o niewielkim kącie w kierunku linii dziąseł (D-1).
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać tryb. Jeśli znasz tryb używany ostatnim razem, nie musisz ponownie wybierać trybu. Istnieją 4 tryby.
TRYB 1: Biała dioda LED i działający silnik (codzienne użytkowanie)
TRYB 2: Kolorowa dioda LED i pracujący silnik (zabawa podczas szczotkowania)
TRYB 3: Praca silnika (oszczędzanie energii)
TRYB 4: Biała dioda LED (obserwacja)
UWAGI: Naciśnij przycisk zasilania w ciągu pięciu sekund po uruchomieniu, szczoteczka przełączy się na następny tryb i ponownie uruchomi dwuminutowy timer.
4. Zastosuj lekki nacisk i delikatnie przesuwaj główkę szczoteczek tam i z powrotem po zębach.
5. Aby zmaksymalizować skuteczność czyszczenia, podziel usta na 4 sekcje. Zaczynij od sekcji 1 i szczotkuj każdą sekcję przez 30 sekund. Działanie szczotkowania zatrzyma się między każdym 30-sekundowym odstępem, wskazując, kiedy przejść do następnej sekcji. Szczoteczka do zębów zatrzyma się automatycznie po 2 minutach użytkowania (D-2).