




SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH SG-575

/
Instruction Manual




Thanks for choosing SEAGO.
Before use, please read the instructions
carefully and keep it at a safe place
for future reference.


A

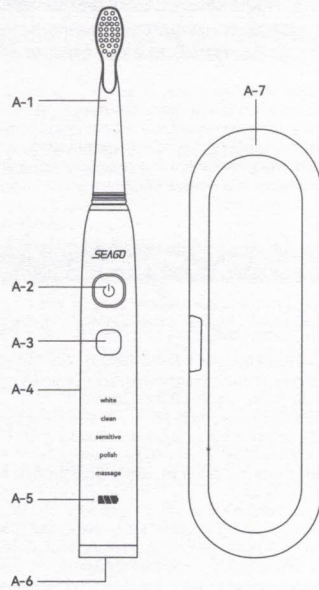

B

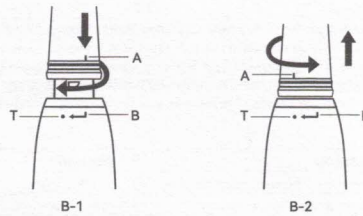

C

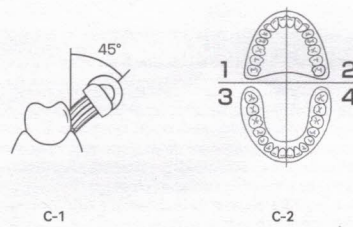

Instrukcja obsługi (PL)

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

1. To urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały przekazane lub poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Nie używaj ładowarki na zewnątrz lub w pobliżu ogrzewanych powierzchni.
4. Nie czyść główki szczoteczki i uchwytu szczoteczki do zębów w zmywarce.
5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, gum i języka. Nie używaj go w żadnym innym celu. Przystań używać urządzenia i skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania wsparcia, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort.
6. Przystań używać główki szczoteczki ze zmiężdżonym lub wygiętym włosiem. Wymień główkę szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawią się oznaki zużycia.
7. Jeśli używana pasta do zębów zawiera wodorowęglan sodu, nadtlenek lub inny wodorowęglan (powszechne składniki wybielającej pasty do zębów), pamiętaj, aby dokładnie umyć główkę szczoteczki mydłem po każdym użyciu, co może zapobiec pękaniu plastiku.
8. Jeśli miałeś operację jamy ustnej lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, skonsultuj się ze swoim dentystą przed użyciem tego urządzenia.

Parametry Produktu

Rozmiar Produktu	29*27*235mm
Napięcie Wejściowe	5V ~
Moc Wejściowa	1.5W
Materiał Produktu	ABS/TPE/Nylon
Czas ładowania	≤8h
Poziom Wodoodporności	IPX7
Temperatura Pracy	5-40°C



Nazwa Komponentu

A-1 Główka szczoteczki do zębów	A-5 Ładowanie Indicator
A-2 Przycisk Włączania/wyłączania	A-6 Interfejs ładowania
A-3 Przycisk trybu	A-7 Walizka podróżna
A-4 Uchwyt	

Wymiana Główki Szczoteczki

Zainstaluj: Włóż główkę szczoteczki do uchwytu. Wyłóż znak (A) ze znak (B), jak pokazano w B-1. Obróć główkę szczoteczki, aż znak (A) spotka się ze znak (T).
Odłącz: Obróć główkę szczoteczki, aż wyrównasz znak (A) ze znak (B), jak pokazano w B-2, a następnie wyciągnij ją wzdłuż uchwytu.

12

Funkcje

1. Skutecznie oczyść jamę ustną 40000 razy na minutę.
2. Z 5 trybami (biały, czysty, wrażliwy, polski, masaż), aby spełnić różne wymagania.
3. Wodoodporny IPX7.
4. Bezpieczna i trwała bateria litowa działa przez około 1 rok przy pełnym naładowaniu, z przypomnieniem o niedoborze mocy i ładowaniem USB.
5. Inteligentny timer, 2-minutowe automatyczne zatrzymanie i 30-sekundowe przypomnienie o timerze do poruszania się, co może pomóc Ci rozwinąć dobre nawyki szczotkowania.

Jak Używać

1. Zwilż włosie i przetrzyj niewielką ilość pasty do zębów.
2. Umieść włosie przy trójniku o niewielkim kącie w kierunku linii dziąseł (C-1).
3. Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb. Jeśli znasz tryb używany ostatnim razem, nie musisz ponownie wybierać trybu. Dostępnych jest 5 trybów: Biały, Czysty, Wrażliwy, Polski, Masaż.
UWAGI: Podczas szczotkowania, jeśli naciśniesz przycisk trybu, szczoteczka do zębów będzie działać w następnym trybie i rozpocznie kolejny 2-minutowy cykl, a wskaźnik trybu zaświeci się.
4. Zastosuj lekki nacisk i delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki tam i z powrotem po zębach.
5. Aby zmaksymalizować skuteczność czyszczenia, podziel usta na 4 sekcje. Zaczynj od sekcji 1 i szczotkuj każdą sekcję przez 30 sekund. Działanie szczotkowania zatrzyma się między każdym 30-sekundowym odstępem, wskazując, kiedy przejść do następnej sekcji. Szczoteczka do zębów zatrzyma się automatycznie po 2 minutach użytkowania (C-2).

Instrukcje ładowania

1. Gdy czerwony wskaźnik miga po użyciu lub produktu nie można normalnie włączyć. Wskazuje, że moc baterii jest niska i wymaga naładowania.
2. Przy pierwszym użyciu lub niedoładowaniu akumulatora przez długi czas wskaźnik może nie świecić się przez pierwsze 5 minut.
3. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik jest czerwony podczas ładowania produktu. Po pełnym naładowaniu wyłączy się automatycznie, aby zapobiec przeladowaniu. (patrz wykres poniżej)

Status wskaźnika	Stan baterii
Lampka kontrolna wyłączona, produkt nie działa	< 10 %
Lampka kontrolna pulsująca na czerwono	10 % - 30 %
1/3 lampki kontrolnej pulsującej na zielono	30 % - 50 %
2/3 lampki kontrolnej pulsującej na zielono	50 % - 80 %
Lampka kontrolna całkowicie pulsująca na zielono	80 % - 100 %
Lampka kontrolna wyłączona	100 %

Utylizacja

1. Źródłem zasilania tego produktu jest bateria litowo-jonowa, którą można poddać recyklingowi. Pod koniec życia produktu wyjmij baterię przed wyrzuceniem produktu, recyklingiem lub wyrzuceniem baterii zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi gospodarki odpadami. Jeśli masz pytania dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym biurem gospodarki odpadami, aby poprosić o pomoc.
2. Zanim zdecydujesz się wyjąć baterię, musisz przygotować dwa narzędzia: szczypcy i nożyczki.
3. Podczas korzystania z narzędzi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i podjąć środki ochronne, aby uniknąć obrażeń.

13