


# INSTRUKCJA UŻYCIA PIÓRA DO USUWANIA FARB



## LCD

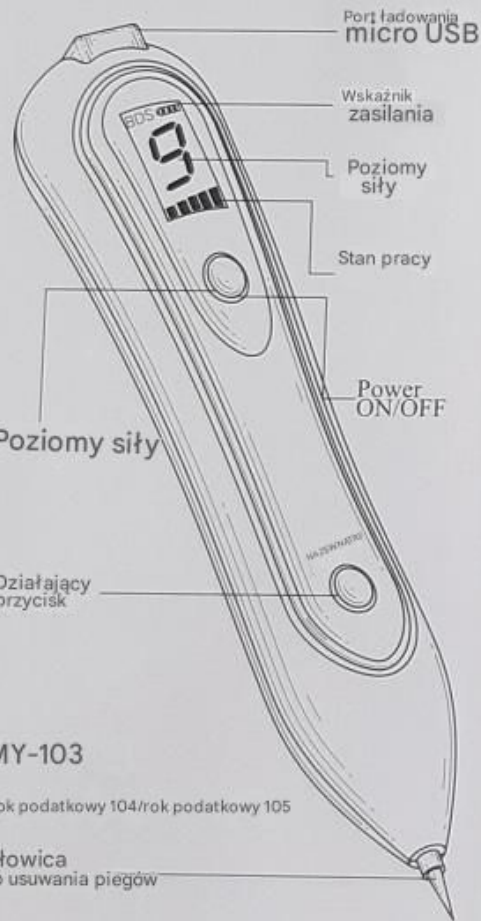

MY-103



Wybór poziomu 1-4 do podkładki 105

PROWADZONY



Światło LED



MY-103

Wybór poziomu 1-4 do podkładki 105

## Pióro do usuwania pieprzyków:

Dzięki technologii jonizacji węgla ten długopis do usuwania znamion może bezpiecznie, skutecznie i bezkrawawo usuwać znamiona i piegi, bez nieprzyjemnego uczucia porażenia prądem.



Technologia mikrowylądowań plazmowych



(2-10 tygodni) Pełny powrót do zdrowia

## Porównanie igieł:

1. Gruba igła (do wielokrotnego użytku): Do stosowania na większych znamionach, piegach, brodawkach itp. Ta bardziej wytrzymała, mocna igła może szybko usuwać skazy.
2. Cienka igła (jednorazowego użytku): Do stosowania na stosunkowo małych znamionach, piegach i innych skazach. Cienka igła jest lepsza do pracy nad szczegółami i jest mniej bolesna w użyciu. Więcej cienkich igieł można kupić u nas.

Wybór igły:  
Cienka igła



Wybór poziomu: 1-4



Rośliność skóry



Złazna tłuste



Piegi



Plany starczy



Wybór igły  
Igła gruba




Wybór poziomu: 5-9



Brodawki



Brodawka

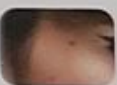

Większe znamiona i piegi



Tatuże

## Środki ostrożności: Przed użyciem:

1. Przed użyciem zdezynfekuj igłę oraz docelową powierzchnię skóry wacikiem nasączonym alkoholem.
  2. Osoby wrażliwe lub stosujące większe moce mogą przed usunięciem niedoskonałości nałożyć na obszar docelowy krem znieczulający (nie wchodzi w skład zestawu).
  3. Przed usunięciem pierwszego pieprzyka lub znamienia zaleca się krótkie ćwiczenie na mniej wrażliwym obszarze, aby zapoznać się z funkcjami pisaka, a także z odczuciami podczas jego używania.
  4. Określ poziom siły:
    - A. W przypadku mniejszych piegów i znamion zaleca się używanie ustawienia mocy niższego niż poziom 3.
    - B. W przypadku większych skaz może być konieczny poziom mocy powyżej 3.
  5. Kluczem do używania tego długopisu jest delikatne dotykane każdego miejsca, dotykając tylko górnej warstwy skóry. Zaleca się delikatne przesuwanie tam i z powrotem po skazie. W przypadku głębszych znamion przechyl pióro i użyj mniejszej siły przy wielokrotnych aplikacjach.
- Nie przebijaj skóry igłą i nie zatrzymuj się zbyt długo na jednej wadzie.

## Środki ostrożności po użyciu:

1. Cierpliwość jest kluczowa.
2. W przypadku małych i średnich niedoskonałości, po tygodniu na leczonym obszarze utworzy się strup. Po około 2 tygodniach strup powinien odpaść naturalnie, a wszelki ślad po skazie zniknie.
3. W przypadku większych znamion i piegów gojenie może trwać dłużej, ale efekt będzie widoczny wkrótce. Wszelkie pozostałe przebarwienia oznaczają, że pigment jest głębiej w skórze. W takim przypadku obszar można poddać ponownemu leczeniu, ale należy poczekać, aż pierwszy zabieg całkowicie się zagoi.
4. W okresie gojenia należy ograniczyć do minimum ekspozycję na słońce.
5. Jak zawsze, dbanie o ogólny stan zdrowia (picie dużej ilości wody, jedzenie większej ilości warzyw, cytrusów i orzechów) przyczyni się do szybszego powrotu do zdrowia.
6. W okresie rekonwalescencji nie zaleca się spożywania imbiru, wołowiny i sosu sojowego.
7. Nie pij wina i nie zażywaj aspiryny (lub podobnych leków) przez tydzień po zabiegu usuwania niedoskonałości.
8. W ciągu tygodnia od usunięcia znamienia/piega należy unikać forsownych ćwiczeń powodujących nadmierne pocenie.

9. Wzrostagranie procesu zdrowienia w celu tego dostarczajemy w oparciu o stosowanie leku leczniczego.

## Specjalne przypomnienie:

1. Użytkownikom, którzy po raz pierwszy używają urządzenia, zaleca się przewiedowanie go na grzbiecie dłoni przed użyciem na wrażliwym, delikatnym obszarze.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Nie myj obszaru objętego zabiegiem przez 2 tygodnie po usunięciu skazy.
4. Nie zdrapuj strupów pozostawionych przez leczenie niedoskonałości. Bądź cierpliwy i pozwól naturze działać.

5. W zależności od wielkości skazy, okres rekonwalescencji może wynosić od 2 do 10 tygodni.

## Stosowanie:

### Usuń miejsce:

Aby usunąć plamę, umieść przyrząd do usuwania znamion, lekko dotykając plamy, delikatnie przesuwając w przód i w tył, można wyraźnie zauważyć, że melanina spali się i odpadnie. W przypadku małej plamy można ją usunąć tylko raz. W przypadku ciemnej plamy zaleca się karbonizację przez 2-3 razy. Klient powinien pozostać nieruchomy, a ręka kosmetyka, która trzyma urządzenie, powinna być zrównoważona podczas procesu użytkowania, w przeciwnym razie spowoduje to pieczenie, a także wpłynie na gojenie się rany, powodując powstanie blizny.

Usuń pieprzyk kropkowy:

Podczas usuwania pieprzyka kropkowego, zwróć uwagę na rozróżnienie rozmiarów pieprzyków. Niektóre pieprzyki rosną na nakórku, podczas gdy inne są płytkie. Nie przebijaj powierzchni pieprzyka od razu, lepiej jest spalić mały obszar. W przypadku złego pieprzyka, unikaj stanu zapalnego rany po leczeniu, najlepiej jest nałożyć trochę kremu znieczulającego przed upływem 2-3 dni od momentu wygojenia się rany. Uwaga: Przestań używać kremu znieczulającego, jeśli rana jest zapalona.

### Usuń granulację:

Proszę delikatnie dotknąć ziarninowania końcówką długopisu, aby spalić powstałe komórki ziarninowe. Odpadną one automatycznie w ciągu tygodnia. W przypadku małej ziarninowania można je usunąć tylko raz, podczas gdy wielokrotne operacje w celu usunięcia złej ziarninowania na dużym obszarze zapobiegają gojeniu się rany.

### Usuń tatuaże:

Zwykle obszar tatuażu jest duży i należy wybrać grubą igłę. Sposób usuwania tatuażu jest podobny do usuwania plam. Zaleca się wielokrotne usuwanie tatuażu na dużym obszarze (ponad 3 cm), aby zapewnić dobry efekt i bezpieczeństwo. W przypadku silnego stanu zapalnego należy

natychmiast leczyć w szpitalu. Uwaga: W przypadku naszego urządzenia do usuwania znamion zaleca się jedynie małe tatuaże, w przypadku dużych lepiej jest leczyć je w szpitalu lub u kosmetyka w celu profesjonalnego usunięcia.

## Etapy operacji: FY-103

1. Wybierz odpowiednią igłę i zamontuj ją na końcówce pióra.



3. Kliknij przycisk WŁ./WYŁ., aby zmienić poziom prędkości.



2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby włączyć diodę LED (na wyświetlaczu LCD pojawi się wartość natężenia prądu i ikona zasilania).



4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania dwa razy z rzędu, na ekranie wyświetli się oznaczenie LED i zasilanie się diody LED. (Połączenie czujnika, dioda LED nie będzie działać)



5. Po użyciu naciśnij przycisk zasilania na 3 sekundy, aby wyłączyć pióro. Ekran LCD zgaśnie.



## Etapy operacji: FY-104-105

1. Wybierz odpowiednią igłę i zamontuj ją na końcówce pióra.



3. Kliknij przycisk WŁ./WYŁ., aby zmienić poziom prędkości.



5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OUT, aby rozpocząć pracę. Na ekranie LCD wyświetli się moc jonów elektrycznych, ikona miga, aby pokazać, że moc jonów elektrycznych jest normalna, zwolnij, aby zatrzymać pracę.



2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby włączyć diodę LED (na wyświetlaczu LCD pojawi się wartość natężenia prądu i ikona zasilania).



4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania dwa razy z rzędu, na ekranie wyświetli się oznaczenie LED i zasilanie się diody LED. (Jeśli czynność zostanie powtórzona, dioda LED nie będzie działać)



6. Po użyciu naciśnij przycisk zasilania na 3 sekundy, aby wyłączyć pióro. Ekran LCD zgaśnie.

