


Obsługa

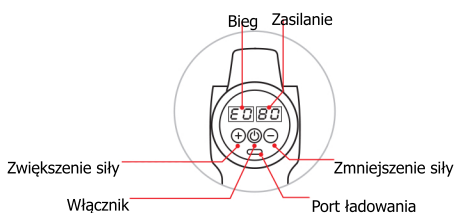

Funkcje

- ## Wprowadzenie

Urządzenie przeznaczone jest do masażu, r

Parametry

Napięcie akumulatora: 7.4 V

-3-

Dziękujemy za zakup produktu

Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia podczas korzystania z masażera, przed użyciem zapoznaj się z instrukcją.

Obstūga

- Nie należy masować jednej partii mięśni przez dłuższy niż 1 – 2 minuty. Masaż przeprowadza się w seriach.
- Należy odpowiednio dobrać końcówkę do masowanej części ciała.
- Masaż należy wykonywać wzdłuż mięśni, od góry do dołu.
- Nie należy przykładać masażera do kości.
- Masażer należy przesuwać powoli, jednostajnym ruchem. W przypadku napotkania szczególnie wymagającego masażu miejsca, możesz zatrzymać się w nim na krótką chwilę.
- W trakcie masażu rozluźnij się i głęboko oddychaj.

Akkumulator

Konservacija

1. Produkt należy przetworzyć lekko wilgotną, miękką ściereczką po każdym użyciu.
2. Jeśli nie będziesz korzystać z produktu przez dłuższy okres, należy wyjąć z niego akumulator.

Problem

Ostrzeżenia

-2-

Demontaz akumulatora

