

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przyrząd do ćwiczeń wspomaganych

Kod produktu: PullTIM




1. Wykonanie

Przyrząd do ćwiczeń wspomaganych wykonany jest ze stalowego ramienia w kształcie litery „V”. Dzięki klamrze mocującej, ramię można zamocować na drzwiach o różnej grubości. Przyrząd wyposażony jest w dwie ręczki połączone sznurkiem, które dzięki systemowi bloczków umożliwiają ćwiczenia rehabilitacyjne kończyn górnych i górnej części tułowia.

Elementy (Rys. 1):

- klamra mocująca – 1 szt.
- ramię „V” – 1 szt.
- bloczki – 2 szt.
- ręczki – 2 szt.
- sznurek – 1 szt.

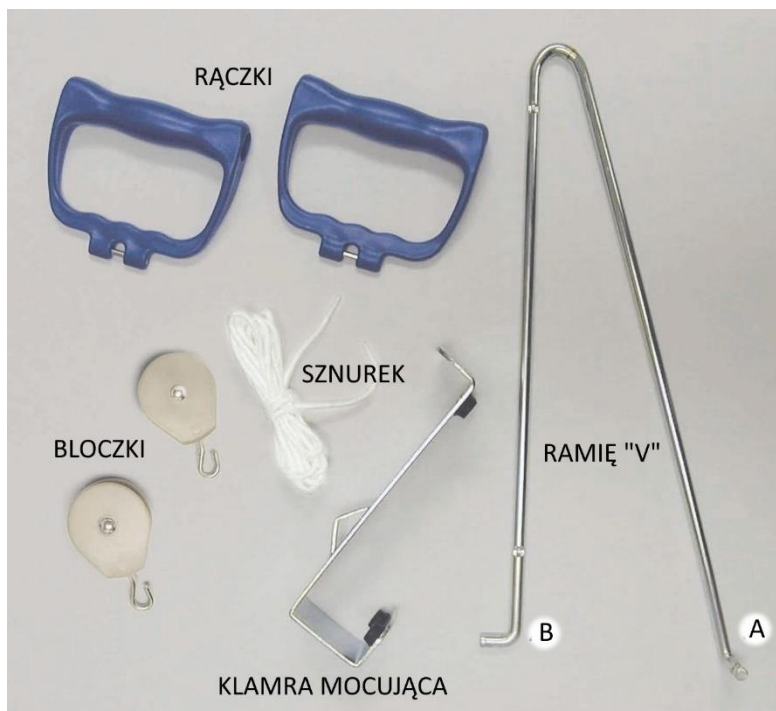

Rys. 1

2. Zastosowanie

Przyrząd służy do ćwiczeń i rehabilitacji kończyn górnych, obręczy barkowej i górnej części tułowia.


Wskazania do stosowania:

- Odbudowa zakresu ruchów w stawach kończyn górnych.

- Przykurcz lub zanik mięśniowy spowodowany długotrwałym usztywnieniem (opatrunek gipsowy lub zabieg operacyjny).
- Przywrócenie funkcji motorycznych oraz rekonstrukcja prawidłowego wzorca ruchowego (problemy neurologiczne).

3. Montaż, regulacja

- Wsunąć pierwszy bloczek na ramię „V” stronę A (Rys. 1) i przesunąć do miejsca blokady.
- Wsunąć drugi bloczek na ramię „V” stronę B (Rys. 1) i przesunąć do miejsca blokady.
- Zamocować ramię „V” na klamrze mocującej:
 - koniec A ramienia „V” włożyć do otworu montażowego A w klamrze mocującej (Rys. 2),
 - koniec B ramienia „V” włożyć do otworu montażowego B w klamrze mocującej (Rys. 2).
- Zawiesić przyrząd na drzwiach za pomocą klamry mocującej.
- Przeciągnąć sznurek przez oba bloczki.
- Końcówki sznurka przeciągnąć przez środkowe otwory w rączkach i mocno związać na odpowiedniej wysokości.

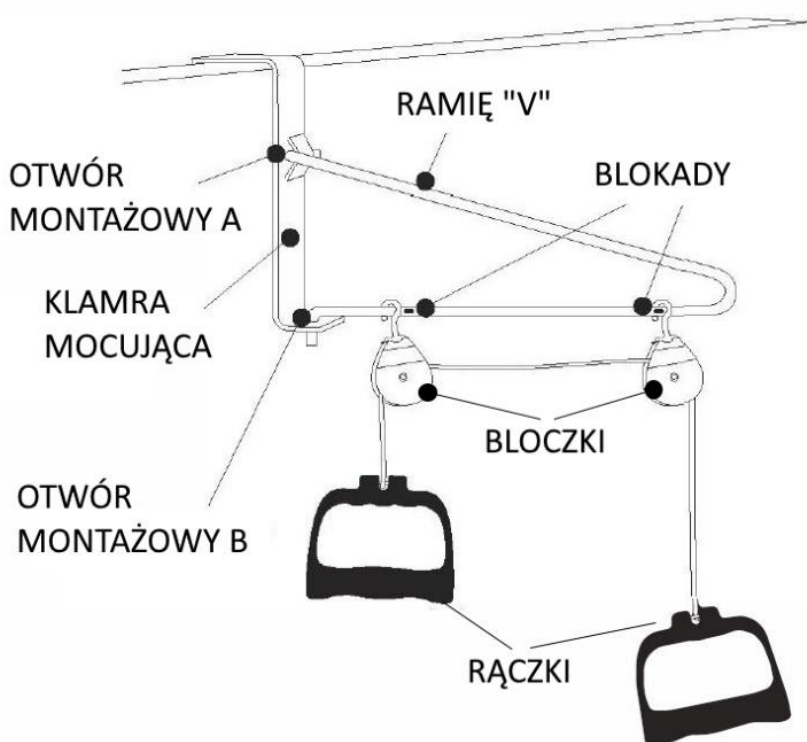

Rys. 2

UWAGA: Przyrząd może być używany opcjonalnie z jedną rączką i niewielkim ciężarkiem przymocowanym do przeciwległego końca sznurka.

UWAGA: Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać, nie powinny korzystać z tego produktu bez pomocy osób trzecich.

UWAGA: Sprawdzić przyrząd przed użyciem i upewnić się, że wszystkie części są bezpieczne, a lina nie wykazuje oznak nadmiernego zużycia.

4. Specyfikacja techniczna

Waga wyrobu	0,68 kg
Maks. obciążenie bloczka	5 kg
Szerokość drzwi	3,50 - 4,15 cm

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z przyrządu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego przyrządu:

- Zaleca się regularne czyszczenie miękką szmatką i wodą z mydłem. Po wyczyszczeniu przyrządu należy osuszyć go miękką szmatką,
- Nie używać do czyszczenia mocnych detergentów,
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



07/202(I)