

VITAMMY®

splash

SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

Model TB8132A-CE

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór szczoteczki sonicznej VITAMMY SPLASH (TB8132-CE).

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasady dbania o zakupiony produkt oraz przewodnik, jak poprawnie korzystać z urządzenia.


△ Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa wraz z poniższymi:

- △ Przeczytaj wszystkie instrukcje dostarczone przez producenta.
- △ Upewnij się, że napięcie sieci elektrycznej jest zgodne z podanym na urządzeniu.
- △ By uniknąć pożaru, porażenia prądem czy innych obrażeń, nie używaj ładowarki w łazience, nie zanurzaj przewodu, wtyczki czy ładowarki w wodzie, ani innych płynach. Nie płucz ładowarki wodą.
- △ Nie używaj ładowarki, jeśli jej przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona.
- △ Odłączając ładowarkę od sieci elektrycznej, chwyć za wtyczkę, nie za przewód. Nie dotykaj wtyczki mokrą dłońią.
- △ W przypadku, gdy ładowarka pod napięciem wpadnie do wody, najpierw odetnij zasilanie i dopiero wtedy wyjmij ładowarkę z wody.
- △ Nie zanurzaj szczoteczki w gorącej wodzie.
- △ To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach psycho-motorycznych jedynie po dokładnym instruktażu dotyczącym bezpiecznego posługiwania się tym urządzeniem i po zrozumieniu związanych z jego użytkowaniem ryzyk. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- △ To urządzenie może być używane przez dzieci i osoby niepełnosprawne lub w pobliżu dzieci i osób niepełnosprawnych wyłącznie pod nadzorem.
- △ Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być powierzane dzieciom bez nadzoru osób dorosłych.
- △ Nie przyciskaj szczoteczki do zębów i/lub dziąseł z dużą siłą. Nie myj jednego miejsca przez dłuższy czas, by uniknąć uszkodzenia powierzchni zębów i/lub dziąseł.
- △ Przed każdym użyciem szczoteczki sprawdź, czy nie jest uszkodzona.
- △ Skonsultuj ze swoim stomatologiem, czy możesz bezpiecznie korzystać ze szczoteczki sonicznej, jeśli jesteś po przebytej operacji lub zabiegu dentystycznym.
- △ Na początku używania szczoteczki może pojawiać się krwawienie z dziąseł. Jeśli nie ustąpi po tygodniu stosowania szczoteczki, skonsultuj to z lekarzem.
- △ Jeśli masz rozrusznik serca lub inne elektroniczne implanty, skonsultuj się z lekarzem przed pierwszym użyciem szczoteczki.
- △ Szczoteczka jest przeznaczona do użytku indywidualnego – nie używaj jej razem z innymi ludźmi.
- △ Zaleca się wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.
- △ Urządzenie można ładować jedynie zasilaczem o specyfikacji DC 5 V/ ≥0.5 A.
- △ Akumulator szczoteczki zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego, dlatego należy zutylizować szczoteczkę zgodnie z przepisami. Nie wyrzucaj szczoteczki ani ładowarki do śmieci.

OPIS URZĄDZENIA

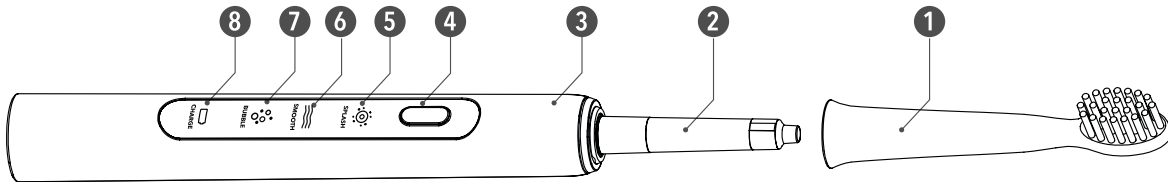


1. Główka szczoteczki
2. Trzpień wibrujący
3. Uchwyt
4. Przycisk I/O
5. Tryb „SPLASH”
6. Tryb „SMOOTH”
7. Tryb „BUBBLE”
8. Wskaźnik ładowania akumulatora

PRZED UŻYCIEM

NAŁADUJ SZCZOTECZKĘ

- △ UWAGA! Przed ładowaniem należy wyłączyć szczoteczkę.
- △ Upewnij się, że ładowarka spełnia wymagania: DC 5 V, ≥0,5 A.

1. Podłącz przewód do szczoteczki jak na rysunku obok. Podłącz drugi koniec kabla (wtyczka USB) do ładowarki, a następnie włącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. W trakcie ładowania wskaźnik szczoteczki zacznie pulsować. Gdy szczoteczka będzie w pełni naładowana, wskaźnik zacznie świecić ciągle.

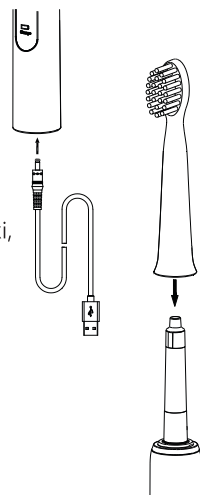

ZAINSTALUJ GŁÓWKĘ SZCZOTECZKI

1. Załóż główkę szczoteczki zgodnie z rysunkiem obok.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Nałóż pastę do zębów na **wyłączoną** szczoteczkę.
2. Włóż szczoteczkę do ust i przyłóż włókna szczoteczki do powierzchni zębów.
3. Włącz szczoteczkę przyciskiem I/O i zacznij myć zęby.

△ UWAGA! Nie przyciskaj przycisków paznokciem, bo możesz w ten sposób uszkodzić powierzchnię przycisków.

4. Szczoteczka będzie działała przez 4 okresy po 30 sekund każdy z krótką przerwą między nimi. Po ostatnim cyklu szczoteczka wyłączy się automatycznie.
5. Po skończeniu opłucz główkę szczoteczki pod bieżącą wodą. Strzepnij nadmiar wody z główki szczoteczki i osusz uchwyt ręcznikiem.

△ Urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego.

ZMIANA TRYBÓW PRACY

Szczoteczka Vitammy SPLASH oferuje trzy style szczotkowania:

- **SPLASH:** Codzienna porcja świeżości spojrzenia. Uderzenie energii, które usunie płytkę nazębną i wszystkie zanieczyszczenia. Twoje zęby staną się bielsze, gdy podejmiesz wyzwanie systematycznego sonicznego szczotkowania! Styl idealny o poranku.
- **SMOOTH:** Take it easy. Delikatne wibracje, które czyszczą i koją.
- **BUBBLE:** Musujący efekt masujący. Czyści zęby, a jednocześnie masuje Twoje dziąsła.

W trakcie pracy szczoteczki możesz zmieniać tryb jej pracy. Po uruchomieniu urządzenia naciśnij przycisk I/O by zmienić tryb pracy w kolejności: SPLASH → SMOOTH → BUBBLE. Szczoteczka zapamięta wybrany tryb i od niego zacznie kolejne mycie.

△ Jeśli szczoteczka rozładuje się, czerwona dioda ładowania zacznie migać. Wyłącz szczoteczkę i naładuj ją.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- △ Szczoteczkę czyść wilgotną, miękką szmatką.
- △ Opłucz całą szczoteczkę pod bieżącą wodą o temperaturze niższej niż 45°C.
- △ UWAGA: Nigdy nie zanurzaj całej szczoteczki w wodzie. Nigdy nie używaj do czyszczenia trujących środków czyszczących.
- △ UWAGA: Do czyszczenia nie używaj żrących środków chemicznych, szorstkich materiałów ściernych czy włókny stalowej.

Zalecamy wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Przeczytaj instrukcję		Producent
	Prąd stały		Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE
	Data produkcji		Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie nie może być zutylizowane wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny lub oddać w sklepie, gdzie kupisz podobny sprzęt. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację sprzętu. Prawidłowo zutylizowane urządzenie może być poddane recyklingowi, co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie.
	Numer partii		
	Podwójna izolacja		
	Importer		

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1. Uchwyt szczoteczki VITAMMY SPLASH (TB8132A-CE)
2. 1 końcówka szczoteczki
3. 1 przewód zasilający
4. Instrukcja używania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 1,2 V

Moc: 1W

Specyfikacja zasilacza: 5 V, 1 A

GWARANCJA

URZĄDZENIE	VITAMMY SPLASH (TB8132A-CE)	
GWARANT	Novamed.pl S.A. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź	
WSPARCIE TECHNICZNE	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl	
GWARANCJA	Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie objętym niniejszą gwarancją gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w terminie do 14 dni. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki.	
TYP GWARANCJI	Gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt zostanie dostarczony do Serwisu Technicznego, ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź, a następnie naprawiony lub wymieniony i dostarczony bezpłatnie Kupującemu.	
OKRES GWARANCJI	24 miesiące na urządzenie	
	Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: końcówki szczoteczki.	
BIEG OKRESU GWARANCJI	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.	
OBSZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI	Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.	
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.	
WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.	
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.	
	Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych	
	ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)	
	Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.	
	Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.	
PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY	Data	Podpis klienta

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

Bateria zawiera substancje chemiczne. Ponieważ materiały te są szczelnie zamknięte w obudowie urządzenia, możliwość narażenia na kontakt ze składnikami jest znikoma. Jednak ingerencja w baterię może spowodować uwolnienie zawartości baterii. Zagrożenia związane z kontaktem z baterią występują w przypadku jej rozerwania – są to:

Dla środowiska: Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Dla zdrowia człowieka: Materiały wewnętrzne baterii mogą powodować poważne podrażnienie oczu i skóry, w przypadku wdychania mogą wywołać alergię, objawy astmy lub problemy z oddychaniem. Może dojść do alergii skórnych. Podejrzewa się, że płyn w baterii może powodować podrażnienie układu oddechowego. Zawarte w baterii związki są uważane za możliwe czynniki rakotwórcze dla ludzi.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Chiny

NOVAMEDPL

Novamed.pl S.A.

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Polska

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

