



WIELOFUNKCYJNY MASAŻER DO PIELĘGNACJI OKOLIC OCZU

— MODEL: BL-105

PRZYWRÓĆ SWOIM OCZOM MŁODZIEŃCZY WYGLĄD

Wielofunkcyjny masażer do pielęgnacji okolic oczu to unikalnie zaprojektowane urządzenie, które łączy terapię ciepłem, wibracje dźwiękowe oraz technologię EMS, aby zredukować oznaki zmęczenia, ujędrnić i wymodelować kontur oczu, przywracając im świeży i promienny wygląd.

Skóra wokół oczu jest znacznie cieńsza i delikatniejsza niż na pozostałych partiach twarzy. Ze względu na mniejszą liczbę gruczołów łojowych i ograniczoną produkcję kolagenu, obszar ten jest bardziej narażony na wysuszenie, utratę jędrności, powstawanie drobnych linii i zmarszczek.

W CZYM POMAGA:

1. Drobne linie i zmarszczki wokół oczu
2. Obwisła skóra w konturze oka
3. Cienie i worki pod oczami
4. Sucha skóra wokół oczu

Jakie ma korzyści:

Dwa tryby pielęgnacji skóry wokół oczu: MASSAGE i LIFT

Trzy poziomy intensywności wibracji sonicznych pozwalają dostosować zabieg do własnych preferencji

Specjalnie zaprojektowana głowica masująca z dwiema półokrągłymi metalowymi płytkami

3 poziomy intensywności EMS dopasowane do różnych potrzeb

Terapia ciepłem – stała kontrola ciepła i temperatury

Elegancka i ergonomiczna konstrukcja, wygodna do trzymania

Ładowanie przez USB, system oszczędzania energii, urządzenie przyjazne dla środowiska



TRYB MASSAGE

łączy terapię gorącym kompresem z wibracjami sonicznymi

TRYB LIFT

łączy terapię gorącym kompresem z technologią EMS

JAK DZIAŁA:

- Wspomaga przepływ krwi w konturze oka
- Wygładza drobne linie i zmarszczki
- Zmniejsza cienie i opuchliznę pod oczami
- Łagodzi zmęczenie oczu
- Poprawia wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry



OPIS FUNKCJI:

• **PODWÓJNY SYSTEM PIELĘGNACJI OCZU:**

Zaawansowane urządzenie do pielęgnacji oczu

z dwoma trybami, które wykorzystuje terapię ciepłem, technologię EMS i wibracje soniczne, aby zrewitalizować i odmłodzić kontur oczu.

- **TERAPIA CIEPŁEM + WIBRACJE SONICZNE (TRYB MASSAGE):** Tryb terapii ciepłem oferuje trzy poziomy temperatury (38–42°C), które pomagają rozluźnić napięcie mięśniowe i złagodzić zmęczenie oczu. Ciepły kompres w połączeniu z delikatnymi wibracjami dźwiękowymi wspomaga wchłanianie produktów pielęgnacyjnych, pobudza drenaż limfatyczny oraz pomaga zmniejszyć widoczność cieni i opuchlizny pod oczami. Tryb ten doskonale wygładza i koi skórę wokół oczu. Idealny dla osób, które spędzają dużo czasu przed ekranem.
- **TERAPIA CIEPŁEM + TECHNOLOGIA EMS [TRYB LIFT]:** Tryb LIFT łączy terapię ciepłem i technologię EMS, aby stymulować mięśnie wokół oczu i pobudzać produkcję kolagenu, co wspomaga elastyczność skóry, poprawia mikrokrążenie i redukuje drobne zmarszczki. Drobne zmarszczki pod oczami staną się wygładzone. Skóra będzie bardziej jędrna, uniesiona i odmłodzona.
- **TRZY USTAWIENIA INTENSYWNOŚCI:** Każdy tryb oferuje trzy regulowane poziomy intensywności, zapewniając komfortowe i skuteczne działanie dla każdego rodzaju skóry. Precyzyjna regulacja temperatury w trybie terapii ciepłem: poziom 1 – 38°C; poziom 2 – 40°C, poziom 3 – 42°C.
- **UNIKALNA GŁOWICA MASUJĄCA:** Ergonomicznie zaprojektowana głowica masująca doskonale dopasowuje się do konturu oczu, zapewniając maksymalną skuteczność zabiegu. Dwie częściowo zakrzywione, hipoalergiczne metalowe elektrody delikatnie przesuwają się po skórze wokół oczu gwarantując skuteczne działanie. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry.

- **ELEGANCKA I PRZENOŚNA KONSTRUKCJA:** Ergonomiczne, eleganckie i przenośne urządzenie to idealny dodatek do Twojej codziennej pielęgnacji, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Doskonałe do użytku w domu – używaj podczas porannej i wieczornej rutyny pielęgnacyjnej, lub zabierz je do biura, aby szybko złagodzić zmęczenie oczu.

SPECYFIKACJA

- Wejście: 5V / 0,5 A
- Pojemność baterii: 5 V, 800 mAh
- Czas pracy: 60 min
- Czas ładowania: 3 h
- Poziom wodoodporności: IPX6
- Waga: 65 g
- Automatyczny timer: 6 min
- Temp.: $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- EMS / Wibracje: 3 poziomy intensywności

SPOSÓB UŻYCIA

Masaż oczu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania / trybu, aby włączyć urządzenie i uruchomić tryb MASSAGE. Dostosuj poziom intensywności do potrzeb i wrażliwości swojej skóry. Delikatnie przyłóż głowicę masującą do skóry i powoli przesuwaj ją lub lekko uciskaj okolice oczu. Dla najlepszych efektów zalecamy korzystanie z trybu MASSAGE przez 2–3 minuty na każde oko.

Zmarszczki wokół oczu

Przed rozpoczęciem trybu LIFT skorzystaj z trybu MASSAGE, aby pobudzić skórę wokół oczu i zwiększyć wchłanianie kosmetyków pielęgnacyjnych. Nałóż cienką warstwę kremu lub serum pod oczy na skórę wokół oczu.

Włącz tryb LIFT i wybierz poziom intensywności mikroprądów odpowiedni do swoich potrzeb. Delikatnie przyłóż głowicę masującą do skóry i powoli przesuwaj ją od wewnętrznego kącika oka w kierunku skroni. Następnie przesuwaj głowicę wzdłuż zewnętrznego kącika oka, wykonując unoszące ruchy. Dla najlepszych efektów używaj trybu LIFT przez 2–3 minuty na każde oko.

**Stosuj
codziennie,
aby uzyskać
lepsze
rezultaty.**

SZYBKI PRZEWODNIK KROK PO KROKU

KROK 1

Włącz urządzenie i wybierz tryb, którego chcesz używać (MASSAGE lub LIFT) oraz poziom intensywności odpowiedni dla Twojej skóry.

KROK 2

Delikatnie wklep swój ulubiony krem / serum / żel pod oczy w skórę wokół oczu za pomocą czystego palca.

KROK 3a

W trybie MASSAGE delikatnie dociśnij głowicę masującą do skóry, zaczynając od wewnętrznego kącika oka (pod oczami). Powoli przesuwaj lub lekko dociskaj, kierując się w stronę zewnętrznego kącika oka.

KROK 3b

W trybie LIFT delikatnie przyłóż głowicę masującą do skóry i powoli przesuwaj ją od wewnętrznego kącika oka w kierunku skroni. Następnie przesuwaj głowicę wzdłuż zewnętrznego kącika oka, wykonując unoszące ruchy.

KROK 4


Wyłącz urządzenie i wyczyść je.

ZALECANE UŻYCIE

Używaj urządzenia przez 2–3 minuty na każdym oku. Zalecamy codzienne korzystanie z tego urządzenia w celu uzyskania lepszych rezultatów.

Hello | **ARE YOU READY
TO GLOW?**

Poznaj nasze
inne produkty
See our products

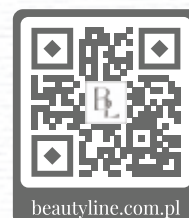

beautyline.com.pl