

PEELING KAWITACYJNY FRENNE

Instrukcja obsługi



Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi

Nasze innowacyjne urządzenie do peelingu kawitacyjnego pozwoli zadbać o Twoją skórę oraz zredukować oznaki starzenia w domowym zaciszu. Ten zaawansowany peeling kawitacyjny do kompleksowej pielęgnacji skóry, oferujące 4 różne tryby pracy.

Dzięki zastosowaniu technologii ultradźwięków oraz prądów EMS, urządzenie umożliwia skuteczne **oczyszczanie, złuszczenie i lifting skóry**, co stanowi bezpieczną i bezbolesną alternatywę dla manualnego oczyszczania twarzy. Posiada także **funkcję syntezy kolagenu**, która pomaga **wzmocnić, odżywić i odnowić skórę**.


Dane techniczne:

- **Moc:** 1,5 W
- **Kolor:** biały
- **Ilość trybów pracy:** 4
- **Ilość zabiegów kosmetycznych:** 4
- **Wymiary:** 16,8 x 4,0 x 1,8 cm
- **Napięcie ładowania:** 5 V
- **Metoda ładowania:** ładowanie przez USB (USB-C)

Opis Urządzenia



PRZYKRYWKA

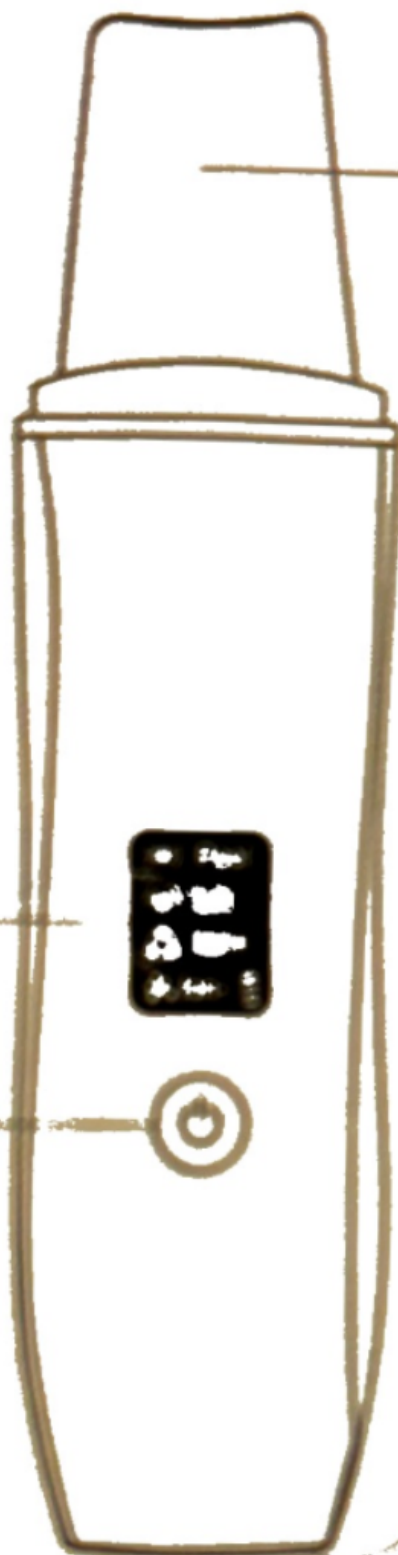

ŁOPATKA DO KAWITACJI

WYŚWIETLACZ

WŁĄCZ/WYŁĄCZ
PRZYTRZYMAJ 3
SEK



WTY CZKA DO
ŁADOWANIA USB-C

Środki ostrożności

1. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, a następnie używać urządzenia wyłącznie zgodnie z sekwencją działania jego przeznaczeniem określonym w instrukcji.
2. Produktu nie można demontować, przerabiać ani montować samodzielnie. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub awarii, należy skontaktować się z dystrybutorem.
3. Urządzenia nie można przechowywać używając w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności np. w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu ognia, w łazience itp. Może to grozić porażeniem prądem, zwarcie lub uszkodzeniem izolacji.
4. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia lub porażenia prądem.
5. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego przez długi czas do ładowania.
6. Nie pozostawiać go w zasięgu dzieci.
7. Zabronione jest korzystanie z urządzenia przez dzieci oraz wobec dzieci.
8. Urządzenia nie można przechowywać oraz używać w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych.
9. Należy używać tylko kabla dołączonego do zestawu.
10. Nie czyścić urządzenia substancjami żrącymi.
11. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy upewnić się, że jest ono suche.
12. Nie należy używać go w przypadku wystąpienia przeciwwskazań do zabiegu.
13. Nie stosować po zabiegach chirurgii plastycznej twarzy, podskórnej implantacji metalu, podczas ciąży
14. Wycierać głowicę masującą ręcznikami papierowymi, nie myć wodą i nie dotykać metalowych przedmiotów.
15. Nie zaleca się codziennego stosowania w przypadku cery wrażliwej. Zaleca się stosowanie 1-2 razy w tygodniu.

16. W przypadku wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych po jego użyciu, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania.
17. Przed użyciem należy usunąć makijaż oraz utrzymać skórę wilgotną podczas użycia.
18. Nie stosować urządzenia w okolicy powiek, gardła, okolic oczu, gałki ocznej, skroni, uszu.

Wskazania:

- Zmarszczki
- Przebarwienia
- Zanieczyszczenia skórne
- Zaskórniki
- Widocznie poszerzone pory
- Skóra sucha i odwodniona
- Poszarzała i niedotleniona cera
- Rozszerzone naczynka
- Cera problematyczna z tendencją do trądziku
- Cera tłusta
- Blizny potrądzikowe
- Utrata jędrności skóry
- Zwiótzała skóra
- Oznaki zmęczenia
- Opuchlizna

Przeciwwskazania:

- Poparzenia, w tym słoneczne
- Uszkodzenia skóry
- Ciąża, karmienie piersią oraz laktacja
- Posiadanie metalowych implantów i rozrusznika serca
- Występowanie chorób tarczycy
- Epilepsja
- Metalowe przedmioty np. Kolczyki, biżuteria.
- Nowotwory

- Aktywna opryszczka
- Stany zapalne skóry
- Stany zapalne organizmu
- Stany chorobowe
- Osłabienie organizmu
- Przerwanie ciągłości naskórka
- Migreny
- Ostre postacie trądziku ropowiczego, a także różowatego
- Choroby wirusowe, grzybicze i bakteryjne skóry
- Stosowanie wypełniaczy i botoksu
- Zakrzepowe zapalenie żył
- Niewydolność krążeniowa
- Osteoporoza
- Zabiegi chirurgiczne okoli zabiegowych
- Zabiegi laserowe okolic zabiegowych
- Egzema oraz AZS w obszarze zabiegowym
- Zaburzenia czucia oraz nerwów w obszarze zabiegowym
- Wysokie ciśnienie krwi
- Aktywne alergie skórne
- Choroba wieńcowa
- Upojenie alkoholowe

Dostępne funkcje:

Peeling - Oczyszcza skórę oraz skutecznie i szybko usuwa zaskórniki, wszelkie zanieczyszczenia i martwy naskórek. Zapewnia skórze blask i elastyczność oraz poprawia jej strukturę i procesy regeneracyjne.

Lifting EMS - Tryb aktywuje regenerację komórek, wspomaga krążenie krwi i przyspiesza metabolizm skóry. Wspomaga to poprawę jędrności skóry, redukcję zmarszczek oraz modelowanie konturów twarzy. Redukuje również oznaki starzenia i stymuluje produkcję kolagenu zwiększając elastyczność, napięcie i jędrność skóry.

Jonoforeza ION+ - Dogłębnie oczyszcza skórę, usuwa zanieczyszczenia, oczyszcza pory, nadmiar sebum oraz martwe komórki, pozostawiając skórę odświeżoną, oczyszczoną i promienną.

Sonoforeza - Ion- - Tryb który łączy w sobie ultradźwięki i jony ujemne, co zapewnia rewitalizację skóry, redukcję zaczerwienień i wspomaganie procesów regeneracyjnych. W połączeniu z produktami pielęgnacyjnymi zapewnia głębokie wchłanianie składników aktywnych, co przekłada się na zwiększoną skuteczność pielęgnacji skóry.

Instrukcja szczegółowa:

1. Przed użyciem urządzenia, należy je w pełni naładować. Podczas ładowania nie ma możliwości jego włączenia, ze względu na środki bezpieczeństwa.
2. Przed każdym użyciem należy wyczyścić szpatułkę za pomocą wody oraz płátka kosmetycznego.
3. Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk ON/OFF przez 2 sekundy.
4. Urządzenie po uruchomieniu automatycznie włączy tryb „PEEL” (funkcja głębokiego oczyszczania).
5. Następnie należy zaaplikować wodę bądź tonik w okolicy przeprowadzanego zabiegu za pomocą płátka kosmetycznego. Pamiętaj, aby skóra podczas zabiegu była cały czas zwilżona.
6. Aby prawidłowo użyć go w tym trybie, peeling należy obrócić w dłoni (przyciski ON/OFF do dołu) i przyłożyć go do skóry pod kątem 45°, a następnie delikatnie przesuwając, w kierunku odwrotnym do grawitacji.
7. Następnie w celu użycia trybu liftingu (LIFT), należy wcisnąć przycisk ON/OFF. Urządzenie należy obrócić ponownie w dłoni (przyciskiem ON/OFF do góry) i przyłożyć go do skóry pod kątem 45°, a następnie delikatnie przesuwając, w kierunku odwrotnym do grawitacji.


8. W celu włączenia trybu ION+, należy wcisnąć przycisk ON/OFF. W tym trybie również należy trzymać Urządzenie przyciskiem ON/OFF do góry i przyłożyć go do skóry pod kątem 45°, a następnie delikatnie przesunąć, w kierunku odwrotnym do grawitacji.
9. Aby uruchomić tryb ION-, należy wcisnąć przycisk ON/OFF. W tym trybie również należy trzymać Urządzenie przyciskiem ON/OFF do góry i przyłożyć go do skóry pod kątem 45°, a następnie delikatnie przesunąć, w kierunku odwrotnym do grawitacji.
10. Włączona funkcja podświetla się na panelu LCD, po tym możemy poznać który tryb jest włączony w danym momencie.
11. Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk ON/OFF.
12. Jeśli urządzenie nie jest stosowane regularnie, należy pamiętać o jego ładowaniu co 6 miesięcy.
13. Zalecenia specjalistów stosowania poszczególnych trybów w ciągu tygodnia:
 - Tryb PEEL - 1-2 razy w tygodniu przez 3 minuty
 - Tryb LIFT - codziennie przez 3 minuty
 - Tryb ION+ - 2-3 razy w tygodniu przez 3 minuty
 - Tryb ION- - codziennie przez 3 minuty

Kolejność trybów po wciśnięciu przycisku ON/OFF:

1. Tryb PEEL - funkcja głębokiego oczyszczania
2. Tryb LIFT - lifting twarzy
3. Tryb ION+ - Jonoforeza
4. Tryb ION- - Sonoforeza

Sposób przykładania głowicy w poszczególnych trybach:


Peel

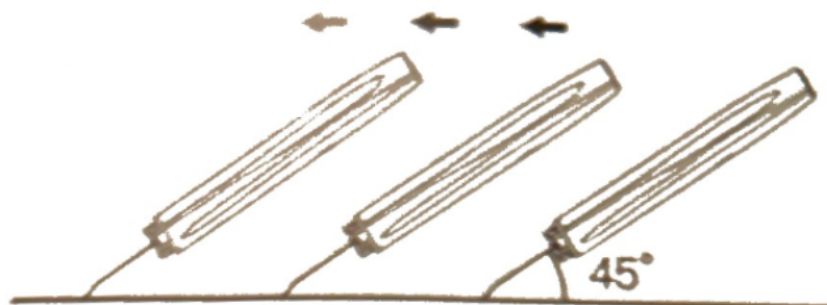


Lift



Ion+

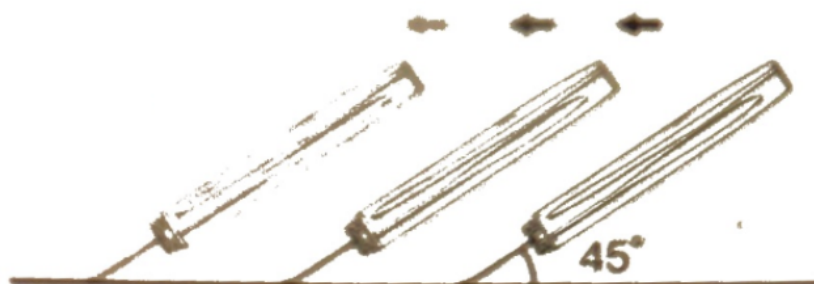

Ion-

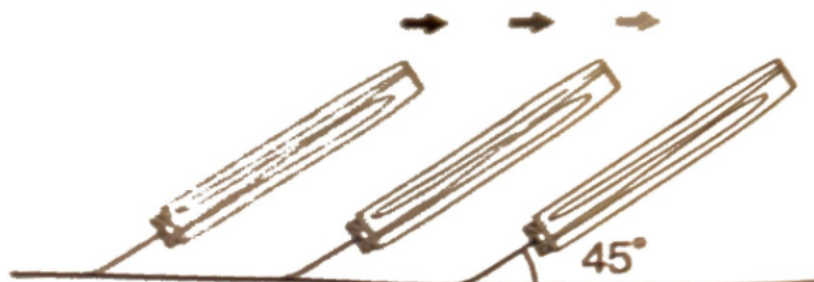

Dodatkowe uwagi:

1. Urządzenie automatycznie uruchamia się w trybie oczyszczania (PEEL)
2. Funkcję CLEAN należy używać wraz z wacikiem, zamoczonym wcześniej w toniku.
3. Tryb Lift imituje stukanie podczas prawdziwego masażu klasycznego twarzy.
4. W celu przyzwyczajenia twarzy do funkcji LIFT należy zacząć od 1 do 2 serii w tygodniu, aby przyzwycząić skórę do prądów. Gdy zabieg jest dobrze tolerowany przez skórę warto jest zwiększyć częstotliwość ich wykonywania.
5. Masażer należy przesuwac po skórze twarzy, szyi i dekoltu, nie zatrzymując się zbyt długo w jednym miejscu.
6. Po zakończeniu zabiegu należy oczyścić głowicę urządzenia ręcznikiem lub wacikiem kosmetycznym nasączonym np. płynem do demakijażu.