

INSTRUKCJA DEPILATOR IPL EMPRESZ

Przeczytać instrukcję przez użytkowaniem.

Dziękujemy za zakup naszego produktu
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej podczas użytkowania produktu.

Bezpieczeństwo:

● UWAGA :

Proszę upewnić się aby korzystać z produktu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Prosimy przeczytać instrukcję oraz zachować ją podczas cyklu życia produktu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta online.

⚠ Uwaga: nieprawidłowe korzystanie może powodować obrażenia

⚠ Uwaga: niewłaściwe operacje na urządzeniu mogą powodować zagrożenie

⚠ Uwaga: nieprawidłowe korzystanie może doprowadzić do obrażeń osobistych, lub mienia

Zakaz korzystania z urządzenia podczas kąpieli.

• Uwaga nie korzystać z produktu podczas kąpieli, prysznicza, ani w pobliżu jakichkolwiek pojemników z wodą

- jeżeli produkt jest uszkodzony prosimy nie dotykać żadnych jego części wewnętrznych, unikać porażenia,
- nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia, nie zostawiać urządzenia w losowych miejscach.
- Nie korzystać z produktu w pobliżu oczu, okulary mogą całkowicie nie blokować energii świetlnej, światło może być absorbowane przez melanine rogówki, w przypadku bliskiej odległości od oczu
- Zalecamy korzystać z okularów podczas korzystania z produktu, pomimo że światło nie wpływa bezpośrednio na oczy, wysoka częstotliwość błysku może pogarszać widzenie.
- W przypadku usuwania włosów z pleców zalecamy pomoc partnera lub asystenta, samodzielne korzystanie może wiązać się z ryzykiem.
- Jeżeli włosy są dłuższe niż 1mm, najpierw zgolić, sugerujemy wykorzystywać maszynkę do golenia, zbyt długie włosy będą absorbować ciepło na powierzchni skóry co może powodować zaczerwienienie i opuchnięcie skóry, może to wpłynąć na negatywne doświadczenie.
- Jeżeli skóra obszaru naświetlanego nie jest sucha i czysta, może to wpłynąć na skuteczność działania

- Nie posiadane są dane dotyczące produktu związane z dziećmi poniżej 15 roku życia, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności i zapobiec dotykanie produktu przez dzieci poniżej 15 roku życia.
- Proszę używać różnych poziomów intensywności światła dla różnych miejsc ciała, ponieważ różne części mają różny odcień skóry.
- Jeżeli przewód jest uszkodzony w celu uniknięcia zagrożenia, należy go wymienić.

⚠ UWAGA:

- Nie używać dezodorantu bezpośrednio po naświetlaniu ciała, regularnie czyścić zabrudzenia w porcie naświetlania, aby uniknąć oparzeń i awarii podczas użytkowania
- Nie używać innych przedmiotów w przypadku zablokowania kanałów wentylacyjnych, aby uniknąć wydobywania się dymu i pożaru.
- Nie kierować portu naświetlania w stronę czarnych przedmiotów, aby zapobiec awarii urządzenia.
- Nie naświetlać ubrań, włosów i innych przedmiotów, może to spowodować przypalenie, przebarwienie, lub uszkodzenie.
- Nie korzystać z produktu w okolicach oczu, aby uniknąć obrażeń. Proszę oczyścić produkt z produktów pielęgnacyjnych, włosów i innych przedmiotów które przylepiają się do urządzenia, aby uniknąć awarii.
- Nie korzystać z produktu w pobliżu dzieci, urządzenie emituje silne światło, które może zranic oczy.
- Proszę ustawić intensywność naświetlania zgodnie ze stanem skóry. Podczas pierwszego użycia, zalecamy ustawić urządzenie na pierwszy bieg.
- Jeżeli skóra jest lekko gorąca i zaczerwieniona po użyciu jest to normalne.
- Oczyścić skórę i upewnić się, że nie ma pozostałości włosów, skóra jest całkowicie sucha i pozbawiona substancji tłuszczowych i płam.
- Nie umieszczać produktu na słońcu, ani nie wystawiać go na długotrwałe działanie promieni UV, może to trwale uszkodzić produkt.
- Jeżeli wbudowany wentylator wewnętrzny nie działa po włączeniu zasilania nie używać urządzenia, aby uniknąć dymu i pożaru.

● Zagrożenia w sytuacjach szczególnych:

- Nie korzystać : kobiety w ciąży, karmiące piersią, w okresie menstruacji, z bliznami na skórze, skóra delikatna, cukrzyca, wrażliwość na światło.
- Nie korzystać w przypadku: chorób serca, nadciśnienia, nowotworów, folkulitits, zakaźnych chorób skóry, spalenia skóry, zaburzenia krzepnięcia krwi.
- Nie używać jeśli stwierdzono nieprawidłowe metabolizowanie kolagenu lub słabe gojenie się ran
- Nie korzystać w przypadku chorób naczyniowych, podczas stosowania środków rozszerzających naczynia krwionośne
- Nie używać jeżeli skóra jest wrażliwa na światło, skłonna do alergii.

- Nie korzystać w przypadku chorób krwotocznych, w przypadku stosowania izotretynoiny, kwasu owocowego (AHA), kwasu salicylowego (BHA)
- Podczas korzystanie zakazane jest korzystanie z leków takich jak aspiryna, immunosupresanty, izotretynoina. Osoby stosujące leki, wrażliwe na światło takie jak tetracyklina i sulfonamidy. Naświetlanie jest nie wskazane.
- Nie korzystać z urządzenia jednocześnie z produktami na bazie oleju, upewnić się że naświetlana skóra jest czysta, sucha, nie stosować balsamów, płynów nawilżających i innych kosmetyków.

● Nie stosować w następujących częściach ciała

- 1.Oczy, powieki, okolice oczu. 2.Jabłko Adama.
3. Jama ustna, srom, błony śluzowe.
- 4.Głowa 5. Miejsca operacji plastycznych 6.Płamy skórne. 7.Sutki, brodawki
- 8.Brwi 9.Tatuaze, malowane ciało, znamiona.
- 10.Wewnątrz pępka 11.Trądzik 12.Uszy. 13.Żyły.

⚠ UWAGA:

- 1.Nie korzystać w przypadku naturalnie ciemnej skóry.
- 2.Nie wystawiać się na słońce przed depilacją.
- 3.Prosimy zgolić włosy przed depilacją nie wykorzystując chemicznych metod usuwania włosów.
- 4.Korzystać z pierwszego biegu podczas pierwszego użycia.
- 5.Upewnić się że okno błysku jest blisko skóry, zakazane jest korzystać z urządzenia w ciemnych pomieszczeniach.
- 7.Korzystać z okularów podczas korzystania.
- 8.Nie korzystać w bezpośrednim świetle słonecznym.
- 9.Nie uderzać ani wstrząsać urządzeniem gwałtownie.
10. Nie podłączać do sieci bez wyłączenia urządzenia.

Porada: Kiedy tymczasowo nie korzystasz z urządzenia upewnić się, że wejście powietrza nie jest niczym zablokowane, aby zapewnić dobre odprowadzenie ciepła i chłodzenie depilatora.

WPROWADZENIE

O depilatorach domowego użytku

- Ten produkt to urządzenie do usuwania włosów oparte na technologii termo-optycznej, łączy technologię medyczną w użytku domowym.
- Podczas usuwania włosów głowica powinna dociskać stosunkowo mocno skórę, tak aby światło było jak najbliżej mieszków włosowych, korzenie włosów powinny być jak najbliżej obszaru wysokiej energii światła, zwiększając efektywność absorpcji energii przez mieszki włosowe. Lampa jest łatwa do czyszczenia, pamiętaj o wycieraniu lampy w celu lepszego efektu depilacji.
- Produkt jest wyposażony w 5 poziomów regulacji energii, tak aby dopasować go do wrażliwości skóry.

- Produkt posiada długowieczną zintegrowaną lampę, nadaje się do usuwania owłosienia z wielu obszarów takich jak twarz, wargi, pachy, bikini, ramiona, nogi. Wysoka żywotność lampy pozwala zmniejszyć koszty związane z wymianą głowicy lampy. Do użytkowania nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria. System depilacji posiada system filtracji, który wychwytuje nieprawidłowe krótkie długości fal i szkodliwe światło.

● W zestawie



Schemat produktu




● Przygotowanie przed użytkowaniem

Dokładnie oczyścić skórę. Upewnić się, że została dokładnie ogolona, całkowicie sucha i pozbawiona substancji tłuszczowych (takich jak perfumy, balsamy, kremy do ciała i kremy przeciwśłoneczne). Potwierdzić, że port naświetlania jest czysty i nie ma żadnych uszkodzeń ani nieprawidłowości. Jeśli lampa jest zabrudzona proszę oczyścić, aby uniknąć awarii produktu, pogorszenia się działania i problemów skórnych. Przed użyciem urządzenia do usuwania owłosienia wykonaj test skórny i potwierdź stan skóry po 2 godzinach. Jeśli nie wystąpiły żadne nieprawidłowości, można swobodnie korzystać z urządzenia.

Krok po kroku

Krok 1
Zgolić włosy z powierzchni skóry golarką.

Zalecenie: golić skórę z wykorzystaniem pianki, lub podczas kąpieli, aby uniknąć podrażnień skóry

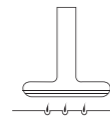

Krok 2
Podłączyć depilator do zasilania.

Uwaga: po zakończonej pracy, upewnić się że urządzenie zostało wyłączone przez odłączenie urządzenia od sieci.



Krok 3
Zalecamy założenie okularów ochronnych.

Wskazówka: Podczas pracy urządzenie, nie patrzeć bezpośrednio na wyjście światła.



Krok 4
Przytrzymać długo przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, naciskać krótko aby dostosować intensywność w zależności od potrzeb.



Krok 5
Długo przytrzymać przycisk, aby dostosować tryb automatyczny, lub manualny.



Krok 6
Umieścić wyjście światła tak, aby wyjście światła było na obszarze depilowanej skóry. Światło czujnika urządzenia do usuwania owłosienia zaświeci na biało, wskazując pełny kontakt. Naciśnij przycisk błysku, aby rozpocząć operację usuwania włosów. Jeśli białe światło nie jest włączone, oznacza to, że lampa nie przylega do skóry. Zbliżyć urządzenie. inaczej nie będzie emitować światła.



Uwaga: Po zakończeniu usuwania włosów przytrzymać przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie (nie odłączać urządzenia bez wyłączenia go, aby nie spowodować uszkodzenia).

Wyjaśnienie trybów działania

Automatyczny (stosować do dużych obszarów jak ramiona, nogi)

Umieścić wyjście światła na depilowanym obszarze skóry, tak by lampa całkowicie dolegała. W tym momencie lampka czujnika usuwania włosów zaświeci, wskazując, że uchwyt lampy jest w pełnym kontakcie ze skórą. Długo nacisnąć przycisk, a następnie natychmiast zacznij poruszać urządzeniem powoli i równomiernie po skórze, utrzymując go w kontakcie ze skórą, a błysk będzie emitowany w określonym odstępie czasowym. W tym czasie zachować ruch urządzenia do usuwania włosów, i przesuwać urządzenie w przód i w tył dwa razy na obszarze, który wymaga usunięcia włosów. Upewnij się, że obszar usuwania włosów jest równomiernie pokryty.

Wskazówka: prędkość przesuwania urządzeniem po skórze dostosować do szybkości błysku, aby pokrycie światłem było jak najbardziej jednolite. Częstotliwość błysku jest najszybsza na pierwszym biegu i wraz z wyższym biegiem maleje. Im wyższy bieg, tym wolniejsze jest wyjście światła.

Tryb manualny (odpowiedni dla małych obszarów).

Umieścić wyjście światła na depilowanym obszarze skóry, całkowicie dopasować ampe do skóry. W tym momencie lampka czujnika usuwania włosów zaświeci, wskazując, że uchwyt lampy jest w pełnym kontakcie ze skórą. Krótko naciskać przycisk aby rozpocząć usuwanie włosów. Przesuwać głowicę lampy na kolejny obszar skóry, poczekać, aż zaświeci się biała lampka czujnika usuwania włosów, a następnie ponownie naciskać przycisk błysku, powtarzać operację.

Porada: Jeżeli podczas pracy z urządzeniem czujesz, że skóra zaczyna się przegrzewać, zrób krótką przerwę, pozwól lampie się schłodzić i na nowo rozpocznij pracę.

(Porada użytkownika)

Podczas używania, lampa powinna być w pełnym kontakcie ze skórą, tak aby mieszki włosowe absorbowały większą ilość energii, co pozwala na efektywniejszą depilację.

Częstotliwość stosowania

Używać 3 razy w tygodniu przez pierwsze 2 tygodnie. Następnie używać 2 razy w tygodniu przez tygodnie 3-5. Kolejno stosować raz na pół miesiąca lub miesiąc po 5 tygodniach. Uwaga: Prosimy stosować w zależności od potrzeb i tempa wzrostu włosów. Jeśli włosy są zbyt gęste, na tej podstawie można odpowiednio zwiększyć bieg i częstotliwość. Każda sytuacja różni się w zależności od osoby.

Pielęgnacja po depilacji

● Środki ostrożności po usuwaniu włosów

Zaleca się unikać kontaktu z wodą przez 6 godzin po zabiegu usuwania włosów, po czym można użyć wody nawilżającej do nawilżenia obszaru poddanego naświetlaniu. Po depilacji nie stosować perfum, masek i kosmetyków zawierających peeling. W ciągu 24 godzin po zabiegu usuwania włosów, proszę unikać ekspozycji na promieniowanie UV, jeśli to konieczne, należy użyć produktów z filtrem przeciwśłonecznym.

• Nie wolno opalać się podczas zabiegu usuwania włosów.

• Jeżeli w miejscu naświetlania wykonywaną będzie operacja plastyczna, skontaktować się z lekarzem.

• Jeżeli po zabiegu poczujesz się źle, skontaktuj się z lekarzem.

● Czyszczenie i konserwacja

- Aby zapewnić najlepszy efekt i najdłuższą żywotność produktu, proszę czyścić urządzenie przed i po każdym usuwaniu włosów, aby uniknąć długotrwałego gromadzenia się brudu. Jeśli urządzenie nie będzie regularnie czyszczone, produkt może nie dać oczekiwanych efektów.
 - Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie, aby umożliwić maszynie ostygnięcie. Wyczyść lustro wyjściowe światła miękką, czystą i suchą szmatką.
 - Przechowuj urządzenie w suchym i bezkurzowym środowisku w temperaturze od 10 do 60°C. Nie czyść produktu i akcesoriów w kranie ani zmywarce.
 - Nie używaj druczanej gąbki, środków czyszczących żrących (pasty do zębów, itp.) ani cieczy żrących (benzyny, oleju silnikowego, acetonu, itp.) do czyszczenia produktu.
- Wskazówka: Jeśli efekt czyszczenia wodą nie jest zadowalający, można użyć kilku kropli alkoholu o wysokim stężeniu (nie więcej niż 96%).

Parametry urządzenia

Nazwa produktu: Depilator IPL
Model: W-1096
Moc urządzenia: 24W
Wyjście prądu ładowania: 12V/2A
Poziomy naświetlania: 5 biegów
Standard wykonania: GB4706.1-2005

Certyfikat zgodności

Nazwa produktu: Depilator IPL
Model: W-1096
Poziomy jakości: produkt zatwierdzony
Inspekcja:



Karta gwarancyjna

Nazwa:	Sprzedawca	W-1096	Model:	Depilator IPL	Defekt	Nazwa	Adres	Tel

*Proszę wypełnić szczegóły karty gwarancyjnej podczas naprawy.