

MASAŻER DO STÓP Z PODGRZEWANIEM ACTIVE PRO

Model: CF-5903

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie użytkowania tego lub jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa mających ogólne zastosowanie podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych. Używać zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.


Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu, jest ono przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego. Nie wolno używać urządzenia w łazience lub innych pomieszczeniach, w których panuje wilgoć, w pobliżu kominków lub innych źródeł gorąca.

Urządzenie powinno być zasilane z sieci elektrycznej 230V / 50Hz. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je zawsze odłączyć od sieci elektrycznej. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez wykwalifikowanego specjalistę.

Nie wolno używać przewodu zasilającego do podnoszenia, przenoszenia, ciągnięcia lub podciągania produktu. Nie wolno przewieszać przewodu zasilającego przez ostre krawędzie bądź narożniki, ani kłaść w ich pobliżu. Wtyczkę z gniazdka elektrycznego wyjmujemy tak, że łapiemy za nią i ostrożnie pociągamy. Podczas odłączania wtyczki od gniazdka pod żadnym pozorem nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Należy używać wyłącznie załączonego oryginalnego zasilacza. Urządzenie nie jest dziecięcą zabawką. Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem. Nie wolno używać produktu na stojąco, siedząc na nim ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia. Nie wolno stawiać na górnej powierzchni żadnych płynów. Jeśli podczas użytkowania masz niestandardowe odczucia, natychmiast przerwij masaż i skonsultuj się z lekarzem.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas używania produktu nieoczekiwanie odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast przestań go używać.

OPIS ELEMENTÓW

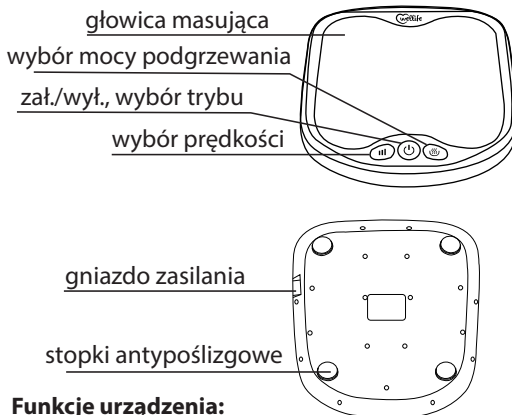

Funkcje urządzenia:

- masaż rolkowy stopy z wyborem mocy podgrzewania (2 poziomy).
- wybór 3 stopni masażu (szybkość masażu)
- 3 różne tryby masażu

SPOSÓB UŻYCIA

Urządzenie posiada trzy przyciski sterujące z następującymi funkcjami:

Przycisk zał./wył.: 1x naciśnięcie powoduje włączenie programu automatycznego, zmienia się prędkość i kierunek obrotów - świeci się żółta lampka. 2x naciśnięcie powoduje zmianę trybu masażu - świeci się zielona lampka.

3x naciśnięcie powoduje zmianę kierunku trybu masażu - świeci się czerwona lampka.

4x naciśnięcie - wyłącza urządzenia

Przycisk prędkości: 1x naciśnięcie, mała prędkość - świeci się zielona lampka.

2x naciśnięcie, średnia prędkość - świeci się żółta lampka.

3x naciśnięcie, najwyższa prędkość - świeci się czerwona lampka.

Przycisk podgrzewania po włączeniu urządzenia uruchamia się wyższy poziom podgrzewania.

1x naciśnięcie, zmiana poziomu podgrzewania na niższy.

2x naciśnięcie, podgrzewanie zostanie wyłączone.

Porada: Najbardziej intensywny efekt ogrzewania

jest odczuwalny, podczas masowania bosych stóp. Podczas masażu może pojawić się dźwięk kłapięcia, który jest całkowicie normalnym stanem spowodowanym działaniem produktu.

Uwaga: urządzenie używa funkcji AUTO STOP, oznacza to, że po 15 minutach pracy wyłącza się automatycznie. Można je ponownie załączyć naciskając przycisk zał./wył. ☺

CZYSZCZENIE

Powierzchnię urządzenia należy czyścić suchą, miękką szmatką. W razie potrzeby można szmatkę lekko zwilżyć wodą z mydłem. Nie wolno używać chemicznych ani ściernych środków czyszczących. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Pokrycie można zdjąć i prać w temperaturze 30°C. Nie prasować ani nie suszyć w suszarce. Suszyć w naturalnych warunkach!

Dane techniczne:

- zasilanie: 12V / 2A
- zasilacz: wejście: 220-240V~, 50/60Hz
wyjście: 12V/2A
- moc: 24W
- funkcja AUTO STOP: po 15min.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem w niego itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.