

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Masażer elektryczny EMS do ciała, twarzy i głowy UK-21



**Gratulujemy zakupu! Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni
usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt
telefoniczny – postaramy się pomóc.**

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL




Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

A. OPIS URZĄDZENIA

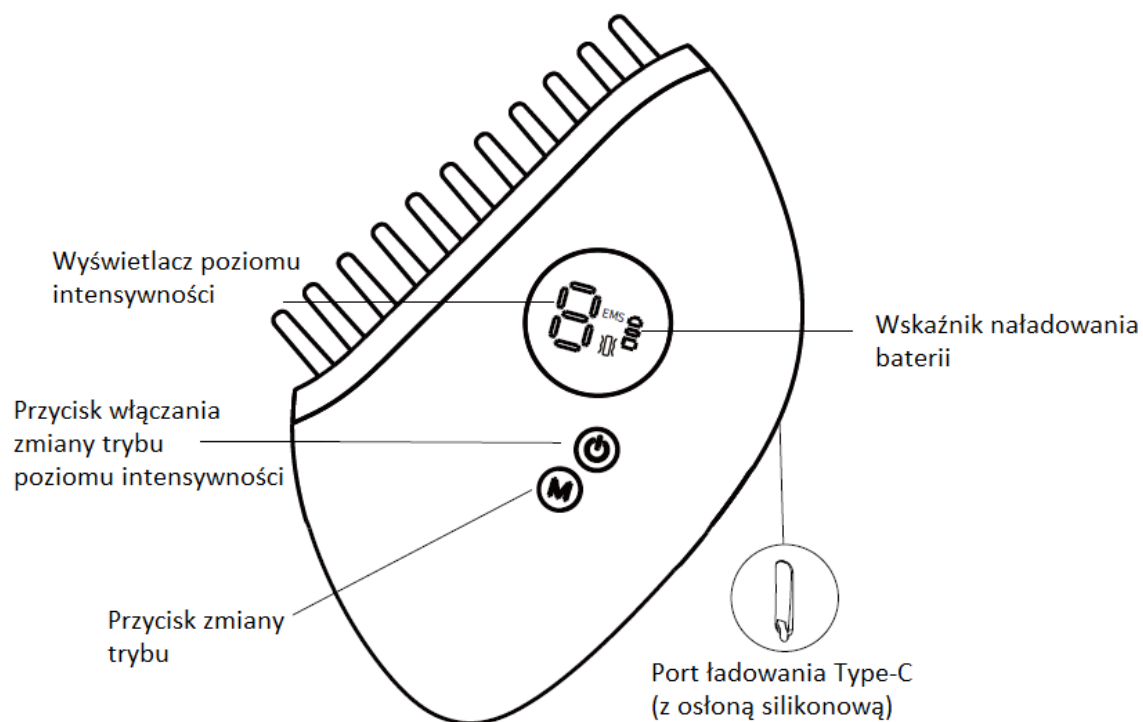

B. PODSTAWOWA OBSŁUGA

1. On/off



On/off – Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie

On/off – Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć urządzenie

2. Wybór trybu i poziomów intensywności



Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk zmiany trybu „M”, aby przełączyć tryb.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza wibrację.

Domyślnie uruchamiany jest **tryb początkowy - ustawiony na poziom 1**.

Krótkie naciśnięcie przycisku „On/off” pozwala zmienić **poziom intensywności** od 1-9.

Cztery tryby (domyślnie uruchamiany tryb 1)

- **Tryb 1:** Czerwone światło + EMS (mikroprąd)
- **Tryb 2:** Światło + wibracja (VIB)
- **Tryb 3:** Bledo-niebieskie światło + EMS (mikroprąd) + wibracja (VIB)
- **Tryb 4:** Naprzemienne czerwone i niebieskie światła + EMS (mikroprąd) + wibracja (VIB)

C. INSTRUKCJA ŁADOWANIA

1. Otwórz silikonową osłonę.
2. Podłącz kabel ładujący do portu ładowania i adaptera (adapter należy zapewnić we własnym zakresie).
3. Jeśli wskaźnik baterii świeci na czerwono, oznacza to, że urządzenie jest w trakcie ładowania.


D. INSTRUKCJA UŻYCIA




1. Masaż twarzy




2. Masaż szyi i karku

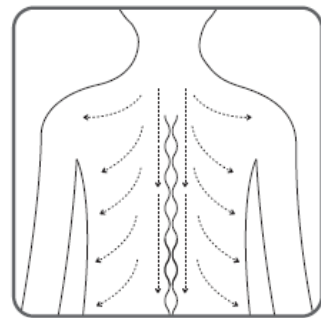


3. Masaż pleców

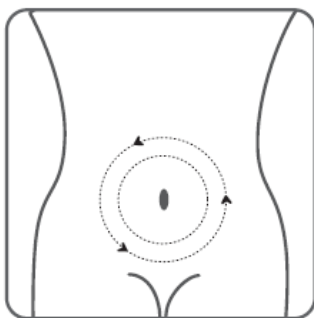

4. Masaż brzucha

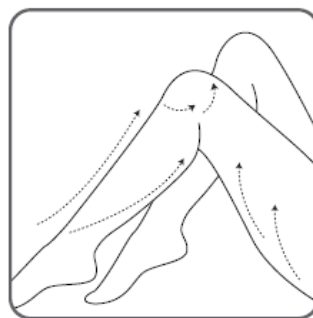

5. Masaż kończyn
dolnych

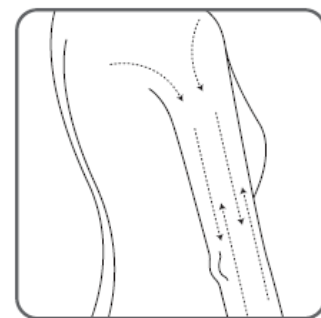

6. Masaż ramion

Zalecenia dotyczące masażu:

1. **Zalecana kolejność masażu:** głowa → szyja i ramiona → plecy → brzuch → ręce → nogi.
2. **Intensywność masażu** powinna stopniowo wzrastać – od delikatnej do mocniejszej – w zależności od indywidualnych preferencji i tolerancji na bodźce.
3. **Czas trwania masażu** należy dostosować do wieku oraz ogólnej kondycji fizycznej danej osoby.
4. **W codziennej pielęgnacji zdrowotnej** masaż nie ma ścisłych ograniczeń czasowych ani intensywności – kluczowe jest dopasowanie go do własnego komfortu i samopoczucia.
5. **Podczas masażu należy** dostosować temperaturę otoczenia do ok. 25°C.

E. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Używaj wyłącznie kabla ładującego dołączonego do produktu lub innego, który spełnia jego specyfikację. Upewnij się, że wtyczka ładowarki jest prawidłowo podłączona do gniazdka, aby zapobiec awarii, przegrzaniu lub pożarowi.
2. Ze względu na wbudowany akumulator, nie wrzucaj urządzenia do ognia ani nie używaj go w miejscach o wysokiej temperaturze, aby uniknąć uszkodzenia, przegrzania lub ryzyka pożaru.
3. Jeśli urządzenie stanie się nienaturalnie gorące, zdeformowane, uszkodzone lub zacznie wydzielać nieprzyjemny zapach, natychmiast przestań go używać, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i pożaru.
4. **Uwaga: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do osobistego masażu i nie może zastępować leków ani sprzętu medycznego.**
5. W przypadku uszkodzenia głowicy masującej zaprzestań dalszego użytkowania.
6. Produkt nie jest wodoodporny – należy unikać kontaktu z wodą.

F. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

1. Przechowuj urządzenie i akcesoria w chłodnym i suchym miejscu.
2. Po pełnym naładowaniu odłącz ładowarkę, aby uniknąć długotrwałego przeładowania.
3. Urządzenie posiada funkcję podgrzewania. Osoby o obniżonej wrażliwości na ciepło powinny ją wyłączyć podczas użytkowania.
4. Produkt nie jest wodoodporny – nie używaj go ani nie przechowuj w łazience ani w pobliżu źródeł wody.

5. Do czyszczenia urządzenia nie używaj silnych detergentów o odczynie kwasowym lub zasadowym.

Podczas nagrzewania nie umieszczaj urządzenia przez dłuższy czas na materiałach łatwopalnych np. koc lub inna tkanina!

6. Nie używaj urządzenia na skórze, która jest owrzodzona lub uszkodzona.
7. Ze względów higienicznych produkt powinien być używany indywidualnie – nie zaleca się współdzielenia go z innymi osobami.
8. Upewnij się, że silikonowa osłona jest prawidłowo zamknięta w porcie ładowania podczas użytkowania, aby zapobiec przedostawaniu się olejków i uszkodzeniu urządzenia.
9. Żywotność urządzenia może się różnić w zależności od warunków użytkowania i temperatury otoczenia.
10. Po zakończeniu masażu wytrzyj nadmiar olejku czystą chusteczką lub ręcznikiem.
11. **Nie wolno masować okolicy lędźwiowo-krzyżowej oraz podbrzusza u kobiet w ciąży i podczas menstruacji.**
12. **Masaż jest zabroniony dla osób pod wpływem alkoholu.** Osoby starsze, osłabione, wątłe lub bardzo szczupłe powinny korzystać z delikatnego masażu.
13. Unikaj masowania dużych naczyń krwionośnych.
14. Osoby z żyłakami i obrzękami kończyn dolnych powinny być masowane delikatnie, kierując ruchy od dołu ku górze.
15. **Produkt zawiera baterię litową.** Przed wyrzuceniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania. Następnie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi, otworzyć zabezpieczenie i całkowicie wyjąć baterię. **Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych odpadów!** Baterię należy umieścić w specjalnym pojemniku na zużyte baterie, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

G. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło i zostało odłączone od źródła zasilania.
2. Powierzchnię urządzenia można przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby można użyć niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego. **Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą.**
3. Nie używaj szorstkich gąbek ani wełny stalowej do czyszczenia, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej urządzenia.
4. **Nie zanurzaj urządzenia elektrycznego w wodzie ani w innych płynach podczas czyszczenia.**
5. Po zakończeniu czyszczenia pozostaw urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu do całkowitego wyschnięcia lub upewnij się, że jego powierzchnia jest sucha przed kolejnym użyciem.
6. **Nie używaj metalowych narzędzi do czyszczenia,** aby uniknąć uszkodzenia powłoki ochronnej.

H. MOŻLIWE USTERKI

OBJAWY USTERKI		MOŻLIWA PRZYCZYNA	SPOSÓB USUNIĘCIA USTERKI
Lampka kontrolna nie świeci	Dysk grzewczy nie nagrzewa się	1. Zasilanie jest odłączone. 2. Wewnętrzny przewód jest odłączony. 3. Przełącznik zasilania jest uszkodzony. 4. Element grzewczy jest przepalony. 5. Wewnętrzny przewód jest odłączony.	1. Sprawdź przełączniki, wtyczki, gniazdka i bezpieczniki. Upewnij się, że przewody zasilające są w dobrym stanie, prawidłowo podłączone i dobrze osadzone. 2. Oddaj urządzenie do wyznaczonego punktu serwisowego lub sklepu w celu naprawy.
	Dysk grzewczy działa	1. Wskaźnik (lampka kontrolna) jest uszkodzony. 2. Przewód wskaźnika jest uszkodzony lub odłączony.	1. Oddaj do wyznaczonego punktu serwisowego lub sklepu w celu naprawy
Nie można automatycznie regulować temperatury		1. Uszkodzony termostat	1. Oddaj do wyznaczonego punktu serwisowego lub sklepu w celu naprawy
Brak wibracji		1. Awaria rezystencji przewodu (oporu)	1. Oddaj do wyznaczonego punktu serwisowego lub sklepu w celu naprawy

I. PARAMETRY URZĄDZENIA

Model produktu	AMY-05
Napięcie wejściowe	5V
Moc znamionowa	3W
Pojemność baterii	600mAh
Czas ładowania	około 2 godz.