



INTELIGENTNY SKALER ULTRADŹWIĘKOWY NV600

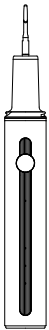

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL

1 OPIS PRODUKTU

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Produkt wykorzystuje technologię ultradźwiękowych wibracji o wysokiej częstotliwości do usuwania przebarwień na zębach.

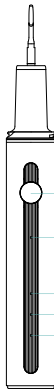

Naciśnij długo aby włączyć / wyłączyć
Wskaźnik ładowania
Tryb delikatny
Tryb standardowy
Tryb mocny

PRZYCISK ZASILANIA
Naciśnij długo aby włączyć / wyłączyć urządzenie: Krótkie naciśnięcie, aby przełączać tryby (tryb delikatny, mocny, standardowy)

Wskaźnik baterii
Niski poziom baterii: miga czerwona dioda
Ładowanie: czerwona dioda świeci przez długi czas.
Pełna bateria: światło wyłączone

2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby uniknąć ryzyka nieprawidłowego działania, porażenia prądem, obrażeń, pożaru i uszkodzenia sprzętu lub mienia, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

1. Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie należy wrzucać go do ognia ani wstawiać na działanie promieni słonecznych, gdyż może to spowodować eksplozję akumulatora.
2. Nie używaj produktu podczas ładowania.
3. Nie używaj produktu, gdy port ładowania nie jest dobrze osłonięty.
4. Nie montuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
5. Nie umieszczaj kabla ładującego produkt w wilgotnym miejscu lub w wodzie.
6. Nie umieszczaj produktu w miejscu dostępnym dla dzieci.
7. Nie upuszczaj, nie uderzaj, nie wstrząsaj produktem.
8. Nie stosuj produktu podczas kąpieli.
9. Jeżeli cierpisz na ciężkie zapalenie przyzębia, jesteś w trakcie leczenia zębów lub obawiasz się dyskomfortu w jamie ustnej, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
10. Do czyszczenia produktu nie używaj rozcieńczalników do farb, benzenu ani innych środków chemicznych.
11. Proszę nie martwić się lekkim krwawieniem dziąseł przy pierwszym użyciu produktu, ale jeśli krwawienie jest poważne, należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.

3 SUGESTIE

Ostrzeżenie:


Produkt stosuje się do wibracji ultradźwiękowych, będzie wibrował, gdy końcówka skalera dotknie zębów lub twardych przedmiotów, w przeciwnym razie nie będzie reakcji.

Kierując się higieną jamy ustnej, możesz wybrać odpowiedni tryb pracy

Tryb delikatny: odpowiedni dla nowicjuszy, delikatnie usuwa plamy z kamienia nazębnego

Tryb standardowy: usuń kamień nazębny, taki jak plamy po dymie, kawie, herbacie itp.

Tryb mocny: usuń powstały kamień nazębny i skuteczniej myj zęby

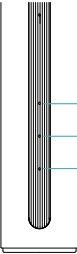

Tryb delikatny
Tryb standardowy
Tryb mocny

4 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Przy pierwszym użyciu produktu krwawiły mi dziąsła.

Odp: Jeśli używają go osoby cierpiące na zapalenie przyzębia lub dziąseł lub jeśli łatwo jest spowodować krwawienie dziąseł, na przykład podczas szczotkowania zębów lub gryzienia twardego jedzenia, również będzie krwawić. Jeżeli dziąsła krwawią podczas stosowania produktu, przestań go używać i spłucz ciepłą wodą.

2. Czy to normalne, że czysta końcówka nagrzewa się podczas jej używania?

Odp: Energia elektryczna jest przekształcona w energię kinetyczną podczas pracy produktu, a następnie końcówka skalera odpowiednio się nagrzewa.

3. Dlaczego produkt wydaje dźwięk podczas używania?

Odp: Dźwięk pochodzi z pracy pomiędzy produktem a zębami, co jest zjawiskiem normalnym.

4. Czemu produkt nagle przestaje działać?

Odp: Produkt posiada funkcję samoobrony, nagle się wyłącza, gdy będzie pracować przez długi czas około 10 minut, musisz go uruchomić ponownie, jeśli chcesz, aby nadal działał.

*Jeżeli problem nadal nie został rozwiązany zgodnie z powyższymi sugestiami, skontaktuj się z obsługą klienta.

5 Parametry produktu

Nazwa produktu Inteligentny skaler ultradźwiękowy	Numer produktu NV600
Temperatura pracy -10°C~50°C	Częstotliwość robocza 2.4 GHz
Żywotność baterii Okolo 4h	Parametry wejściowe 5V ± 0.5A
Napięcie robocze 3.45-4.2V	Moc robocza 0.4-1W
Bateria 600mAh	Czas ładowania Okolo 1h