



Instrukcja **wykonania zabiegu**

★ PURE BEAUTY ★



PROFESSIONAL SKIN CARE




Peeling ultrasoniczny

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, należy przed zastosowaniem trybu ultrasonicznego **umyć twarz i pozostawić ją wilgotną**. Urządzenie wprawia w drgania cząsteczki wody, które **usuwiają martwy naskórek i keratynę**. Drgania te mają częstotliwość 29 kHz. Miejsca wyschnięte należy spryskać atomizerem, aby skóra była cały czas wilgotna. W trakcie usuwania zanieczyszczeń oraz martwego naskórka na szpatułce mogą pozostać tłuste zanieczyszczenia. Należy je **często usuwać** w trakcie trwania zabiegu. Do tego celu można użyć jednorazowych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, ręcznika. **UWAGA:** szpatułka powinna być ustawiona pionowo w stosunku do skóry. Kierunek czyszczenia twarzy: od dołu twarzy do czoła



Peeling ultrasoniczny +ION

Czyszczenie **soniczne z dodatnimi jonami** jest kolejnym krokiem peelingu kawitacyjnego. Tryb ten wykorzystuje jony dodatnie do pełnego usuwania pozostałości kosmetyków znajdujących się głęboko w skórze. W trakcie używania niniejszego trybu należy pamiętać o nawilżaniu skóry atomizerem. **UWAGA!** Podczas stosowania tej funkcji **należy dotykać bocznych płytek urządzenia dłonią** (** Pole elektryczne). Szpatułka powinna być ustawiona jak najbardziej pionowo w stosunku do skóry. Kierunek czyszczenia twarzy: od dołu twarzy do czoła.

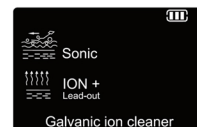

Sonoforeza (galwanizacja) ultrasoniczna -ION – Odżywianie

Produkty do pielęgnacji skóry posiadają **jony ujemne**. Tryb ten wykorzystuje właściwości wzajemnego wykluczania się jonów ujemnych, aby uzyskać efekt **lepszego włączania produktów do pielęgnacji w głąb skóry**. Należy nanieść niewielką ilość kremu na twarz, następnie uruchomić tryb **Ultrasoniczny -ION** i delikatnie wmasowywać krem w skórę twarzy. **UWAGA!** Podczas stosowania tej funkcji należy dotykać bocznych płytek urządzenia dłonią (** Pole elektryczne). Do tego programu należy używać tylnej części szpatułki



Tryb elektrostymulacji Anti-Aging – EMS (L/H)

Elektrostymulacja AntiAging – EMS low / high to tryb **natychmiastowego ujędrniania skóry**. Poprawia przepływ krwi, uelastycznia mięśnie i napina skórę twarzy przeciwdziałając powstawaniu zmarszczek. Aby rozpocząć zabieg, należy nanieść niewielką ilość kremu na twarz, wybrać na urządzeniu tryb **EMS L (low – niskie nasilenie prądów)** lub **EMS H (high – wysokie nasilenie prądów)**, a następnie delikatnie przesuwając szpatułką po skórze. **UWAGA!** Podczas stosowania tej funkcji należy dotykać bocznych płytek urządzenia dłonią (** Pole elektryczne).

WAŻNE: Na początku stosowania odczuwalne jest delikatne kłucie, ponieważ w głąb skóry wnikają delikatne impulsy elektryczne. Należy stopniowo przyzwyczajać się do tego zabiegu. Zaleca się, aby zacząć stosowanie zabiegów EMS od trybu L (LOW - niskie).

