

milla home

SZCZOTECZKA SONICZNA MST501

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

UWAGA!

Okresowo sprawdzaj czy przewód nie jest uszkodzony. Jeżeli przewód jest uszkodzony należy zabrać stację ładującą do najbliższego serwisu lub punktu sprzedaży. Nie należy używać uszkodzonego lub niesprawnego urządzenia. Nie naprawiaj produktu samodzielnie, ponieważ możesz wywołać pożar, narazić się na porażenie prądem lub inne uszkodzenia ciała.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Należy używać tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w instrukcji obsługi. Nie należy używać nieoryginalnej ładowarki i końcówek.

OSTRZEŻENIE

- Jeżeli produkt zostanie upuszczony, końcówka szczoteczki powinna zostać wymieniona przed ponownym użyciem nawet, jeśli nie ma widocznych uszkodzeń.
- Nie należy umieszczać stacji ładującej w wodzie lub innej cieczy a także umieszczać lub przechowywać w miejscu, z którego może spaść lub zostać strącona do wanny lub umywalki. Nie sięgaj po stację ładującą, która wpadła do wody. Natychmiast odłącz ją od zasilania.



- Nie należy rozmontowywać produktu.
- Podczas odłączania należy zawsze trzymać za wtyczkę, nie za przewód. Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem.
- Jeśli jesteś w trakcie leczenia stomatologicznego skonsultuj się ze swoim lekarzem stomatologiem przed pierwszym użyciem.
- Z produktu nie należy korzystać w trakcie kąpieli.
- Należy trzymać urządzenie, stację ładującą i jej przewód z dala od gorących powierzchni.

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przeznaczone.
- Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Po zakończeniu ładowania należy zawsze odłączyć zasilacz z gniazda elektrycznego.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur.
- Nie należy pozostawiać ładującego się urządzenia bez nadzoru.
- Akumulator jest niewymienny.
- Po zakończeniu użytkowania, produkt należy przekazać do specjalistycznego zakładu w celu wyjęcia akumulatora.
- Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Należy je przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Milla Home**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


Szczoteczka Milla Home MST501 została starannie zaprojektowana, aby zaoferować Tobie i Twojej rodzinie wyjątkowe doznania, które są zarówno bezpieczne jak i skuteczne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.

DANE TECHNICZNE

Nazwa:	Szczoteczka soniczna
Model:	MST501
Wejście:	5 V --- 300 mA
Moc:	1,8 W
Tryby pracy:	Czyszczenie, Delikatny, Masaż, Wybielanie, Polerowanie
Wibracje:	Do 39 000 drgań na minutę
Rodzaj ładowania:	Indukcyjne
Czas ładowania:	Do 14 godzin
Akumulator:	Li-ion 3.7 V --- 800 mAh
Wskaźniki:	Ładowania, poziomu naładowania, trybu pracy
Wodoszczelność:	IPX4
Czas ciągłej pracy:	do 120 minut

OPIS URZĄDZENIA

1. Wymienna końcówka
2. Szczoteczka z silnikiem
3. Przycisk włącz/wyłącz, zmiana trybu
4. Tryb Czyszczenie
5. Tryb Delikatny
6. Tryb Masaż
7. Tryb Wybielanie
8. Tryb Polerowanie
9. Wskaźnik ładowania, poziomu naładowania
10. Przewód zasilający ładowarki
11. Stacja ładująca z przewodem USB

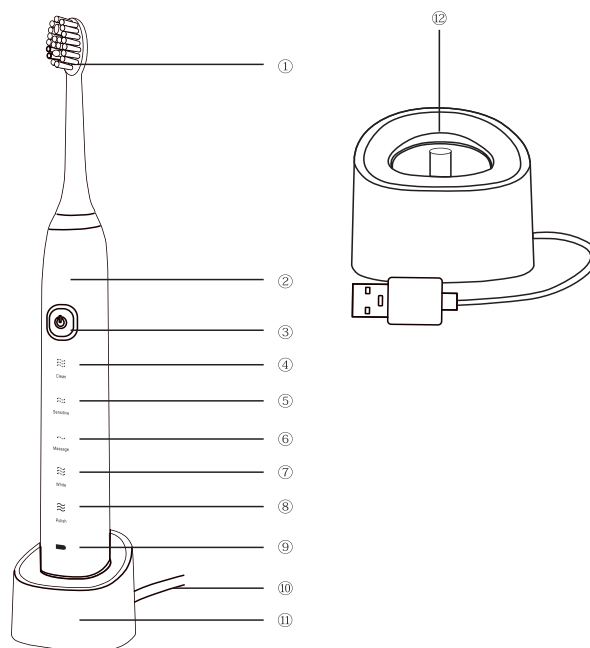

PODŁĄCZENIE I ŁADOWANIE

Szczoteczka MST501 jest wyposażona w wodoszczelną rączkę, została zaprojektowana do używania w łazience. Podłącz wtyczkę USB stacji ładującej do zasilacza 5.0V (brak w zestawie), następnie podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego. Czerwona dioda (wskaźnik ładowania) pulsuje, kiedy szczoteczka się ładuje. Kiedy jest w pełni naładowana, świeci nieprzerwanie w kolorze zielonym.

Gdy bateria w urządzeniu jest wyładowana, po uruchomieniu pulsuje czerwony wskaźnik wyczerpania baterii. Szczoteczkę należy niezwłocznie naładować.

Do codziennego użytku, rączkę szczoteczki można trzymać na podstawce ładowarki, tak aby była w pełni naładowana. Nie istnieje ryzyko przeładowania baterii. Jednakże z powodów związanych z ochroną środowiska, producent zaleca odłączyć ładowarkę, aż do czasu kiedy wymagane będzie następne ładowanie. Aby zachować maksymalną pojemność akumulatora, należy co 6 miesięcy odłączyć ładowarkę i całkowicie rozładować urządzenie podczas normalnego użytkowania.

UWAGA:


Szczoteczkę należy wyłączyć przed ładowaniem. Jeżeli dioda wskaźnika ładowania nie zapala się, to oznacza całkowite wyładowanie baterii. Dioda ładowania zaświeci się po około 10 minutach ładowania. Szczoteczkę należy ładować w odpowiedniej temperaturze otoczenia oraz dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zbyt niska temperatura lub zbyt wysoka temperatura może mieć wpływ na żywotność baterii.

Jeżeli szczoteczka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy upewnić się, że jej bateria jest naładowana. W innym wypadku może ulec uszkodzeniu.

SPOSÓB UŻYCIA

Podczas użytkowania szczoteczki sonicznej można używać dowolnego rodzaju pasty do zębów. Aby uniknąć rozpryskiwania wody, należy przed włączeniem urządzenia najpierw umieścić końcówkę szczoteczki w ustach. Prowadzić końcówkę szczoteczki powoli od jednego zęba do drugiego poświęcając od kilku do kilkunastu sekund każdej powierzchni zębów. Szczotkować należy dokładnie zarówno zęby jak i dziąsła, zaczynając od zewnętrznej, następnie po wewnętrznej stronie zębów i na koniec po powierzchni żującej każdego zęba. Zęby należy szczotkować bez silnego nacisku lub tarcia, pozwól szczoteczce wykonywać automatyczne ruchy myjące.

Aby dokładnie wyczyścić dziąsła przy zębach, używaj szczoteczki pod kątem 45°.

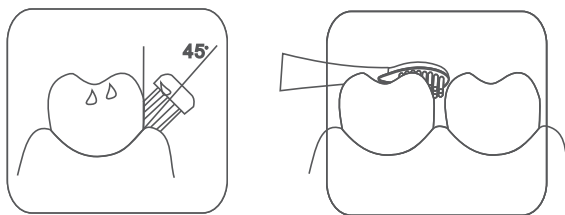

Tryby szczotkowania

- Clean/Czyszczenie – wysoka częstotliwość poruszania się główki szczoteczki;
- Sensitive/Wrażliwy – delikatne, lecz dokładne czyszczenie wrażliwych miejsc;
- Massage/Masaż – tryb masażu, dokładnie wyczyści jamę ustną, dodatkowo masując dziąsła;
- White/Wybielanie – wybielanie poprzez zmianę w trybie czyszczenia i polerowania;
- Polish/Polerowanie – za pomocą wysokiej częstotliwości i dużej mocy powoduje polerowanie i rozjaśnianie zębów.

Zmiana trybu szczotkowania


Naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz spowoduje uruchomienie szczoteczki w trybie Clean/Czyszczenie, każde kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę trybu szczotkowania, aż do wyłączenia urządzenia.

UWAGA!

Każdy tryb szczotkowania przerywany jest pauzą co 30 sekund pracy wskazując czas szczotkowania. W trybie Polerowania szczoteczka będzie pracować 1 minutę w pozostałych trybach 2 minuty. Po tym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie. Tryb szczotkowania zostanie zapisany a po ponownym włączeniu szczoteczka będzie pracować w tym trybie.

Wymiana końcówki szczotkującej

W celu wymiany końcówki szczotkującej, należy chwycić końcówkę szczoteczki i zdjąć z trzpienia napędzającego. Nałóż nową końcówkę tak aby trzpień napędzający znalazł się w otworze nowej końcówki. W celu założenia nowej końcówki szczotkującej należy zwrócić uwagę, aby włosie końcówki zawsze było skierowane w kierunku przycisku Włącz/Wyłącz, w innym przypadku montaż nie będzie możliwy, oraz dojdzie do uszkodzenia uchwytu mocującego.

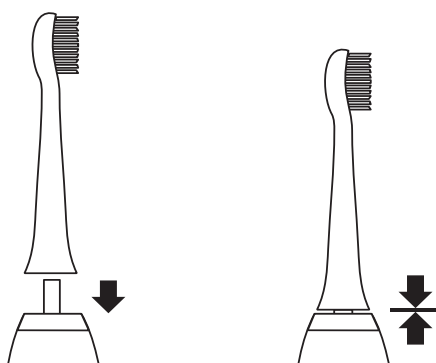


UWAGA!

Przez pierwsze kilka dni używania szczoteczki sonicznej dziąsła mogą lekko krwawić. Zwykłe krwawienie ustępuje po kilku dniach. Jeżeli po upływie 2 tygodni krwawienie wciąż występuje, należy niezwłocznie skonsultować się ze swoim dentystą. Jeżeli posiadasz wrażliwe zęby i dziąsła, producent zaleca stosowanie

programu Sensitive do wrażliwych zębów i dziąseł. Zęby należy szczotkować bez silnego nacisku lub tarcia, pozwól szczoteczce wykonywać automatyczne ruchy myjące. Aby dokładnie wyczyścić dziąsła przy zębach, używaj szczoteczki pod kątem 45°.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Po zakończeniu szczotkowania, należy delikatnie wypłukać włączoną szczoteczkę (bądź dodatkową końcówkę) pod bieżącą wodą przez kilka sekund. Wyłącz szczoteczkę i zdejmij końcówkę szczotkującą. Umyj obie części osobno pod bieżącą wodą. Następnie wytrzyj do sucha zanim ponownie zmontujesz szczoteczkę. Przed czyszczeniem stacji ładującej należy ją odłączyć od źródła zasilania. Nigdy nie umieszczaj stacji ładującej w wodzie lub zmywarce. Ładowarkę należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. Nie należy używać chemicznych, lub ściernych środków czyszczących.

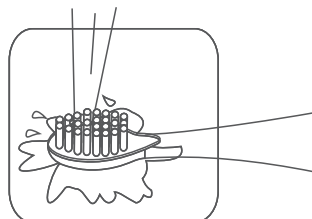

UWAGA!

Należy regularnie czyścić stację ładującą, usuwając zalegające osady i zanieczyszczenia. Brak regularnego czyszczenia stacji ładującej oraz szczoteczki może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

KOŃCÓWKI I AKCESORIA

Gwarancja będzie nieważna, jeżeli uszkodzenie szczoteczki wynika z używania nieoryginalnych końcówek innych niż AMST500. Milla Home nie rekomenduje korzystania z wymiennych końcówek lub akcesoriów innych niż zalecane.

Wszystkie wymienne końcówki lub akcesoria mają logo Milla Home oraz spełniają wysokie standardy jakości. Producent nie sprzedaje wymiennych końcówek lub akcesoriów pod żadną inną nazwą.

UWAGA!

Dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby noszące aparat korekcyjny, powinny skonsultować się ze stomatologiem w celu dobrania odpowiedniej końcówki i programu do pielęgnacji jamy ustnej oraz ustalić przeciwwskazania w stosowaniu urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Szczoteczka nie uruchamia się.	Szczoteczka jest rozładowana.	Podłącz stację ładującą do zasilania i naładuj szczoteczkę.
Słabe wibracje.	Niski poziom naładowania baterii.	Podłącz stację ładującą do zasilania i naładuj szczoteczkę.
Szczoteczka przestaje wibrować co 30 sekund.	Działanie timera w szczoteczce.	Jest to cecha produktu i prawidłowe działanie.
Nie podświetla się wskaźnik ładowania.	Zanieczyszczona stacja ładowania.	Oczyść stację z osadu i postaw prawidłowo szczoteczkę na stacji ładującej.
	Nieprawidłowe ustawienie szczoteczki na bazie ładującej.	Ustaw prawidłowo szczoteczkę na stacji ładującej.
Szczoteczka podrażnia dziąsła i niedokładnie czyści zęby.	Zużyta końcówka.	Należy wymienić końcówkę szczoteczki na nową.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SZCZOTECZKI SONICZNEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,

- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

