

VITAMMY®

lamina

waga elektroniczna

MODEL SBS-30504



INSTRUKCJA UŻYWANIA

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

SPIS TREŚCI

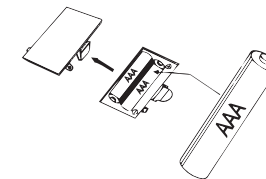
Wprowadzenie	3
Instrukcje użycia	3
Dane techniczne	4
Objaśnienia użytych znaków	4
Gwarancja	5
Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej	7
Informacje Kontaktowe	8

WPROWADZENIE

Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed przystąpieniem do używania niniejszego urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

INSTRUKCJA UŻYCIA**ZASILANIE**

To urządzenie wymaga 2 baterii 1,5 V AAA. Otwórz pokrywę komory baterii i zainstaluj baterie prawidłowo, zgodnie z symbolami na spodzie wagi.

**WAŻNE**

- △ Przy pierwszym użyciu wagi lub przy przenoszeniu wagi wymagane jest wyzerowanie wagi – naciśnij środek wagi, aby ją aktywować i poczekaj, aż na ekranie pojawi się 0,0. Wejdź na wagę w celu zważenia się. Aby przystąpić do kolejnego ważenia, wystarczy wejść na wagę.

WAŻENIE

- Umieść wagę na twardej i płaskiej powierzchni, unikając powierzchni wyłożonych wykładziną.
- Jeżeli używasz wagi po raz pierwszy lub zmieniło się jej położenie, naciśnij środek skali, aby włączyć zasilanie i poczekaj, aż odczyt powróci do zera (0,0).
- Wejdź na platformę wagi i stój nieruchomo. Po kilku sekundach zobaczysz migający wynik. Twoja waga będzie wyświetlana przez 10 sekund, po czym urządzenie wyłączy się automatycznie.

Jeśli chcesz ponownie zmierzyć wagę, zejdziesz, a następnie ponownie wejdź na platformę.

**WYBÓR JEDNOSTKI**

Przycisk do zmiany jednostek znajduje się na spodzie wagi. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać żądaną jednostkę, kg=>lb=>st:lb.

**WŁĄCZANIE**

Włącz wagę, wchodząc bezpośrednio na platformę. Spowoduje to natychmiastowy odczyt masy ciała.

WYŁĄCZANIE

Waga wyłączy się automatycznie po 10 sekundach, jeśli nie będzie używana.

WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA

Waga zostanie przeciążona przy wadze 180 kg. W przypadku przeciążenia wagi na ekranie pojawi się komunikat „Err”. Aby chronić czujniki, zdejmij ciężar z platformy.



WSKAŹNIK SŁABYCH BATERII

Gdy wyświetlacz LCD wskaże „Lo”, otwórz komorę baterii i wymień baterię na nową.

Lo

WSKAZÓWKI

1. NIE kładź wagi na dywanie lub miękkiej powierzchni.
2. Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
3. Wagę czyść lekko zwilżoną ściereczką, NIE zanurzaj wagi w wodzie ani nie używaj chemicznych/ściernych środków czyszczących

DANE TECHNICZNE

MODEL	LAMINA SBS-30504
Jednostki	kg, lb, st:lb
Zakres ważenia	6 ~ 180 kg
Podziałka	100 g
Rozmiar wyświetlacza	72 × 28 mm
Wymiary	300 × 300 × 25 mm
Zasilanie	2 × 1,5 V AAA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Waga, dwie baterie 1,5 V AAA, instrukcja używania.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na urządzeniu są istotne by zapewnić bezpieczne korzystanie z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia tabela:

SYMBOL	ZNACZENIE	SYMBOL	ZNACZENIE
	Przeczytaj instrukcję		Producent
	Importer		Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w Dyrektywie EMC 2014/30/UE
	Opakowanie do recyklingu		Urządzenie zgodne z Dyrektywą EMC 2011/65/UE
	Numer seryjny		



Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie nie może być zutylizowane wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny lub oddać w sklepie, gdzie kupisz podobny sprzęt. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację sprzętu. Prawidłowo zutylizowane urządzenie może być poddane recyklingowi, co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie.

GWARANCJA

URZĄDZENIE: VITAMMY LAMINA (model: SBS-30504)

WSPARCIE TECHNICZNE: INFOLINIA – TEL. 887 11 00 66 E-MAIL: POMOC@NOVAMED.PL

GWARANCJA: Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie objętym niniejszą gwarancją gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w terminie do 14 dni. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki.

TYP GWARANCJI: Gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt zostanie dostarczony do Serwisu Technicznego, ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź, a następnie naprawiony lub wymieniony i dostarczony bezpłatnie Kupującemu.

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące na urządzenie; Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie.

BIEG OKRESU GWARANCJI: Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI: Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI: W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI:

Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:

- niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych

- przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)

Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki.

Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji używania.

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Data

Podpis klienta

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

Niewłaściwa utylizacja może powodować zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi typu miedź.

Zawsze należy utylizować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odstępstwo od tej zasady może negatywnie wpłynąć na środowisko lub zdrowie człowieka z powodu zawartości w baterii metali.

W wyniku spożycia roślin pochodzących z upraw prowadzonych na zanieczyszczonej glebie lub picia zanieczyszczonej wody, metale mogą dostać się do ludzkiego ciała. Ich kumulacja w organizmie, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Np. nadmierna obecność niklu w organizmie człowieka może powodować problemy z oddychaniem, problemy skórne, problemy z układem trawiennym.

INFORMACJE KONTAKTOWE** AEMAXX CO., LTD.**

4F, Building A, Donghu Industrial Park, No 61, Dongpu Er Road, Tianhe District, Guangzhou City,
People's Republic of China

NOVAMEDPL** NOVAMED.PL S.A.**

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66