

Instrukcja obsługi

Szczoteczka


soniczna

SG-977

Instructions




wymiana główki

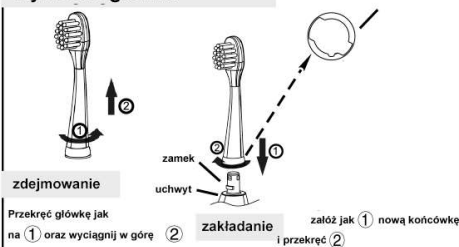

wymiana baterii

- Aby włożyć baterię należy przekręcić dolną część rączki w lewą stronę. Z tyłu rączki widoczne są kropki i strzałka.
- Jeśli chcemy zamknąć pokrywę należy przyłożyć kropkę na dolnej części przy strzałce i przekręcić w prawo.
- Do szczoteczki należy zamontować 1x bateria AAA (brak w zestawie).

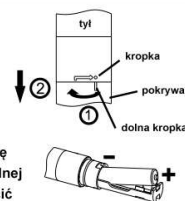

Korzystanie ze szczoteczki

Wciśnij włącznik główny aby włączyć szczoteczkę. Szczoteczka po 2 minutach szczotkowania wyłączy się automatycznie. Aby korzystać ze szczoteczki z włączonym trybem LED RGB wciśnij włącznik dwa razy.

Ważne zagadnienia

- Często zdarza się że osoby które korzystają ze szczoteczki sonicznej po raz pierwszy czują dyskomfort, laskotania etc. Nie przejmuj się, to normalne. Działła muszą się przyzwyczaić do drgań jakie odczuwa podczas szczotkowania. Po kilku użyciach uczucie minie.

- Nie otwieraj szczoteczki we własnym zakresie oraz nie próbuj jej sam naprawiać.

- Jeśli produkt posiada jakieś defekty, przestań z niego korzystać.

- Szczoteczki należy ładować zasilaczem o maksymalnym natężeniu 5V 1A. Użycie szybkich ładowarek bądź ładowarek innych niż zalecane powyżej może skutkować uszkodzeniem szczoteczki.

- Jeśli twoje dziąsła podczas szczotkowania krwawią, skonsultuj korzystanie ze szczoteczki sonicznej ze swoim dentystą

- Przechowuj urządzenie zdala od wysokich temperatur oraz bezpośredniego słońca