



Kraftwerk®

**Poduszka
Do masażu**

powered by axion

KRAFTWERK®

Poduszka do masażu

Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać oraz zachować ją na przyszłość.

Konserwacja i stosowanie

- Poduszkę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. NIE należy splukiwać wodą.
- Unikać silnego nacisku i/lub ostrych, twardych przedmiotów, które mogą zarysować powierzchnię produktu.
- Poduszkę po zastosowaniu należy prawidłowo przechowywać. Trzymać w oryginalnym opakowaniu i/ lub w chłodnym, suchym miejscu.
- Jeżeli w czasie stosowania, urządzenie działa nieprawidłowo, należy od razu przestać z niego korzystać, odłączyć dopływ prądu i zwrócić się do działu obsługi klienta. Urządzenia nie należy samodzielnie demontować.
- Po zastosowaniu urządzenia lub przed jego czyszczeniem, kabel zasilający należy odłączyć z gniazdka.
- Po ściągnięciu i wypraniu pokrowca poduszki, należy ponownie go założyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu. Zakładanie wilgotnego lub mokrego pokrowca może doprowadzić do uszkodzenia elektroniki.

Opis działania

- Aby włączyć lub wyłączyć masażer, należy 2 minuty przytrzymać przycisk .
- Aby zwiększyć prędkość, należy przycisnąć przycisk . Dostępne są trzy poziomy prędkości.
- Po włączeniu urządzenia funkcja ogrzewania jest automatycznie włączona. Aby zakończyć funkcję ogrzewania, należy przez chwilę wcisnąć przycisk . W celu ponownego jej włączenia należy ponownie wcisnąć ten sam przycisk.

- Aby ręcznie wyłączyć urządzenie, należy przycisnąć przez 2 sekundy przycisk włączania i wyłączania 
- Po 15 minutach urządzenie wyłącza się automatycznie.

W nagłych wypadkach

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, kabla lub wtyczek należy natychmiast przerwać użytkowanie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
2. W przypadku awarii spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem nie należy samodzielnie demontować produktu. Odłącz wtyczkę zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu przeprowadzenia konserwacji.
3. Jeśli podczas użytkowania pojawi się dym lub ogień, należy jak najszybciej odłączyć urządzenie od gniazdka i skontaktować się z działem obsługi klienta.
4. Jeśli powierzchnia skóry i/lub tkaniny jest uszkodzona lub odłusnięta, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z działem obsługi klienta w celu przeprowadzenia konserwacji.

Ważne uwagi

1. Produktu NIE należy ładować bez nadzoru, podczas masażu lub w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
2. NIE umieszczać urządzenia w łazience ani w żadnym innym wilgotnym miejscu.
3. Masażera nie należy wystawiać przed dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, lub wysokich temperatur.
4. Stosowanie urządzenia przez dzieci lub osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, dozwolone jest tylko i wyłącznie w obecności opiekuna.
5. Jeżeli pokrowiec masażera jest uszkodzony, nie należy używać go dalej, dopóki nie zostanie on wymieniony na nowy. Dalsze używanie uszkodzonego pokrowca może doprowadzić do zranień.
6. Jeżeli zauważycie, że masażer zachowuje się nieprawidłowo, może to oznaczać iż jest on uszkodzony.
7. Jeżeli w czasie stosowania masażera, wystąpią nietypowe lub moc-

ne bóle, należy natychmiast zaprzestać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

8. W przypadku przypadków wymienionych powyżej - jeśli okaże się, że urządzenie jest wadliwe - należy przesłać je do centrum obsługi klienta w celu sprawdzenia i konserwacji.

Produkt nie nadaje się do stosowania :

Jeżeli któryś z poniższych punktów Państwa dotyczy, przed zastosowaniem masażera, zaleca się konsultację z lekarzem.


1. Osoby, które znajdują się pod nadzorem lekarza lub źle się czują
2. Pacjenci z ostrymi chorobami.
3. Pacjenci uzależnieni od alkoholu.
4. Niepełnoletni, dzieci.

Utylizacja produktu

Akumulator litowo-jonowy zastosowany w tym produkcie jest cennym surowcem, który można poddać recyklingowi. Po wyczerpaniu akumulatora litowo-jonowego należy go wyjąć i zanieść do lokalnego centrum recyklingu, które zajmuje się recyklingiem akumulatorów.

Aby wyjąć akumulator, należy wykonać poniższe czynności.

1. Urządzenie należy wyłączyć.
2. Otworzyć komorę baterii.
3. Wyciągnąć baterie.

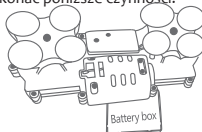

Ogólne postępowanie z błędami

Awaria	Możliwe przyczyny	Możliwość rozwiązania
Nie można włączyć urządzenia	Produkt nie jest naładowany	Produkt należy podłączyć do zasilania sieciowego i naładować.

Zatrzymuje się podczas użytkowania	Sesja się skończyła	Urządzenie należy wyłączyć i włączyć ponownie.
	Przeciążenie urządzenia (np. przez nadeptanie lub położenie na nie ciężkich przedmiotów)	Należy zmniejszyć obciążenie
	Nieprzerwane stosowanie przez więcej niż 15 minut.	Wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia, urządzenie należy włączyć ponownie.
Hałas przy stosowaniu.	Interne Überhitzung. Starten Sie das Gerät neu.	Stan normalny.

Specyfikacja

Nazwa produktu	Poduszka do masażu	Nominalny czas pracy urządzenia	15 minut
Napięcie nominalne	11,1 V	Moc znamionowa	24 W

Sprzęt elektryczny i elektroniczny



Informacje dla gospodarstw domowych zgodnie z § 18 (2) ElektroG.

Ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) zawiera wiele wymogów dotyczących obchodzenia się ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Poniżej podsumowano najważniejsze z nich.

1. Oddzielna zbiórka zużytych urządzeń

Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stały się odpadami, nazywane są starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściciele starych urządzeń muszą pozbywać się ich oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. W szczególności stare urządzenia nie mogą być umieszczane w odpadach domowych, ale w specjalnych systemach zbiórki i zwrotu.

2. Opcje dotyczące zwrotu starych urządzeń

Właściciele starych urządzeń z prywatnych gospodarstw domowych mogą je oddać w punktach zbiórki publicznych urzędów utylizacji odpadów lub w centrach odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów zgodnie z ElektroG. Listę punktów zbiórki i odbioru można znaleźć tutaj: <https://elektrosmieciwsieci.pl/mapa/>

CE Deklaracja zgodności EU

axion GmbH niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z CE i RoHS oraz z obowiązującymi normami UE. Kopię deklaracji zgodności można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres service@axion.shop.

axion GmbH
Mollenbachstr. 13
71229 Leonberg
NIEMCY



service@axion.shop
www.axion.shop