

Instrukcja obsługi

Depilator LESCOLTON T-009i

LESCOLTON T-009i jest urządzeniem z wbudowanym czujnikiem koloru skóry. Czujnik ten dostosowuje swoją intensywność pracy do rodzaju i koloru skóry.

Należy pamiętać, że depilator nie zadziała na bardzo ciemnej skórze, ani na bardzo jasnych, siwych i rudych włosach. Jest stworzony dla osób z włosami od ciemnego blond, przez jasny i ciemny brąz oraz do czarnych włosów. U osób o takim odcieniu włosów depilator zbiera bardzo dobre opinie i ma potwierdzoną skuteczność.

Oryginalny depilator laserowy LESCOLTON model T-009i jest skuteczny i bezpieczny. Badania wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów w ciągu zaledwie czterech zabiegów - dzięki nim skóra stała się też gładsza i bardziej elastyczna.

Depilator laserowy LESCOLTON T009i łączy w sobie trzy najważniejsze funkcje:

- skutecznie usuwa owłosienie
- pomaga zaleczyć stany zapalne
- przyczynia się do szybszej regeneracji naskórka

Depilator LESCOLTON model T-009i wyposażony jest w dwie wymienne głowice świetlne (czerwona i żółta). Głowice te spełniają różne funkcje.

Głowica czerwona – do pielęgnacji

Lampa o świetle czerwonym pobudza i przyspiesza regenerację skóry, dzięki czemu staje się ona widocznie odmłodzona. Światło czerwone wpływa również na szybkość gojenia się zmian trądzikowych, dzięki temu może być wykorzystane w walce z niedoskonałościami. Niszczy ono bakterie, które powodują stan zapalny skóry. W tym celu wykonuje się serię kilku zabiegów mniej więcej w tygodniowych odstępach.

Dzięki głowicy z czerwonym filtrem, generującej intensywne impulsy światła można przeprowadzić fotoodmładzanie, dzięki czemu można uzyskać takie efekty, jak:

- spłycenie i wygładzenie zmarszczek,
- wygładzenie bruzd,

- zwężenie porów,
- zamknięcie rozszerzonych naczynek,
- zwiększenie elastyczności i napięcia skóry,
- zlikwidowanie przebarwień i blizn po trądziku,
- przywrócenie skórze blasku,
- wyraźne odmłodzenie skóry.

Głowica żółta – do depilacji

Lampa o świetle żółtym osłabia cebulki włosów, aż do całkowitego usunięcia włosów. Trwa to około 3 miesięcy.


Najlepsze efekty daje regularne powtarzanie zabiegu. Pierwsze efekty można zauważyć już po 3 – 4 zabiegach, kiedy włoski stają się cienkie i miękkie. Efektu tego nie da się przyspieszyć ze względu na specyfikę odrastania włosów. Każdy z naszych włosów znajduje się w jednej z trzech faz wzrostu:

- fazie intensywnego odrastania
- fazie uśpienia
- fazie przejściowej.

Depilacja działa tylko na włosy w fazie odrastania. Po 2 miesiącach odrastanie włosów z osłabionych cebulek zostaje zahamowane. Po 3 miesiącach włosy zostają trwale usunięte. Naświetlając obszar skóry na którym znajdują się włosy wysyłamy fale świetlne, które są pochłaniane przez cebulki włosowe i okoliczną skórę. Dzięki temu będziemy mieli piękną, gładką i odmłodzoną skórą bez niedoskonałości.

Uwaga. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych wskazówek

- nie stosować u chorych na epilepsję lub przy innych dolegliwościach związanych z wrażliwością na światło oraz u osób cierpiących na chroniczne migreny.
- nie stosować u osób z aktywnymi implantami (rozrusznik serca, pompa insulinowa itp.). Użycie depilatora nie zostało przetestowane na takiej grupie osób i efekty nie są znane.
- trzymać z dala od dzieci.
- urządzenia nie powinny stosować osoby poniżej 18 roku życia.
- nie patrzeć bezpośrednio na oświetlany obszar ciała, używać okularów ochronnych w trakcie stosowania.
- urządzenia nie powinny stosować kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią

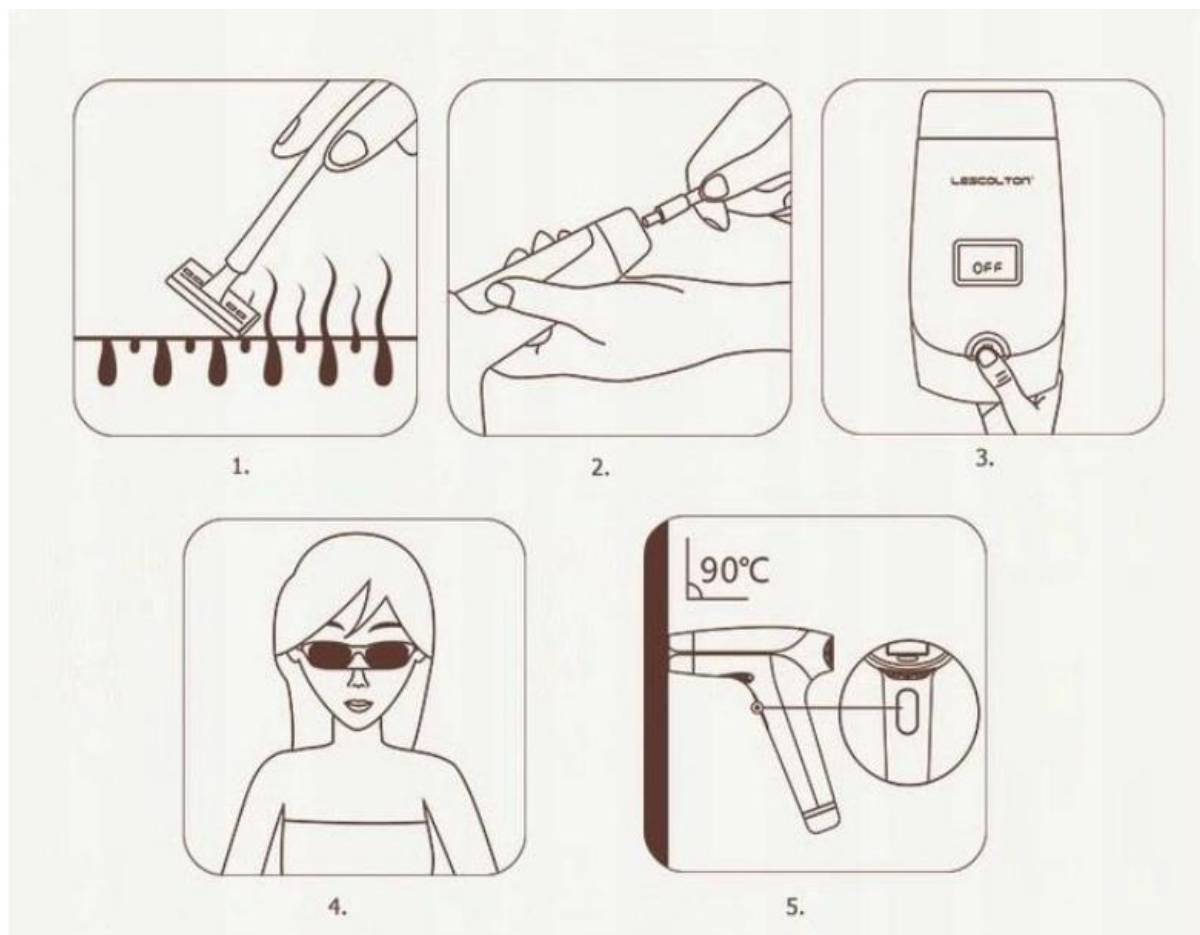

Instrukcja obsługi

1. Cztery tygodnie przed zabiegiem i pomiędzy zabiegami nie należy stosować żadnej formy depilacji, która wyrywa nam włosy razem z cebulką (wosk, pasty, depilatory)
2. Przygotuj skórę. Usuń owłosienie z obszarów ciała, które będą poddane zabiegowi poprzez golenie.
3. Tego typu depilacja nadaje się dla osób o jasnej lub średniej karnacji i ciemnym odcieniu owłosienia
4. Miejsce, które będzie poddane zabiegowi, nie może być opalone.
5. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
6. Wybierz poziom intensywności
7. Załóż okulary ochronne
8. Włącz funkcji automatycznego lub ręcznego uruchamiania światła. Robimy to przytrzymując przycisk wyzwalający błysk przez ponad 2 sekundy

9. Delikatnie przyłóż głowicę lasera do skóry pod kątem 90 stopni. Powoli przesuwaj urządzenie po obszarze, który chcesz wydepilować. Po każdym błysku przesuwaj głowicę dalej. Powtarzaj czynność do momentu, kiedy pokryjesz pożądaną obszar skóry.

10. Po 25 minutach używania urządzenia należy zrobić przerwę na 10 minut i je wyłączyć, aby wystudzić głowicę.

11. Podczas błysków możemy w zależności od włączonej mocy odczuwać chwilowe ciepło lub mieć wrażenie delikatnych ukłuć. Jest to naturalne i nie świadczy o niesprawności urządzenia

Częstotliwość zabiegów:

pierwszy miesiąc – zabiegi raz na 5 dni

drugi miesiąc – zabiegi raz na 7 dni

trzeci miesiąc – zabiegi raz na 14 dni

od czwartego miesiąca zabiegi należy wykonywać raz na 30 dni

Skład zestawu:

- Depilator Lescolton
- 2 x głowice
- Zasilacz + 3 końcówki zasilania - EU, UK, USA
- Okulary ochronne
- Oryginalne pudełko
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Specyfikacja techniczna:

- Model: T009i
- Wymiary: 18,2 x 7,8 x 15,1 cm
- Napięcie wejściowe AC 220 - 240V / 50-60 Hz
- Napięcie wyjściowe DC 24V 1,5A
- Moc: <36W
- Waga: 0,32 kg
- Obszar naświetlania: 4 cm²
- Temperatura pracy: 20 - 60°C
- Wilgotność: 20 - 90% bez skraplania pary wodnej
- Materiał: ABS

Depilatory laserowe zaliczają się do grupy produktów, których zgodnie z art. 38 pkt. Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, ze względu na ochronę zdrowia i higienę osobistą nie można zwrócić w ramach prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.