



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### **DERMA ROLLER ONE ROLL GOLD TITANUM**



**Oficjalny dystrybutor marki Beauty Limited® w Polsce: ArcoTech, [www.arcotech.pl](http://www.arcotech.pl) / [www.beautylimited.pl](http://www.beautylimited.pl).** Chroniony prawem autorskim przez Beauty Limited®. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. Wszelkie prawa włącznie z tłumaczeniem zastrzeżone. Reprodukacja jakąkolwiek metodą, np. fotokopiowanie, mikrofilmowanie lub stosowanie systemów elektronicznej obróbki danych wymagają uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Drukowanie, także w części, zabronione.

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI DERMA ROLLER ONE ROLL GOLD TITANUM**



Dziękujemy za zakup Derma roller OneRoll Gold Titanium Beauty Limited®. Nasze urządzenie zostało zaprojektowane oraz wykonane zgodnie ze wszystkimi istotnymi przepisami bezpieczeństwa. Zastrzeżenie prawa do zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia! Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

## **WAŻNA INFORMACJA**

Opisane i przedstawione w instrukcji zdjęcia, objaśnienia zabiegów, cel stosowania, efekty, a także zalecenia i przeciwwskazania mają charakter poglądowy. W celu indywidualnej oceny skóry (wskazań i przeciwwskazań), a także spodziewanych efektów wynikających ze stosowania urządzenia i wszelkich wątpliwości, co do użytkowania, prosimy skonsultować się ze specjalistą z dziedziny kosmetologii i/lub dermatologiem.

## **I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz objaśnienia dotyczące prawidłowego użytkowania urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

- Przed użytkowaniem sprawdzić czy urządzenie, a także głowica nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. Jeżeli zostaną zauważone jakiegokolwiek uszkodzenia zabronione jest rozpoczynanie pracy z urządzeniem.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. W przypadku wykorzystania go w celach komercyjnych, niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji, producent nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja staje się nieważna.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zawsze skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie utracisz gwarancję.

## OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, nie nadaje się do użytku komercyjnego (w gabinetach kosmetycznych, salonach SPA itp.).
- Urządzenie zaleca się stosować jeden komplet przez jedną osobę, z uwagi na zachowanie warunków higienicznych.
- Nie używaj urządzenia na zranioną skórę, w przypadku otwartych ran, ani w przypadku występowania wszelakich zmian chorobowych skóry.
- Nie wykonuj zabiegu na powiekach, ani oczach.
- Urządzenia nie należy myć pod bieżącą wodą. Wałek z igłami tytanowymi dezynfekujemy płynem do urządzeń kosmetycznych w sprayu (Więcej informacji w dziale: „Czyszczenie i konserwacja urządzenia”).
- **Nie zanurzać całego urządzenia** ani wałka w roztworze dezynfekcyjnym. Może to spowodować uszkodzenie elementów z tworzywa sztucznego.
- Nie przyciskaj wałka do skóry!
- Nie korzystaj z urządzenia w temperaturze poniżej 0°C i/lub powyżej 40°C oraz w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, chyba, że zostanie zapewniony nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Trzymać urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci. Należy zwrócić uwagę, żeby dzieci nie potraktowały urządzenia jako zabawkę.

## II WPROWADZENIE

Derma roller OneRoll Gold Titanium Beauty Limited® to urządzenie wyposażone w wałek z igłami tytanowymi, przeznaczonymi do stosowania na skórę twarzy i ciała. Igły przebijają warstwę rogową naskórka tworząc bardzo gęstą sieć mikrokanalików. Wywołany w ten sposób stan stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Dodatkowo zwiększa efektywność wchłaniania składników aktywnych zawartych w preparatach kosmetycznych takich jak ampułki, serum, kremy, koktajle witaminowe itp.

### PODSTAWOWE POJĘCIA:

**Mezoterapia mikroigłowa** - niechirurgiczna metoda rewitalizacji skóry przy jednoczesnej stymulacji jej naturalnych zdolności regeneracyjnych. Zabieg pozwala na dostarczenie skoncentrowanych składników odżywczych w głębsze warstwy skóry. Mikronakłucia wykonywane są przy użyciu sterylnych tytanowych igieł.

## DERMA ROLLER GOLD TITANUM:

**Wskazania:** cera z objawami starzenia, cera z przebarwieniami słonecznymi i potrądzikowymi, skóra zwiotczała, skóra delikatna, skóra cienka, rozstępy, płytkie blizny, cellulit, utrata jędrności w okolicach twarzy, szyi i dekoltu, łysienie.

**Przeciwwskazania:** ciąża i okres karmienia piersią, podatność na alergie skórne, cukrzyca, miejscowe stany zapalne (infekcje wirusowe i bakteryjne, w tym opryszczka w stanie aktywnym), skóra źle toleruje iniekcje, choroby ogólnoustrojowe, choroby metaboliczne, choroby nowotworowe, przyjmowanie preparatów przeciwzakrzepowych i aspiryny, choroby krwi, anemia, małopłytkowość, skłonność do bliznowacenia, skóra opalona, trądzik różowaty, rozszerzone naczynia krwionośne.

**Efekty:** cera nawilżona i odżywiona, przy zastosowaniu kwasu hialuronowego można uzyskać efekt liftingu, poprawa elastyczności i jędrności skóry, zabieg modeluje kontur twarzy, wspomaga redukcję zmarszczek mimicznych i statycznych, stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny, ograniczenie wydzielania sebum, skóra rozświetlona, wspomaga redukcję cellulitu, lepsza absorpcja skóry, stymulowanie procesów samonaprawczych skóry, działanie wspomagające w zabiegach przeciwko wypadaniu włosów.

**Zalecana częstotliwość zabiegu:** częstotliwość oraz liczbę zabiegów ustala się indywidualnie do własnych potrzeb\*

Raz z tygodniu przez 3-4 tygodnie. Kurację można powtarzać co pół roku. Czas trwania jednego zabiegu wynosi od 5 do 20 minut, w zależności od prędkości rolowania oraz wielkości obszaru skóry\*.

*\*Częstotliwość, a także czas trwania zabiegu ustala się indywidualnie w oparciu o własne potrzeby lub po konsultacji ze specjalistą z dziedziny kosmetologii lub lekarzem dermatologiem.*

**Odczucie:** delikatne klucie w miejscu wykonywania zabiegu. Wywołany stan zapalny w miejscu wykonywania zabiegu powoduje intensywne, ale bezbolesne zaczerwienienie. Jest to zjawisko naturalne, które ustępuje całkowicie w okresie od 1 do 3 dni po wykonanym zabiegu.

### III OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA

1. Osłona
2. Wałek obrotowy z mikroigłami
3. Uchwyt



### PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO ZABIEGU

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów urządzeniem, zepnij włosy, tak aby nie opadały na okolice twarzy i/lub ciała na których ma być wykonywany zabieg. Wykonaj demakijaż twarzy. Skóra do zabiegu powinna być sucha.



### PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO ZABIEGU

Zdezynfekuj igły tytanowe znajdujące się na wałku (2). Dezynfekcję wykonaj płynem do dezynfekcji urządzeń kosmetycznych w sprayu. Spryskaj igły płynem. Tak przygotowane urządzenie jest gotowe do zabiegu.

## IV SPOSÓB WYKONYWANIA ZABIEGU

Cel - kontrolowane uszkodzenie skóry poprzez jej mechaniczne nakłuwanie, co prowadzi do stymulacji skóry właściwej i powstawania w niej nowych włókien kolagenowych i elastyny. Skóra staje się zregenerowana, odbudowana i odmłodzona.

1. Przygotuj skórę i urządzenie do zabiegu (Więcej informacji w dziale: „Przygotowanie skóry do zabiegu” i „Przygotowanie urządzenia do zabiegu”).
2. Przyłóż wałek (2) z mikroigłami tytanowymi do skóry i rozpocznij rolowanie.
3. Roluj skórę w kierunku poziomym, pionowym i ukośnym. Każdy ruch powinien zostać powtórzony kilkakrotnie podczas zabiegu.
4. Nie przyciskaj wałka do skóry! Omijaj powieki górne. Po zakończeniu rolowania obszaru zabiegowego można nałożyć preparat kosmetyczny w formie serum, koktajlu witaminowego, kremu itp. Nie aplikuj tłustych kremów na skórę po zabiegu!
5. Po zabiegu zdezynfekuj głowicę urządzenia płynem do dezynfekcji urządzeń kosmetycznych w spray.
6. Po zakończeniu zabiegu mikronakłuwania można nałożyć na skórę np. maskę w płachcie lub maskę alginatową, a następnie można nałożyć preparat kosmetyczny w formie serum, koktajlu witaminowego, kremu itp. Nie aplikuj tłustych kremów na skórę po zabiegu!
7. Skóra po zabiegu jest zaczerwieniona i opuchnięta. Jest to zamierzony i naturalny stan zapalny, który ustępuje po kilku dniach.
8. Skóra po zabiegu jest wrażliwa. Zabezpiecz skórę przed wiatrem, bezpośrednim słońcem, niską i zbyt wysoką temperaturą, a także unikaj korzystania z basenów (3 dni), sauny i solarium (28 dni). Nie aplikuj bezpośrednio na skórę po zabiegu fluidów, pudru i innych preparatów do makijażu. Pozwól zregenerować się skórze w naturalnych warunkach.

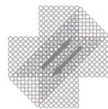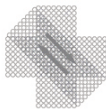

## **V CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA**

- Uchwyt urządzenia można czyścić suchą delikatną i miękką ściereczką.
- Igły tytanowe znajdujące się na wałku urządzenia dezynfekuj płynem do dezynfekcji urządzeń kosmetycznych w sprayu, w taki sposób aby spryskać igły i pozostawić wałek z igłami tytanowymi do wyschnięcia.
- Do czyszczenia urządzenia i wałka nie używaj rozpuszczalników, benzyny, kwasów ani alkaliów itp., a także silnych detergentów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i wałków.
- Nie zanurzaj urządzenia i wałka w wodzie, ani nie myj urządzenia i wałka pod bieżącą wodą.

## **VI PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA**

Urządzenie należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, chronić przed dostępem kurzu, brudu i wilgoci. Zaleca się przechowywanie urządzenia w fabrycznym opakowaniu.

**ZASTRZEŻENIA:** Ze względu na złożoną strukturę ciała i fizyczne różnice, powyższe efekty stosowania mogą być różne w zależności od osoby.

## **VII DANE TECHNICZNE**

Model: OneRollGold Titanium

Kod produktu: BL-102

Igły: złote tytanowe, 0,50 mm

Materiał - wysokiej jakości tworzywo sztuczne, igły złote tytanowe

Wymiary urządzenia [wysokość x średnica]: 6,5 cm x 6 cm

Wymiary wałka [szerokość x średnica]: 3,8 cm x 1 cm

Waga kompletu: 88 g

## **VIII ZESTAW ZAWIERA**

1 x Urządzenie Derma Roller Gold Titanium

1 x Instrukcja obsługi w języku polskim

# UTYLIZACJA



## Ogólne

W celu zachowania, ochrony i poprawiania jakości środowiska, ochrony ludzkiego zdrowia, racjonalnego i ostrożnego zużycia surowców naturalnych użytkownik powinien zwrócić produkt, który nie jest przeznaczony do naprawy do odpowiedniego punktu zgodnie z ustawowymi przepisami. Ten znak informuje, że produkt musi być utylizowany oddzielnie, nie jak odpady komunalne.



---

Wszelkie prawa włącznie z tłumaczeniem zastrzeżone przez Arcotech. Reprodukacja jakąkolwiek metodą np. fotokopiowanie, mikrofilmowanie, lub stosowanie systemów elektronicznej obróbki danych wymagają uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Drukowanie, także w części, zabronione.

Kopiowanie opisów i zdjęć zabronione. Są one własnością firmy Arcotech, ich kopiowanie całości lub jakiegokolwiek części oznacza naruszenie



## REKLAMACJA I GWARANCJA

1. W celu uzyskania informacji na temat gwarancji/reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny do siedziby naszej firmy lub e-mailowy. Nasi konsultanci pomogą namierzyć problem i rozwiązać problem, a także udzielać wskazówek odnośnie procesu reklamacyjnego.
2. Szkody i wady zauważone już w chwili zakupu należy zgłosić od razu po rozpakowaniu, nie później niż po upływie dwóch dni od otrzymania zakupionego towaru.
3. Paragon lub fakturę należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku utracenia paragonu/faktury należy skontaktować się z naszym konsultantem telefonicznie lub e-mailowo.
4. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i fabryczne zauważone zaraz po otrzymaniu zakupionego towaru, nie później niż do 2 dni roboczych.
5. Gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu.
6. Produkt przeznaczony jest tylko i wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań profesjonalnych.
7. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia oraz używania niezgodnego z przeznaczeniem.
8. Okres gwarancyjny nie ulega wydłużeniu o czas trwania usługi gwarancyjnej. Dotyczy to również wymienionych części.
9. Serwis zastrzega wyminę wadliwych elementów tylko i wyłącznie urządzeń sygnowanych oryginalną marką Beauty Limited®. Z gwarancji nie mogą skorzystać (nawet odpłatnie) osoby posiadające podobne urządzenia innych marek. Pełne wsparcie posprzedażowe mają tylko i wyłącznie nasi Klienci.

Autoryzowany sklep marki Beauty Limited®:

ARCOTECH

ul. Budowlanych 46B

45-123 Opole

Kontakt e-mail: [info@beautylimited.pl](mailto:info@beautylimited.pl)

Kontakt tel.: 794131550

Sklep internetowy: [www.beautylimited.pl](http://www.beautylimited.pl)



[www.facebook.com/beautylimitedpl/](https://www.facebook.com/beautylimitedpl/)

BEAUTY LIMITED®



Producent/Dystrybutor: ARCOTECH  
Ul. Budowlanych 46B  
45-123 Opole  
Polska  
Designed in: EU