



EW-DL83

Bardzo drobne włosie do higieny kieszonek dziąsłowych.


Funkcje

Trzy efekty używania wibracyjnej szczoteczki sonicznej do zębów z silnikiem liniowym

Firma Panasonic przeprowadziła badania i opracowała tę szczoteczkę do zębów pod kątem higieny kieszonek dziąsłowych. Bardzo drobne włosie o średnicy ok. 0,02 mm sięga głęboko w kieszonki dziąsłowe i porusza się wzdłuż dziąsła. Silnik liniowy generuje przy tym delikatne, szybkie wibracje. Dzięki tym oryginalnym technologiom wywołujące choroby przyzębia bakterie schowane w kieszonkach



dziąsłowych są dokładnie usuwane bez nadmiernego nacisku na dziąsła.

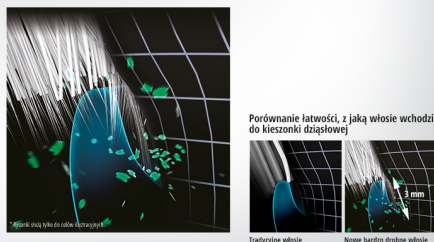


Bardzo drobne włosie

Aby usunąć szczoteczką powodujące choroby przyzębia bakterie ukryte w kieszonkach dziąsłowych, końcówki włosia muszą wejść do wąskich kieszonek. Opracowana przez firmę Panasonic szczoteczka z bardzo drobnym włosiem ma włosie z końcówkami o średnicy ok. 0,02 mm i została zaprojektowana, by zagłębiać się w kieszonki dziąsłowych na zaledwie 3 mm.

Ruch wzdłuż linii dziąseł



Aby usunąć szczoteczką powodujące choroby przyzębia bakterie ukryte w kieszonkach dziąsłowych, końcówki włosia muszą poruszać się wzdłuż linii dziąseł. Opracowana przez firmę Panasonic technologia ruchu wzdłuż linii dziąseł umożliwia włosiu łatwe docieranie do kieszonek dziąsłowych i skuteczne usuwanie kamienia nazębnego.

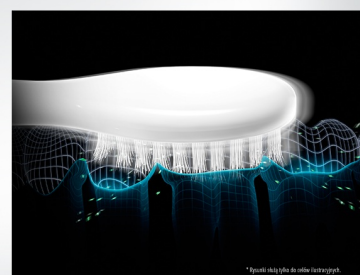

Wielka precyzja: 1 mm wibracje soniczne


Krótkie i szybkie wibracje dokładnie usuwają kamień nazębny z kieszonek dziąsłowych, minimalizując przy tym nacisk na zęby i dziąsła. Silnik liniowy Dzięki opracowanej przez firmę Panasonic technologii silnika liniowego szczoteczka wibruje z amplitudą około 1 mm i szybkością obrotową ok. 31 000 ruchów/min, by zapewnić równy i szybki ruch.

Porównanie z konwencjonalną elektryczną szczoteczką do zębów

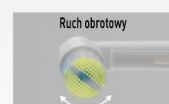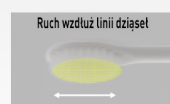

Zastosowanie silnika liniowego umożliwia czyszczenie linii dziąseł ruchami 5 razy węższymi i 4,9 raza szybszymi niż w przypadku innych elektrycznych szczoteczek do zębów. Efektem takiego połączenia jest znacznie skuteczniejsze czyszczenie.

Amplituda szczoteczki	Ok. 1 mm	Delikatnie <	Ok. 5 mm
Szybkość ruchów szczoteczki	Ok. 31000 ruchów/min	Szybko >	Ok. 7200 ruchów/min

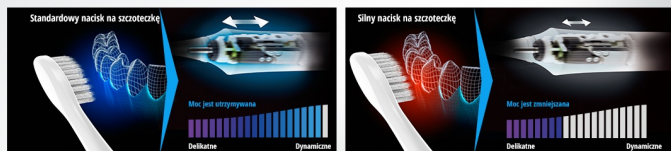


Kontrola mocy ogranicza nacisk na dziąsła

Amplituda zmienia się w zależności od nacisku na szczoteczkę

Dołączone szczoteczki do określonych zastosowań

Dołączone są trzy szczoteczki do różnych celów. Ich prawidłowe użycie zwiększa skuteczność czyszczenia.

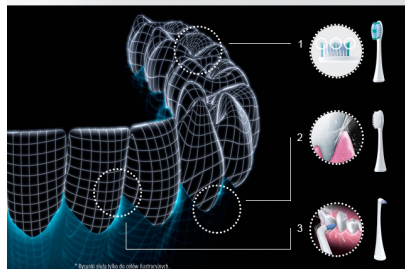

Specyfikacja



- 1hr.**
Full Charge
Pełne naładowanie w ciągu 1 godziny
- 60min.**
Use
60 minut czasu pracy
- 100-240V**
100–240 V
- Li-Ion**
Akumulator litowo-jonowy
- Washable**
Nadaje się do mycia

Bardzo drobne włosie o średnicy ok. 0,02 mm zaprojektowane, by docierać na głębokość 3 mm

Wielka precyzja: 1 mm wibracje soniczne

EW-DL83 Szczoteczka soniczna

