

Key version



ON/OFF

Naciśnij ten przycisk raz po podłączeniu produktu do zasilacza, aby włączyć funkcję masażu; Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję masażu. Produkt jest wyłączony. Po każdym naciśnięciu przycisku, produkt przełącza się na zmianę między włączeniem i wyłączeniem.



Przycisk włączania/wyłączania:

Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić funkcje masażu, ciśnienia powietrza i ogrzewania.



Przycisk ogrzewania:

W stanie włączonym: naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć funkcję ogrzewania, a następnie włącz funkcję ogrzewania (kontrolka włącza funkcję ogrzewania, a kontrolka wyłącza funkcję ogrzewania).



Przycisk trybu:

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb: P1, P2, P3, P4 i P5. Lampa Nixie wyświetla odpowiedni tryb.



Przycisk siły:

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać odpowiedni poziom siły masażu H1-H5 wyświetlany przez lampę Nixie LCD w zakresie H1-H5.




Przycisk na stopy:

Naciśnij ten przycisk, aby masować poduszkę powietrzną.



Przycisk ustawiania czasu:

Po włączeniu funkcji masażu domyślny czas uruchomienia wynosi 15 minut. Naciśnij ten przycisk, aby dostosować czas rozruchu o 5 minut za każdym razem. Lampa Nixietubed wyświetla odpowiedni czas rozruchu przez maksymalnie 30 minut. Kontynuuj naciskanie tego przycisku, aby dostosować czas rozruchu do minimum 5 minut i cyklicznie powtarzać.

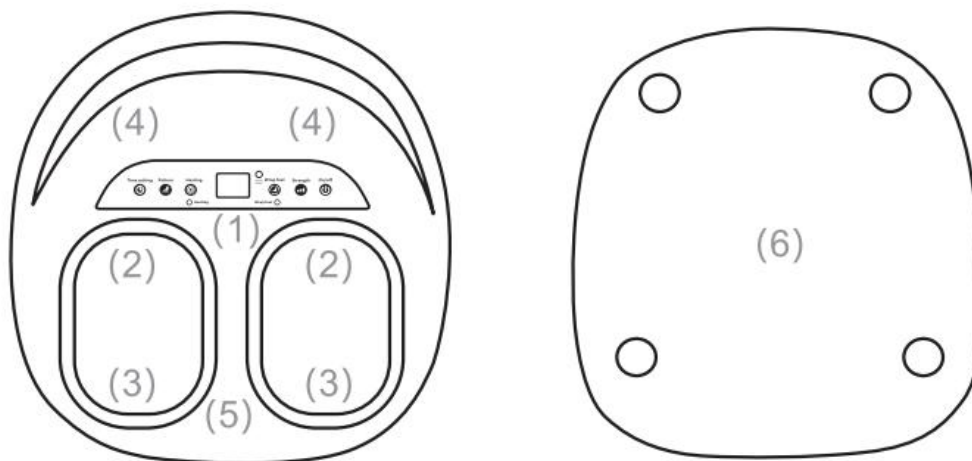

- (1) Centralny przód: 6 niezależnych przycisków sterujących – sterowanie funkcją masażu produktu
- (2) Środek na dole z przodu: głowica masująca zgarniająca – wykonuje masaż punktów akupunkturowych w niesklepionej części stopy, którą można podgrzać
- (3) Przód, dół i tył: ugniataj górną głowicę masującą, masując obszar pięty, realizując punkt akupunkturowy
- (4) Wewnątrz powierzchni: poduszka powietrzna – blisko podbicia, zapewniająca masaż pneumatyczny
- (5) Powierzchnia dolna przednia: zdejmowana osłona materiałowa do czyszczenia
- (6) Dolna powłoka produktu dolnego

Nienormalny stan :Niedziałanie

Możliwe przyczyny: 1. Brak zasilania 2. Klawisz funkcyjny nie jest włączony

Metoda przetwarzania :

1. Podłącz zasilanie lub sprawdź, czy zasilanie jest dobrze podłączone
2. Przycisk włączania/wyłączania

Nienormalny stan:Nagłe zatrzymanie działania

Możliwe przyczyny:

1. Wyłącz
2. Masaż trwający dłużej niż 30 minut
3. Zbyt długi czas ciągłego użytkowania i produkt jest zabezpieczony przed przegrzaniem
4. Piłka masująca jest zablokowana z powodu zbyt dużej siły

Metoda przetwarzania :

1. Sprawdź, czy interfejs zasilania jest prawidłowo podłączony
2. Ponownie włącz/wyłącz przycisk
3. Po ostygnięciu produktu ponownie naciśnij przycisk włączania/wyłączania
4. Ponownie włącz/wyłącz przycisk

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

a) Opis ważnych kwestii bezpieczeństwa

Aby mieć pewność, że produkt będzie używany bezpiecznie i prawidłowo, przed użyciem należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi.

Proszę używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.

Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu należy odłączyć wtyczkę zasilającą z gniazdka.

Aby uniknąć poważnych oparzeń, należy zachować ostrożność podczas korzystania z funkcji podgrzewania.

Nie stosować na skórze matowej i wrażliwej lub w miejscach ze słabym krążeniem krwi.

Nie pozwalaj dzieciom ani osobom z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową na samodzielne korzystanie z funkcji ogrzewania. Nieprawidłowe użycie może być niebezpieczne.

Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń spowodowanych przegrzaniem, nie należy używać produktu pod poduszką lub kocem.

Nie przykrywaj silnika, aby uniknąć awarii lub uszkodzenia na skutek nadmiernej temperatury silnika.

Jeśli produkt jest używany w pobliżu dzieci, osoby z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną oraz niepełnosprawne potrzebują wskazówek od innych osób i mogą ponosić odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

Jeżeli w trakcie masażu poczujesz się źle, natychmiast przerwij masaż.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, jego wymiany powinni dokonać specjaliści producenta, jego dział konserwacji lub podobne działy.

Nie należy stosować części niezalecanych przez producenta.

Jeżeli chcesz odciąć dopływ prądu, wyłącz wszystkie urządzenia sterujące i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

Produktu nie można używać do samodiagnozy ani leczenia. W razie konieczności postawienia diagnozy lub leczenia, powinien być on obsługiwany przez wykwalifikowany personel medyczny.

Prosimy o zaprzestanie używania w przypadku wystąpienia dyskomfortu (takiego jak zawroty głowy, ból głowy itp.). Grzejnik posiada powierzchnię grzewczą. Osoby niewrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.

b) Korzystaj ze środowiska

Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy używać go w wilgotnym lub zakurzonej otoczeniu.

Nie należy używać produktu w pomieszczeniu, w którym temperatura przekracza 40° C.

Nie umieszczać produktu na zewnątrz.

Nie należy umieszczać produktu obok grzejnika elektrycznego, w pobliżu pieca lub w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

c) Osoby, dla których ten produkt nie jest odpowiedni

Jeśli występuje u Ciebie któraś z poniższych sytuacji, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

Bycie leczonym przez lekarza lub złe samopoczucie.

Pacjenci z nadciśnieniem, chorobami serca, miażdżycą naczyń mózgowych i badaniami krwi mózgowej.

Pacjenci z nowotworami złośliwymi.

Kobiety w ciąży i kobiety w okresie menstruacyjnym.

Cierpię na osteoporozę.

Osoby korzystające z rozrusznika serca lub mające wszczepione urządzenia medyczne.

Pacjenci z ostrymi chorobami.

Nieletni.

d) Zmień środki ostrożności

Nie należy obsługiwać przełącznika sterującego mokrymi rękami.

Nie dopuść do kontaktu przełącznika sterującego z wodą lub innymi płynami.

Konserwacja produktu

(a) Przechowywanie

Gdy nie używasz produktu, włóż go do pudełka z farbą i przechowuj w bezpiecznym, suchym i wentylowanym miejscu, w cieniu.

Nie skręcaj wtyczki i przewodu.

Do wieszania produktu nie należy używać zasilacza impulsowego ani przewodu.

Unikaj zarysowania powierzchni produktu ostrymi przedmiotami.

Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani wysokiej temperatury.

(b) Czysty

Przed czyszczeniem należy upewnić się, że główny wyłącznik zasilania jest wyłączony i odłączyć wtyczkę zasilającą.

Powierzchnię produktu należy czyścić suchą szmatką.

Bądź ostrożny

Do czyszczenia produktu nie należy używać żrących środków czyszczących, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.

(c) Konserwacja

Przechowuj produkt w czystości, z dala od miejsc o dużej wilgotności.

Jeżeli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, przykryj go pokrowcem przeciwkurzowym (należy go kupić samodzielnie), aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.