


IRYGATOR JAMY USTNEJ HM-Y828

Instrukcja obsługi

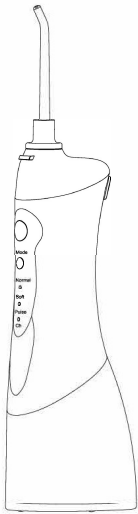

AKUMULATOROWY IRYGATOR DO HIGIENY JAMY USTNEJ
Model HM Y828

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie informacje zawarte poniżej mają pomóc w prawidłowym użytkowaniu urządzenia tak, aby nie spowodować urazu ciała ani uszkodzeń sprzętu.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ ZAGROZENIA


- ▲ Małe dzieci, niemowlęta, osoby niepełnosprawne nie mogą używać urządzenia. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▲ Nie modyfikuj urządzenia. Nie demontuj ani nie naprawiaj go.
- ▲ Nie odkładaj urządzenia w miejscu, z którego może spaść lub wpadć do umywalki.
- ▲ Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadło do wody i jest podłączone do ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od zasilania.
- ▲ Nie używaj podczas kąpieli.

OSTRZEŻENIA

- ▲ Irygatory do higieny jamy ustnej mogą być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia.
- ▲ Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub braku wiedzy i doświadczenia mogą używać irygatorów wyłącznie pod nadzorem emdorosłych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
- ▲ Urządzenie nie jest zabawką.
- ▲ Urządzenie może być ładowane wyłącznie ładowarką dostarczoną w zestawie.
- ▲ Urządzenie zawiera wbudowany akumulator i należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ▲ Nie napełniaj pojemnika wodą cieplejszą niż 40°C.
- ▲ Nie używaj ładowarki, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę.
- ▲ Nie trzymaj kabla na podgrzewanych lub gorących powierzchniach.
- ▲ Nie używaj irygatora, jeśli zgubiłeś dyszę.
- ▲ Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- ▲ Nie używaj w innych celach niż czyszczenie jamy ustnej.
- ▲ Przechowuj końcówkę w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jest


- ona na tyle mała, że może utknąć w gardle podczas polknięcia.
- ▲ Niektóre płyny do płukania ust mogą uszkodzić obudowę lub pojemnik na wodę; dlatego zachowaj ostrożność podczas stosowania płynów do płukania z irygatorem i unikaj tych o właściwościach żrących i silnie barwiących.
- ▲ Osoby z bólem zęba lub dziąsła mogą nie być w stanie używać irygatora. W takim przypadku należy skontaktować się z dentystą.
- ▲ Nie dociskaj dyszy zbyt mocno do zębów, ani do dziąsła, może to uszkodzić dziąsła.

OPIS URZĄDZENIA

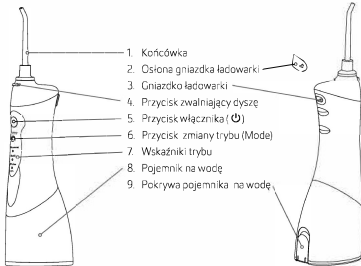

- ▲ Uwaga: W części głównej urządzenia mogą pozostać resztki wody destylowanej (pojemnik, rurka ssąca, itd.) użytej do przeprowadzenia testu wydajności (przepływ wody); nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

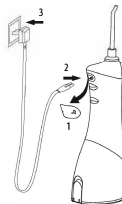

1. Zdejmij osłonę gniazdka ładowarki i sprawdź, czy wewnątrz nie ma resztek wody.
 2. Podłącz wtyczkę ładowarki do urządzenia.
 3. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
- ▲ Podczas ładowania wskaźnik „CH” miga. Po pełnym naładowaniu urządzenia wskaźnik będzie się świecił ciągle.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od sieci elektrycznej, wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazda w urządzeniu i załóż osłonę na gniazdko ładowarki.
- ▲ Uwaga! Jeśli wskaźnik „CH” świeci się podczas lub po irygacji, oznacza to, że należy naładować baterię. Ładowanie baterii do pełna może potrwać nawet 8 godzin.

UŻYCIIE IRYGATORA


- ▲ Przy pierwszym uruchomieniu może się zdarzyć, że urządzenie będzie zapowietrzone – w takim przypadku należy lekko zassać ustami wodę przez końcówkę, a urządzenie zacznie normalną pracę.



1. Naciśnij dyszę na urządzenie.


IRYGATOR JAMY USTNEJ HM-Y828

2. Otwórz pokrywę pojemnika na wodę, napełnij pojemnik wodą o temperaturze maksymalnej 40°C, zamknij pokrywę. Można też zdjąć pojemnik na wodę, napełnić wodą, a następnie przyłączyć pojemnik z powrotem do urządzenia.
3. Naciśnij przycisk zmiany trybu (Mode), aby wybrać żądany tryb. Podczas irygacji możesz zmienić tryb pracy.
Tryb normalny: czyszczenie zwykle
Tryb delikatny: delikatne czyszczenie wrażliwych dziąsła
Tryb pulsacyjny: czyszczenie i masowanie dziąsła

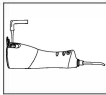

- ▲ Trzymaj urządzenie pionowo tak, aby końcówka dyszy była skierowana na zęby.
- ▲ Trzymaj usta lekko otwarte, aby woda mogła wypływać.

4. Naciśnij przycisk włącznika (On), aby rozpocząć irygację.
5. Skieruj strumień wody wzdłuż linii dziąsła tak, aby końcówka dyszy była pod kątem 90° do dziąsła.
6. Przesuń powoli strumień wody wzdłuż zębów.
7. Czyść dokładnie przestrzenie międzyzębowe, miejsca wokół koron, mostów i aparatów ortodontycznych.

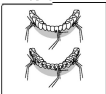

- ▲ W razie potrzeby zmiany końcówki na inną należy najpierw nacisnąć przycisk włącznika (On) by wyłączyć urządzenie. Następnie wcisnąć przycisk zwolnienia dyszy, wymienić dyszę i ponownie włączyć urządzenie.
- 8. Po zakończeniu irygacji naciśnij przycisk włącznika (Off), aby wyłączyć urządzenie.

PO UŻYCIU URZĄDZENIA

1. Otwórz pojemnik na wodę i wylej wodę, która została.
2. Naciśnij przycisk włącznika (On), aby włączyć urządzenie na maksymalnie 15 sekund i osusz w ten sposób wewnętrzne urządzenie.
3. Naciśnij przycisk włącznika (On), aby wyłączyć urządzenie

- i zamknij pokrywę pojemnika na wodę.
- 4. Wyczyść urządzenie suchą ściereczką.

- ▲ Uwaga! Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się bakterii i upewnić się, że w pojemniku nie pozostała woda. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyczyść i wysusz urządzenie przed schowaniem.

KONSERWACJA

- ▲ Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie wody lub neutralnego środka czyszczącego. Nigdy nie używaj żrących lub ściernych środków (np. octu lub środków do usuwania kamienia); mogą one uszkodzić urządzenie. Nie myj w wodzie o temperaturze powyżej 50°C. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie przechowuj w miejscach o wysokiej temperaturze.

URZĄDZENIE GŁÓWNE

- Wyczyść za pomocą ściereczki z mydłem w płynie i wyczyść suchą ściereczką.
- ▲ Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Wyszus po umyciu.

POKRYWKA POJEMNIKA NA WODĘ

- Wyczyść zabrudzenia za pomocą ściereczki.

KOŃCÓWKĄ

- Umyj wodą i wyczyj miękką ściereczką.
- ▲ Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy.

RURKA SSĄCA

- Umyj wodą i wyczyj miękką ściereczką.
- ▲ Nie wyginaj, nie ciągnij ani nie skracaj rurki.

POJEMNIK

- Umyj wodą i wyczyj miękką ściereczką.
- Wyszus pojemnik, gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie działa	Dopiero kupiłeś produkt lub nie był używany ponad 3 miesiące	Naładuj urządzenie przez co najmniej 8 godzin
Działa tylko kilka minut, nawet po naładowaniu	Kończy się żywotność baterii	Skontaktuj się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego
	Czas ładowania był za krótki	Naładuj urządzenie przez co najmniej 8 godzin
Cięśnienie wody jest bardzo niskie	Końcówka jest zanieczyszczona	Wymień końcówkę
	Końcówka jest zniekształcona	
	Filtr jest zanieczyszczony	Wyczyść filtr
Woda nie występuje się na zewnątrz	Pojemnik jest pusty	Napełnij pojemnik
	Urządzenie jest za bardzo przechylone podczas użytkowania	Trzymaj urządzenie pionowo
	Urządzenie jest zapowietrzzone	Napełnij pojemnik wodą, włoś końcówkę do ust, wciągnij urządzenie, a następnie lekko zassij wodę do ust.

UTYLIZACJA I OBJAŚNIENIA SYMBOLI

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ

UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

- Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych.
- W związku z tym Jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i Jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

Produkt posiada certyfikat CE



DYSTRYBUTOR / IMPORTER

FAMMET Piotr Wiecha

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork, Polska