

SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

Model TB9314

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór szczoteczki sonicznej SMILS by VITAMMY (TB8132-CE).

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasady dbania o zakupiony produkt oraz przewodnik, jak poprawnie korzystać z urządzenia.


⚠ Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa wraz z poniższymi:

- ⚠ Przeczytaj wszystkie instrukcje dostarczone przez producenta.
- ⚠ Upewnij się, że napięcie sieci elektrycznej jest zgodne z podanym na urządzeniu.
- ⚠ By uniknąć pożaru, porażenia prądem czy innych obrażeń, nie używaj ładowarki w łazience, nie zanurzaj przewodu, wtyczki czy ładowarki w wodzie, ani innych płynach. Nie płucz ładowarki wodą.
- ⚠ Nie używaj ładowarki, jeśli jej przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona.
- ⚠ Odłączając ładowarkę od sieci elektrycznej, chwyć za wtyczkę, nie za przewód. Nie dotykaj wtyczki mokrą dłońią.
- ⚠ W przypadku, gdy ładowarka pod napięciem wpadnie do wody, najpierw odetnij zasilanie i dopiero wtedy wyjmij ładowarkę z wody.
- ⚠ Nie zanurzaj szczoteczki w gorącej wodzie.
- ⚠ To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach psycho-motorycznych jedynie po dokładnym instruktażu dotyczącym bezpiecznego posługiwania się tym urządzeniem i po zrozumieniu związanych z jego użytkowaniem ryzyk. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- ⚠ To urządzenie może być używane przez dzieci i osoby niepełnosprawne lub w pobliżu dzieci i osób niepełnosprawnych wyłącznie pod nadzorem.
- ⚠ Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być powierzane dzieciom bez nadzoru osób dorosłych.
- ⚠ Nie przyciskaj szczoteczki do zębów i/lub dziąseł z dużą siłą. Nie myj jednego miejsca przez dłuższy czas, by uniknąć uszkodzenia powierzchni zębów i/lub dziąseł.
- ⚠ Przed każdym użyciem szczoteczki sprawdź, czy nie jest uszkodzona.
- ⚠ Skonsultuj ze swoim stomatologiem, czy możesz bezpiecznie korzystać ze szczoteczki sonicznej, jeśli jesteś po przebytej operacji lub zabiegu dentystycznym.
- ⚠ Na początku używania szczoteczki może pojawiać się krwawienie z dziąseł. Jeśli nie ustąpi po tygodniu stosowania szczoteczki, skonsultuj to z lekarzem.
- ⚠ Jeśli masz rozrusznik serca lub inne elektroniczne implanty, skonsultuj się z lekarzem przed pierwszym użyciem szczoteczki.
- ⚠ Szczoteczka jest przeznaczona do użytku indywidualnego – nie używaj jej razem z innymi ludźmi.
- ⚠ Zaleca się wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.
- ⚠ Urządzenie można ładować jedynie zasilaczem o specyfikacji DC 5 V/ ≥1 A.
- ⚠ Akumulator szczoteczki zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego, dlatego należy zutylizować szczoteczkę zgodnie z przepisami. Nie wyrzucaj szczoteczki ani ładowarki do śmieci.

OPIS URZĄDZENIA

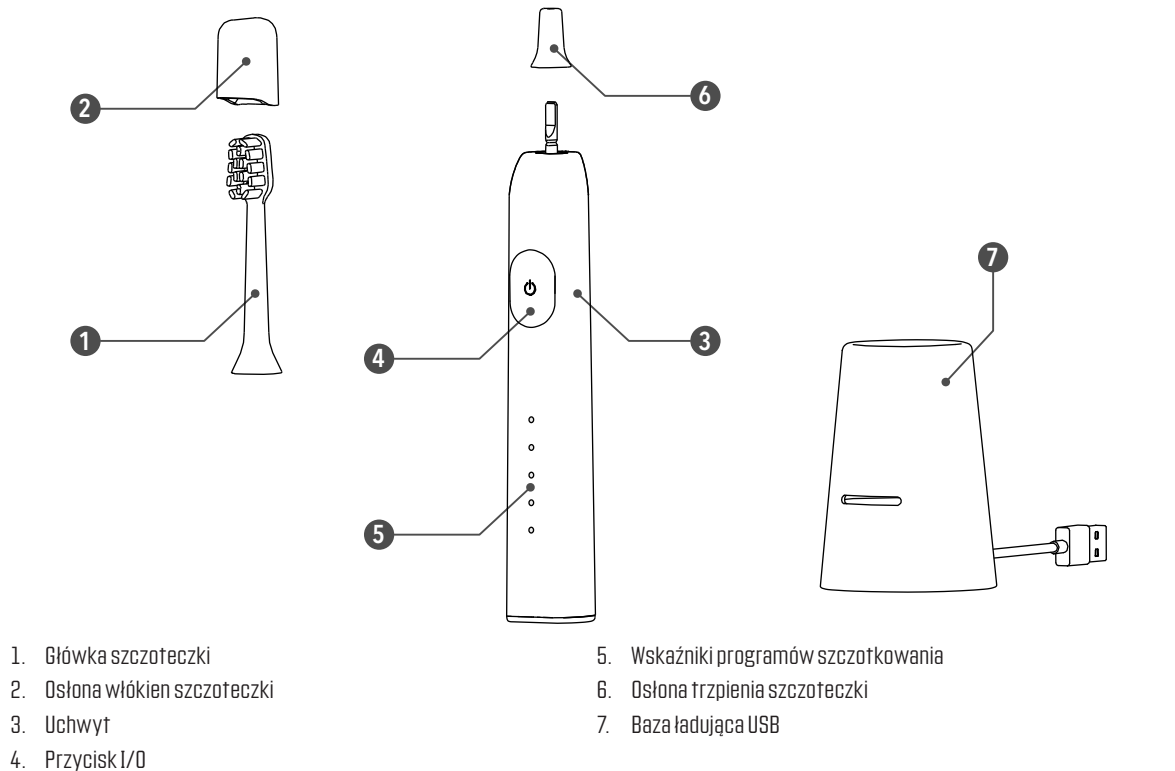


PRZED UŻYCIEM

NAŁADUJ SZCZOTECZKĘ

- ⚠ UWAGA! Przed ładowaniem należy wyłączyć szczoteczkę.
 - ⚠ Upewnij się, że zasilacz spełnia wymagania: DC 5 V, ≥1 A.
- Podłącz przewód bazy ładującej do zasilacza. Możesz wykorzystać zasilacz swojego telefonu, o ile spełnia powyższą specyfikację. Zasilacz podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
 - Wstaw szczoteczkę do bazy ładującej. W trakcie ładowania wskaźnik szczoteczki zacznie pulsować. Gdy szczoteczka będzie w pełni naładowana, wskaźnik zacznie świecić ciągle.

ZAINSTALUJ GŁÓWKĘ SZCZOTECZKI

- Zdemontuj osłonę trzpienia szczoteczki i załóż główkę szczoteczki zgodnie z rysunkiem obok.

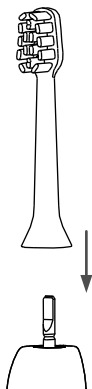

OBŚŁUGA URZĄDZENIA

- Nałóż pastę do zębów na **wyłączoną** szczoteczkę.
 - Włóż szczoteczkę do ust i przyłóż włókna szczoteczki do powierzchni zębów.
 - Włącz szczoteczkę przyciskiem I/O i zacznij myć zęby.
- ⚠ UWAGA! Nie przyciskaj przycisków paznokciem, bo możesz w ten sposób uszkodzić powierzchnię przycisków.
- Szczoteczka będzie działała przez czas zgodny z wybranym programem szczotkowania.
 - Jeśli w trakcie szczotkowania zbyt mocno przycisniesz włókna do powierzchni zębów lub dziąseł, szczoteczka zaświeci ostrzegawczo czerwoną diodę LED wokół swojej podstawy.
 - Po ostatnim cyklu wybranego programu szczoteczka wyłączy się automatycznie.
 - Po szczotkowaniu opłucz główkę szczoteczki pod bieżącą wodą. Strzepnij nadmiar wody z główki szczoteczki i osusz uchwyt ręcznikiem.
- ⚠ Urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego.

ZMIANA PROGRAMÓW SZCZOTKOWANIA

Szczoteczka SMILS by VITAMMY oferuje 5 unikatowych programów szczotkowania:

- **DIEN DOBRY:** 2 minuty na przebudzenie. Więcej i więcej wibracji. Program składa się z 4 cykli po 30 sekund. Szczoteczka wykonuje 64000 ruchów na minutę.
- **DOBRANOĆ:** Dłuższy, kojący program z mniejszą liczbą wibracji. 6×30 sek. 62000 ruchów/min.
- **KOPCIUSZEK:** 1 minuta odświeżania, gdy musisz biec. Sprytnie! 4×15 sek. 62000 ruchów/min.

- **APARAT:** Łatwe soniczne mycie aparatów ortodontycznych i szyn retencyjnych. 1 min. 82000 ruchów/min. bez przerw.
- **WYBIELAJĄCY:** 2 minuty bezpiecznego wybielania zakończone masażem. 2×30 sek. 82000 ruchów/min. + 1 minuta masaż pulsacyjny 62000 ruchów/min.

W trakcie pracy. Po uruchomieniu szczoteczki możesz zmieniać program – naciskaj przycisk I/O by zmienić tryb pracy w kolejności: DZIEN DOBRY → DOBRANOC → KOPCIUSZEK → APARAT → WYBIELAJĄCY. Szczoteczka zapamięta wybrany tryb i od niego zacznie kolejne mycie.

⚠ Jeśli szczoteczka rozładuje się, dioda ładowania zacznie migać. Wyłącz szczoteczkę i naładuj ją.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- ⚠ Szczoteczkę czyść wilgotną, miękką szmatką.
- ⚠ Oplucz całą szczoteczkę pod bieżącą wodą o temperaturze niższej niż 45°C.
- ⚠ UWAGA: Nigdy nie zanurzaj całej szczoteczki w wodzie. Nigdy nie używaj do czyszczenia trujących środków czyszczących.
- ⚠ UWAGA: Do czyszczenia nie używaj żrących środków chemicznych, szorstkich materiałów ściernych czy włókny stalowej.

Zalecamy wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Przeczytaj instrukcję		Producent		Prąd stały
SN	Numer seryjny		Data produkcji		Podwójna izolacja
CE	Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE				
	Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie nie może być zutylizowane wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny lub oddać w sklepie, gdzie kupisz podobny sprzęt. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację sprzętu. Prawidłowo zutylizowane urządzenie może być poddane recyklingowi, co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie.				

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1. 1 szczoteczka SMILS by VITAMMY (TB9314)
2. 2 końcówki szczoteczki
3. 1 baza ładująca USB
4. Instrukcja Użytkownika

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 3,7 V
Moc: 3 W
Specyfikacja zasilacza: 5 V, 1 A

GWARANCJA

URZĄDZENIE	SMILS by VITAMMY (TB9314)
GWARANT	Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
WSPARCIE TECHNICZNE	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
GWARANCJA	Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni .
TYP GWARANCJI	Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.
OKRES GWARANCJI	24 miesięcy na urządzenie
	Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: końcówki szczoteczki.
BIEG OKRESU GWARANCJI	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
OBSZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI	Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
	Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)
	Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
	Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

 Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

PRODUCENT:

 Guang Dong Xingbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

DYSTRYBUTOR:

NOVAMEDPL

Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.
ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland
Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Produkt posiada certyfikat CE

Wyprodukowano w Chinach / Made in China

