




MATA GRZEWCZA

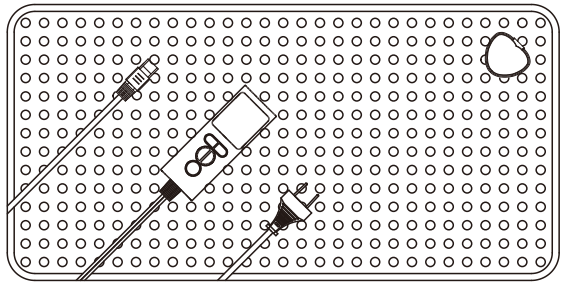

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

3. Części i elementy sterujące

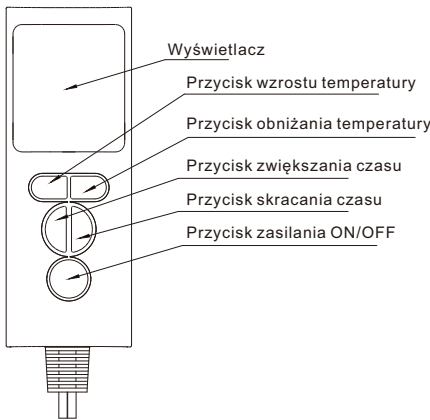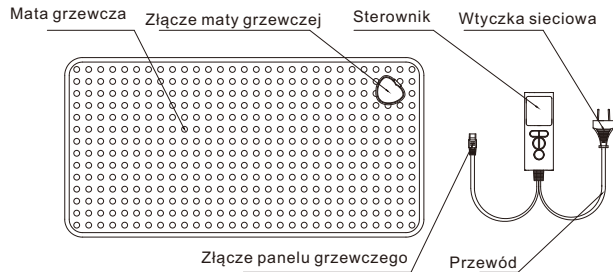

5

4. Przeznaczenie

Ta mata grzewcza jest przeznaczona do ogrzewania ludzkiego ciała w celu zapewnienia ciepła i komfortu. Nie nadaje się do użytku w szpitalach ani do innych zastosowań komercyjnych. W szczególności nie należy jej używać w przypadku dzieci lub niemowląt, osób wrażliwych na ciepło lub zwierząt. Jakiegokolwiek użycie nieopisane powyżej lub modyfikacje maty grzewczej są niedozwolone i mogą prowadzić do obrażeń i/lub uszkodzenia maty grzewczej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

UWAGA

- Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa mata grzewcza nie może być używana po wystąpieniu usterki.
- Nigdy nie podłączaj uszkodzonej maty grzewczej do innego sterownika tego samego typu.

5. Użytkowanie

UWAGA

- Przy pierwszym użyciu maty grzewczej może być wyczuwalny zapach plastiku, który zniknie po krótkim czasie. Aby rozpocząć, najpierw podłącz złącze sterowania do złącza panelu grzewczego.

6

1. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj całą instrukcję przed użyciem tego produktu. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i prawidłowo korzystać z tego produktu.


OSTRZEŻENIE - Aby uniknąć ryzyka poparzenia, porażenia prądem elektrycznym i pożaru, niniejszy produkt musi być używany zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie zalecenia.
- Nie używaj u niemowląt.
- Dzieci należy trzymać z dala od opakowania (ryzyko uduszenia).
- Nigdy nie pozostawiaj maty grzewczej bez nadzoru.
- Nie używaj szpilek ani innych metalowych elementów do mocowania maty.
- Nigdy nie ciągnij maty za przewód zasilający.
- Nie używaj przewodu jako uchwytu.
- Nie używaj maty grzewczej do zasilania.
- Nie używaj maty grzewczej w przypadku wystąpienia objawów zapalenia wyrostka robaczkowego. Skonsultuj się z lekarzem.
- Przed użyciem produktu należy go sprawdzić, aby upewnić się, że nie ma uszkodzonych części, brakujących części i/lub uszkodzonych obszarów.
- Nie należy używać maty grzewczej, jeśli są na niej uszkodzone części, brakuje części lub są uszkodzone obszary.

1

- Nie używaj gniazdka elektrycznego, które się poluzowało lub w którym wtyczka nie jest mocno osadzona.
- Nie zanurzaj w wodzie ani nie używaj środków chemicznych lub rozpuszczalników podczas czyszczenia, z wyjątkiem przypadków opisanych w instrukcji obsługi.
- Nie usuwaj etykiet produktu zawierających ostrzeżenia lub instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
- Skonsultuj się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek dolegliwości.
- Nie umieszczaj przewodów elektrycznych w macie grzewczej.
- Nie dawaj przewodów elektrycznych między materacem a sprężynami. Nie wolno dopuścić do ściśnięcia przewodów.
- Kontroler należy trzymać z dala od przeciągów i miejsc, w których może dojść do zawilgocenia lub zamoczenia, takich jak otwarte okna.
- Nie używaj tej maty grzewczej, jeśli Ty lub produkt jest mokry.
- Upewnij się, że mata grzewcza jest używana w obwodzie prądu zmiennego o odpowiednim napięciu.
- Nie używane urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania. Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Przy włączonej macie grzewczej nie wolno umieszczać na niej żadnych ostrych przedmiotów ani źródeł ciepła, takich jak termofoer lub podobne przedmioty.
- Elementy elektroniczne wewnątrz jednostki sterującej nagrzewają się podczas pracy maty grzewczej. Dlatego nigdy nie należy przykrywać jednostki sterującej ani umieszczać jej na macie grzewczej podczas pracy.

2

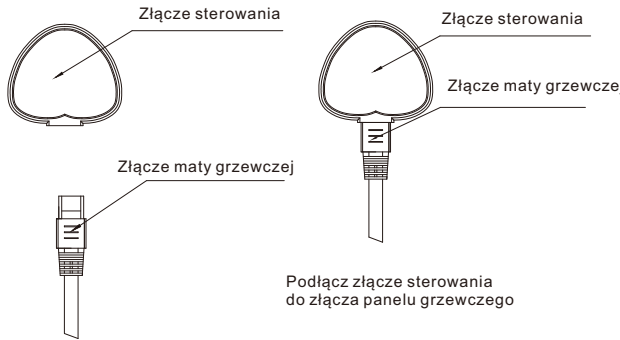

Złącze sterowania musi być podłączone do złącza płyty grzewczej przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego. Po podłączeniu złącza maty grzewczej do złącza sterowania, podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego AC.

Włączanie
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć matę grzewczą.

UWAGA
• Początkowa temperatura maty grzewczej jest ustawiona na poziomie 5, a czas wyłączenia wynosi 120 minut.

Ustawianie temperatury i czasu
• Naciśnij przycisk "TEMP1 " i przycisk "TEMP1 ", aby ustawić żądaną temperaturę. Wybierz poziom od 1 do 9.

7

- Naciśnij przycisk "TIMER I " i przycisk "TIMER I ", aby ustawić wymagany czas wyłączenia: 30min/60min/ 90min/120min.

Wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć matę grzewczą. Jeśli mata grzewcza nie jest już używana po upływie ustawionego czasu:

- Wyłącz matę grzewczą.
- Odłącz od gniazdka elektrycznego.
- Odłącz kontroler od panelu grzewczego.

6. Pielęgnacja, konserwacja i utylizacja

Instrukcje dotyczące prania
Nie czyścić chemicznie!
Nie używać wybielaczy!
Nie używać wyżymaczki!
Nie prasować maty grzewczej!

Jeśli mata grzewcza jest lekko zabrudzona, użyj zwilżonej szmatki i łagodnego detergentu, jeśli to konieczne. Do czyszczenia i pielęgnacji kontrolera należy używać suchej szmatki.

OSTRZEŻENIE

- Odłącz wtyczkę zasilania. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Nie podłączaj ponownie sterownika do maty grzewczej, dopóki złącze sterownika i mata grzewcza nie zostaną całkowicie suche. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

8

- Pola elektroniczne i magnetyczne emitowane przez tę matę grzewczą mogą zakłócać działanie rozrusznika serca. Należy skonsultować się z lekarzem i producentem rozrusznika serca przed użyciem tej maty grzewczej. Wyłącznie do użytku domowego.

PRZESTROGA - Aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu/mienia

- Nie używaj podczas snu. Mata nie powinna być używana przez osoby, które śpią, osób ze słabym krążeniem krwi lub osób chorych na cukrzycę, chyba że są one uważnie monitorowane.
- Nie używaj jeśli posiadasz bardzo wrażliwą skórę lub unikaj tych miejsc.
- Oparzenia mogą wystąpić niezależnie od ustawień sterowania. Należy często sprawdzać skórę pod matą.
- Nie używaj maty z kremami, maściami lub preparatami zawierającymi składniki wytwarzające ciepło. Może to spowodować oparzenia skóry.
- Nie używaj z alkoholem.
- Nie chowaj maty grzewczej ani przewodu zasilającego w sofie lub innych meblach. Wszystkie części maty grzewczej lub sterownika powinny być zawsze widoczne.
- Nie chwytaj ani nie ściskaj przewodu.
- Matę grzewczą należy chronić przed uderzeniami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, znacznymi wahaniami temperatury i bliskimi źródłami ciepła (piece, grzejniki).

3

- Zwierzęta nie mogą używać tej maty grzewczej.

UWAGA:

- Nie zgniataj maty. Unikaj ostrych zagięć.
- Ta mata grzewcza jest przeznaczona do użytku na ciele. Nie siadaj na macie grzewczej. Nigdy nie umieszczaj maty między sobą a krzesłem, sofą lub łóżkiem. Podczas przechowywania należy luźno zapętlić przewód. Ciasne owinięcie może go uszkodzić.
- Nie używaj maty, gdy jest złożona lub zwinięta.
- Mata grzewcza nie nadaje się do użytku w szpitalach ani do innych zastosowań komercyjnych.
- Nie nadaje się do użytku w hotelach, motelach ani innych instytucjach.
- Nie do użytku medycznego w szpitalach. Maty grzewczej należy używać wyłącznie z jednostką sterującą określoną na etykiecie. W przeciwnym razie mata grzewcza może ulec uszkodzeniu.

2. Zawartość opakowania

- 1x Mata grzewcza
- 1x Kontroler z przewodem zasilającym
- 1x Instrukcja obsługi

4

- Nigdy nie włączaj maty grzewczej, aby pomóc jej wyschnąć. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

UWAGA

Rozłącz złącza maty/sterownika.
• Nigdy nie zanurzaj kontrolera w wodzie lub innych płynach. Może to spowodować jego uszkodzenie.
• Nie używaj chemicznych środków czyszczących lub szorujących do czyszczenia panelu grzewczego i sterownika. Może to spowodować uszkodzenie maty grzewczej i sterownika.
• Materiał maty należy prać w pralce w ciepłej wodzie w delikatnym cyklu. Można też prać ręcznie w ciepłej wodzie.
• Nie podłączaj maty grzewczej, dopóki nie wyschnie.
• Niezwłocznie po umyciu uformuj wilgotną matę do pierwotnego rozmiaru i wysusz na płasko, rozłożoną na suszarce do ubrań.
Nie rozwieszaj maty do wyschnięcia na kołkach lub podobnych przedmiotach. W przeciwnym razie mata może ulec uszkodzeniu.

Przechowywanie

Przed schowaniem maty grzewczej należy odczekać, aż ostygnie. W przeciwnym razie mata grzewcza może ulec uszkodzeniu.
• Aby zapobiec powstawaniu ostrych zagnieceń na macie grzewczej, nie należy przechowywać na niej innych przedmiotów. W przeciwnym razie mata grzewcza może ulec uszkodzeniu.

9

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przechowywać je w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu i bez obciążania.
- Należy odłączyć zasilanie sieciowe i sterownik od maty grzewczej.

Utylizacja

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. Dane techniczne

Model:	D3040	D3060	D4076	D3040	D3060	D4076
Rozmiar maty grzewczej:	30x40cm	30x60cm	40x76cm	30x40cm	30x60cm	40x76cm
Zasilanie:	120V/60Hz			230V 50Hz/60Hz		
Moc:	50W	75W	120W	50W	75W	120W
Czas:	30/60/90/120minut					
Poziom temperatury:	9 Poziomów Poziom 1-3: minimalne ogrzewanie Poziom 4-6: średnie ogrzewania Poziom 7-9: maksymalne ogrzewanie					
Warunki pracy:	32°F to 95°F (0°C - 35 °C) < 80% wilgotność					
Przechowywanie:	23°F to 104°F (-5°C to 40°C) < 80% wilgotność					

10