

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampa na podczerwień LN-21



Gratulujemy zakupu Lampy na podczerwień. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórow
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego poknięcia któregoś z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

Lampa na podczerwień pozwala eliminować zmęczenie skóry, łagodzić ból, poprawiać krążenie krwi, łagodzić objawy zapalenia stawów oraz sprzyjać gojeniu się ran.

Silna penetracja podczerwona dodatkowo sprawia, że włosy wchłaniają więcej składników odżywczych oraz poprawia metabolizm.

1. Parametry produktu:

Model: MSD-114A	Wysokość: 150 cm
Materiał: ABS + Fe	Waga produktu: 2,4 kg
Napięcie znamionowe: 220 V	Waga z opakowaniem: 3 kg
Moc znamionowa: 275 W	Wymiary opakowania: 45,5 x 34 x 25,5 cm
Długość kabla zasilającego: 160 cm	Optymalna odległość nagrzewania: 25 – 35 cm

2. Opis elementów produktu:

A: Klosz

B: Siatka ochronna

C: Żarówka na podczerwień

D: Plastikowy wąż

E / K: Otwory do łączenia

G: Rura przedłużająca

H: Otwór wtrysku wody

I: Podstawa

J: Uniwersalne kółka

L: Kabel zasilający


M: Element obrotowy

F: Panel kontrolny

O: Wyświetlacz czasu

Q / P: Przyciski regulujące czas (plus / minus)

R: Przycisk regulacji temperatury

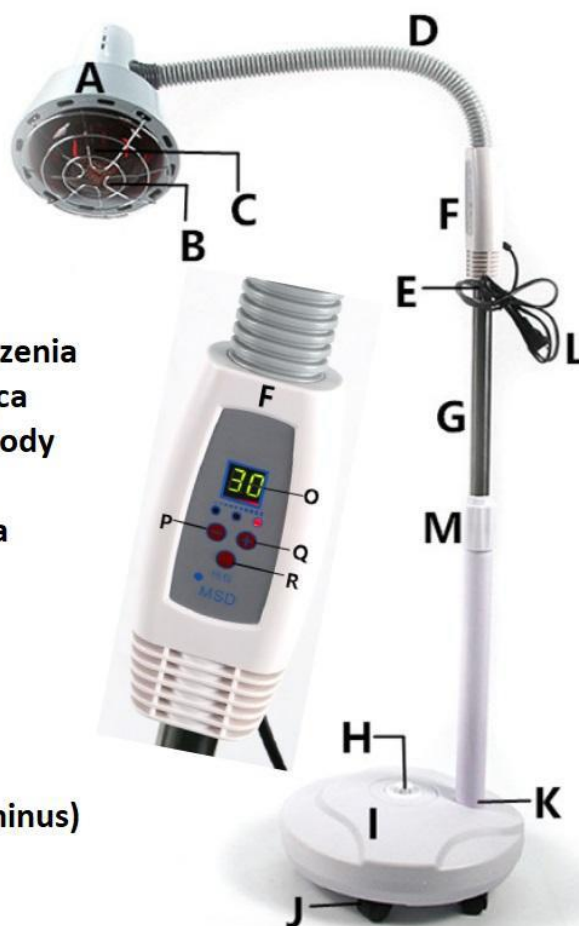

3. Instrukcja montażu:

1.



Wykręć ze styropianu dwie śruby montażowe: motylkową oraz z plastikowym pokrętłem

2.



Włóż wspornik do podstawy i zakręć śrubę od spodu

3.



Włóż kółka w otwory podstawy, by usłyszeć "klik"

4.



Wypełnij podstawę wodą lub piaskiem, by lampa była bardziej stabilna

5.



Poluzuj element obrotowy i wyciągnij żelazną rurę do góry, by ją umocować

6.



Załóż górną część lampy na wsporniku i zakręć śrubkę

4. Instrukcja użytkowania:

1. Włóż wtyczkę zasilającą do gniazdka.
2. Nagrzewaj lampę przez około 2 – 3 minuty i skieruj ją na wybrane partie ciała, np. na bolące partie. Dystans naświetlania powinien wynosić około 25 – 35 cm.
3. Naciśnij przycisk dostosowania temperatury, by dobrać odpowiednią, komfortową temperaturę.
4. Naciskaj przyciski „+” i „-” w celu ustawienia wybranego czasu.

5. W przypadku osób przebywających w jednym z wymienionych poniżej stanów, należy używać lampy po konsultacji z lekarzem oraz jedynie za jego przyzwoleniem. Dotyczy to:

1. Użytkowników chorujących na poważne choroby przewlekłe takie jak choroby serca, ostre choroby zapalne tocznia, skrzepliny, dysfunkcje nadnerczy, toczeń rumieniowaty układowy, zaburzenia krzepnięcia lub inne złośliwe choroby.
2. Użytkowników niewrażliwych na światło podczerwone i temperaturę ze względu na występowanie chorób lub zażywanie leków.
3. Pacjentów cierpiących na demielinizacyjne zapalenie nerwu, takie jak zespół cieśni nadgarstka, stwardnienie rozsiane lub neuropatię łokciową.
4. Osób z alergią na promienie podczerwone; Osób cierpiących na występowanie obrzęków oraz guzów.
5. Osób posiadających chirurgicznie wszczone implanty, szczególnie w okolicach mających być napromieniowanymi.
6. Osób z uszkodzeniami lub zapaleniami skóry.
7. Kobiet w ciąży.
8. Osób z wysoką gorączką.

6. Uwagi:

1. Gdy lampa jest podłączona do zasilania, nie należy dotykać klosza ani żarówki, by uniknąć w ten sposób poparzeń.
2. Nie wolno dopuszczać do dostania się wody wewnątrz produktu.
3. Podczas używania lampy należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia.
4. Zakręć śrubki za pomocą śrubokręta podczas montowania podstawy.
5. Nie należy używać lampy przez bardzo długi czas w sposób ciągły. Sugeruje się, by na raz nie przekraczać 30 minut użytkowania.