

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie stosuj żadnego żelu ani środków pielęgnacyjnych (żelu aloesowego itp.) przed użyciem! Upewnij się, że produkt jest montowany i używany zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji obsługi. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją na wypadek pytań. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania podczas użytkowania, skontaktuj się z obsługą klienta online w wymaganym języku.

NIEBEZPIECZNY

Ostrzeżenie: Nie używaj tego produktu w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń. Utrzymuj produkt i zasilacz w suchości; jeśli produkt jest uszkodzony, nie dotykaj żadnych wewnętrznych części, aby uniknąć porażenia prądem;

Nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu, nie umieszczaj go w dowolnym miejscu;

Nie używaj tego produktu w okolicy oczu. Okulary ochronne mogą rzeczywiście chronić użytkowników podczas zwykłych czynności, ale jeśli wykonujesz czynności w okolicy oczu, okulary ochronne mogą nie być w stanie całkowicie zablokować energii pochłanianej przez melaninę tęczówki w twoich oczach z bliskiej odległości;

Zalecamy noszenie okularów ochronnych za każdym razem, gdy ich używasz. Chociaż światło nie będzie bezpośrednio oddziaływać na twoje oczy, szybkie światło błyskowe może mieć wpływ na twój wzrok;

Kiedy potrzebujesz usunięcia włosów z pleców lub zastosowania lodu, możesz potrzebować

asystenta, co jest naszą sugestią, ponieważ samodzielne używanie może być ryzykowne;

Jeśli twoje włosy są dłuższe niż 1 mm, najpierw je zgol. Nadmierne włosy pochłaniają ciepło na powierzchni skóry, co spowoduje, że skóra stanie się zaczerwieniona i opuchnięta, a włosy będą palone i wydzielać dziwny zapach, który wpłynie na twoje wrażenia z używania produktu;

Jeśli skóra napromieniowanego obszaru nie jest sucha lub czysta, wpłynie to na efekt użytkowania, a także może spowodować, że produkt nie będzie migał lub będzie migał przypadkowo

Zwróć uwagę, aby dzieci poniżej 15 roku życia nie miały kontaktu z tym produktem, a także trzymaj z dala od dzieci poniżej 15 roku życia podczas obsługi urządzenia;

W przypadku różnych części ciała należy używać różnych ustawień natężenia światła w zależności od potrzeb dla różnych części ciała, ponieważ ich kolor skóry nie jest taki sam

BĄDŹ OSTROŻNY

Nie używaj tego urządzenia na naturalnej czarnej skórze

Nie wystawiaj się na słońce przed depilacją.

Przed depilacją należy się ogolić (nie należy stosować chemicznych środków do usuwania włosów)

Nie wystawiaj się na słońce przed depilacją.

Zabrania się używania w ciemnym i jasnym otoczeniu.

Podczas używania należy nosić okulary chroniące przed światłem

Nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym: aby uniknąć awarii urządzenia


Nie uderzaj gwałtownie i nie potrząsaj tym urządzeniem.

STRUKTURA

(USUWANIE WŁOSÓW METODĄ IPL Z ZAMRAŻANIEM LODU)

STRUCTURE

(ICE FREEZING IPL HAIR REMOVAL)

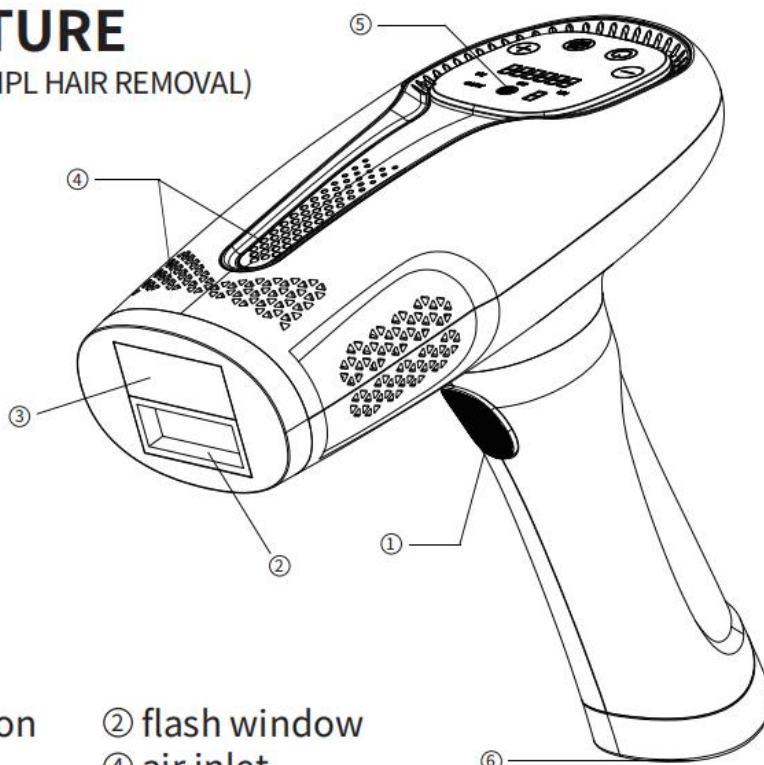

Part name

- | | |
|------------------|-----------------------|
| ① flash button | ② flash window |
| ③ ice panel | ④ air inlet |
| ⑤ Display screen | ⑥ DC socket interface |

Nazwa części

1. przycisk flash
2. okno flash
3. panel lodowy
4. wlot powietrza
5. ekran wyświetlacza
6. interfejs gniazda DC

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

BHRL-04/BHRL-04B

Przyrząd do usuwania włosów w temperaturze zamrażania ICE, najpierw użyj golarki, aby oczyścić włosy na powierzchni ludzkiej skóry, a następnie naświetl skórę intensywnym światłem pulsacyjnym IPL, co powoduje zmiany strukturalne mieszków włosowych i otaczających tkanek z powodu wzrostu temperatury, hamując w ten sposób wzrost włosów i powodując zanik i wypadanie włosów.

Ten produkt podważa doświadczenie podobnych produktów i wprowadza innowacje oraz integruje system wykrywania lodu. Po włączeniu trybu aplikacji lodu można usunąć stronę

łodu, skórę można szybko odciążyć, skórę można zmniejszyć, a usuwanie włosów może być bardziej bezbolesne i trwałe.

Jednocześnie ulepszone prędkość błysku, usuwanie włosów jest bardziej oszczędzające czas i pracę. Ten produkt bierze jako cel męskie grube włosy gębowe, a jako podstawę efekt usuwania włosów żeńskich. Eksperymenty pokazują, że większość męskiej gębki ma wyraźny efekt usuwania włosów, żeńska gębka ma lepszy efekt usuwania włosów, a efekt usuwania włosów u mężczyzn jest nieco inny niż u kobiet.

Ten produkt ma długą żywotność bez wymiany zintegrowanej lampy. Ten produkt ma długą żywotność bez wymiany zintegrowanego uchwytu lampy,

co pozwala zaoszczędzić na kosztach wymiany uchwytu lampy, nie wymaga częstego zakupu akcesoriów i nie ma żadnych ukrytych dodatkowych kosztów. Ponadto ma doskonały system filtrowania, który może dobrze filtrować nieprawidłowe krótkie fale i szkodliwe światło, skutecznie eliminując niebezpieczeństwo wycieku światła spowodowane słabym kontaktem łączonej struktury wymiany.

Wyniki testów produktu pokazują, że z wyjątkiem czarnej skóry nadaje się do różnych kolorów skóry. (W przypadku osób, których to nie dotyczy, zapoznaj się z Środki ostrożności)

Dziękujemy za wybranie domowego depilatora BHRL-04 / BHRL-04B. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Waga: 0,32 kg

Ciśnienie atmosferyczne: 86,0 kPa ~ 106,0 kPa

Napięcie: AC220 V 50 Hz

Wymagania środowiskowe: Unikać

Moc: 36 W-48 W

DirectLight

Metoda chłodzenia: zimne powietrze

Intensywność światła: 9-stopniowa regulacja

Temperatura otoczenia: 5~40 stopni Celsjusza

Długość fali świetlnej do usuwania włosów: 600-1200 nm

Wilgotność względna: ≧80%

Norma implementacji: GB4706.1

PRZYGOTUJ PRZED UŻYCIEM

Dokładnie oczyść skórę, aby upewnić się, że jest wolna od włosów, całkowicie sucha i wolna od substancji olejowych (perfum, balsamów, pachnących płynów pielęgnacyjnych, kremów przeciwsłonecznych) i innych pozostałości.

Upewnij się, że w porcie napromieniowania nie ma pozostałości brudu, takich jak kurz i włosy, i że nie ma uszkodzeń ani nieprawidłowości. Jeśli jest brud, wyczyść go, aby uniknąć uszkodzenia produktu, pogorszenia jakości i problemów skórnych.

Nie nakładaj żadnego żelu ani produktów pielęgnacyjnych (żelu aloesowego itp.) przed użyciem.

Ustawienie intensywności promieniowania

Ten produkt został opracowany specjalnie dla osób z włosami uwiecznionymi, więc

jego energia świetlna jest łagodniejsza i zapewnia 9 różnych energii świetlnych. Możesz dostosować energię świetlną do koloru skóry i włosów na ciele, a także zachować wygodną pozycję. Zalecany poniżej miernik energii świetlnej pomoże Ci określić odpowiednią energię świetlną

1. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby określić, jaka intensywność światła jest odpowiednia dla Twojej skóry i koloru włosów. Wskazówka: Możesz umieścić formularz w Szybkim przewodniku na swojej skórze i porównać go z kolorem skóry. Wskazówka: Zaleca się zachowanie Szybkiego przewodnika do wykorzystania w przyszłości.

2. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, zmniejsz intensywność światła. Osoby o ciemniejszym odcieniu skóry są bardziej narażone na alergie skórne, ponieważ skóra pochłania więcej światła. Dlatego zaleca się, aby osoby o ciemniejszym odcieniu skóry używały niższej intensywności światła. Lśniąca skóra może wydawać się ciepła lub gorąca. Jest to normalne zjawisko.

color of skin						
Color of hair	white	Beige	Light brown	Brown	Dark brown	Brown black or darker
White/Grey	x	x	x	x	x	x
Red	x	x	x	x	x	x
Light gold	x	x	x	x	x	x
Dark gold/Light brown	✓	✓	✓	✓	x	x
Brown	✓	✓	✓	✓	x	x
Dark brown	✓	✓	✓	✓	x	x
Black	✓	✓	✓	✓	x	x

(Uwaga: X nie ma zastosowania)

Uwaga: Aby potwierdzić, czy Twój typ skóry jest odpowiedni dla tego urządzenia, zapoznaj się z tabelą kolorów skóry w skróconej instrukcji obsługi.

Uwaga: Ze względu na istnienie różnych przyczyn, Twoja skóra może mieć różne reakcje ze względu na różne czasy i okazje naświetlania. Uwaga: X nie ma zastosowania)

Test napromieniowania skóry

Jeśli ten produkt jest używany po raz pierwszy lub ostatnio stosowano podobne produkty do usuwania włosów, należy wykonać testy skórne na każdym miejscu, które ma zostać napromieniowane. Test jest potrzebny, aby sprawdzić, czy skóra reaguje na napromieniowanie i określić prawidłowe ustawienia oświetlenia dla każdej części ciała.

1. Wybierz miejsce w pobliżu miejsca, które ma zostać napromieniowane.

Uwaga: Nie próbuj używać tego produktu na wyjątkowo trudnych lub wrażliwych częściach (bosych stopach lub kościach)

2. Naciśnij przycisk przełącznika na 2 sekundy, aby uruchomić urządzenie i upewnij się, że wybrano 1. bieg.

3. Umieść urządzenie pionowo na skórze, aby port błysku

dotknął skóry.

4. Naciśnij przycisk błysku, aby wyemitować błysk.

5. Przesuń urządzenie po skórze do następnego miejsca, które ma zostać napromieniowane.

6. Zwiększaj ustawienie stopniowo, wyemituj błysk, a następnie przesuń urządzenie do następnej części. Powtórz tę czynność dla wszystkich poziomów w zalecany zakres intensywności światła dla Twojego typu skóry.

7. Po teście skórnym stan skóry po 2 godzinach. Jeśli w momencie wykonania zdjęcia nie zauważysz żadnych nieprawidłowości (zaczerwienień, pęcherzy), możesz śmiało stosować ten produkt.

Podstawy usuwania włosów

Podstawy usuwania włosów w różnych częściach ciała

1. Usuwanie włosów pod pachami

● Przed usunięciem włosów należy dokładnie wytrzeć antyperspirant, perfumy, krem i inne kosmetyki nałożone pod pachami. W przypadku wiotkich części skóry należy ją najpierw naciągnąć, a następnie depilować.

● Normalne jest, że skóra odczuwa lekkie pieczenie podczas naświetlania ust.

2. Depilacja bikini

● Nagromadzenie pigmentu, ciemne części ciała, proszę używać niskiego biegu, proszę używać 1 biegu przed dostosowaniem.

3. Owłosienie dłoni i stóp

● Kości, dziury i nierówne kości podłoża oraz miejsca, które opierają się uderzeniom, będą bardziej bolesne niż w innych częściach ciała.

4. Nie używaj następujących części

● Są ślady oparzeń, ciemne części, wokół oczu, odmrożenia, znamiona i inne części, brwi, włosy, oparzenia słoneczne i inne części.

● Po depilacji unikaj miejsc z promieniami ultrafioletowymi przez 24 godziny, aby zapobiec poparzeniom skóry przez światło słoneczne podczas depilacji.

● Uważaj, aby nie patrzeć bezpośrednio na lampę błyskową.

INSTRUKCJE

Kroki użytkowania trybu przerywanego błysku

01/Użyj golarki, aby ogolić włosy w części, która wymaga pielęgnacji.

02/Podłącz zasilanie, naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy,

aby uruchomić i wyświetlić pozostałą liczbę uruchomień, bieg i tryb przerywanego błysku po uruchomieniu.

03/Porównaj swoją skórę z kartą koloru skóry. Nie używaj jej, jeśli kolor Twojej skóry należy do X. Ta karta koloru skóry wskazuje najbardziej odpowiedni bieg dla różnych kolorów skóry, ale zaleca się rozpoczęcie od 1. biegu przy pierwszym użyciu.

04/W tym momencie dostosuj bieg do koloru swojej skóry i krótko naciśnij klawisz minus, aby dostosować cykliczny wybór między biegami 1-9. Zaleca się rozpoczęcie od pierwszego biegu przy pierwszym użyciu. Bez uszkodzania skóry, im wyższy bieg, tym lepszy efekt usuwania włosów.

05/ Włącz przycisk chłodzenia, aby wyświetlić symbol chłodzenia i włącz tryb lodu bocznego, który może zmniejszyć uczucie pieczenia i zapewnić bezbolesne usuwanie włosów. (TYLKO DLA STYLU LODU (BHRL04))

06/ Wybierz tryb ręczny/automatyczny błysk, ręcznie przyklej skórę i naciśnij przycisk światła, aby błyskać: naciśnij przycisk światła, aby przejść do trybu automatycznego błysku bez przyklejania skóry. Nie ma potrzeby naciskania przycisku, przyklej skórę, aby błyskać.

07/ Podczas pracy noś profesjonalne okulary ochronne dołączone do tego produktu. Unikaj obrażeń oczu spowodowanych błyskiem.

08/W tym momencie umieść produkt pionowo na części, którą należy usunąć, głowica lampy korpusu jest całkowicie przymocowana do skóry, biała kontrolka miga, a przycisk naświetlania będzie migał lub wybierz tryb automatycznego błysku, aby rozpocząć usuwanie włosów. (Uwaga: osłona lampy kadłuba U nie przylega całkowicie do skóry, a kontrolka nie będzie migać)

Procedury stosowania trybu pielęgnacji kompresami z lodu (TYLKO

DLA STYLU LODOWEGO (BHRL04))

01/Po zakończeniu usuwania włosów naciśnij krótko przycisk śnieżynki, aby otworzyć tryb pielęgnarski, a ekran ponownie krótko wyświetli funkcję oświetlenia logo śnieżynki, aby wyłączyć. Naciśnij przycisk śnieżynki

02/Przyklej część lodówki nasadki lampy urządzenia do ne

03/Po zakończeniu pielęgnacji możesz nacisnąć przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć.

(Jeśli wszystkie tryby nie będą używane przez 5 minut, urządzenie automatycznie się wyłączy)

Korzystanie z kroków i zasad działania trzech głównych funkcji

HR: Leczenie IPL jest nie tylko skuteczne w leczeniu zmian pigmentacyjnych, ale także skuteczne w usuwaniu włosów

SC: W przypadku nieprawidłowej pigmentacji lub nieprawidłowości naczyń włosowatych skóry, fotonowa fototerapia odmładzająca wykorzystuje IPL (intensywne światło pulsacyjne) Poprawa elastyczności skóry i nadanie jej młodszy wygląd jest przypisywana promowaniu kolagenu w skórze przez IPL. Synteza sprawia, że skóra wygląda elastycznie i błyszcząco.

RA: Eliminacja bakterii na powierzchni skóry, a także hamowanie rozwoju trądziku

UWAGA

Nie należy stosować antyperspirantu bezpośrednio po napromieniowaniu pachy;

Prosimy o regularne sprawdzanie i czyszczenie brudu w porcie napromieniowania, aby uniknąć oparzeń i awarii podczas użytkowania;

Nie należy zbliżać portu napromieniowania do przedmiotów, które łatwo rozmagnesować, aby nie spowodować awarii i uszkodzeń;

Nie należy używać urządzenia pod warunkiem zablokowania otworu wentylacyjnego, aby uniknąć dymu i ognia;

Nie należy oświetlać czarnych przedmiotów skierowanych w stronę ust, aby urządzenie nie mogło działać prawidłowo;

Nie należy napromieniowywać ubrań, włosów i innych przedmiotów, aby uniknąć czernienia, odbarwienia i uszkodzenia;

Nie należy używać go na zwierzętach domowych, aby uniknąć obrażeń;

Nie należy używać tego produktu w pobliżu oczu, aby uniknąć obrażeń oczu;

Po użyciu należy wyczyścić produkty do pielęgnacji włosów i skóry dołączone do depilatora, aby uniknąć awarii i uszkodzenia skóry;

Nie należy używać go w pobliżu dzieci, depilator będzie emitował silne światło i łatwo uszkodzi oczy;

Ustaw intensywność naświetlania zgodnie ze stanem skóry i pamiętaj, aby zacząć od pierwszego biegu za pierwszym razem

Jeśli skóra jest lekko gorąca i zaczerwieniona po użyciu, jest to normalne zjawisko, możesz otworzyć funkcję kompresu z lodem, aby złagodzić dyskomfort skóry;

Kiedy potrzebujesz zabiegu usuwania włosów z pleców, zaleca się, aby mieć pomocnika, co może być ryzykowne, aby wykonywać go samemu;

Po włączeniu produktu nie można go pozostawić bez nadzoru. Po użyciu produktu należy go zamknąć na czas;

Proszę wyłączyć produkt na czas po jego użyciu. Oczyszczyć skórę, aby upewnić się, że nie ma na niej pozostałości włosów, jest całkowicie sucha i wolna od substancji oleistych;

Jeśli różnica temperatur w środowisku pracy osiągnie więcej niż 20 stopni (od środowiska o niskiej temperaturze do środowiska o wysokiej temperaturze lub odwrotnie), wyłącz urządzenie i odczekaj około 2 godziny przed użyciem;

Nie używaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych (spryskiwacze, stacje benzynowe itp.), które łatwo mogą spowodować pożar, porażenie prądem i inne niebezpieczne testy;

Temperatura otoczenia, w którym używa się tego depilatora, wynosi 5-40 stopni;

Nie dotykaj wylotu światła po użyciu. Ze względu na wysoką temperaturę generowaną przez wylot światła, łatwo jest spowodować oparzenia;

Jeśli skóra w miejscu napromieniowania nie jest sucha lub czysta, wpłynie to na efekt użycia pulsującego światła, a także może spowodować, że produkt nie będzie migał lub przypadkowo migocze;

W ciągu 24 godzin po napromieniowaniu należy unikać bezpośredniego promieniowania ultrafioletowego na napromieniowaną część;

Jeśli skóra w miejscu napromieniowania nie jest sucha i czysta, efekt użycia pulsującego światła zostanie zakłócony, a produkt może nie migać lub przypadkowo migocze;

Nie umieszczaj produktu na słońcu lub w długim pomieszczeniu pod lampą ultrafioletową, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie produktu;

tylny wentylator nie działa po włączeniu zasilania (nie słychać brzęczenia), nie używaj go, aby uniknąć awarii spowodowanej dymem i pożarem;

Niekomfortowe grupy i warunki

Kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, kobiety w okresie menstruacji, z bliznami na powierzchni ciała, cukrzycą, delikatną skórą i skórą wrażliwą na światło; zabrania się

stosowania u pacjentów z ciężką chorobą serca, nadciśnieniem tętniczym od umiarkowanego do ciężkiego, nowotworami złośliwymi, zapaleniem mieszków włosowych, zakaźnymi chorobami skóry, oparzeniami skóry, podejrzanymi zaburzeniami krwi;

Nie stosuj wierszy u osób z nieprawidłowym metabolizmem kolagenu, w tym z historią blizn i słabym gojeniem się ran, nie stosuj wierszy u osób z chorobami naczyniowymi, takimi jak żylaki i rozszerzenie naczyń krwionośnych w momencie ekspozycji; Nie stosuj, jeśli skóra jest wrażliwa na światło i podatna na wysypkę lub alergię; Nie stosuj, jeśli miejsce napromieniowania jest zainfekowane, występuje opryszczka, zmiany skórne, krwaki itp.;

Tłumienie chorób odpowiedzi immunologicznej Tłumienie chorób odpowiedzi immunologicznej (w tym zakażenia HIV/AIDS, toczeń rumieniowaty, porfiria itp.) Nie stosować;

Pacjenci z chorobą krwotoczną z przeciwwskazaniami, miejscowy kwas izoretynowy (AHA), kwas salicylowy (BHA) lub kwas azaliowy przeciwwskazane;

Osoby, które stosują chemiczne usuwanie włosów w ciągu 30 dni, powinny stosować produkty wybielające skórę lub kosmetyki zawierające witaminę Aina w krótkim okresie czasu z ostrożnością;

Nie można go stosować w tym samym okresie co produkty z olejkami eterycznymi. Upewnij się, że skóra na naświetlanym obszarze jest czysta, sucha i nie używaj kremu, płynu smarującego i innych kosmetyków

Jeśli skóra wykazuje, że nie jest czysta, sucha i może mieć wpływ na doświadczenie związane z używaniem produktu, może to uszkodzić produkt;

może być zakazany podczas przyjmowania leków aspiryny, leków immunosupresyjnych i leków z kwasem izoretynowym. Niedawne stosowanie leków światłoczułych (takich jak tetracyklina, sulfonamid itp.) nie jest na razie zalecane;

Uszkodzenia spowodowane światłem (oparzenia słoneczne) proszę odczekać do czasu naprawy skóry przed użyciem, błony śluzowe i inne wrażliwe części są zabronione;

Każdy rodzaj rany nie jest wyleczony, hirsutyzm i inne choroby skóry wywołane Jeśli przyjmujesz środki przeciwbólowe, zmniejszy to wrażliwość skóry na ciepło. Zaleca się ostrożne stosowanie przed złagodzeniem efektu. Jeśli Twoja skóra i kolor włosów nie są odpowiednie, zabrania się stosowania tego produktu;

(W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem i użyj go później)

Nie stosować na następujące części ciała lub obecność:

1. Jama ustna, błona śluzowa sromu itp.
2. Miejsca po zabiegach plastycznych i chirurgicznych
3. Jabłko Adama
4. Gałka oczna, powieka, okolice oczu
5. Głowa
6. Miejsce występowania plam i znamion
7. Brwi, włosy
8. Miejsce występowania trądziku
9. Brodawka, otoczka

- 10. Wnętrze pępka
- 11. Uszy
- 12. Duża żyła
- 13. Tatuaze i malowanie ciała

(Uwaga: Ta lista nie jest wyczerpująca. Jeśli nie masz pewności, czy możesz używać tego produktu, zaleca się konsultację z lekarzem.)

PIELĘGNACJA SKÓRY

(Zaleca się unikanie kontaktu z wodą w ciągu 6 godzin po usunięciu włosów. Następnie można użyć kremu nawilżającego, aby nawilżyć napromieniowane części.

Nie używaj perfum, maseczek na twarz i kosmetyków zawierających mrożone drobinki po usunięciu włosów ze skóry. Unikaj ekspozycji na promieniowanie UV w ciągu 24 godzin po zabiegu usuwania włosów i w razie potrzeby zastosuj krem z filtrem przeciwsłonecznym.

Jeśli źle się czujesz, skonsultuj się z chirurgiem.

Opalanie może spowodować zaczerwienienie skóry lub oparzenia słoneczne. Napromieniowanie w tym miejscu spowoduje zaczerwienienie, obrzęk, stan zapalny i inne stany. Dlatego podczas stosowania tego produktu uważaj, aby nie wystawiać się na słońce, a czas gojenia się oparzeń słonecznych nie jest krótszy niż 1 tydzień.

Podczas zabiegu usuwania włosów, ekspozycja na obszar usuwania włosów jest surowo zabroniona w ciągu 18 godzin po zabiegu usuwania włosów. Nawet jeśli ekspozycja jest wymagana po 18 godzinach, należy zwrócić uwagę, czy na skórze przez cały czas nie występują żadne niekorzystne warunki. Należy stosować krem z filtrem przeciwsłonecznym SPE30 w celu ochrony przed słońcem po 2 godzinach T.

Podczas zabiegów usuwania włosów nie jest dozwolone sztuczne opalanie skóry.

Jeśli po usunięciu włosów musisz wykonać operację plastyczną (dotyczy to tylko obszaru usuwania włosów), skonsultuj się z lekarzem.

UŻYWANIE INTERWAŁU

Przedział czasowy

Tydzień 1-4: stosować 2 razy w tygodniu

Tydzień 5-8: stosować raz przez 1-2 tygodnie

W ciągu 8 tygodnia: raz na 15 lub 30 dni

Proszę stosować wielokrotnie w zależności od tempa wzrostu włosów. W przypadku ciężkich włosów można na tej podstawie odpowiednio zwiększyć częstotliwość i tempo ich wzrostu. Konkretna sytuacja różni się w zależności od osoby.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pielęgnacja urządzenia

Aby zapewnić produktowi najlepszy efekt i

jak najdłuższą żywotność, należy czyścić produkt przed i po każdym

usuwaniu włosów, aby uniknąć długotrwałego gromadzenia się osadów włosów i

kurzu. Jeśli nie będziesz regularnie czyścić, produkt nie będzie miał należącego efektu.

Sprawdź ten produkt, zwłaszcza okno przepuszczające światło i części korpusu. Upewnij się, że wszystkie są czyste i uporządkowane.

Nie czyść tego produktu i jego akcesoriów pod kranem ani w zmywarce.

Nie używaj stalowych kulek drucianych, ściernych środków czyszczących (pasty do zębów itp.) ani żrących płynów (benzyny, oleju silnikowego, acetonu itp.) do czyszczenia produktu.

Uwaga: Jeśli nie możesz już wyczyścić okna przepuszczającego światło, zaprzestań używania tego produktu.

Wyłącz produkt, odłącz wtyczkę zasilania i pozwól mu ostygnąć. Podczas korzystania z tego produktu okno lampy błyskowej będzie się nagrzewać.

Przed czyszczeniem upewnij się, że jest chłodny.

W razie potrzeby wyczyść zewnętrzną część produktu czystą, miękką ściereczką.

Zwilż miękką ściereczkę kilkoma kroplami wody, a następnie wyczyść nią następujące części

----Okno Flash ----Uwaga: Jeśli efekt czyszczenia wodą nie jest dobry, możesz

----Panel lodowy ----użyć kilku kropli alkoholu o wysokim stężeniu

(nie więcej niż 96%), aby wyczyścić powyższe części.

Podczas utylizacji produktu nie wyrzucaj go razem z ogólnymi odpadami domowymi, ale oddaj go do wyznaczonego punktu recyklingu, co sprzyja ochronie środowiska.

Pole elektromagnetyczne (PEM)

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

GWARANCJA

Okres gwarancji na ten produkt może się różnić w zależności od kraju, w którym jest sprzedawany, i dołożymy wszelkich starań, aby go przedłużyć, jeśli zezwala na to prawo danego kraju.

Okres gwarancji na ten produkt wynosi 1 rok od daty zakupu.

Uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieregularną pracą nie są objęte gwarancją. Wymienimy uszkodzone części lub wymienimy je na stare po cenie. Stary instrument jest naszą własnością.

Światłówka ma ograniczoną żywotność, a przekroczenie limitu liczby razy użycia nie będzie objęte gwarancją.

Okres gwarancji jest oparty na okresie zakupu jako dacie początkowej, możesz skonsultować się ze sklepem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Gwarancja i zwrot nie będą udzielane w następujących przypadkach.

1. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak pożary, trzęsienia ziemi, powodzie itp.

2. Twoja wina, niewłaściwe użytkowanie, użytkowanie w innych nietypowych warunkach spowodowanych przez barierę instrumentu i uszkodzenie.

3. uszkodzenia instrumentu spowodowane przez własny demontaż i niewłaściwe przechowywanie (takie jak uszkodzenia przez gryzonie, infiltracja cieczy itp.).

4. uszkodzenia spowodowane wymuszonym użyciem produktów w środowiskach, w których nie są one przeznaczone do użytku, w tym, ale nie wyłącznie, nadmierne obciążenie pracą itp.

5. uszkodzenia produktu spowodowane innymi okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą.

6. za rolę tego produktu lub użytkowanie towarzyszących szkód (takich jak utrata interesów biznesowych, przerwanie działalności, użytkowanie instrumentów spowodowane innymi stratami, użytkowanie produktu jest potrzebne do wymiany sprzętu, urządzeń lub usług poniesionych przez koszt, roszczenia klienta itp. J, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności spowodowanej tym