

Instrukcja obsługi

Basen do mycia głowy z prysznicem

Kod produktu: YHWB02



1. Wstęp

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika informacje.

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą.

2. Wykonanie

Przenośny, nadmuchiwany basen do mycia głowy z otworem odprowadzającym wodę wykonany z PVC jest miękki i wygodny w użytkowaniu. Podwójne komory powietrzne stanowią zabezpieczenie przed wylaniem wody i mydlin.

Zestaw zawiera:


- Basen
- Zbiornik na wodę
- Prysznic
- Przewód odpływowy
- Pompka
- Uchwyt na zbiornik

3. Zastosowanie


Zestaw do mycia głowy pozwala na mycie głowy pacjenta w pozycji leżącej. Zalecany szczególnie do użytku domowego przy opiece nad osobami obłożnie chorymi jak również osobami starszymi, którym trudność sprawia odchylenie głowy i schylenie się.

4. Sposób użytkowania


- W pierwszej kolejności należy napompować basen przy użyciu pompki, a następnie zamknąć zawór odprowadzający wodę znajdujący się na dnie basenu. Basen można napełnić ciepłą wodą poniżej 50°C.

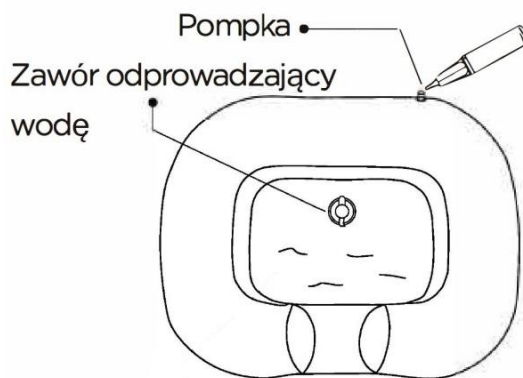


- Należy połączyć zbiornik na wodę z prysznicem
- Zbiornik należy wypełnić ciepłą wodą o temperaturze nieprzekraczającej 50°C. Za pomocą uchwytu na zbiornik, zbiornik można zawiesić na stojaku lub ścianie.

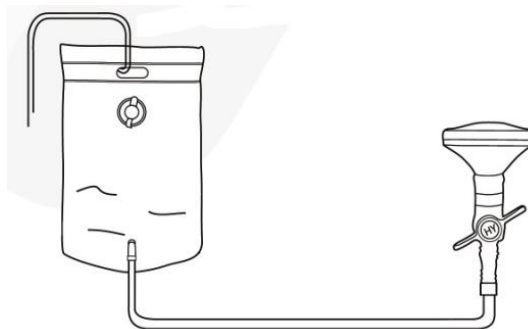


- Należy przygotować wiadro, a następnie włożyć przewód odpływowy do środka. Aby zapewnić prawidłowy odpływ wody, należy upewnić się, że przewód nie ma zagnieć.

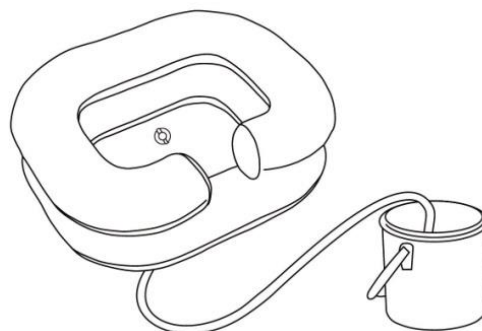

- Należy umieścić głowę pacjenta w wycięciu na szyję, a następnie odkręcić zawór prysznica, aby dostosować przepływ wody.

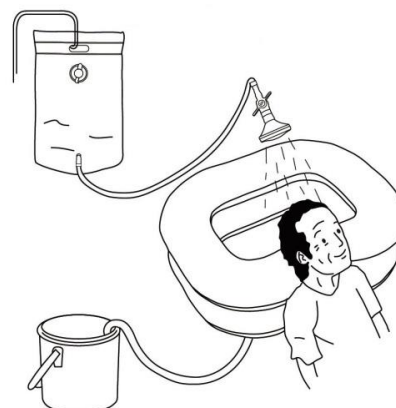

- Po umyciu głowy należy otworzyć zawór odprowadzający, aby woda spłynęła do wiadra przez przewód odprowadzający.

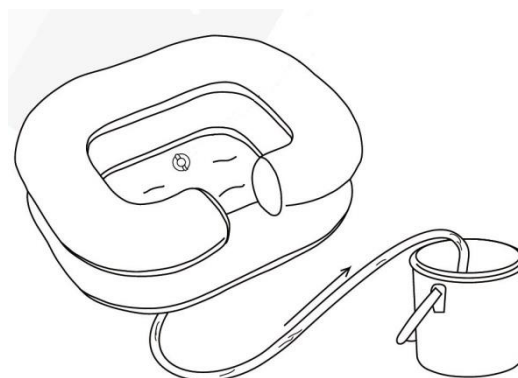

5. Dane techniczne

Wymiary basenu	65 x 50 x 25cm
Waga	800 g
Pojemność basenu	10 litrów
Pojemność zbiornika na wodę	8 litrów

6. Konserwacja i zastrzeżenia

- Po użyciu należy oczyścić wszystkie części zestawu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Nie należy przechowywać zestawu w wysokiej temperaturze i wilgotnym środowisku.
- Nie należy wystawiać na bezpośredni kontakt z ostrymi przedmiotami.
- Należy kontrolować temperaturę wody, aby uniknąć poparzeń.
- Nie należy używać detergentów, rozpuszczalników ani olejków eterycznych.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Wytwórca
	Numer partii		Data produkcji
	Numer seryjny		Reprezentant w Unii Europejskiej
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		



Wytwórca:

**GuangDong YueHua Medical
Instrument Factory Co., Ltd. (Yhmed)**
Rongsheng Science and Technology Zone,
Daxue Road, Shantou, Guangdong, China.



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Wydanie I, data aktualizacji 10.02.2020