

Instrukcja obsługi

Urządzenie do domowego drenażu limfatycznego (model BG-S-1981)

PL

Szanowny kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

Przeznaczenie:

Limfodrenażowy masaż nóg

Parametry techniczne:

Zasilanie: zasilacz AC 230 V / DC 9 V / 200 mA (lub 4 szt. baterii 1,5 V typu AA – nie są dostarczane z produktem).

Moc: 1,8 W

Ciśnienie w rękawach: 10 - 40 kPa

Przeciwwskazania:

Ograniczenia w użytkowaniu

A. Bezwzględne

- w okresie karmienia piersią
- ciąża (do trzeciego miesiąca – istnieje zagrożenie uszkodzenia płodu)

B. Warunkowe (po konsultacji z lekarzem)

- nowotwory (rak)
- ostre infekcje (wirusowe i bakteryjne)
- jaskra
- nadciśnienie oczne
- choroby serca
- nadczynność tarczycy
- marskość wątroby
- astma oskrzelowa
- żylaki
- nadciśnienie tętnicze
- choroby nerek

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem terapii należy skonsultować się z lekarzem.

Osoby cierpiące na poniższe choroby nie powinny używać urządzenia lub skonsultować z lekarzem możliwość i zakres jego stosowania:

- nadciśnienie tętnicze
- choroby serca
- osteoporoza
- złamania, skręcenia, skurcze mięśni
- choroby o ostrym przebiegu
- nowotwór złośliwy

- ostre bądź ropne zapalenie żył kończyn
- podczas menstruacji
- w trakcie ciąży
- w gorączce (ponad 38 °C)
- niedokrwistość
- zapalenie skóry - wrażliwa bądź w inny sposób zmieniona chorobowo skóra
- w trakcie leczenia
- ból głowy, żołądka i skóry
- osoby będące pod wpływem alkoholu
- w trakcie innych zabiegów leczniczych bądź w trakcie leczenia
- inne problemy zdrowotne
- nie wolno używać w inny sposób lub do innych celów niż te, opisane w instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia:

Zawsze podczas używania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, a zwłaszcza w obecności dzieci.

- Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą, jego elementy mogą być elektrycznie aktywne nawet po ich odłączeniu od sieci elektrycznej.
- Zasilacz należy odłączać od sieci elektrycznej zawsze po zakończeniu zabiegu. Gdy urządzenie wejdzie w kontakt z wodą, należy je natychmiast odłączyć od sieci elektrycznej.
- Nie wolno kłaść ani przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie mogłoby dojść do kontaktu z wodą lub innym płynem (np. wanna, zlew, toaleta itp.).
- Nie wolno pozostawiać załączonego urządzenia bez nadzoru, aby nie narażać się na ryzyko powstania pożaru, zwarcia w instalacji elektrycznej lub zranienia.
- Nie wolno używać innych akcesoriów innych niż zalecane przez producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
- Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.

Nie wolno używać w następujących przypadkach:

- podczas kąpieli i pod prysznicem,
- z uszkodzoną wtyczką lub przewodem zasilającym,
- gdy urządzenie zachowuje się nienaturalnie po upadku z wysokości,
- po upadku do wody,
- gdy urządzenie wykazuje jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia,
- odczuwając senność lub będąc nie w pełni rozbudzonym.


Produkt ten nie jest sprzętem medycznym! Jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania limfodrenażu w warunkach domowych. Zabiegi z zastosowaniem tego produktu nie gwarantują pozytywnych skutków medycznych. Zalecamy skonsultowanie z lekarzem możliwości korzystania z tego produktu.

Zasada działania

Element sterujący urządzenia pompuje powietrze do rękawa, wytwarza ciśnienie i delikatnie masuje kończyny dolne. Podczas wykonywania zabiegu należy zawsze trzymać w dłoni pilota. Należy zawsze rozpoczynać od najniższego poziomu masażu, a następnie zmieniać poziom tak, żeby odczuwać komfort podczas całego zabiegu. Źródłem zasilania urządzenia może być zasilacz 230V / DC 9V / 200 mA (dostarczany z urządzeniem) lub 4 szt. baterii 1,5 V typu AA (nie są dostarczane z produktem) – zalecamy używanie baterii alkalicznych dla osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Opakowanie zawiera:


- C - 2x buty masujące na dolną część nóg
- B - 2x rękaw masujący na uda
- A - 1x pilot
- D - 1x opakowanie z wężykami
- E - 1x zasilacz AC/DC

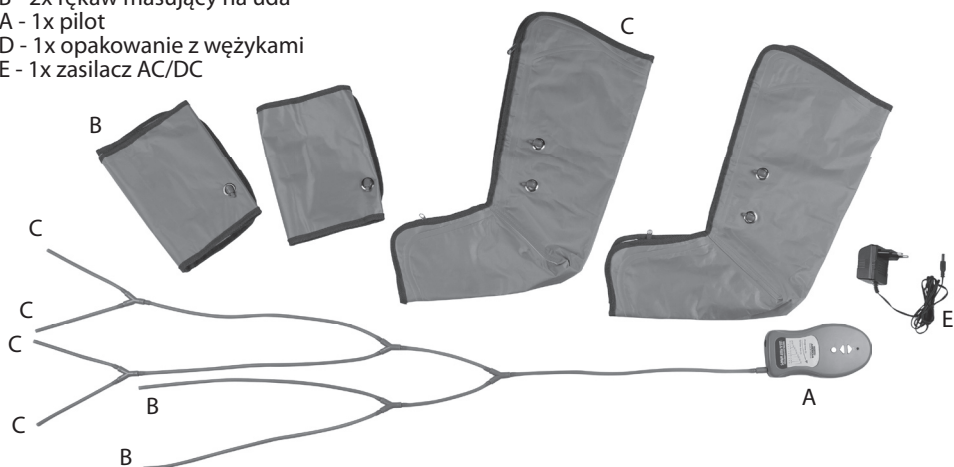

Sposób użycia:

Urządzenie jest proste w obsłudze. Można go używać siedząc lub leżąc na sofie. Przed rozpoczęciem masażu wybierz odpowiedni program, który automatycznie pompuje i wypuszcza powietrze z rękawów masując Twoje nogi, co pomaga w pozbyciu się stresu i zmęczenia. Urządzenie zapewnia przyjemny masaż ciśnieniowy. W przyjemny sposób i delikatnie redukuje napięcie mięśni oraz poprawia krążenie krwi.

1. Załóż buty masujące na stopy (C) a rękawy masujące na uda (B) w dogodnych miejscach. Upewnij się, że suwak w butach jest całkowicie zasunięty.
2. Połącz buty (C) i rękawy (B) z pilotem (A) wężykami (D).
3. Podłącz zasilacz AC/DC do pilota. Następnie podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, upewniając się przed tym, że pilot jest wyłączony.
4. Gdy pilot ma być zasilany z baterii, włóż je do komory znajdującej się na spodzie obudowy. Upewnij się, że baterie są tego samego typu (nie wolno mieszać nowych z wyczerpanymi ani alkalicznych z tradycyjnymi). Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
5. Naciśnij przycisk „POWER”, aby uruchomić urządzenie, będzie to sygnalizowane zapaleniem się lampki LED. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku, urządzenie wyłączy się.

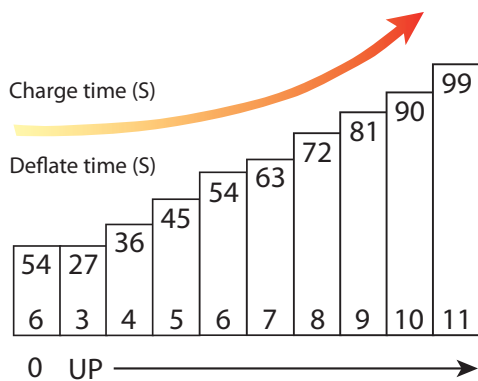

Czas ładowania (S):

= czas zwiększenia ciśnienia
(w sekundach)

Deflacja czasu (S):

= czas deflacji (w sekundach)

Np.:

Poziom "0" = 54 s zwiększania ciśnienia / 6 s deflacji

UP = ustawienie długości masażu przycisk UP.

6. Naciskając przyciski „UP” lub „DOWN” wybierasz poziom masażu.
7. Buty masujące (C) i rękawy (B) mogą być używane razem lub osobno.
8. Po zakończeniu masażu wyłącz pilota i odłącz od niego wężyki, aby doszło do całkowitego opróżnienia zawartości butów i rękawów, co umożliwia ich łatwe zdejmowanie.

Ważne wskazówki:

Nie wolno prać butów rękawów w pralce. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych środków chemicznych ani wybielaczy. Poszczególne elementy urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką, aby usunąć kurz z ich powierzchni.

Ochrona środowiska naturalnego:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.