### IPL Haarentfernung Benutzerhandbuch

Ihnen zu Ihrer Schönheit zu verhelfen!

Einführung Ein multifunktionelles Haarentfernungsgerät ist ein innovatives Kosmetikprodukt, das unerwünschte Körperhaare sicher, schmerzlos und effektiv entfernt. Mit einem der professionellsten und beliebtesten Produkte im Bereich Schönheit und Gesundheit ausgestattet, verwendet dieses Haarentfernungsgerät die Technologie der intensiv pulsierenden Lichtbestrahlung und integriert mehrere Anwendungen der optischen Technologie, um eine hervorragende Leistung zu erzielen und

Vorsicht Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig auf. ·Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter und

Haushaltssteckdose, um Schäden zu vermeiden. ·Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen und Wärmeumgebungen.

verbinden Sie den Netzadapterstecker korrekt mit der

· Wenn das Produkt verformt oder beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht erneut, um Unfälle zu vermeiden. ·Verwenden Sie nicht auf sonnenverbrannter Haut, Haut

mit kosmetischen Operationen oder Haut mit Wunden.

Insulinpumpe ausgestattet.

und permanentes Make-up vorhanden sind.

schaft und Stillzeit nicht.

nicht bei dunkler Haut.

·Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es mit aktiven Implantaten wie einem

·Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn dunkle Flecken

wie Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken, Tattoos

·Verwenden Sie dieses Produkt während der Schwanger-

·Herzrhythmusregler, Nervenelektrodenstimulator und

·Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Personen, die in den letzten drei Monaten einer Strahlentherapie oder Chemotherapie unterzogen wurden.  $\cdot$  Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Personen mit

Diabetes, Herzinsuffizienz, leichter Allergiekrankheit, Epilepsie oder immunsuppressiver Krankheitsgeschichte

(einschließlich HIV- oder AIDS-Infektion). ·Es wird nicht für Personen mit Allergien, Hautkrankheiten, Dermatitis, Hautallergien, Hautverletzungen, Ekzemen, Schwellungen usw. empfohlen. Dieses Produkt funktioniert

·Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es eine Vorgeschichte von Photosensitivität gibt, bekannte Photosensitivität oder Medikamente, die die Haut empfindlicher machen, einschließlich nicht vegetativer entzündungshemmender Mittel (z. B. Aspirin, Ibuprofen, Acetaminophen), Tetracyclin, Phenothiazin, Thiophen, Diuretika, Sulfonylharnstoffe, Sulfonamide, Trimethoprim, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, AHA, Retinsäure, Accutane oder topische Retinoide A usw.

## DE

22

· Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie AHA, Beta-Säure, Retinsäure, Pickel (Isoretinsäure), topische Retinoide oder Azelainsäure einnehmen.

· Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie in den letzten 6 Monaten ein Akne-Medikament (Isoretinoin) und in den letzten 3 Monaten die Hmong-Kombinationsgesundheitsmethode eingenommen haben.

· Wenn Sie jemals Herpes hatten, sprechen Sie vor der

Verwendung dieses Produkts mit Ihrem Arzt. · Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Warzen, Tattoos oder Permanent Make-up.

· Trocknen Sie vor der Verwendung Ihre Hände, um zu verhindern, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Instrument eindringen und es so beschädigen. · Bitte beachten Sie die Tabelle der Lichtintensität, um die

richtige Lichtintensität zu bestimmen; Wenn Sie Schmerzen

oder Abnormalitäten in Ihrer Haut oder Ihrem Körper verspüren, beenden Sie die Verwendung sofort. ·Bitte schalten Sie die Stromversorgung für die Reinigung

· Dieses Produkt ist NICHT für Kinder geeignet; Bitte halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. · Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von

entflammbaren Gegenständen wie Alkohol, Benzin, Nagellackentferner, Spray usw. · Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit Wasser, um Gefahren zu vermeiden (in der Nähe der Bade-

wanne, Dusche, Waschbecken usw.).

1) Ausgang

2 Kälteelement des Gefrierpunkts

(5) Gefrierpunktkühlmodus

·Essen Sie während der Verwendung keine lichtempfindlichen Lebensmittel (wie Spinat, Raps, Senf usw.).

· Während des Betriebs ist es streng verboten, die Luftzufuhr und Belüftungslöcher zu bedecken, um die Wärmeableitung nicht zu beeinträchtigen.

· Bitte reparieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Bei Wartungsfragen wenden Sie sich bitte an den Händler, der dieses Produkt gekauft hat, um den Kundenservice nach dem Verkauf zu erhalten.

· Bitte schützen Sie sich nach der Verwendung dieses Produkts rechtzeitig vor der Sonne.

### Produktdetails







Schutzbrille \* 1



Rasierer \* 1

Epilierer \* 1






Adapter \* 1

## DE

23

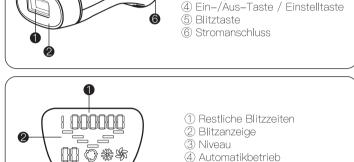

## Vorbereitung

8 466

1. Für die Teile, die enthaart werden müssen, bitte ein Rasierer verwenden, um die Haare zu entfernen und sie unter 1 mm zu halten. (Hinweis: Verwenden Sie keine Enthaarungscreme, um das Rasieren zu ersetzen.)

6 Lüfter





Duftflüssigkeit, Lotion, Parfüm, Bräunungscreme und Sonnenschutz vorhanden sein.) 3. Verweisen Sie auf die unten empfohlene Lichtabstimmungstabelle und passen Sie die Lichtabstrahlung anhand der Hautfarbe und des Körperhaares an. Geeignete Hautfarbe / Haarfarbe und geeignete Ausrüstung

2. Reinigen Sie die Haut, um sicherzustellen, dass die Hautoberfläche frei von Haaren, vollständig trocken und frei von öligen Substanzen ist. (Zum Beispiel dürfen keine Rückstände wie

Kontrast-Tabelle								
	Haarfarbe							
Haarfarbe		Weiß	Beige	He <b>ll</b> braun	Braun	Dunkelbraun	Schwarz	
Haarfarbe		×	×	×	×	×	×	
Rot		×	×	×	×	×	×	
Beige		×	×	×	×	×	×	
He <b>ll</b> braun		Stufe 1-9	Stufe 1-8	Stufe 1-5	Stufe 1-3	×	×	
Braun		Stufe 1-9	Stufe 1-8	Stufe 1-5	Stufe 1-3	×	×	
Dunkelbraun		Stufe 1-9	Stufe 1-8	Stufe 1-5	Stufe 1-3	×	×	
Schwarz		Stufe 1-9	Stufe 1-8	Stufe 1-5	Stufe 1-3	×	×	

1. Für den ersten Gebrauch, bitte Anwendung Level 1, um zu testen, ob Ihre Haut auf das Laserlicht empfindlich ist. 2. Wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen fühlen, bitte reduzieren Sie die Lichtintensität.

## 24

DE

3. Empfohlene Lichtintensität (1-9). In der Tabelle bedeutet "x", dass dieses Produkt nicht geeignet ist. 4. Es wird empfohlen, die Enthaarungsteile zu beleuchten: Beine, Achselhöhlen, Arme, Stirnflusen usw.

6. Männliche Benutzer: Verwenden Sie bitte nicht auf Bart oder männlichen Geschlechtsorganen.

5. Verwenden Sie nicht rund um die Augen, nahe der Augen-

7. Weibliche Benutzer: Verwenden Sie bitte nicht auf Brustwarzen, Warzenhöfen, kleinen Schamlippen oder Vagina.

## Verwendungsmethode

brauen, Nasenlöcher, Ohren oder After.

1. Schließen Sie den Netzadapter an eine Wandsteckdose an und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Es ist standardmäßig auf Energieebene 1, manueller Modus mit eingebauter Gefrierpunktfunktion.






2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fortlaufend, um die Energieebenen einzustellen, während das Display 01 bis 09 anzeigt, was die entsprechende Energieebene anzeigt. Wählen Sie die geeignete Energieebene entsprechend der Hautfarbe/Haarfarbe-Kontrasttabelle aus.



3. Tragen Sie die beigefügte Schutzbrille, um Ihre Augen vor der Verwendung zu schützen.

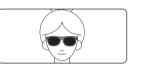

4. Halten Sie das Gerät vertikal an die Haut. Drücken Sie die Blitztaste, wenn die Anzeigelampe leuchtet. Hinweis: Beleuchten Sie die gleiche Stelle nicht mehr als 3 Mal hintereinander.



5. Halten Sie die Blitztaste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Automatikmodus zu wechseln. In diesem Modus blitzt das Gerät automatisch, nachdem es an die Haut gedrückt wurde, was für den dauerhaften Gebrauch geeignet ist. Halten Sie die Blitztaste 3 Sekunden lang gedrückt, um zum manuellen Modus



# 25

6. 6. Nach der Verwendung halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, und das Gerät schaltet sich nach dem 10-Sekunden-Countdown aus. Ziehen Sie den Netzadapter vor





# HAUTPFLEGE NACH DER ANWENDUNG

· Vermeiden Sie nach der Haarentfernung den Gebrauch von Kosmetika mit reizendem Alkohol. Reizen Sie die Haut der Haarentternungsgebiete nicht mit heißem Wasser über 50 °C nach der Haarentfernung. · Machen Sie nach der Haarentfernung kein kräftiges

Training, um ein Schwitzen während des Trainings zu

vermeiden, was die Haut der Haarentfernungsstelle reizen · Achten Sie nach der Enthaarung auf Sonnenschutz; lassen Sie den Enthaarungsbereich nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt. Es wird empfohlen, innerhalb von 6 Stunden nach der Haarentfernung den Kontakt mit Wasser zu vermeiden. Tragen Sie Feuchtigkeitscreme oder Aloe-Vera-Gelprodukte auf, um den bestrahlten Bereich zu befeuchten. · Die Heilungszeit für Sonnenbrand beträgt nicht weniger als

1 Woche. Es ist strengstens verboten, den bestrahlten Bereich innerhalb von 48 Stunden nach der Laserlichtoperation zu bräunen. Selbst wenn Bräunen nach 48 Stunden erforderlich ist, müssen Sie immer auf ungesunde Bedingungen auf der Haut achten. Verwenden Sie nach 72 Stunden einen Sonnenschutz. (Intermittente oder indirekte Sonnenexposition gehört nicht zum Sonnenbaden)

DE

· Verwenden Sie bei der Laserlichtbeleuchtung kein künstliches · Wenn Sie nach dem Licht (nur im Bestrahlungsbereich) eine

· Nach dem Rasieren und Beleuchten kann die Haut kurzzeitig trocken und juckend sein. Bitte seien Sie versichert, dass diese Reaktion nicht schädlich für den Körper ist. Es dauert nicht lange, bis es verschwindet. Befeuchten Sie die Haut mit einer

Schönheitsoperation benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren

milden Feuchtigkeitscreme, um die Situation zu verbessern.

# REINIGUNG UND LAGERUNG

Bitte schalten Sie das Gerät nach iedem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzadapter ab. Lassen Sie es eine Weile abkühlen und wischen Sie dann den Flash-Anschluss und den ganzen Körper mit einem weichen Tuch ab. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.

Lagerungsbedingungen 0–40°C

### Temperatur Luftfeuchtigkeit 15-90%

## Frage und Antwort Q: Muss ich vor jeder Verwendung rasieren?

A: Nein.Rasieren ist nur vor der ersten Verwendung erforderlich.Nach der ersten Verwendung können Sie auf das Wachstum der Haare bis zu etwa 5 mm warten, dann rasieren Sie sie erneut, wenn dies die Verwendung beeinträchtigt.

# 26

Q: Warum verschwindet mein Haar nicht sofort nach der Verwendung?

A: Dies ist ein dauerhaftes Haarentfernungsgerät. Um Haare dauerhaft zu entfernen, müssen Sie es für einen Behandlungszyklus verwenden. Am Anfang wird das Haarwachstum gehemmt und verlangsamt. Durch kontinuierliche Verwendung kann dieses Gerät die Haarfollikel in den Schlaf versetzen und so eine dauerhafte Haarentfernung erreichen.

Q: Warum habe ich nicht den gleichen Effekt wie die anderen oder gar keinen Effekt erzielt?

A: Menschen haben unterschiedliche Körperformen, und der Unterschied in der Haardicke und behandelten Teilen kann den Behandlungszyklus beeinflussen. Der Verwendungszyklus ist ein Durchschnittswert, wobei die spezifische Zeit leicht abweichen kann.

Q: Welches Niveau ist geeignet? A: Es gibt keinen einheitlichen Standard für die geeigneten

FEHLERSUCHE

Niveaus. Es hängt alles von Ihrer Hauttoleranz ab (je dunkler die Hautfarbe ist, desto niedriger sollte das Niveau sein). Beginnen Sie mit der Auswahl des richtigen Niveaus von der niedrigsten. Je höher das Niveau ist, desto deutlicher ist die Behandlungswirkung und desto kürzer ist die Behandlungszeit. Im Gegenteil, wenn Sie ein niedriges Niveau verwenden, wird die Behandlungszeit entsprechend verlängert. Es wird empfohlen, vor jeder Haarentfernung auf der behandelten Hautstelle 1-3 Blitze zu machen, um eine Hautunbehaglichkeit zu vermeiden und dann die Behandlung auf großen Hautarealen zu starten.

## DE Q: Wird es weh tun?

Rasur-Bereich zu schmieren.

A: Während des Haarentfernungsprozesses erzeugen Lichtwellen bei der Begegnung mit Melanin Wärme, was leichte Schmerzen verursacht. Nutzen Sie die Kühlpunktfunktion, um die Haut abzukühlen und zu beruhigen, so dass sie sich wohler fühlt. Es wird empfohlen, das Niveau langsam vom niedrigsten bis zu dem

für Sie am besten geeigneten zu beschleunigen. Q: Wie rasieren? Welche Arten von Haaren sollten rasiert werden? A: Im Allgemeinen sollten Sie die Haare an den Achselhöhlen.

Bikini- und Beinpartien vor der Benutzung rasieren. Folgende Methoden erleichtern das Haareschneiden: 1. Verwenden Sie Rasierschaum oder mildes Duschgel, um die

2.Legen Sie ein heißes Handtuch auf den zu rasierenden Bereich und schneiden Sie die Haare sofort nach dem Entfernen des Handtuchs sanft, was das Rasieren erleichtert. Q: Warum gibt es nach der Verwendung einen Geruch nach verbranntem Haar? A: Das liegt daran, dass das Haar nicht vollständig rasiert ist.

Wenn das Gerät arbeitet, erzeugen Lichtwellen bei der Begegnung mit Melanin Wärme, was den Geruch nach verbranntem Haar verursacht, was ein normales Phänomen ist. Q: Ich möchte mein Haar schnell entfernen. Kann ich es jeden Tag benutzen?

A: Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät jeden Tag zu verwenden. Es gibt eine Haarwachstumsperiode, und Sie können es gemäß dem normalen Zyklus verwenden: Verwenden Sie es im ersten Monat einmal alle 3-5 Tage und verringern Sie die Anzahl der Verwendungszeiten, nachdem das Haarwachstum abgenommen hat. 27

# DE

FEHLERSUCHE	Mögliche Ursachen	Lösungen			
Der Bildschirm ist ausgeschaltet Das Netzteil ist nicht korrekt angeschlossen		Überprüfen und verbinden Sie das Netzteil ordnungsgemäß.			
Kann nicht flashen.	Das Gerät ist nicht an der Haut.	Halten Sie das Gerät senkrecht an die Haut und drücken Sie di Flash-Taste, wenn die Flash-Anzeigeleuchte eingeschaltet ist.			
Kalli filcht hashen.	Energieversorgung wurde nicht erfüllt.	Bei ständigem Flashen ist eine Energieversorgung erforder- lich.Die Flash-Anzeigelampe leuchtet auf, nachdem die Energie zugeführt wurde.Dann drücken Sie die Flash-Taste, um zu flashen.			
Auf dem Bildschirm wird "ERRORo1" angezeigt.	Das Gerät wechselt nach längerer Dauer des ständigen Gebrauchs in den Hochtem- peratur-Schutzmodus.	Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzteil. Lasse Sie es 10 Minuten lang abkühlen und es ist wieder einsatzberei			
Anzeige normal ohne blinkenden Funktionalität.	Es tritt ein Programmfehler auf.	Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzteil. Stecken Sie dann das Gerät wieder ein und schalten Sie es ein, um es neu zu starten.			

### NACHVERKAUFSDIENST Kontaktieren Sie uns frei, wenn es ein Problem oder eine Verwirrung gibt, die Sie nicht lösen können, und

wir helfen Ihnen!

### E-Mail sereinwnx512@163.com (ES) abby199603@outlook.com (IT)

qutis0710@gmail.com(DE)

28