

HAIRMAX® LASERBAND 82 COMFORTFLEX

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Leczenie przy użyciu Hairmax®

Hairmax powinien być stosowany 3 razy w tygodniu, w odstępach **co drugi dzień**. Na przykład: poniedziałek, środa, piątek. Hairmax nie powinien być używany dłużej niż zalecany czas leczenia w ciągu dnia. Badania kliniczne wykazują, że większość użytkowników widzi korzyści w ciągu zaledwie 16 tygodni.

Dla maksymalnych korzyści:

- Skóra głowy powinna być świeżo umyta (włosy mogą być mokre, ale nie ociekające wodą, wilgotne lub suche).
- Urządzenia Hairmax używaj przed nałożeniem produktów do stylizacji. Mogą się one gromadzić i utrudniać dotarcie światła laserowego do mieszków włosowych.
- Regularnie czyść powierzchnię lasera wilgotną szmatką. Nie należy używać szkodliwych detergentów ani środków czyszczących na żadnej części urządzenia Hairmax.

Wskazówki przeprowadzenia zabiegu

Aby rozpocząć zabieg, wciśnij przycisk zasilania.

Podczas zabiegu, Twoje urządzenie Hairmax powinno być umiejscowione w 3 pozycjach. Pozostaw je w każdej z pozycji na minimum 30 sekund. Po upływie 30 sekund, Hairmax zawibruje, co oznacza konieczność przesunięcia go w kolejne miejsce na skórze głowy.

Aby rozpocząć zabieg, wciśnij przycisk zasilania jednokrotnie. Następnie, umieść Laserband na przedniej linii włosów, dokładnie wczesując się w nie patentowanymi ząbkami rozdzielającymi włosy.

Hairmax Laserband jest bardzo skutecznym urządzeniem, kiedy jest używane prawidłowo. Jest wytwarzany przy użyciu precyzyjnych komponentów, które pozwalają na 10-15 lat normalnego użytkowania. Zanim zaczniesz korzystać z Hairmax, poświęć czas na zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Światło laserowe - Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.


Urządzenia Hairmax są wskazane w leczeniu Łysienia Androgenowego oraz przyspieszają wzrost włosów u kobiet znajdujących się w klasyfikacji Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2 lub w przypadkach schematu przedniej utraty włosów oraz u mężczyzn klasyfikujących się jako IIa-V w klasyfikacji Norwood Hamilton, jednocześnie będąc Typami Skóry od I do IV wg. Fitzpatrick.

DYSTRYBUCJA

ASMEDIO Marzena Grzejda
Ul. Tadeusza Kościuszki 46,
42-122 Ostrowy nad Okszą

Infolinia: +48 22 266 77 55
E-mail: info@hairmax.net.pl

To jest pozycja 1. Kiedy poczujesz wibrację, przesun urządzenie w kierunku czubka głowy o około 5 cm do pozycji 2. Pozostaw w niej urządzenie, dopóki nie poczujesz kolejnej wibracji.

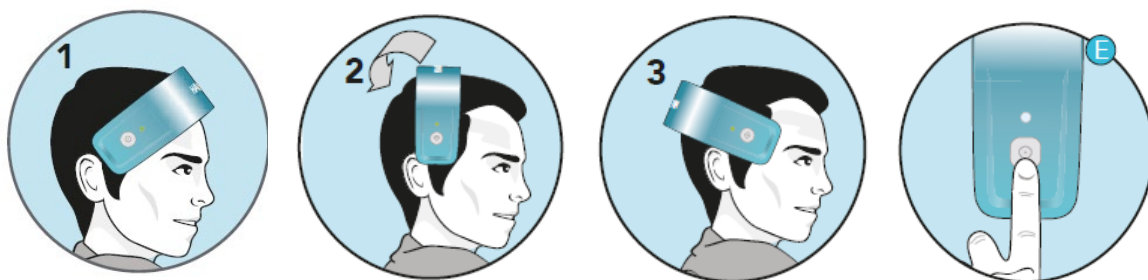

Powtórz ten proces dla wszystkich trzech miejsc na skórze głowy. Całe leczenie powinno trwać nie mniej niż 90 sekund.

Po zabiegu, wyłącz Laserband, poprzez naciśnięcie przycisku zasilania. Zdejmij Hairmax ze swojej głowy i umieść na podstawce ładującej.

Twój Hairmax wyłączy się automatycznie po upływie 10 minut.

UWAGA:



Przesuwanie



Podnoszenie

- To bardzo istotne, aby przesunąć urządzenie Hairmax po skórze głowy, zamiast podnoszenia i zakładania z powrotem. Pamiętaj, że skóra głowy musi zostać obłana światłem lasera. Zbyt szybkie ruchy urządzeniem mogą nie przynieść optymalnych korzyści wpływających na wzrost włosów.
- Czas zabiegu Laserband 82 Comfortflex to jedynie 90 sekund.

Ładowanie

Po otrzymaniu urządzenia Hairmax, wyjmij wszystkie części znajdujące się w opakowaniu. **Naładuj swoje urządzenie przez 4-6 godzin przed pierwszym użyciem.**

Nie używaj Hairmax, kiedy jest podpięty do gniazda zasilania.

OPCJA 1


Naładuj swoje urządzenie Hairmax z użyciem kabla ładującego oraz podstawki.

Przed umieszczeniem Laserband na podstawce ładującej, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz kabel zasilający do podstawki ładującej, a drugi koniec kabla podłącz do elektrycznego gniazda ściennego.

Zielone światło umiejscowione z boku podstawki ładującej oznacza, że kabel został prawidłowo podłączony.

Umieść Laserband na podstawce ładującej. Biała dioda znajdująca się na urządzeniu będzie emitowała pulsacyjne światło podczas procesu ładowania. Stały strumień światła oznacza, że Twoje urządzenie Hairmax jest w pełni naładowane.


WAŻNE: Podczas wkładania złącza przewodu zasilającego do urządzenia lub podstawki, musi on być całkowicie wsunięty w celu prawidłowego ładowania. Usłyszysz kliknięcie wskazujące, że złącze jest całkowicie włożone.

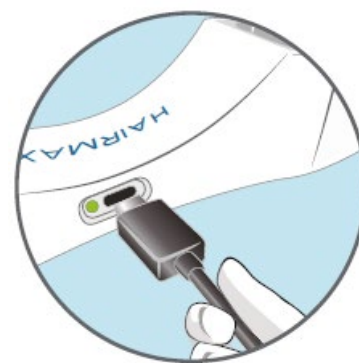

OPCJA 2

Naładuj swoje urządzenie Hairmax poprzez bezpośrednie umiejscowienie kabla zasilającego w gnieździe zasilania, znajdującym się na dole, po lewej stronie Twojego urządzenia oraz umieszczenie drugiego końca kabla w elektrycznym gnieździe ściennym.

Biała dioda znajdująca się na urządzeniu będzie emitowała pulsacyjne światło podczas procesu ładowania. Stały strumień światła oznacza, że Twoje urządzenie Hairmax jest w pełni naładowane.

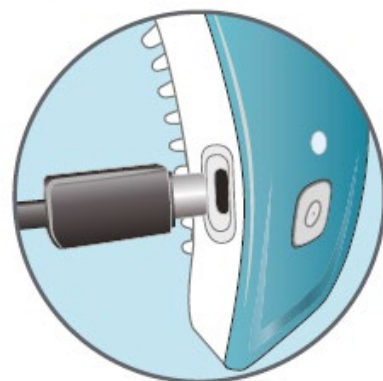

PODCZAS UŻYCIA: Biała dioda znajdująca się na urządzeniu będzie emitowała światło o powolnej pulsacji, informując o poprawnie naładowanej baterii. Kiedy bateria będzie się rozładowywała, dioda zacznie emitować znacznie szybsze światło pulsacyjne. Kiedy bateria całkowicie się rozładuje, urządzenie zawibruje trzykrotnie, a następnie światło lasera zgaśnie. Kiedy to nastąpi, naładuj urządzenie zgodnie z powyższymi instrukcjami.