

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Multifunkcyjny masażer do twarzy 7w1



Gratulujemy zakupu Masażera. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni zadowoleni z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

Wprowadzenie

Multifunkcyjny masażer do twarzy to urządzenie, które działa w oparciu o kilka technologii, całościowo wpływając pozytywnie na wygląd skóry twarzy poprzez głębokie oczyszczanie, lepsze wchłanianie substancji aktywnych z aktualnie użytkowanych kosmetyków oraz jej ujędrnienie:


- wytwarzanie mikroprądów EMS;
- rozgrzewający, wibrujący masaż;
- czerwone, niebieskie i pomarańczowe światła.

Tryby pracy urządzenia




Oczyszczanie „CLEAN”

Działanie rozgrzewające sukcesywnie otworzy pory skóry, co pozwoli na ich sukcesywne oczyszczanie oraz rozjaśnienie istniejących przebarwień.

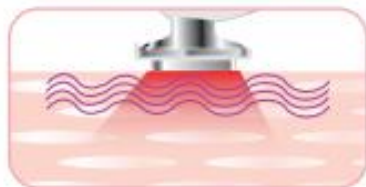


Światło czerwone (RF LED)

Czerwone światło wpływa pozytywnie na wzrost elastyczności komórek, syntezę białka oraz kolagenu. Jego regularne użytkowanie efektywnie wygładzi skórę.

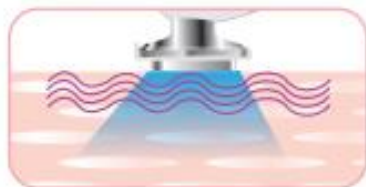


Niebieskie światło (ACNE-T)

Użycie tego trybu w połączeniu z rozgrzewającym masażem skutecznie zahamuje procesy zapalne na skórze, ograniczy wydzielanie sebum oraz zmniejszy widoczność porów skóry.

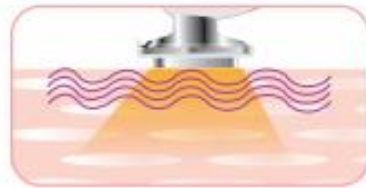


Żółte światło (WHITEN)

Korzystanie z żółtego trybu świetlnego wspomogą rozjaśnianie wszelkich przebarwień po wypryskach, aktywuje metabolizm skórny.

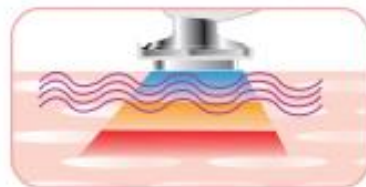


Tryb łączony (IMPORT)

Rozgrzewający tryb działania urządzenia w połączeniu z mikroprądami i kolorowym światłem sukcesywnie wspomogą wchłanianie się składników aktywnych z użytego wcześniej serum bądź kremu w konsekwencji nawilżając i ujędrniając skórę.

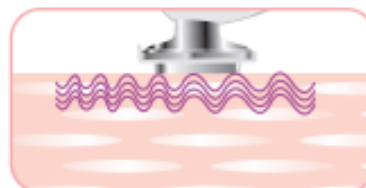

EMS UP


Tryb mikroprądów EMS wspomaga przepływ limfatyczny, wpływając bezpośrednio na gęstość i elastyczność skóry.

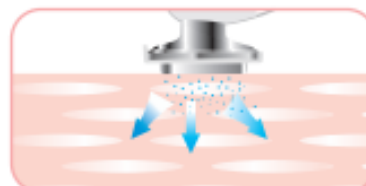

Okolice oczu (EYE CARE)

Ciepły masaż wibracyjny złagodzi zmęczenie oczu i wspomogą wchłanianie się substancji aktywnych z aktualnie użytkowanych kosmetyków.

Opis urządzenia

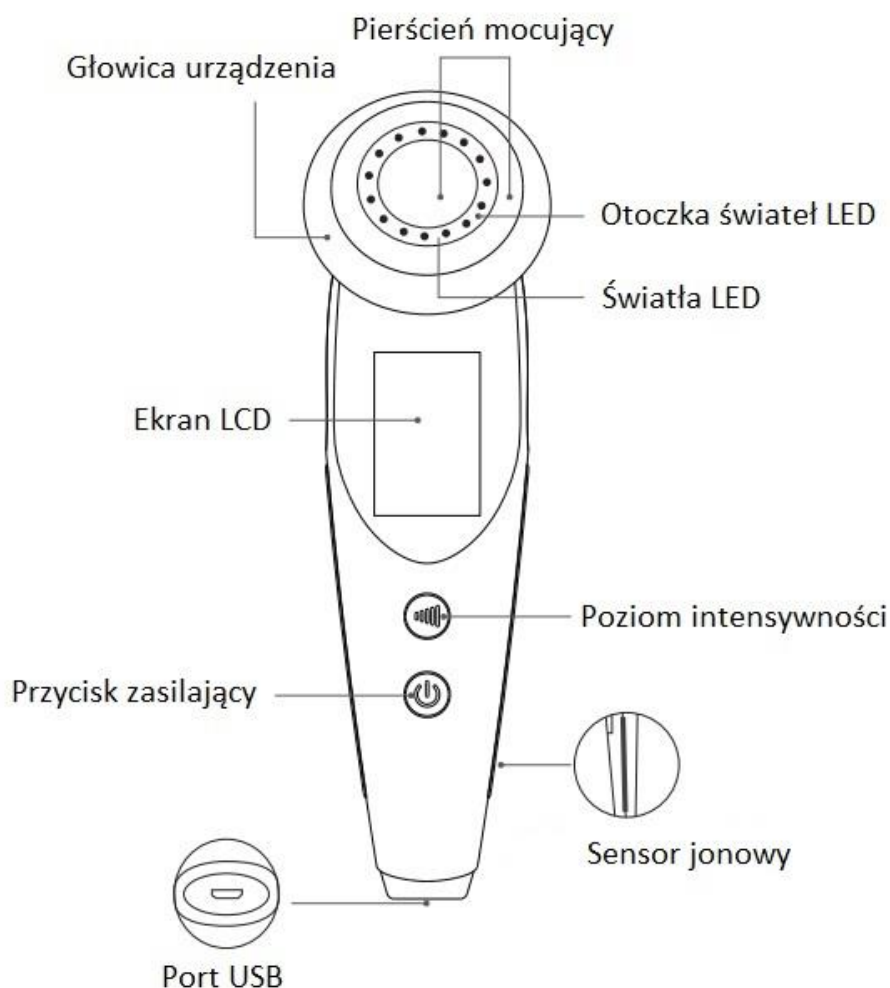

Wskaźnik naładowania

Jeśli dioda świeci się na biało, oznacza to pełne naładowanie urządzenia. Czerwony kolor diody wskazuje na potrzebę ładowania. Migające światło oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.



Poziom intensywności

Krótkie wciśnięcie przycisku zmienia intensywność działania produktu. Jego dłuższe przyciśnięcie – włącza lub wyłącza wibracje (w każdym trybie działania).




Przycisk zasilający

Dłuższe wciśnięcie tego przycisku włącza/wyłącza urządzenie. Jego krótkie wciśnięcie zmienia tryb działania urządzenia.

Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Jeszcze przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.
2. Za pomocą urządzenia pielęgnuj wyłącznie skórę twarzy oraz szyi. Jeśli skóra jest pełna zaczerwienień i podrażnień, przetestuj najpierw działanie urządzenia na małym fragmencie skóry. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek negatywne skutki działania masażera, natychmiast zaprzestań jego korzystania.
3. Korzystanie z produktu rozpocznij od jak najniższych ustawień pracy masażera. Pozwól, aby skóra w swoim tempie przyzwyczajała się do jego działania.
4. Podczas codziennego oczyszczania skóry pamiętaj, aby uprzednio oczyścić skórę kosmetykami ze swojej rutyny pielęgnacyjnej, a następnie przejść do głębokiego oczyszczania skóry za pomocą masażera wybierając tryb „CLEAN”. W tym celu użyj substancji niepieniącej, np. płyn micelarny lub ulubiony tonik.
5. Podczas użytkowania trzymaj urządzenie pionowo, jednocześnie wciskając sensory jonowe po obu stronach masażera. Masuj skórę twarzy za pomocą głowicy. W celu poprawnego działania urządzenia, stale utrzymuj skórę wilgotną.
6. Jeśli przeprowadzasz zabieg na innej osobie za pomocą masażera, pamiętaj, aby jedną ręką stale wciskać sensory jonowe. Druga dłoń powinna również dotykać skóry twarzy dla stworzenia prawidłowo działającego obwodu.
7. Długie wciśnięcie przycisku zasilającego włącza oraz wyłącza urządzenie. Jeśli urządzenie zostanie pozostawione w stanie spoczynku, wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
8. Podczas użytkowania pamiętaj, że korzystanie z produktu z użyciem bawełnianego materiału jest możliwe **tylko i wyłącznie** w trybie „CLEAN”.

Tryb „CLEAN”

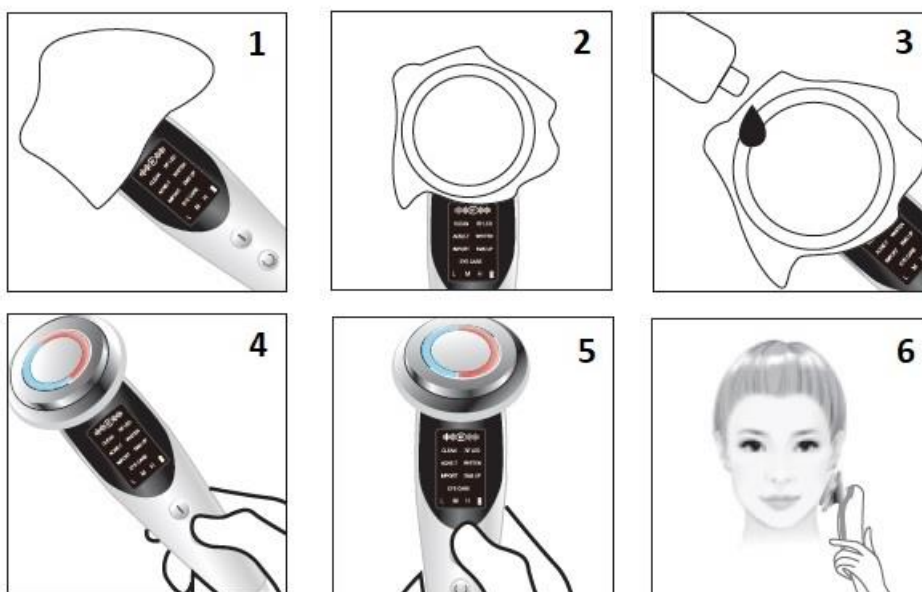

1. Umieść kawałek bawełnianego materiału bezpośrednio na głowicy masażera.
2. Umocuj go na urządzeniu za pomocą pierścienia dołączonego do zestawu.
3. Zaaplikuj kilka kropel płynu micelnarnego bezpośrednio na bawełnianym materiale.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilający, aby włączyć urządzenie.
5. Ustaw odpowiednią intensywność działania urządzenia. Utrzymuj stale wciśnięty sensor jonowy.
6. Wyczyść twarz trzymając urządzenie pionowo.

Tryb „RF LED”, „ACNE-T” oraz „WHITEN”



1. Zaaplikuj na twarz równomiernie tonik, serum lub krem.
2. Za pomocą przycisku zasilającego włącz urządzenie i wybierz tryb odpowiedni tryb.
3. Przytrzymaj urządzenie i upewnij się, że trzymasz wciśnięty sensor jonowy. Rozpocznij masaż twarzy.

Tryb „IMPORT”



1. Ten tryb działania urządzenia działa najlepiej z maseczkami w płachcie. Wybierz swoją ulubioną i zaaplikuj ją na świeżo oczyszczoną skórę.
2. Za pomocą przycisku zasilającego włącz urządzenie i wybierz tryb „IMPORT”.
3. Przytrzymaj urządzenie i upewnij się, że trzymasz wciśnięty sensor jonowy. Rozpocznij masaż twarzy.
4. Usuń bawełnianą maskę i oczyść twarz z resztek produktu.

Tryb „EMS”



1. Zaaplikuj na twarz tonik, serum lub swój ulubiony krem.
2. Za pomocą przycisku zasilającego włącz urządzenie i wybierz tryb „EMS”.
3. Przytrzymaj urządzenie i upewnij się, że trzymasz wciśnięty sensor jonowy. Rozpocznij masaż twarzy korzystając z długich pociągnięć od dolnych części twarzy w górę.

Tryb „EYE CARE”



1. Zaaplikuj swój ulubiony krem pod oczy.
2. Za pomocą przycisku zasilającego włącz urządzenie i wybierz tryb „EYE CARE”.
3. Przytrzymaj urządzenie i upewnij się, że trzymasz wciśnięty sensor jonowy. Masuj twarz rozpoczynając od zewnętrznej okolicy oka. Ewentualne pozostałości kremu delikatnie wklep w skórę.
4. W trybie „EYE CARE” tryb mikroprądów jonowych jest automatycznie wyłączony. Jeśli chcesz z niego skorzystać, wciśnij przycisk zmiany poziomu intensywności na urządzeniu. Pamiętaj, aby unikać kontaktu masażera bezpośrednio z gałkami ocznymi. Nie kieruj także wzroku bezpośrednio na działające diody LED.

Codziennie korzystanie z urządzenia

Jeśli zechcesz korzystać z urządzenia podczas swoich porannych rytuałów pielęgnacyjnych, pamiętaj, aby najpierw wykonać dokładne mycie skóry za pomocą środka myjącego. Nie używaj w tym celu masażera. Następnie, zaaplikuj swoje ulubione serum lub krem, wybierz odpowiedni tryb pracy urządzenia i rozpocznij masaż. Następnie, na tak przygotowaną twarz, możesz nałożyć makijaż.



Wieczorną pielęgnację również rozpocznij od podstawowego mycia twarzy za pomocą środka myjącego. Następnie, korzystając z ulubionego toniku lub płynu micelnego przejdź do procedury głębokiego oczyszczania z wykorzystaniem bawełnianego materiału. Pamiętaj, aby nie korzystać z tego trybu częściej niż 2-3 razy w tygodniu. Następnie, zaaplikuj swoje ulubione serum i wymasuj twarz za pomocą trybu „RF LED”, „ACNE-T” bądź „WHITEN”. W kolejnym kroku, umieść na twarzy bawełnianą maseczkę w płachcie, masując ją jednocześnie urządzeniem włączonym w trybie „IMPORT”. Po ściągnięciu maski, w razie potrzeby, możesz nałożyć ulubiony krem, przy użyciu trybu „EMS UP”. Całą procedurę zakończ masażem okolicy oka („EYE CARE”), po wcześniejszym zaaplikowaniu ulubionego serum lub kremu.

UWAGA!

Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia, jeśli jesteś po jakichkolwiek zabiegach z kategorii chirurgii plastycznej czy posiadasz jakiekolwiek sztuczne implanty w okolicach twarzy. Zwróć szczególną uwagę na korzystanie z kosmetyków możliwie uczulających, jeśli chcesz łączyć ich działanie z funkcjami urządzenia. Zabrania się korzystania z urządzenia na skórze uszkodzonej, podrażnionej, atopowej bądź z ranami otwartymi. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jesteś w trakcie ciąży, menstruacji bądź karmienia piersią.

Miejsca, jakich należy unikać podczas korzystania z urządzenia, to:

- miejsca, które w ostatnim czasie były poddane depilacji;
- gałki oczne;
- jąbłko Adama;
- rany otwarte;
- jama ustna;
- łechtaczka.

Jeśli nie jesteś pewien stanu swojej skóry, skonsultuj się z lekarzem specjalistą jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Ważne informacje dotyczące użytkowania

1. Jednorazowe użytkowanie urządzenia nie powinno przekroczyć 15 minut.
2. Nie korzystaj z alkoholu, substancji żrących bądź ściernych do czyszczenia lub konserwacji urządzenia. Jeśli musisz wyczyścić urządzenie, skorzystaj z suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie myj go pod bieżącą wodą.
3. Pierścień zabezpieczający do bawełnianej ściereczki należy umyć po każdym użyciu.
4. Po skończonym masażu przechowuj urządzenie w suchym i zacienionym miejscu z dala od źródeł wilgoci. Nie zostawiaj urządzenia na rozgrzanej powierzchni. Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych.
5. Dbaj o głowicę urządzenia. Każde jej zarysowanie zmniejsza efektywność działania masażera.
6. Podczas użytkowania ściągnij każdą metalową część znajdującą się w obrębie twarzy, jak np. spinki do włosów czy okulary. Ściągnij także soczewki korekcyjne, jeśli takowych używasz.
7. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 12 roku życia.
8. Nie patrz bezpośrednio na diody LED podczas korzystania z urządzenia. Jeśli jest taka konieczność, zamknij oczy podczas wykonywania masażu.
9. Jeśli nie korzystasz z urządzenia codziennie, pamiętaj, aby stale kontrolować poziom jego naładowania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora. Ładuj urządzenie co najmniej raz na 6 miesięcy.

Parametry urządzenia

Nazwa urządzenia	Multifunkcyjny masażer do twarzy 7w1	Numer modelu	M8807
Rozmiar	160 x 50 x 54 mm	Waga urządzenia	100g
Wejście	5V/1A	Moc	4W
Pojemność akumulatora	750mAh	Czas ładowania	Około 3 godziny
Poziomy intensywności działania	3	Seria	GB4706.1-2005