



ANALITYCZNA WAGA ŁAZIENKOWA SMART BS905*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* - oznacza kolor urządzenia

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Zanim użytkownik stanie na wagę należy upewnić się, że jej powierzchnia jest sucha, aby nie poślizgnąć się na śliskiej płycie.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
3. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie.
4. Nie należy ingerować w części i elementy wagi inne niż wymiana baterii.
5. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na płycie wagi w trakcie przechowywania.
6. Należy używać baterii zalecanych przez producenta.
7. Należy wkładać baterie według wskazań (+ i -) znajdujących się w schowku na baterie.
8. Należy wyjąć baterie z wagi, gdy nie jest używana przez dłuższy czas.
9. Należy upewnić się, że baterie nie znajdują się w zasięgu małych dzieci i nie mają one do nich dostępu.
10. W przypadku połknięcia baterii, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
11. Nie należy wrzucać baterii do ognia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Urządzenie generuje fale radiowe, które mogą mieć wpływ na działanie urządzeń medycznych np. rozruszników serca, implantów ślimakowych, aparatów słuchowych. W trakcie korzystania z urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm od urządzeń medycznych.

14. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach zabronionych np. szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy postępować zgodnie z regulaminem ustalonym przez te placówki.
15. Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na żywotność baterii.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	BS905*
Wyświetlacz:	LED
Bateria:	3x AAA, 1.5 V (brak baterii w zestawie)
Pamięć osobistych ustawień:	10
Minimalne obciążenie:	5 kg
Maksymalne obciążenie:	180 kg
Dokładność pomiaru:	100g; 0.2lb; 1/4st
Jednostki miary:	kg/lb/st
Maksymalne ustawienie wzrostu użytkownika:	250 cm
Zasięg łączności Bluetooth:	do 10 m
Maksymalna moc transmisji Bluetooth:	3.27 dBm
Częstotliwość transmisji Bluetooth:	2.4 GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth:	2402-2480 MHz

OPIS URZĄDZENIA

1. Wyświetlacz LED.
2. Przycisk zmiany jednostki pomiaru.
3. Nóżki.
4. Pokrywa schowka baterii.
5. Szklana płyta przewodząca prąd.
6. Element dekoracyjny.

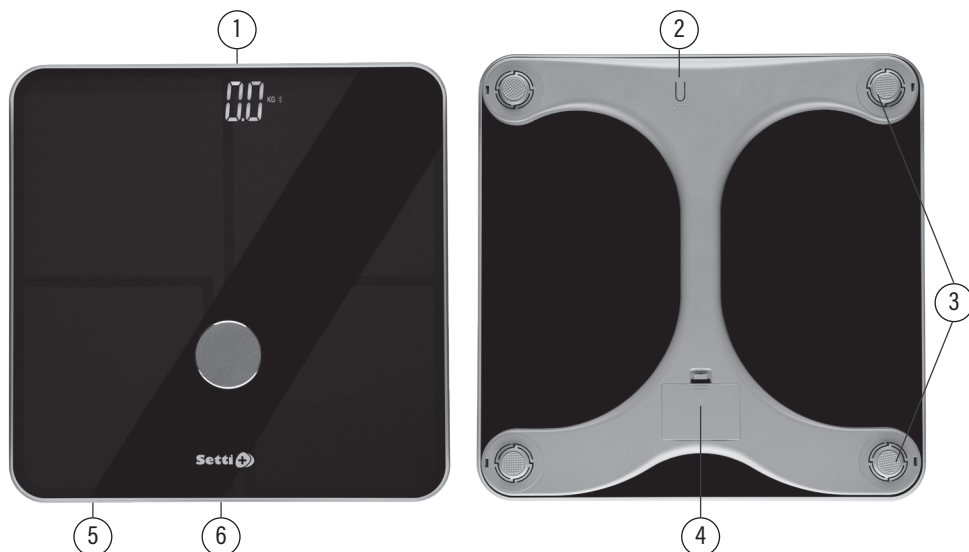

UWAGA! PODCZAS POMIARU WAGI, DOPUSZCZA SIĘ PONIŻSZĄ TOLERANCJĘ BŁĘDU POMIAROWEGO URZĄDZENIA.

50 kg	100 kg	150-180 kg
+/- 0,4 kg	+/- 0,5 kg	+/- 0,7 kg

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wyjmij wagę z opakowania. Zdejmij pokrywę schowka baterii na spodzie wagi. Zainstaluj 3 baterie AAA zgodnie z oznaczeniami +/-, następnie zamknij pokrywę schowka.
2. Aby ustawić odpowiednią jednostkę pomiaru wagi, dociśnij ręką płytę przewodzącą prąd w celu włączenia urządzenia, następnie naciśnij przycisk „UNIT” na spodzie wagi tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia jednostka.
3. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność pomiaru.
4. Stań na wadze, na wyświetlaczu pojawi się pomiar wagi ciała (offline).
5. Urządzenie pozostawione w spoczynku wyłączy się automatycznie po 15 sekundach od ostatniego pomiaru.

ZALECENIA

1. Upewnij się, że urządzenie znajduje się na równej i płaskiej powierzchni. Unikaj dywanów lub miękkich powierzchni. Nierówne podłoża mogą mieć wpływ na odczyt.
2. Dokonuj pomiarów bez ubrań i obuwia, zalecane jest ważenie przed posiłkami i zawsze o tej samej porze dnia.
3. Aby uzyskać większą dokładność, nie zaleca się pomiaru w ciągu 2 godzin od momentu przebudzenia się.

UWAGA! WAGA UKAŻE PRAWDŁOWY POMIAR PO UMIESZCZENIU NA NIEJ CIĘŻARU POWYŻEJ 5 KG.

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem zakończ używanie urządzenia.
2. Wagę przetrzyj suchą ściereczką lub gąbką.
3. Do czyszczenia nie używaj żrących środków chemicznych.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach ani nie narażaj schowka z bateriami na zawilgocenie.
5. Waga powinna być zawsze sucha i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

WYMIANA BATERII

1. Otwórz pokrywę na spodzie wagi w schowku na baterie, zwalniając zacisk i podnosząc pokrywę.
2. Wyjmij zużyte baterie i zastąp je nowymi zgodnie z oznaczeniami +/-.
3. Zamknij pokrywę schowka na baterie.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI SETTI

1. Pobierz aplikację:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Włącz łączność Bluetooth w ustawieniach telefonu, uruchom aplikację a następnie uruchom urządzenie.
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.
6. Stań na wagę, aby włączyć urządzenie , wyświetlacz wagi pokazuje 0.0 kg.
7. Aplikacja Setti+ automatycznie wyszuka urządzenie i poprosi o akceptację dodania:

Dodaj – Spróbuj rozpocząć podłączanie tej wagi.

Nie dodawaj – Zrezygnuj z podłączania tej wagi.

8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.
9. W celu zrestartowania urządzenia i dokonania nowej konfiguracji wybierz „Usuń urządzenie” w zakładkach aplikacji.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej

<https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Na wyświetlaczu pojawia się napis „LO”.	Niski poziom baterii.	Wymień baterie na nowe.
Na wyświetlaczu pojawia się napis „Err”.	Przekroczono maksymalną masę deklarowaną dla wagi.	Używaj wagi zgodnie z przeznaczeniem.
Wyświetlacz LED wyświetla wagę, ale nie analizuje danych w aplikacji lub wyświetla „Err2”.	- Nieprawidłowe użytkowanie wagi. - Nieprawidłowo sparowane urządzenie. - Zabrudzone elektrody urządzenia.	- Upewnij się, że stoisz boso na platformie. - Upewnij się, że twoja stopa dotyka elektrod po prawej i lewej stronie. - Upewnij się, że wpisałeś wszystkie parametry swojego profilu. - Upewnij się, że waga jest podłączona. - Upewnij się, że elektrody wagi są czyste.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że waga BS905 jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/BS905/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WAGI ŁAZIENKOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,

- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- 7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
- 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
- 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

