

## HAIRMAX® ULTIMA 9 & ULTIMA 12

### SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### Leczenie przy użyciu Hairmax®

Hairmax powinien być stosowany 3 razy w tygodniu, w odstępach **co drugi dzień**. Na przykład: poniedziałek, środa, piątek. Hairmax nie powinien być używany dłużej niż zalecany czas leczenia w ciągu dnia. Badania kliniczne wykazują, że większość użytkowników widzi korzyści w ciągu zaledwie 16 tygodni.

#### Dla maksymalnych korzyści:

- Skóra głowy powinna być świeżo umyta (włosy mogą być mokre, ale nie ociekające wodą, wilgotne lub suche).
- Urządzenia Hairmax używaj przed nałożeniem produktów do stylizacji. Mogą się one gromadzić i utrudniać dotarcie światła laserowego do mieszków włosowych.
- Regularnie czyść powierzchnię lasera wilgotną szmatką. Nie należy używać szkodliwych detergentów ani środków czyszczących na żadnej części urządzenia Hairmax.

#### Wskazówki przeprowadzenia zabiegu

Aby rozpocząć zabieg, wciśnij przycisk zasilania.

Podczas zabiegu, Twoje urządzenie Hairmax powinno pokryć światłem lasera całą powierzchnię skóry głowy. Pozostaw je w każdej z pozycji na minimum 4 sekundy. Po upływie 4 sekund, Hairmax zawibruje, co oznacza konieczność przesunięcia go w kolejne miejsce na skórze głowy.

Aby rozpocząć zabieg, wciśnij przycisk zasilania jednokrotnie. Następnie, umieść LaserComb na przedniej linii włosów, dokładnie wczesując się w nie patentowanymi ząbkami rozdzielającymi włosy, tak, aby dwa rzędy ząbków dotykały skóry głowy (Patrz: rysunek D).

Hairmax LaserComb jest bardzo skutecznym urządzeniem, kiedy jest używane prawidłowo. Jest wytwarzany przy użyciu precyzyjnych komponentów, które pozwalają na 10-15 lat normalnego użytkowania. Zanim zaczniesz korzystać z Hairmax, poświęć czas na zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Światło laserowe - Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.

Urządzenia Hairmax są wskazane w leczeniu Łysienia Androgenowego oraz przyspieszają wzrost włosów u kobiet znajdujących się w klasyfikacji Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2 lub w przypadkach schematu przedniej utraty włosów oraz u mężczyzn klasyfikujących się jako IIa-V w klasyfikacji Norwood Hamilton, jednocześnie będąc Typami Skóry od I do IV wg. Fitzpatrick.

## DYSTRYBUCJA

ASMEDIO Marzena Grzejda  
Ul. Tadeusza Kościuszki 46,  
42-122 Ostrowy nad Okszą

Infolinia: +48 22 266 77 55  
E-mail: [info@hairmax.net.pl](mailto:info@hairmax.net.pl)

Delikatnie przesuwaj grzebień laserowy co 1,5 cm, zatrzymując się na 4 sekundy w miejscu, do momentu, kiedy usłyszysz dźwięk wibracji. Podczas czesania nie odrywaj grzebienia od skóry głowy.



Kontynuuj tę czynność od przodu do tyłu, następnie z boku głowy, aż do pokrycia całej głowy, przestrzegając zasady 4 sekund i delikatnych ruchów. Czynność należy powtarzać przez 8 minut, korzystając z Ultima 12. W przypadku modelu Ultima 9 czas zabiegu to 11 minut.

Po zabiegu, wyłącz LaserComb przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania (dolny przycisk), aż kontrolka zgaśnie. Przechowuj urządzenie w pokrowcu lub pozostaw w stojaku.

Twój Hairmax wyłączy się automatycznie po upływie 15 minut.

#### **UWAGA:**

- Ważnym jest, aby przesuwac urządzenie LaserComb bardzo powoli. Jeśli laser będzie przesuwany zbyt szybko, leczenie może nie przynieść optymalnych rezultatów.

### **Ładowanie**


Po otrzymaniu urządzenia Hairmax, wyjmij wszystkie części znajdujące się w opakowaniu. **Naładuj swoje urządzenie przez 4-6 godzin przed pierwszym użyciem.**

**Nie używaj Hairmax, kiedy jest podpięty do gniazda zasilania.**

#### **OPCJA 1**

Naładuj swoje urządzenie Hairmax z użyciem kabla ładującego oraz podstawki.

Przed umieszczeniem LaserComb na podstawce ładującej, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz kabel zasilający do podstawki ładującej, a drugi koniec kabla podłącz do elektrycznego gniazda ściennego.

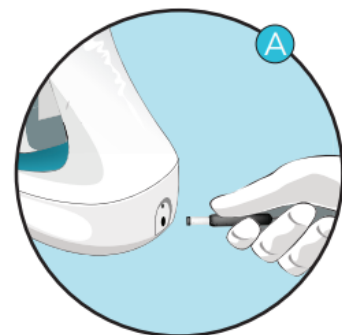

Zielone światło umiejscowione z boku podstawki ładującej oznacza, że kabel został prawidłowo podłączony.


Umieść LaserComb na podstawce ładującej. Biała dioda znajdująca się na urządzeniu będzie emitowała pulsacyjne światło podczas procesu ładowania. Stały strumień światła oznacza, że Twoje urządzenie Hairmax jest w pełni naładowane.

**WAŻNE:** Podczas wkładania złącza przewodu zasilającego do urządzenia lub podstawki, musi on być całkowicie wsunięty w celu prawidłowego ładowania. Usłyszysz kliknięcie wskazujące, że złącze jest całkowicie włożone.

## OPCJA 2

Naładuj swoje urządzenie Hairmax poprzez bezpośrednie umiejscowienie kabla zasilającego w gnieździe zasilania, znajdującym się na dole, po lewej stronie Twojego urządzenia oraz umieszczenie drugiego końca kabla w elektrycznym gnieździe ściennym.

Biała dioda znajdująca się na urządzeniu będzie emitowała pulsacyjne światło podczas procesu ładowania. Stały strumień światła oznacza, że Twoje urządzenie Hairmax jest w pełni naładowane.

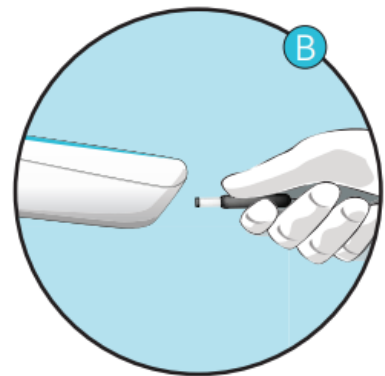

**PODCZAS UŻYCIA:** Biała dioda znajdująca się na urządzeniu będzie emitowała światło o powolnej pulsacji, informując o poprawnie naładowanej baterii. Kiedy bateria będzie się rozładowywała, dioda zacznie emitować znacznie szybsze światło pulsacyjne. Kiedy bateria całkowicie się rozładuje, urządzenie zawibruje trzykrotnie, a następnie światło lasera zgaśnie. Kiedy to nastąpi, naładuj urządzenie zgodnie z powyższymi instrukcjami.