

Inteligentna waga osobista Fit Style PL


Instrukcja obsługi

Model: iF2531A

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzimy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Produkt to inteligentna waga z bardzo dokładnym czujnikiem tensometrycznym, który pomaga zapamiętywać i śledzić odczyty swojej wagi na smartfonie. Waga umożliwia przysyłanie wyników ważenia do smartfonu za pomocą technologii Bluetooth, a także tworzenie na ich podstawie wykresu umożliwiającego śledzenie trendu ich zmian. Na telefon należy pobrać z Internetu odpowiednią aplikację. To będzie pierwszy krok na drodze obserwacji zmian Twojej wagi.


1. Instalacja baterii

Otwórz pokrywę komory baterii znajdującej się od spodu wagi tak, jak to pokazano na rysunku obok. Następnie włóż baterie, zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Baterie nie są dostarczane z produktem.

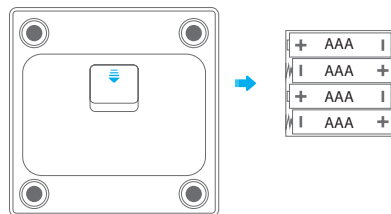

2. Pobierz i zainstaluj aplikację

A. Wyszukaj w „App Store” lub „Google Play” aplikację „MovingLife”.

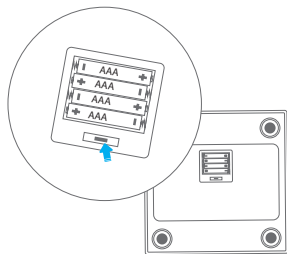


3. Wybierz jednostkę wyników ważenia

Na spodzie wagi znajduje się przycisk umożliwiający wybór jednostek ważenia, naciskając przycisk dokonujemy wyboru pomiędzy kg a lb. Zmiana jest widoczna na wyświetlaczu LCD.

4. Sparuj wagę ze smartfonem

Uruchom aplikację i aktywuj Bluetooth w telefonie, zarejestruj swoje konto i krok po kroku postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować swój profil i skomunikować cię z wagą. Należy mieć na uwadze, że podczas ustanawiania połączenia waga musi być załączona. Wszystkie wyniki ważenia można zapamiętywać, aby móc z nich skorzystać w dowolnym miejscu i czasie logując się na swoim koncie.

Ikona stanu połączenia Bluetooth:

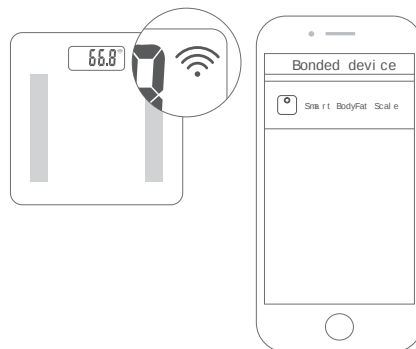

Połączenie nieudane:


Połączenie ustanowione:

Ikona będzie migać

Symbol zapali się na stałe

5. Rozpocznij ważenie


Rozpoczynając ważenie połącz wagę z aplikacją, a następnie postaw ją na trwałym, płaskim podłożu i stań na niej, żeby zainicjować ważenie. Jeśli odczyt wagi jest stabilny i miga, oznacza to, że przebiega ważenie. Następnie wykonywany jest pomiar tkanki tłuszczowej. Odczekaj, aż symbole się ustabilizują i wyświetli się wynik końcowy. Później waga automatycznie się wyłączy.

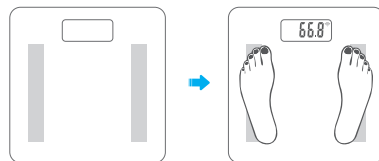

Dane dotyczące wagi oraz tkanki tłuszczowej możesz przeglądać na ekranie smartfonu a za pomocą przycisku w dolnej części można je zapisać lub powtórzyć ważenie. Nie należy stawiać wagi na dywanie lub innych miękkich powierzchniach, może to fałszować wyniki ważenia.

- Pierwsze ważenie powinno być wykonane z aktywnym połączeniem Bluetooth. A pierwsze wyniki ważenia będą stanowić punkt odniesienia dla przyszłego automatycznego rozpoznawania użytkownika.
- Jeśli chcesz wykonać prawidłowy pomiar tkanki tłuszczowej, wejdź na elektrody wagi bosymi stopami. Powierzchnia wagi powinna być czysta i sucha
- Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie zarejestrowane wyniki, uruchom na smartfonie aplikację MovingLife na telefonie

Z wagi może korzystać większa ilość użytkowników
Można ją zsynchronizować z 8 kontami użytkowników.

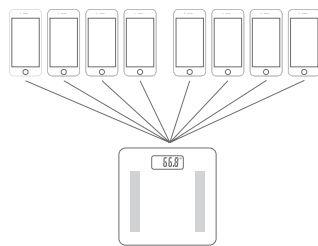

Ostrzeżenia pokazywane na wyświetlaczu wagi

Pomiar tkanki tłuszczowej

0000

Trwa pomiar tkanki tłuszczowej, nie należy schodzić z wagi i zadbać o to, żeby bosa stopy dotykały elektrod.

Ostrzeżenie o niskim poziomie tkanki tłuszczowej

ErrL

Procent tkanki tłuszczowej jest za niski. Należy wprowadzić bardziej pożywną dietę i zadbać o siebie.

Ostrzeżenie o wysokim poziomie tkanki tłuszczowej

Errh

Procent tkanki tłuszczowej jest za wysoki. Należy przeanalizować swój jadłospis i zaserwować sobie więcej ruchu.

Kalibracja

[

Wystąpił błąd, należy wykonać ponowne ważenie, aby uzyskać poprawny wynik.

Sygnalizacja przeciążenia

Errr

Ważony obiekt przekracza nośność. Należy natychmiast zejść z wagi i wyłączyć ją, aby nie doszło do uszkodzenia.

Sygnalizacja wyczerpania baterii

Lo

Baterie są wyczerpane, należy wymienić je na nowe.

Zalecenia dotyczące użytkowania i czyszczenia

1. Nie należy używać wagi w wilgotnym, przegrzonym środowisku (zakres temperatur od 5° do 35°C).
2. Należy dobrze stanąć na wadze dotykając elektrod bosymi stopami. Ustawienie się na jednej stronie wagi może spowodować upadek.

3. Należy unikać upadku wagi, potrząsania i uderzania w nią.
4. Wagę należy utrzymywać w czystości. Nie wolno używać środków czystości o odczynie kwaśnym.
5. Nie należy używać wagi w miejscu, gdzie występują intensywne wibracje. Podczas ważenia należy pewnie stać na wadze.
6. Dla zapewnienia największej dokładności danych, zaleca się, aby każde ważenie było wykonywane o tej samej porze dnia.
7. Pomiar tkanki tłuszczowej nie jest miarodajny u dzieci do 10 lat oraz dorosłych w wieku powyżej 100 lat.
8. Wyczerpane baterie należy jak najszybciej wymienić, aby nie doszło do wycieku elektrolitu i powstania korozji.
9. Korzystanie z funkcji pomiaru tkanki tłuszczowej nie jest dozwolone dla osób z rozrusznikami serca. Szczegółową analizę oraz opis poszczególnych wyników ważenia można uzyskać w aplikacji MovingLife.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem, Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.