




22346


Masajea Pies

Pro


Masajeador de Pies
Foot Massager

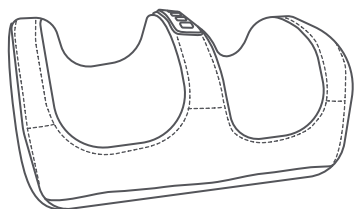

Guía Rápida


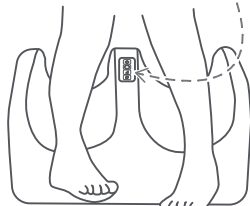


1 Conecta

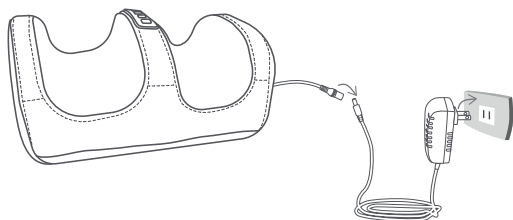

- Cada minuto, el Masajeador cambia de dirección automáticamente.
- A los 15 minutos de estar en función, el Masajeador se apaga. Puedes hacer uso del Masajeador hasta 2 ciclos de 15 minutos consecutivos, y después debes dejarlo reposar por al menos 10 minutos. Deja reposar el producto durante 30 minutos después de 4 usos.
- Continúa usando el Masajeador presionando el botón de Encendido, el producto se encenderá en la velocidad media y con el calentador encendido.

2 Usa

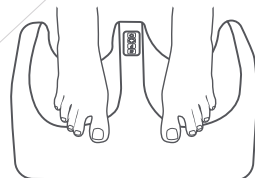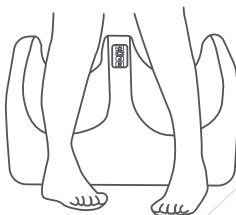

- Evita ejercer presión sobre el producto y mantén tus pies en el centro de las cavidades.
- Se recomienda la intensidad 1 y 2 para masajear las pantorillas y la intensidad 3 para pies.
- Se sugiere el uso a personas con un peso no mayor a 90kgs, para un correcto funcionamiento del Masajeador



Importante

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- El producto es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores ni darle uso comercial.
- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Desconectar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
- No colgar adornos u otros objetos al cordón.
- No cubrir el aparato con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
- Desconectar de la fuente de alimentación del artículo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- Mantén alejado del agua o de cualquier líquido.
- No levante el aparato sosteniéndolo por el cable de alimentación.
- Para limpiar, utiliza sólo un trapo.
- Almacena en un lugar seguro, seco y en temperatura ambiente.
- Si tiene problemas de salud, consulte a su médico antes de usar este producto.
- Consulte a su médico antes de usarlo en pacientes con enfermedades cardíacas.
- No permita que los niños usen este producto como juguete.
- No lo use en la misma área durante más de 15 minutos.
- El uso prolongado puede provocar un sobrecalentamiento y una vida útil más corta. Si esto sucede, deje de usar el producto hasta que se enfríe.
- No use el producto directamente sobre áreas de la piel hinchadas, inflamadas o con lesiones.
- El masajeador de pies sólo debe alimentarse y operarse con la unidad de alimentación proporcionada con el aparato.
- Este producto es un dispositivo no profesional y no puede usarse como sustituto de la terapia con medicamentos.
- No use este producto mientras duerme.
- Debe estar presente cuando use este producto para niños o personas con discapacidades.
- La superficie del aparato se puede calentar.

Importante: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Características eléctricas: 12.30 V \approx 8.8 W 0.12 A

Hecho en China para Betterware de México. Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL Ameca Huaxtlam km 5. El Arenal. C.P. 45350 El Arenal, Jalisco, México. R.F.C. BME9501252P0. Atención a Distribuidores BW: ☎9614 BETTER

(238837)

www.betterware.com.mx